

UNIX



UNIX

PREMIUM
AIR RELAX
AIR COMPRESSION DEVICE

PREMIUM
AIR RELAX
AIR COMPRESSION DEVICE



↘ Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	s. 2
Sikkerhedsadvarsel	s. 3
Advarsel om anvendelse	s. 4
Sikker anvendelse	s. 5
Kontraindikationer	s. 6
Produkt og tilbehør	s. 7
Produktnavne	s. 8
Display	s. 9
Funktionsknapper	s. 10-11
Brugsanvisning	s. 12-14
Vedligeholdelse	s. 15
Specifikationer og garanti	s. 16
Fejlfinding	s. 17
Noter	s. 18
Noter	s. 19



*Støjsvag luftpumpe *synlig LED vindue *flere auto-programmer *Nem fjernbetjening
*stilfuld design

SIKKERHEDSADVARSEL

Nedenstående punkter er med i manualen for at undgå skader eller ulykker og for rigtig betjening af produktet.
Venligst læs manualen omhyggelig igennem og sørg for altid at have den i nærheden af produktet.



Anvendelsesformål

Øgning af blodcirkulationen via trykudvidelse af luftmanchetter.

ADVARSEL OM BRUG

1 ADVARSEL



1. Kontakt egen læge, hvis du er under medicinsk behandling
2. Må ikke skilles ad. (Der kan opstå problemer med produktet og risiko for elektrisk stød)
3. Det anbefales, at produktet anvendes 3 gange dagligt og én gang i 15 min. Den anbefalede tid må ikke overskrides.
4. Der er risiko for skader, hvis produktet anvendes konstant over længere tid eller ved høj styrke.
5. Kontakt egen læge, hvis du bliver utilpas efter brug.
6. I forbindelse med strømafbrydelse, sluk da produktet og tag stikket ud.
7. Produktet må ikke anvendes af børn og personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt personer uden erfaring og kendskab til produktet, medmindre de er blevet undervist i, hvordan produktet fungerer.
8. Hvis ledningen er ødelagt, skal producent, tekniker eller anden kompetent person skifte ledningen, for at undgå fare.
9. Brug kun produktet efter dens formål og gå frem efter manualen.
10. Må ikke tilsluttes med våde hænder, da der vil være risiko for elektrisk stød.
11. Produktet må ikke udsættes for vand eller ekstrem varme. (risiko for defekt, elektrisk stød, brand o.lign.)
12. Produktet må kun anvendes efter luftmanchetterne er påført. (Manchetterne kan da ellers ødelægges)

ADVARSEL OM BRUG

ADVARSEL



1. Produktet må ikke udsættes for tryk eller tabes, da det herved kan gå i stykker.
2. Arbejd med produktet tæt på dig for lettere anvendelse.
3. Åben luft-støvlerne og sørg for at intet sidder fast i låsen.
4. Man må ikke gå mens man er iført støvlerne
5. Hvis der opstår defekt eller problemer med produktet, slukkes det straks og må ikke anvendes. Kontakt i stedet for producenten.
6. Manchetterne må ikke udsættes for vand eller beskidt materiale.
7. Efter brug skal produktet tømmes for luft og herefter opbevares sikkert.
8. Der må ikke påsættes andet på produktet.
9. Sluk for produktet hvis det ikke anvendes i længere tid
10. Luftslangerne må ikke være bøjet eller under tryk under brug eller opbevaring.
11. Opbevar produktet et sikkert sted.
12. Manchetterne må ikke opbevares i nærheden af skarpe genstande, da det kan ødelægge produktet.



KONTRAINDIKATIONER

Kontakt egen læge inden brug af produktet, hvis du har eller tidligere har haft følgende sygdomme:


Produktet må ikke anvendes, hvis du er i medicinsk behandling eller har nedenstående sygdomme:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Akut sygdomme, Forhøjet blodtryk | 9. Hjerneblødning |
| 2. diabetes | 10. Tuberkolose |
| 3. Hæmofili | 11. Alkohol eller medicin |
| 4. Atopisk dermatitis | 12. Graviditet |
| 5. Blodsygdom | 13. Cancer |
| 6. Menstruation | 14. Dårlig helbredstilstand |
| 7. Hjertesygdomme | 15. Øget/ kronisk træthed |
| 8. Allergi | 16. Personer, som ikke er blevet anbefalet af egen læge ift. at bruge produktet. |


Andre forholdsregler:

1. Tøm tøjet for genstande inden brug af produktet.
2. Kontakt egen læge hvis du oplever fysiske gener.
3. Kontakt egen læge hvis du har kløe og udslæt på kroppen.
4. Må ikke anvendes efter indtagelse af medicin.
5. Må ikke være indenfor børns rækkevidde.
6. Må ikke anvendes til andre formål.

Produkt og tilbehør:

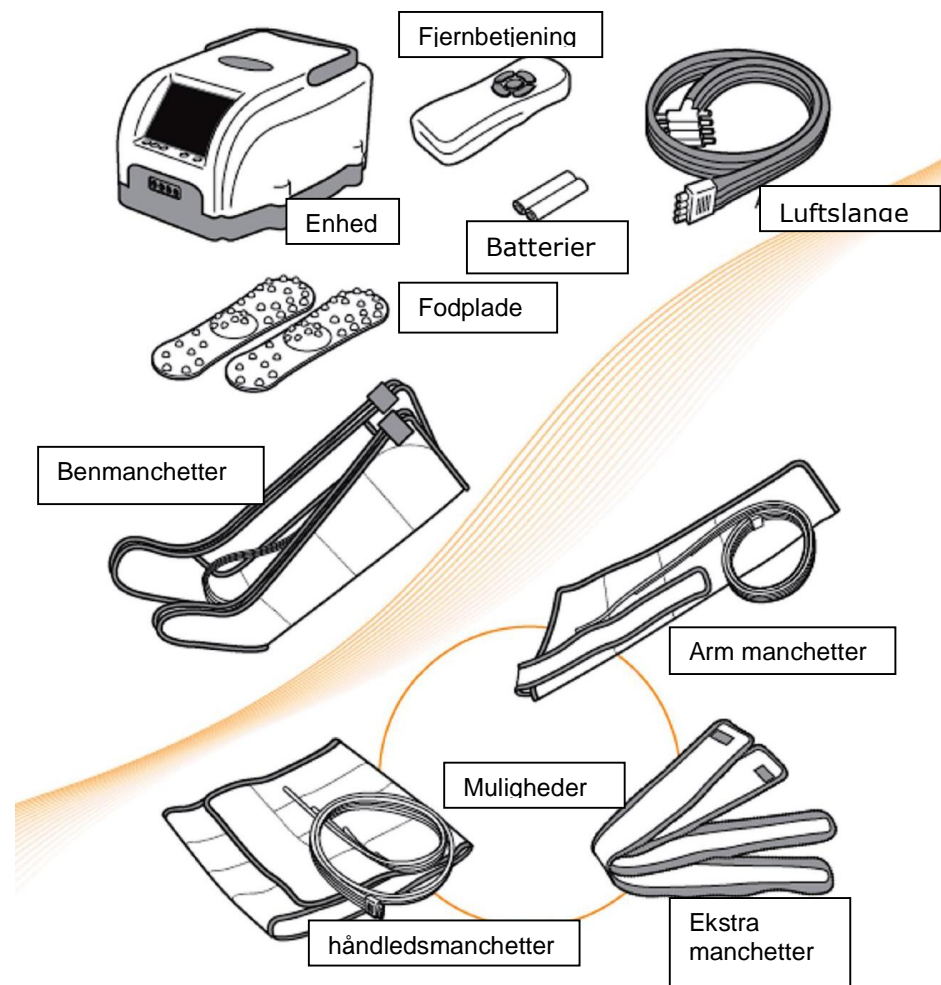

KOMPONENTNAVNE

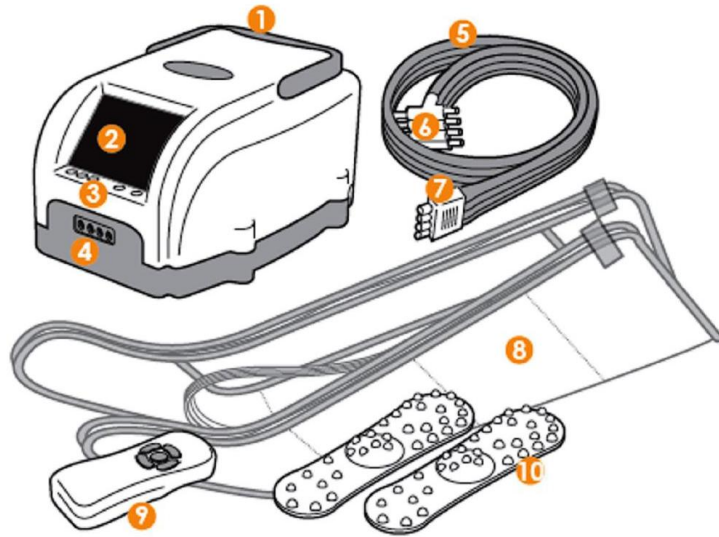

1. Bærbar greb
2. Driftsdisplay
3. Tænd/ sluk
4. Luftfatning
5. Silikoneslange
6. T-stik
7. Slangestik
8. Benmanchetter
9. Fjernbetjening
10. Fodplade

DRIFTSDISPLAY




1. Kompressionsområdet
 - viser status af kompressionen
 - lampe tændt: komprimerer eller holder kompressionen
 - lampe slukket: udstødning eller stopper
2. Autoprogram
 - viser status af autoprogrammet
3. Tænd/ sluk
4. MODE, A, B, C
 - lampen viser status af driftstilstanden
5. Punkt, manual
 - viser status af driften af den manuelle betjening. Manchettens driftsområde er valgt.
6. Styrke
 - lampen lyser, når den er tændt og går ud, når den slukkes.
7. AUTO
 - viser når "AUTO"- knappen er valgt.

FUNKTIONSKNAP 1

ON/ OFF, MODE


1. ON/OFF knap

- Når den tændes, starter "auto" programmet og MODE "A" (styrke 1)
- Slukker automatisk efter 15 min, hvis der ikke trykkes på andre knapper
- Hvis andre funktionsknapper er i gang under driften, starter 15 min igen fra knappen aktiveres

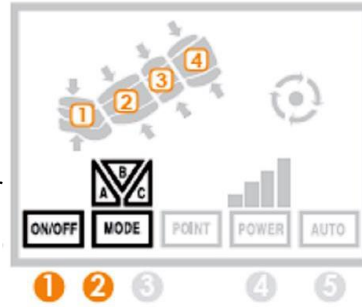

2. MODE-knappen

- Der kan vælges følgende tilstande – A, B, C
Tryk "MODE"-knappen, hvis du ønsker anden tilstand
- I tilfælde af at "MANUAL" eller "AUTO" er aktiveret under driften, slukkes "MODE" lampen og den valgte funktionsknap tændes.

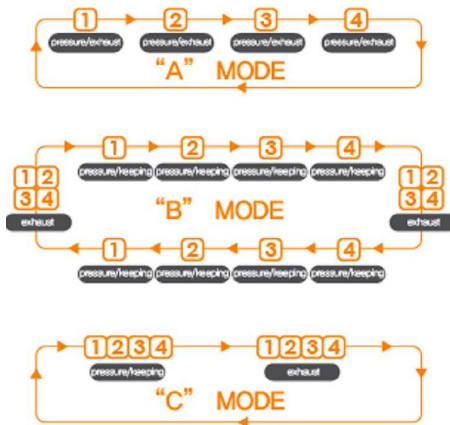

Arm Cuff(Optional)



Waist Cuff(Optional)





FUNKTIONSKNAP 2

POINT, POWER, AUTO

3. POINT (MANUEL) knap

- Der kan vælges 4 områder af ben kompression ved eet tryk på knappen.
- Hvis "MODE" og "AUTO" knappen er aktiveret under brug, vil "POINT" lampen slukkes og den valgte funktion lyse i stedet for.
- AI drift af "POINT" foretages ved en vekslen mellem at tømme og fylde luft gentagne gange.
- Kompressionsområdet ændres hver gang, der trykkes på knappen

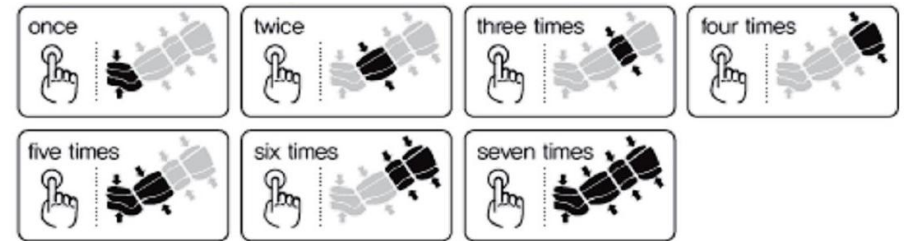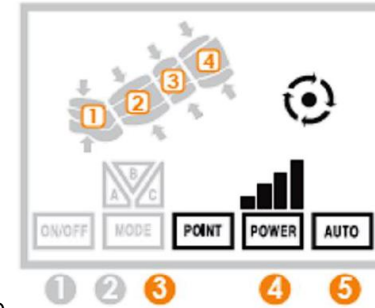


4. POWER (styrke) knap

- Der findes 4 effektive niveauer og styrken kan vælges, når "MODE", "POINT" og "AUTO" er aktiveret.
- Tømmefunktionen arbejder midlertidig i tilfælde af at "POWER" aktiveres.

5. AUTO knap


- "AUTO" funktionen starter, hvis den aktiveres under "MODE" eller "POINT". Den stopper, når der trykkes på ON/OFF-knappen.
- "AUTO" funktion kan kombinere "MODE" (A,B,C) and "POINT", så det ikke er nødvendigt at trykke på flere knapper under kompressionen.

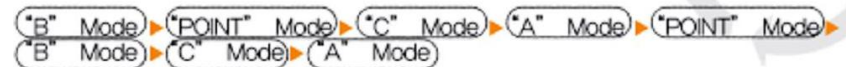

- Styrken kan ændres mens "AUTO" programmet kører.


ANVENDELSE AF PRODUKTET, TRIN 1

1. Tilslutning af "T"-stiksslange

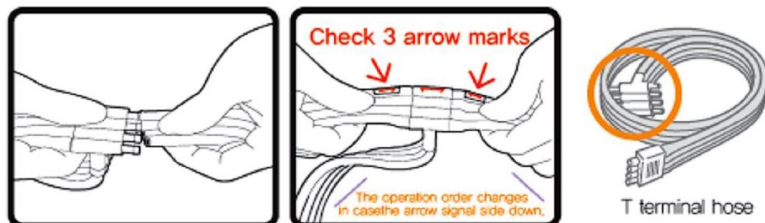

1. Slangerne må ikke foldes eller snoes.
2. Pilene for højre og venstre luftstøvlø skal være overfor hinanden og forbindes med klemmerne/stikket på "T"-slangen.

2. Tilslutning af et kropsslange-stik til enheden

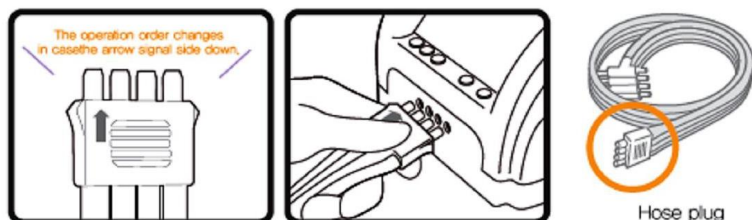


1. Slangerne må ikke være snoet eller foldet.
2. Tilslut stikket på kropsslangen til luftstikket med pilen opad.
3. Stikket skal være helt tilsluttet.

3. Tilslutning af strømkablet

1. Tjek at produktet er kompatibel med elektriciteten.
2. Strømkablet skal tilsluttet korrekt. Når den er tændt, vil der komme 2 bib.
3. Placér produktet på et fladt underlag
4. Kontrollér at slangerne ikke er snoet.


ANVENDELSE AF PRODUKTET, TRIN 2

4. Påføring af manchetterne

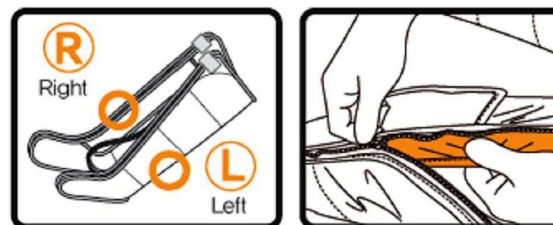

Beskyttelsesdække
Dæk beskyttelsesdækket for at beskytte huden

1. Anvend tyndt tøj ved anvendelse af produktet.
2. Vær opmærksom på at påføre manchetterne på det rigtige ben.
3. Vær opmærksom på at tøj eller andet materiale ikke kommer i klemme, når lynlåsen lynes helt op.

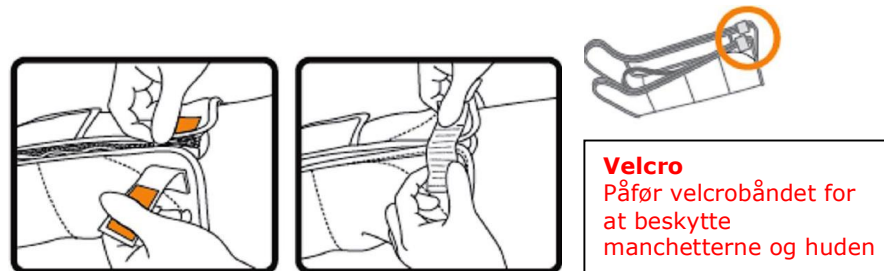

Velcro
Påfør velcrobåndet for at beskytte manchetterne og huden


4. Læg lynlåsen fladt som vist og sæt velcrobåndet fast.

5. Betjening af produktet

1. Læs nærmere detaljer om anvendelse af produktet på s. 9-11.
2. Placér produktet på et fladt underlag.
3. Der skal anvendes 2 stk. AAA, 1,5V batterier.
4. En ændring af driften starter efter tømning af luften i luftmanchetterne indenfor 3 sekunder, hvis der ikke aktiveres andre knapper.


ANVENDELSE AF PRODUKTET, TRIN 3

6. Tilslut en ekstra manchete (valgfrit)

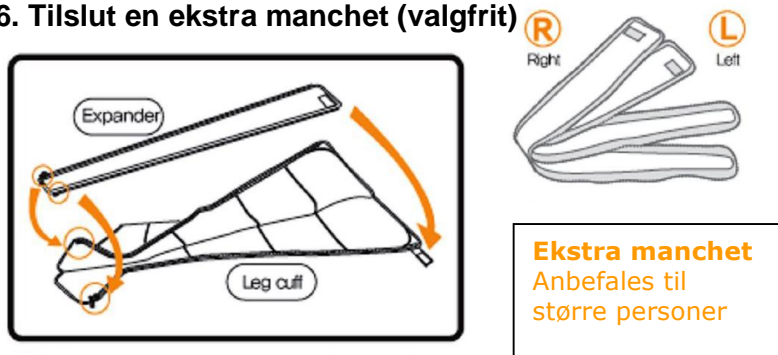

1. Luk lynlåsen helt som vist og sæt velcrobåndet fast.

7. Tilslutning af talje- og armmanchete (valgfrit)

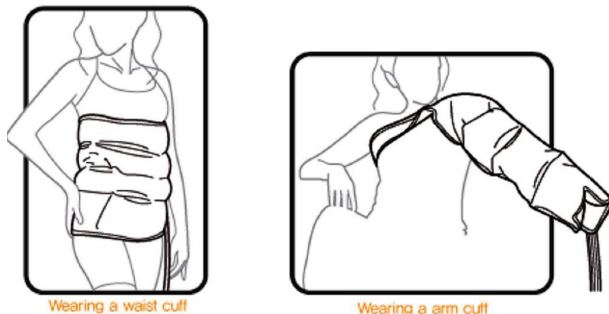

ADVARSEL

1. Vælg niveauet af styrken fra lav til høj.
2. Man må ikke gå rundt mens, man er iført mancheten.

VEDLIGEHOLDESE

1. Efter brug

- Tryk på ON/OFF for at slukke produktet.
- (undtagen for automatisk slukning efter 15 min)
- Tag stikket med luftslangen ud fra luft soklen på produktet.
- Tag luftstøvlerne af efter de er tømt for den resterende luft.
- Afbryd power og tag stikket ud af stikkontakten.

2. Vedligeholdelse af selve produktet

- Produktet skal stå tørt i et køligt rum.
- Anbring produktet et sikkert sted, hvor der ikke er risiko for at det bliver tabt.
- Må ikke rengøres med letantændelige væsker.
- Må kun rengøres med en fugtig klud.
- Anbring det tørt efter rengøring.
- Skal anbringes udenfor børns rækkevidde.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis den ikke skal anvendes i længere tid.

3. Vedligeholdelse af en manchete

- Tør sved eller vand af med en tør klud og sørg for at den er helt tør (rengør den evt. med en fugtig klud og ingen letantændelige væsker)
- Anbring dem et køligt sted.
- Brug ikke produktet uden at have manchetterne på.
- Må ikke anbringes i nærheden af skarpe ting eller varme eller i kolde rum.
- Vær opmærksom på at luftslangerne ikke er snoet eller foldet
- Forsøg ikke at folde dem hårdt.

↓ SPECIFIKATIONER

PRODUKTNAVN	Air Compression device C-8100
MÆRKESPÆNDING	AC230V, 50Hz(EU)
STRØMFORBRUG	30W +/- 10%
VÆGT OG PAKNING	4 kg, samlet i 1 pakke
MÅL	240(b)x120(h)x190(d) mm

↓ GARANTI

PRODUKTNAVN	Air Compression device	GARANTI 1 ÅR FRA KØBSDATO	KUNDE NAVN, TLF, FORHAND- LER
MODELNAVN	C-8100		
KØBSDATO			
GARANTI			

↓ FEJLFINDING

1. Tag strømkablet ud, hvis den ikke virker.
2. Gennemgå årsagerne efter kontrol af nedenstående punkter
3. Lav de korrekte ændringer herefter.

1. Virker ikke

- Er der strømsvigt?
 - Vent indtil strømmen kommer igen.
- Er strømkablet ikke tilsluttet?
 - Tilslut strømkablet

2. Stopper undervejs

- Er stikkontakten defekt?
 - Brug en anden stikkontakt
- Er der lys i LED displayet?
 - Tryk på ON/OFF knappen igen

3. Larmer under brug

- Er gulvet jævnt?
 - Anbring produktet på et jævnt underlag
- Er den i stykker?
 - Tilkald den lokale forhandler

4. Ingen kompression eller en svag kompression

- Er luftslangerne bøjet?
 - Fold luftslangerne ud igen.
- Er luftstøvlerne i stykker?
 - Tilkald den lokale forhandler

5. Fjernbetjeningen virker ikke

- Skal batterierne udskiftes?
 - Skift batterier

6. Fjernebetjeningen virker forkert

- Sidder knapperne fast?
 - Den virker efter 1 sek.

NOTER



A series of horizontal dotted lines for writing, filling the main body of page 18.



NOTER



A series of horizontal dotted lines for writing, filling the main body of page 19.

