



Stratus Massagestol

Brugervejledning





Tak fordi du købte dette produkt. Læs venligst denne brugsanvisning nøje for at vide, hvordan man bruger dette produkt korrekt før operationen. Vær venligst opmærksom på de vigtige sikkerhedsadvarsler. Behold denne manual til fremtidig brug.


INDHOLD

Ekstern struktur	Side	4
Indre struktur	Side	5
Fjernbetjening	Side	6
Ikoner forklaret	Side	7
Display grafik	Side	8
Tilslutning	Side	10
Funktioner	Side	11
FAQ og fejlfinding	Side	12
Tekniske data	Side	13

Ekstern struktur

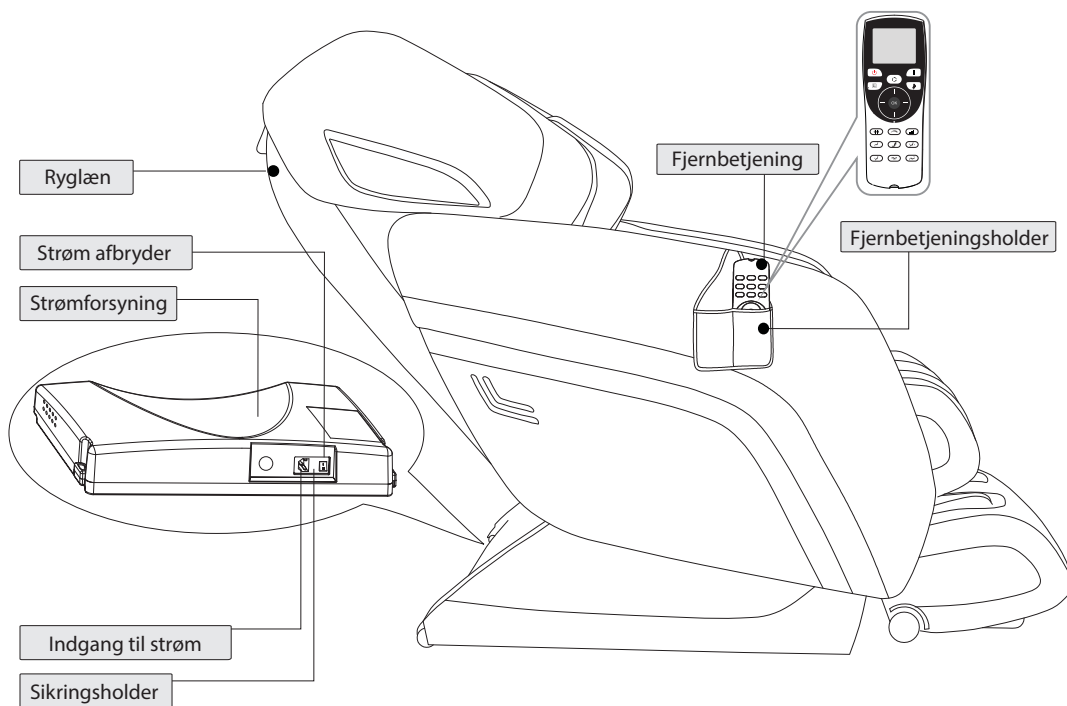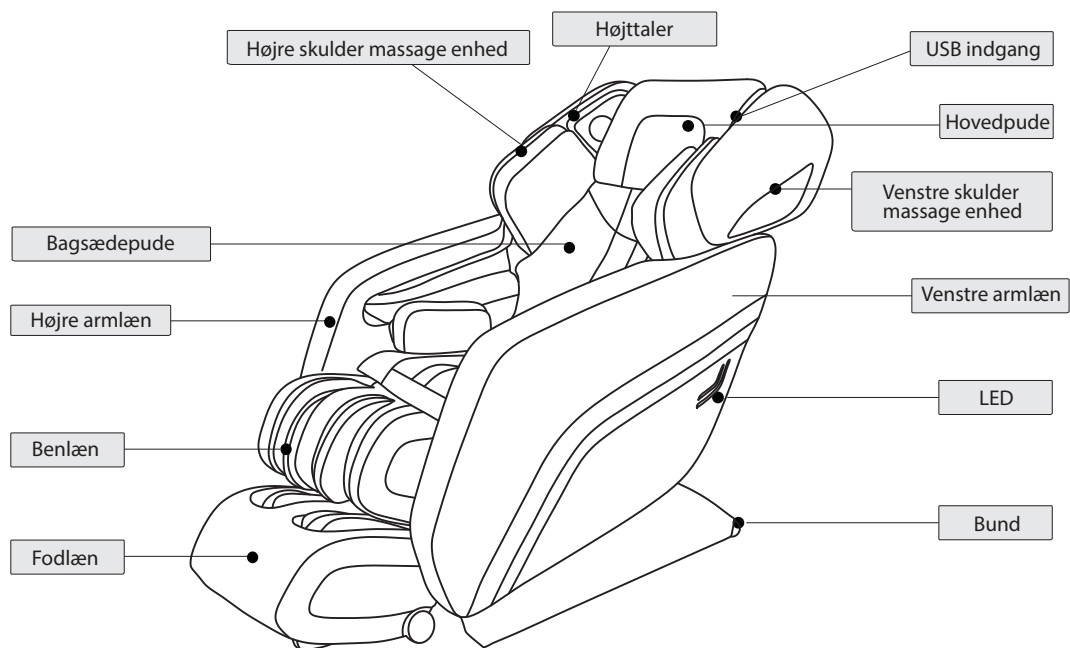

Indre struktur

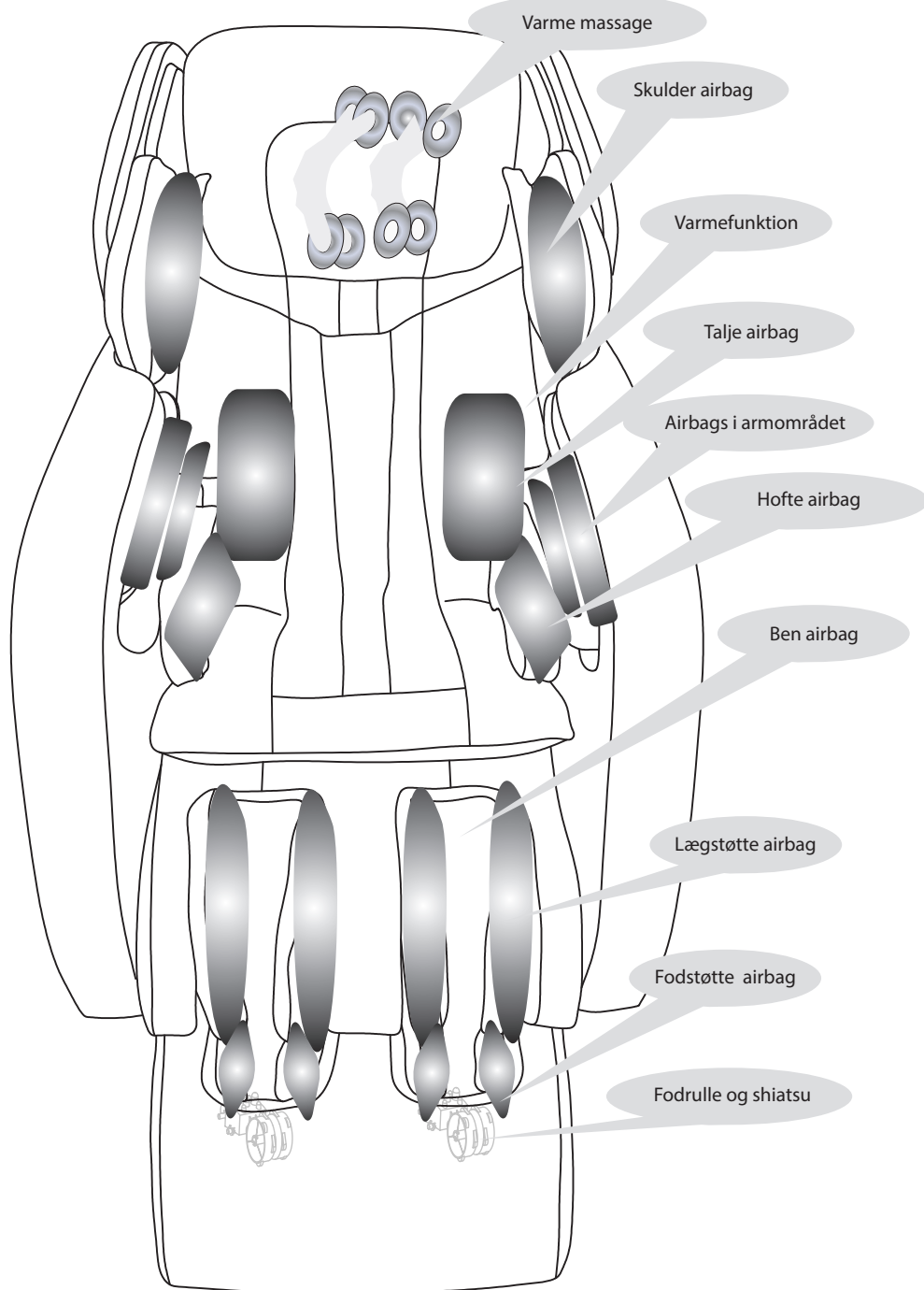

Fjernbetjening




Ikoner forklaret

	1. I standbytilstand skal du trykke på tænd/sluk-tasten for at starte massagestolen. Vælg herefter et automatisk eller manuelt massageprogram, hvorefter stolen indstiller skulderhøjden og begynder massagen. For at slukke massagestolen, skal du trykke på tænd / sluk-tasten igen. Massagestolen vender tilbage til sin oprindelige position. Kontrolpanelet slukkes efter 3-5 sekunder.
	2. Når stolen er tændt, tryk på denne knap for at pause den igangværende massage, tryk igen for at fortsætte massagen.
	3. Når stolen er tændt, kan du trykke på denne knap for at skifte imellem automatiske massageprogrammer. Skift imellem 5 programmer: Recovery, Pain Relief, Stretch, Music Sync and Experience. Efter det 5. program vil stolen gå i stop mode. Programmerne vil fremgå på displayet.
	4. Tryk på denne knap i hovedmenuen for at gå til indstillingsmenuen. Herfra kan der vælges forskellige massage funktioner. Tryk igen for at vende tilbage til hovedmenuen.
	5. Når stolen er tændt, tryk på denne knap for at tænde eller slukke for musikken.
	6. Navigationsknap, under hovedmenuen bruges knappen til at navigere rundt i menuen - Tryk på op eller ned for hurtigt at vælge menu og tryk på venstre eller højre for at gå til forrige eller næste menu. Knappen op og ned kan også bruges til at justere skulderposition. Under valg af musik, bruges venstre og højre knap til at vælge forrige eller næste nummer - Op og ned bruges til at justere lydstyrken.
	7. Når stolen er tændt og du navigere i menuen, tryk på denne knap for at bekræfte menuvalg eller gå til menupunkt.
	8. Når stolen er tændt, tryk på denne knap for at justere ben bredden efter 3 niveauer. Ben bredden kan kun blive justeret under manuel massage. Bredden kan også justeres ved "Kneading", "Tapping" eller "Pressing" teknik.
	9. Når stolen er tændt, tryk på denne knap for at indstille hastigheden. Vælg mellem 3 hastighedsniveauer. Hastighedsniveauet kan kun vælges under manuel massage.
	10. Når stolen er tændt, tryk på denne knap for at justere intensiteten. Vælg mellem 3 niveauer. Intensiteten kan justeres i auto mode og air mode.
	11. Hold knappen nede for at hæve benlænet. Du kan kontrollere positionen på fjernbetjeningen når du justerer benlænet.
	12. Når stolen er tændt, tryk på denne knap for at justere hastigheden af fodrullerne mellem hurtig, langsom eller slukket tilstand.
	13. Hold knappen nede for at sænke benlænet og hæve ryglænet. Slip knappen for at stoppe funktionen. Du kan kontrollere positionen på fjernbetjeningen når du justerer positionen.
	14. Hold knappen nede for at sænke benlænet. Du kan kontrollere positionen på fjernbetjeningen når du justerer benlænet.
	15. Når stolen er tændt, tryk på denne knap for at sætte stolen i "Zero Gravity" position. Tryk igen for at sætte stolen tilbage i dens normale position.
	16. Hold knappen nede for at sænke ryglænet og hæve benlænet. Slip knappen for at stoppe funktionen. Du kan kontrollere positionen på fjernbetjeningen når du justerer positionen.

Display Grafik

Main interface

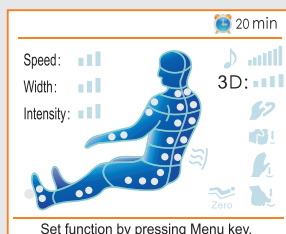

Tryk på "Tænd/Sluk" knappen når stolen er tændt, en buzzer vil bippe kort og lavt. LCD skærmen vil nu tænde og efter 2-3 sekunder vil den vise hovedmenuen og gå i "standby mode". Hovedmenuen viser massageposition, -metode, -tid, -status osv. Alle informationer bliver opdateret når massagen påbegyndes.

 Heating

 Music

Massage function


-  Kneading
-  Tapping
-  Knocking
-  Pressing
-  Zero gravity
-  Massage time left



Massage position

-  Massage speed (slow, mid, fast)
-  Massage width (narrow, mid, wide)
-  Air intensity (weak, mid, strong)
-  3D strength (4 levels)

Menu interface

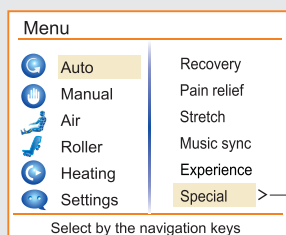


Auto message: Tryk på "Menu" knappen, Auto vil automatisk være det første valg. Tryk på "OK" knappen for at gå videre og vælg i mellem fgl. indstillinger: Recovery, Pain relief, Stretch, Music Sync, Experience og Special. Den sidste mulighed inkluderer fem automatiske massage programmer.

- White-collar
- Shopaholic
- Back Yoga
- Athlete mode
- Care of aged



Manual message: Tryk på "Menu" knappen, Vælg herefter "Manual" i navigationen og tryk på "OK" knappen for at gå videre.

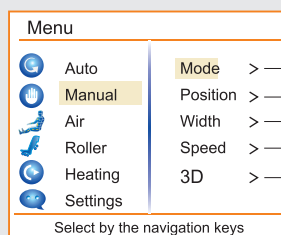

- Mode >
 - Overall > Knead
 - Partial > Tap
 - Fixed point > Knock
 - Fixed point > Knead&Tap
 - Fixed point > Shiatsu
- Position >
 - Narrow
 - Middle
 - Wide
- Width >
 - Low
 - Middle
 - High
- Speed >
 - 3D+
 - Middle
 - 3D-
 - High

Herfra kan der vælges imellem fem valgmuligheder som fx. Mode (massage funktion), Position, Width (bredde), Speed (hastighed) og 3D regulerings funktion. Tryk på "OK" knappen for at gå videre i menuen. Vælg den ønskede massage funktion og justér stolen efter eget valg.


Når massagestolen er indstillet til Manual og ved tilvalgt "Fixed point" under position, kan der trykkes på "Op/Ned" knappen for at justere stolens position. Der vil blive vist informationer om justering af massagestolens position (Massage position adjusting...) nederst på displayet.

Note:

1. Når der er valgt "....." vil standard positionen for hele massagen kun være

2.


Display Grafik

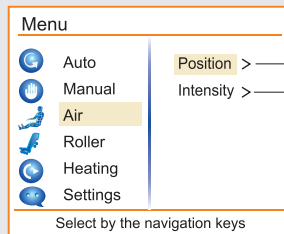

Air: Efter at der er trykket på "Menu", vælg "air pressure" ud fra indstillingsmenuen og tryk på "OK" knappen. Der kan vælges mellem to typer lufttryk relaterede funktioner: Position og Intensitet. Vælg den ønskede funktion og tryk igen på "OK" knappen for at justere lufttrykket.




Roller: Tryk på "Menu" knappen og vælg "Roller". Herfra kan der vælges mellem 3 indstillinger: "Quick", "Soft", "Stop".

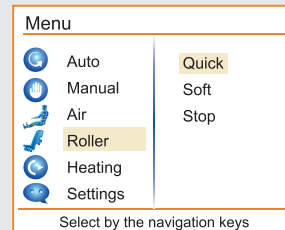

Note:


- I alle automatiske massageprogrammer er fodrulle massage som standard aktiveret. Hvis ikke der ønskes fodrulle massage, skal "Stop" vælges, som er angivet i funktionsmenuen for "Roller".
- Under "Full body" og "Legrest & footrest" lufttryk massage, er der som standard aktiveret fodrulle massage. Hvis ikke der ønskes fodrulle massage, skal "Stop" vælges, som er angivet i funktionsmenuen for "Roller".
- Under "Hand and shoulders" og "Waist and seat" lufttryk massage, er der som standard IKKE aktiveret fodrulle massage. Hvis der ønskes fodrulle massage, skal "Quick" eller "Soft" vælges, som er angivet i funktionsmenuen for "Roller".

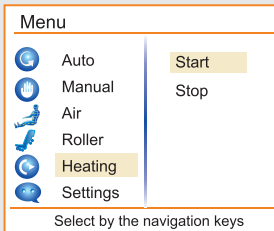

Heating: Tryk på "Menu" knappen, vælg "heating" ud fra indstillingsmenuen. Følgende indstillinger kan vælges: Varmefunktion ved talje og massage mekanisme er åbent samme tid, Varmefunktion ved talje og massage mekanisme er lukket samme tid. Når varmfunktionen er sat til, vil der blinke en lampe på displayet.



Settings: Tryk på "Menu" knappen og vælg "Settings". Vælg mellem "Timer", "Language" og "Stop".

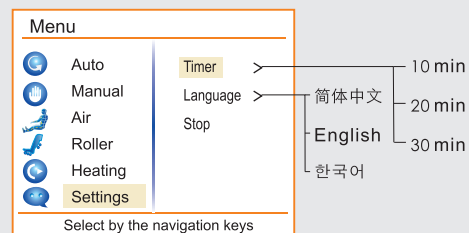


Timer: Justér længden for massage tiden. Der kan vælges mellem "10min", "20min" eller "30min". Når tiden er gået, vil strømmen automatisk slukke.

Language: Skift mellem sprogversioner (Er indstillet til engelsk).


Stop: Tryk på denne knap, for at stoppe alle massage funktioner.

Når massagestolen er tændt og første gang man vælger et auto program, så vil massagestolen indstille sig selv efter din krop og finde de rigtige akupunktur punkter. "acupuncture point tracking ..." vil blive vist på displayet. Efter stolen er færdig med at indstille sig efter din krop, vil der komme en bip lyd 5 gange (et bip pr. sekund). Massage maskinen justerer sig selv efter dine skuldrer. Hvis brugeren ikke synes, at maskinens position er optimal, kan der trykkes på "Op" eller "Ned" for at justere positionen, når "Acupuncture point tracking..." bliver vist på skærmen.

Som standard gives der 20 minutters massage. (Efter vil massagestolen slukkes når massagen er overstået)

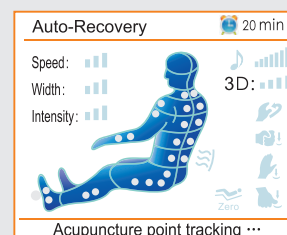

Tilslutning

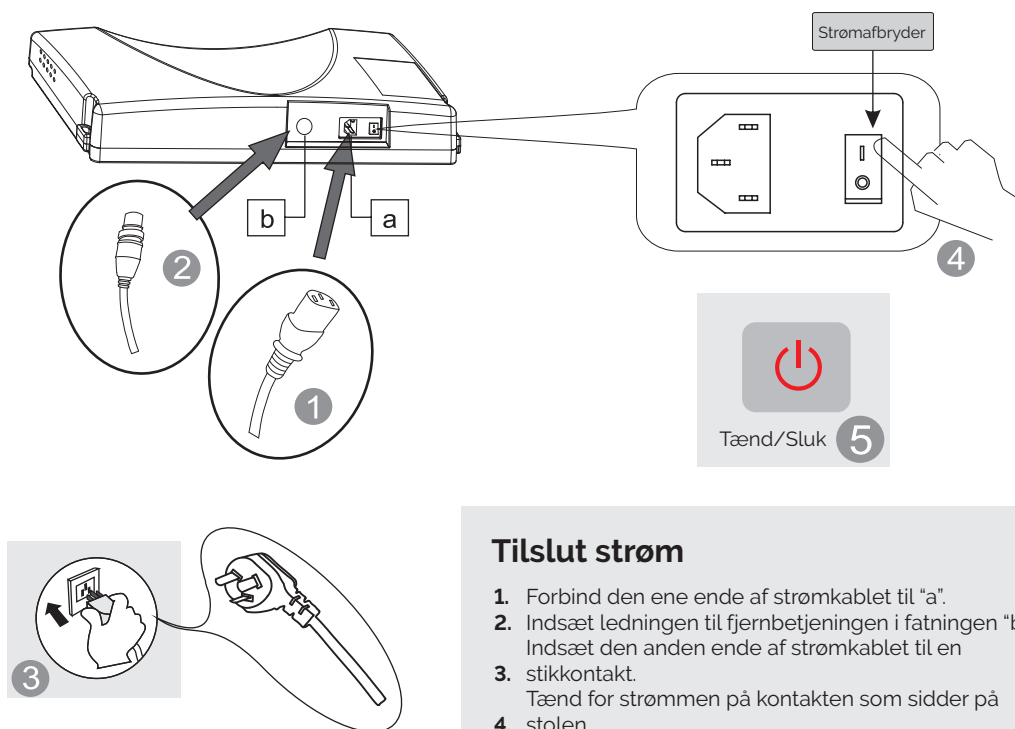


Tilslut strøm

1. Forbind den ene ende af strømkablet til "a".
2. Indsæt ledningen til fjernbetjeningen i fatningen "b". Indsæt den anden ende af strømkablet til en stikkontakt.
3. Tænd for strømmen på kontakten som sidder på stolen.
4. Tryk på Tænd/Sluk knappen på fjernbetjeningen.
5. Stolen vil nu starte op.

Kontrollér miljøet

- **Sørg for, at der er tilstrækkelig plads inden du bruger stolen.**

- Der skal være mindst 10 cm til vægge.

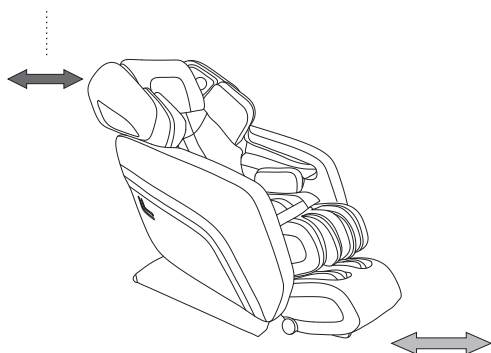


- Der skal være mindst 30 cm foran benene.

Sådan flyttes stolen

Vær altid forsigtig med stolen!

- Løft stolen i benlænet og rejs stolen forsigtigt til den kan køre. Skub stolen frem til den ønskede placering.

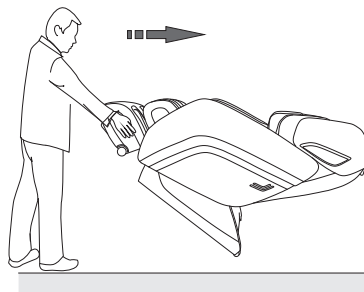


Hold stolen som vist på billedet for at minimere risikoen for skræmmer og skade på læderet.

Funktioner


● Benlæn Op

Tryk på denne knap på fjernbetjeningen, for at hæve benlænet. Slip knappen, for at stoppe bevægelsen. Stolen fastholder positionen når du slipper.

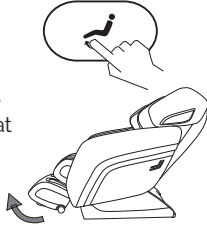


● Benlæn udvidelse

Benlænet kan udvides eller trækkes tilbage inden for en rækkevidde på 18 cm.

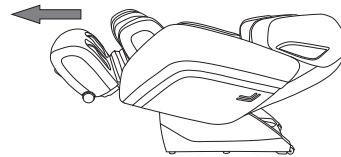


● Benlæn Ned

Tryk på denne knap på fjernbetjeningen, for at sænke benlænet. Slip knappen, for at stoppe bevægelsen. Stolen fastholder positionen når du slipper.

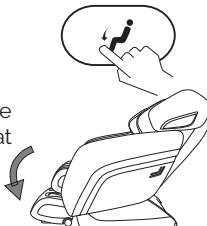

● Arm massage

Læg dine arme imellem armpuderne før puderne bliver fyldt med luft. Det vil tilføje pinch massage på arme og hænder når puderne er fyldte.

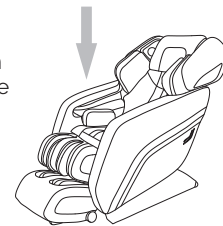


● Benlæn Op og Ryglæn Ned

Tryk på denne knap på fjernbetjeningen, for at hæve benlænet og sænke ryglænet. Slip knappen, for at stoppe bevægelsen. Stolen fastholder positionen når du slipper.



● Skulder massage

Multilayer extrusion airbags bliver påført på begge sider af skulderen. Lindrer træthed i skuldrene med shoulder stretch massage

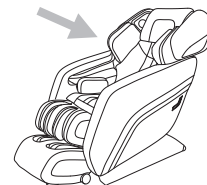


● Ryglæn Op og Benlæn Ned

Tryk på denne knap på fjernbetjeningen, for at hæve ryglænet og sænke benlænet. Slip knappen, for at stoppe bevægelsen. Stolen fastholder positionen når du slipper.



● Gnide ben

Benlænet har en funktion til at gnide og presse massagen med flere lag airbags. Det lægger tryk på benmusklerne for at fremme blodcirkulationen og derved genoprette kraften i benene.

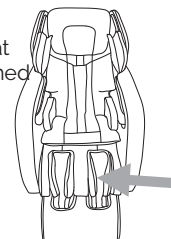

● Zero Gravity

Tryk på knappen "Zero" for at aktivere Zero Gravity funktion. Stolen vil automatisk begynde at justere sig selv til at lægge i vandret position. Tryk på knappen igen for at fastlåse positionen.



● Fodrulle massage

Fodstøtten er integreret med en rulle- og lufttryk massage funktion. Bruges til at stimulere fodreflekszoner, rydde kroppen meridianer, regulere og genoprette de menneskelige organer. Forbedrer også kroppens immunforsvar effektivt.



FAQ & fejlfinding

Trouble	Possible reason	Troubleshooting
The massage chair can't work after power is on.	Check if the control is on or not.	Open control switch
	Not choose massage function	Choose massage function
	Check whether the plug and socket in poor contact.	Make sure plug and socket are connected.
	Wire or plug has damaged.	Please ask manufacturer or appointed or authorized maintenance man for checking and replacement.
	The fuse burned out.	Replace fuse of same specification.
	Something wrong with inner circuit	Please ask appointed or authorized maintenance man for checking and repairing.
There is beep sound inside the massager while working.	It is sound of air pump, motor and mechanical parts.	Normal sound, no need to pay attention to it.
Different height of the left roller and right roller.	Massage rollers work on shifts.	Normal, no need to pay attention to it.
Sound suddenly becomes much louder while working.	Check if it is due to long time working.	Turn off the power to have the massager rest for over half an hour before next turn working.
	Inner parts fretted away due to long time work. It's normal	Please ask appointed or authorized maintenance man for checking and repairing.
Massage function suddenly stops while working.	Suddenly power-down	Connect the electricity power again
	Setting time is up.	Turn off the power to have the massager rest for over half an hour before next turn working.
Neither the backrest nor the legrest can be lay down.	Check if there are any obstacles; the chair overloads; for the sake of safety, sometimes the massage machine may automatically stop working.	Remove the obstacles; turn off the power to have the massager rest for over half an hour before next turn working.
The chair can't return to its original position.	Excessive operation; setting time is up.	Please ask manufacturer or appointed or authorized maintenance man for checking and replacement.
Electric wire or plug give out heat	It may work overload	Turn off the power to have the massager rest for over half an hour before next round working.
	Other abnormal case	Stop using, and ask appointed maintenance man for help.



Note: If the troubles are not caused by above reasons, please turn off the power switch and cut off the power, then contact the manufacturer or service agent to repair your chair.

Teknisk data

Navn	Massagestol	Strøm	200W
Model	Stratus	NW/GW	Main body :81.3/8.3 kg Armrest :13/18.5 kg Legrest & footrest :21.3/24.3 kg
Spænding	☐ AC120V, 60Hz ☐ AC220V, 50/60Hz ☐ AC240V, 50Hz	Størrelse	Main body :1470×745×940 mm Armrest :1050×370×675 mm Legrest & footrest :540×520×565 mm (L×W×H)
Sikkerhed	Class I		



Kontakt os

Carelax Danmark ApS
Herstedvang 7A
2620 Albertslund

CVR: 38219499

Tlf.: +45 30 554 554
info@carelaxdanmark.dk
www.carelaxdanmark.dk