




otiom[®]

Lokaliseringsenhed, der forhindrer, at mennesker med demens forsvinder.

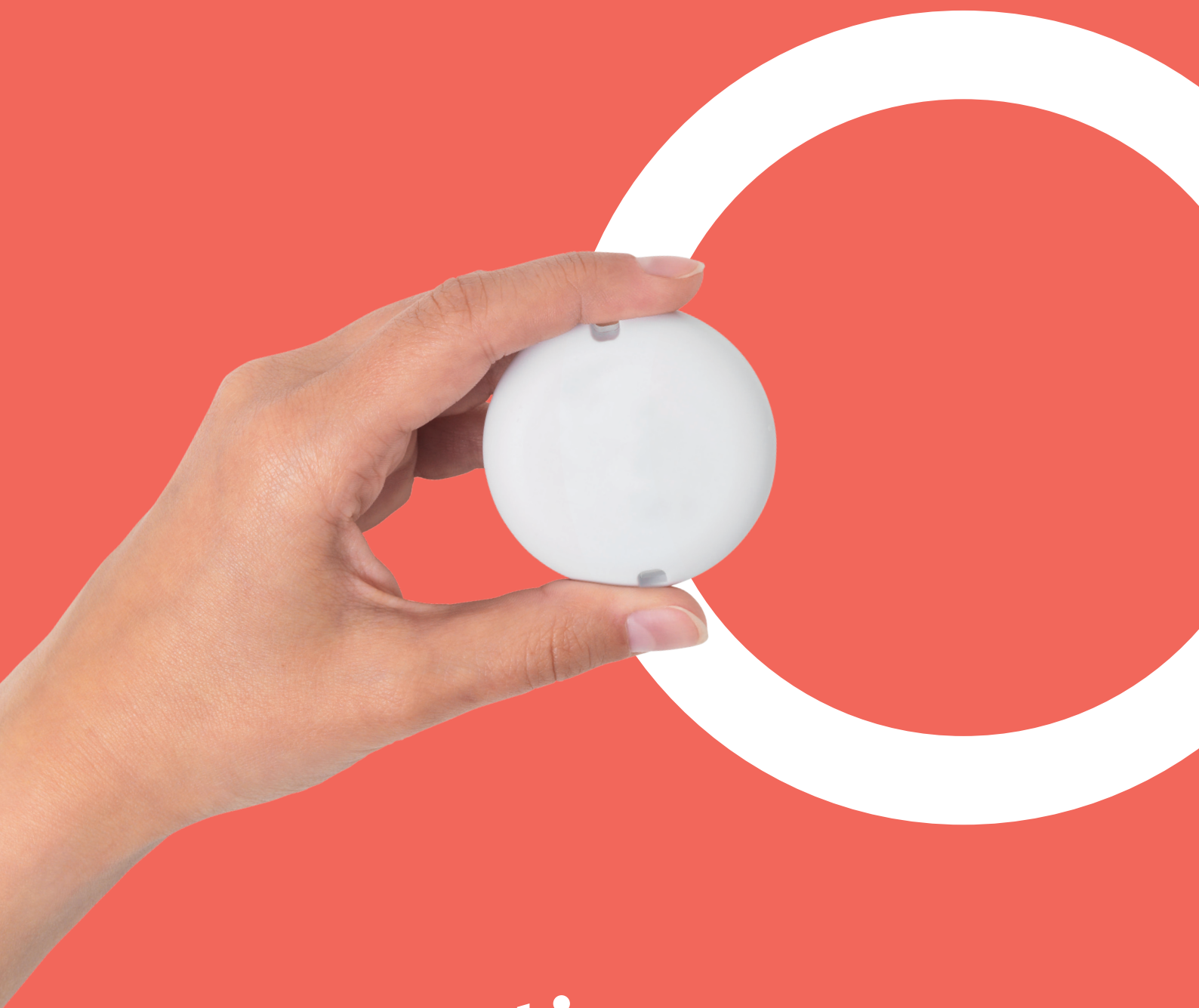

Designet til plejehjem og private personer.

Hvad er Otiom?

Otiom er en revolutionerende lokaliseringssenhed, der forhindrer mennesker med demens i at fare vild. Otiom er udviklet til plejehjem eller private og er et resultat af et flerårigt udviklingsprojekt mellem plejere, forskere, organisationer, kommuner, personer med demens og deres pårørende.

Med Otiom kan plejepersonalet oprette skræddersyede sikkerhedsniveauer, som definerer grænserne for, hvor hver enkelt beboer bør være. Hvis en beboer forlader området, modtager plejere eller pårørende en notifikation og Otiom-app'en viser dem, hvor beboeren befinder sig.

Otiom er, takket været nyeste teknologi, den eneste løsning på markedet, der kan lokalisere mennesker med demens både inden- og udendørs.

Otiom respekterer den enkeltes frihed og værdighed. Det er ikke en overvågningsenhed. I stedet advarer den kun plejepersonalet, hvis en beboer forlader sin individuelle sikkerhedszone.

Otiom er robust nok til at kunne tåle en tur i vaskemaskine på op til 60 grader. Otiom er støv- og vandtæt og testet i henhold til IP68. Desuden holder batteriet i op til flere uger mellem hver opladning.



Otiom-app'en installeres og administreres af plejere eller pårørende.



Tilgængelig på iOS
og Android App



Bluetooth
Low Energy



Otiom-brikken bæres af beboere, der er i risiko for at blive væk. Den kan bæres om halsen, i en sikkerhedssnor eller syes ind i tøjet.

Batteriets levetid: Op til flere uger på en opladning.

Demens tilpasset design

Otiom-brikken har et demensvenligt design. Den er neutral, behageligt at røre ved og har ingen forvirrende knapper eller strømudtag.

NB-IoT
(Narrow Band
- Internet of
Things)



GNSS -
Satellit
dækket



Otiom hjemmebasen, er en central del af Otiom-løsningen.

Disse små enheder kan placeres i et hvilket som helst område for at skabe en sikker hjemmezone, der dækker alle størrelser af hjem, lige fra en privat bolig i en enkelt etage til et plejehjem med flere etager og hundredvis af beboere.

Så længe den person, der bærer Otiom-brikken, befinder sig indenfor hjemmezonen, anses han eller hun for at være i sikkerhed og hele Otiom-systemet er i energibesparende dvaletilstand.

Hjemmebaserne er designet til let at kunne placeres og "glemmes".

De har en batterilevetid på tre år.



Baggrundshistorie



Over **47 millioner** mennesker på verdensplan lever med.

Dette tal skønnes at blive fordoblet hvert 20. år.

Det vil nå op på over **75 millioner** i 2030 og **130 millioner i 2050.***

50%

Mere end 50 % af alle mennesker med demens vandrer og farer vild i løbet af deres demensforløb.*

De nuværende værktøjer og teknologier til mennesker med demens er langt fra tilstrækkelige!

Otiom blev udviklet for at sikre, at vi ikke behøver at acceptere dette som en uundgåelig risiko for demensramte.

Otiom er resultatet af Danmarks største offentlig-private innovationspartnerskab. Gennem flere år har mennesker med demens, pårørende, ældreplejere, organisationer, kommuner og universiteter deltaget i dette unikke samarbejde. Alle med det fælles mål at finde en omkostning effektiv, respektfuld og praktisk løsning til at forhindre, at mennesker med demens bliver væk.

Otiom bliver til

Det stod klart, at de eksisterende værktøjer og teknologier (f.eks. traditionelle GPS-trackere) var utilstrækkelige.

Sammen med vores partnere blev det hurtigt klart, at der var brug for en løsning, som ville gøre det muligt for mennesker med demens at bevæge sig frit rundt, selv til lokale butikker eller parker. Men som ville advare plejere eller pårørende og lokalisere den demente, hvis de blev væk. Med andre ord: Mere frihed og mindre frygt og magtesløshed.

Otiom anvender den avancerede og nyeste teknologi inden for IoT (NB-IoT, Narrow Band, Internet of Things). Denne teknologi gør Otiom mere energieffektivt end tidligere lokaliseringssystemer (batteriet holder i op til flere uger), er mere pålidelig, og det fungerer både inden- og udendørs.

*Kilde International Alzheimer Association

Sådan fungerer Otium



Otium er udviklet i tæt samarbejde med førende forskere inden for antenne- og lokaliseringsteknologi. Det er en fremtidssikret løsning, der udnytter de bedste etablerede teknologier såvel som nyeste teknologier.

Opsætning



1

Otium Hjemmebaser opsættes på hele plejehjemmet, og etablerer et virtuelt sikkert område (hjemmezone) for beboerne.



2

Plejepersonalet giver den dement beboer en Otium-brik. Denne bæres, placeres i en lomme eller syes ind i tøjet.



3

Administratoren (en plejer) indstiller det sikre område for hver beboer i Otium-appen.

Otium er nu blevet sat op.

Alarmsituation

Otium er nu aktiv og klar til at advare plejepersonalet/den pårørende, hvis en beboer forlader sin indstillede trykhedszone.



1



6

Alle plejere modtager en notifikation der informerer om, at beboeren er blevet fundet i sikkerhed.

En beboer forlader et forudindstillet tryghedsniveau eller overskrider sin tidsgrænse i et sikkert område.

2

3

Pårørende modtager en alarm via notifikation meddelelse og en placering i Otiom-appen. En person skal acceptere alarmerne og bringe beboeren tilbage.

Sikkerhed

4

Otiom-appen viser, i hvilken retning beboeren er på vej hen, og giver opdaterede placeringer.

5


Nærhedsføleren i Otiom-appen informerer plejepersonalet om, at beboeren er i nærheden.

Beboeren er lokaliseret
HURTIGT, PRÆCIST OG SIKKERT.


Individuelle tryghedsniveauer for beboerne

Med Otiom kan plejepersonalet oprette individuelle tryghedsniveauer for hver enkelt beboer, baseret på deres risikoniveau og kognitive evner. Et tryghedsniveau er et geografisk og/eller tidsbegrænset område, hvor beboeren kan bevæge sig frit uden at blive overvåget. Hvis en beboer forlader et opsat niveau, sendes en besked til udvalgte plejere, og Otiom-appen angiver beboerens placering.

Tryghedsniveauer kan være udenfor eller indenfor en bygning. Udendørs tryghedsniveauer kan omfatte lokale butikker, en park eller være begrænset til plejehjemmets grund. Plejepersonalet kan også vælge, om der skal være en tidsgrænse for, hvor længe beboeren må opholde sig på et bestemt niveau, før en alarm aktiveres. Denne ekstra funktion giver udvidet sikkerhed for beboere, der mister tidsfornemmelsen, når de er ude at gå.

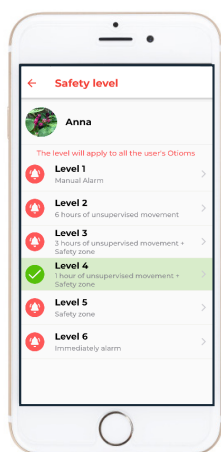

Otiom-appen giver plejepersonalet hurtig og nem adgang til at se det individuelle tryghedsniveau for hver enkelt beboer. Det aktive tryghedsniveau, er altid fremhævet med grønt.

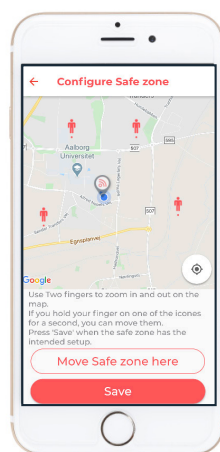

Seks forskellige tryghedsniveauer giver plejepersonalet mulighed for at skabe brugerdefineret tryghedszoner for beboerne. Det tager kun et minut at oprette en ny zone. Nye zoner aktiveres med det samme.



Otiom på højeste sikkerhedsniveau

På det højeste tryghedsniveau (niveau 6) advarer Otiom plejepersonalet, når en beboer forlader plejehjemmet eller det private hjem.



Otiom på et middelhøjt sikkerhedsniveau

På lavere Otiom-tryghedsniveauer kan plejepersonalet oprette en unik zone omkring lokalområdet og om nødvendigt også fastsætte en tidsbegrænsning. Hvis beboeren forlader området eller ikke vender tilbage inden for den fastsatte tidsfrist, bliver plejeren advaret (niveau 4 vist).

Se en video, der forklarer Otioms sikkerhedsniveauer på www.otiom.com/da



Otiom vs. konventionel GPS-tracker



	 	Konventionel GPS-Tracker 
Enhed	Neutralt brik, ingen knapper, ingen lyde, ingen distraktioner	Ur, skosål, broche med knapper, adaptere og mulig tovejs-lyd.
Medicinsk udstyr	Medicinsk udstyr, klasse I.	N/A
Batterilevetid	Op til flere uger	24-48 timer
Overvågning	Ikke-indtrængende overvågning	Konstant
Lokalisere beboere uden-	GNSS (herunder GPS), NB-IoT, Bluetooth	GPS og GSM
Lokalisering af beboere	✓	N/A
Vandtæt og maskinvaskbar i henhold til IP68	✓	N/A
Modstandsdygtig over for fald i henhold til IP68	✓	N/A
Individuelle tryghedszoner for hver beboer	✓	N/A
Meddelelse, når der er behov for genopladning	✓	N/A
Trådløs opladning	✓	N/A
Øjeblikkelig alarm til flere plejere	✓	N/A
Omkostninger	Lave købs- eller lejeomkostninger og ingen dataomkostninger.	Høje anskaffelsesomkostninger, høje dataomkostninger, høje lejeomkostninger.

N/A: Oplysninger ikke tilgængelige. Nogle funktioner kan være delvist tilgængelige på nogle produkter, og der kan forekomme ekstra omkostninger.

Otiom-teknologi



Konventionelle GPS-trackere

Konventionelle GPS-trackere er bygget op omkring en GPS-modtager - f.eks. et Sports-ur eller en elektronisk skosål - som bæres af personen med demens.

Traditionelle GPS-trackere sender normalt deres position kontinuerligt (24/7) via 2G- eller 3G-signaler. Da GPS, 2G- og 3G-transmission alle har et højt strømforbrug, skal GPS-trackere oplades dagligt.

Plejepersonalet kan se, hvor den person, der bærer GPS-trackeren, befinder sig, via en mobilapp eller en computer. I de fleste tilfælde skal plejepersonalet aktivt overvåge appen eller computeren regelmæssigt. Dette er mindre pålideligt og mere arbejdskrævende.

Otiom

Otiom bruger det globale satellitnavigationssystem (GNSS) til at bestemme udendørspositioner. GNSS omfatter et stort netværk af satellitsystemer fra mange forskellige lande, herunder GPS, GLONASS, Galileo og Beidou.

Otiom-brikken transmitterer via det nye Narrow Band - Internet of Things (NB-IoT) netværk. NB-IoT eller har en bedre dækning end GPS og bruger 30 gange mindre strøm.

Otiom bruger også hjemme baser til at give dækning inde i dine bygninger. Det er små, omkostningseffektive og

strømbesparende Bluetooth-sendere, der placeres rundt på plejehjemmet eller i det private hjem og skaber en virtuel hjemmezone. Så længe den person, der bærer Otiom-brikken befinder sig inden for hjemmezonen, anses vedkommende for at være sikker, og Otiom-systemet er i strømbesparende tilstand.


Når personen med Otiom-brikken forlader hjemmezonen, aktiveres systemet og kan indstilles til at sende øjeblikkelige alarmer og placeringer til plejere. Plejepersonalet kan også manuelt aktivere systemet og lokalisere beboeren via Otiom-appen. På grund af den unikke kombination af teknologier kan Otiom-brikken bevare batteri i op til flere uger.

Lokalisering af beboere indendørs

Til indendørs lokalisering har Otiom en unik nærhedsføler, der er indbygget i Otiom-appen.

For at lokalisere en beboer indendørs, skal plejepersonalet blot åbne appen og vælge den person, de ønsker at lokalisere. Når de er inden for Bluetooth-rækkevidden, viser appen afstanden til personen.

Dette er særligt nyttigt, hvis en beboer med demens er faret vild eller gemmer sig inde på selve plejehjemmet.

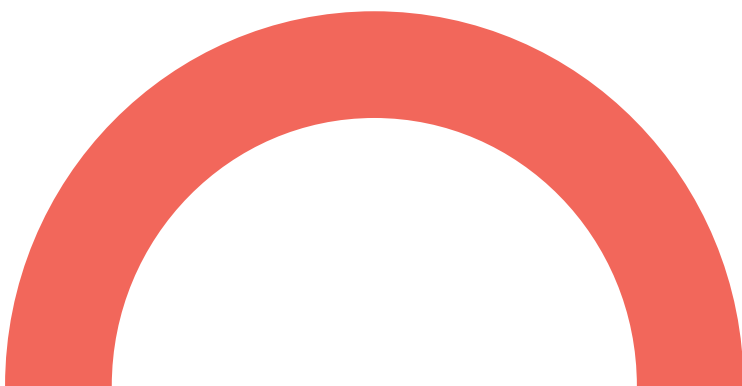



Se video

For plejehjem



Otiom hjemmebaser installeres på hele plejehjemmet. Normalt er der én base pr. Demenslejlighed, på gangene og i fællesrummene. Baserne kommunikerer automatisk med hinanden for at skabe en virtuel hjemmezone.

Plejepersonalet giver en eller to Otiom-brikker til hver beboer, som risikerer at blive væk.

Plejepersonalet kan også vælge at blive advaret, når en beboer forlader plejehjemmet, eller de kan oprette specifikke sikre områder for de enkelte beboere.

Det nødvendige antal Otiom hjemmebaser afhænger af plejehjemmets størrelse og antallet af etager.



 Niveau 6

Alarm, når beboeren forlader hjemmezonen.

Otiom hjemmebase



Beboer bærer en Otiom-brik






Se video

For private hjem

I private hjem er en eller to Otiom hjemmebaser og en eller to Otiom-brikker, alt hvad der er nødvendigt for at skabe et sikkert hjemligt miljø.

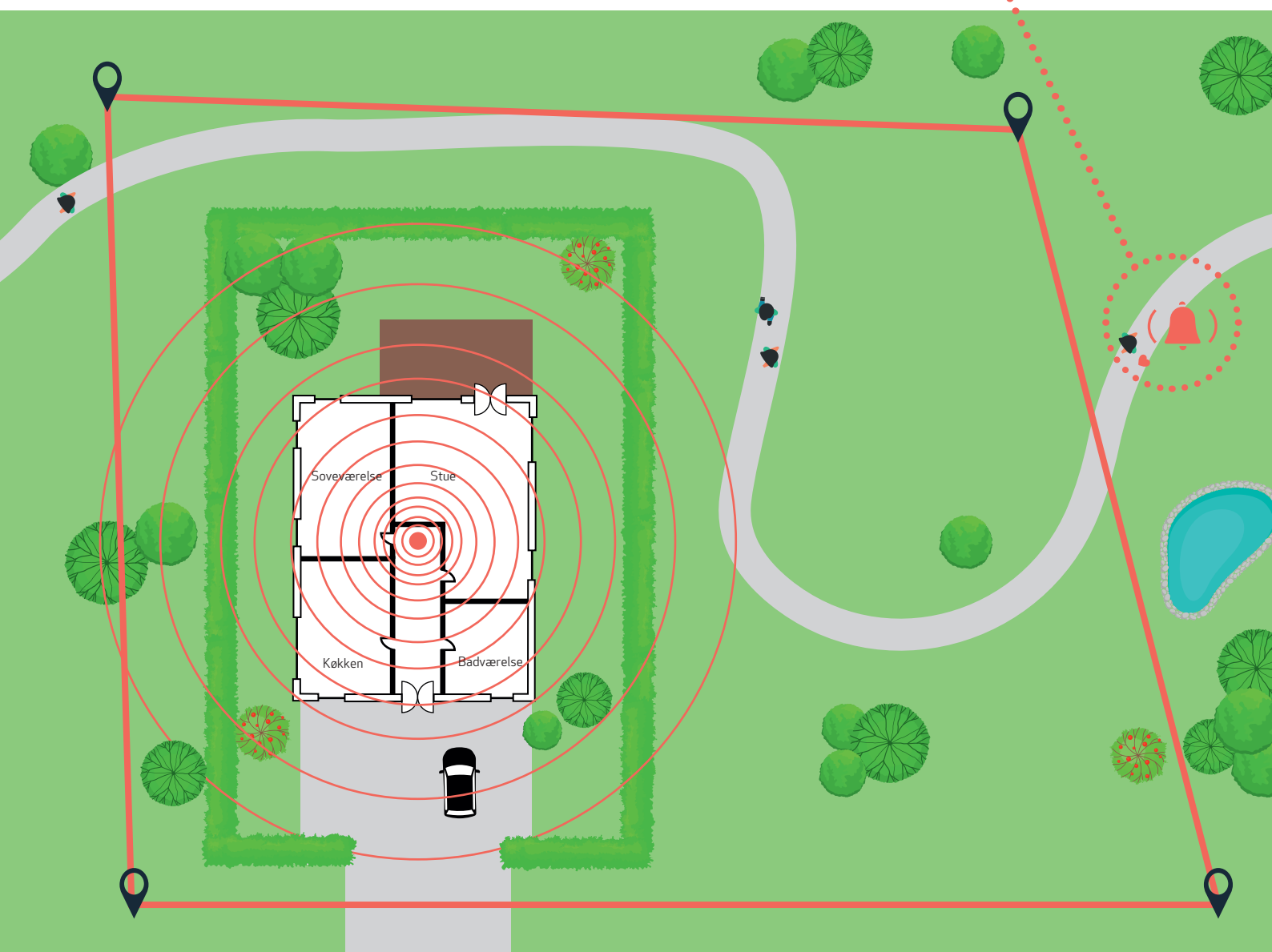

Niveau 4

En times ikke-overvåget færdsel i en defineret tryghedszone.



Otiom hjemmebase



Tryghedszone



Person, der bærer en Otiom-brik



Uafhængigt testet



Otiom blev uafhængigt testet af UCN University of Applied Sciences i Danmark.
Testene blev udført i samarbejde med demensplejehjem og deres personale.

Otiom giver større sikkerhed og tryghed for plejepersonalet

"Alle medarbejdere på plejehjemmene er enige eller overvejende enige i, at de oplever større sikkerhed ved at bruge Otiom, fordi den giver mulighed for indstillinger, der passer til den enkelte beboer. Endelig er de fleste medarbejdere (72 %) enige eller overvejende enige i, at de oplever større sikkerhed med Otiom, fordi den sender en besked, når den skal oplades."

- Uddrag fra UCN Universitys sammenfattende rapport.




"Formålet med rapporten var at sammenligne fordele og ulemper ved at bruge Otiom i stedet for de konventionelle GPS-enheder, der normalt anvendes. Omsorgspersonalets udtalelser er baseret på, at Otiom anvendes normalt på deres arbejdsplads."

Vivi Fog Wogensen, UCN University of Applied Sciences. **ucn**

Testresultater


Otiom gør det nemt at spore en beboer, der er blevet væk indendørs

Langt de fleste medarbejdere (79 %) er enige eller overvejende enige i, at Otiom-appen gør det nemt at spore en beboer, der er forsvundet indendørs. De resterende medarbejdere brugte ikke funktionen.

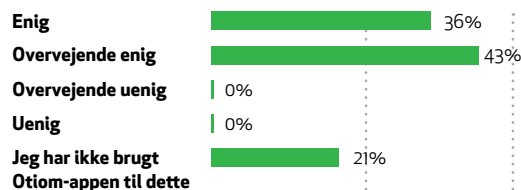

Otiom gør det nemt at spore en beboer, der er forsvundet udendørs

Langt de fleste medarbejdere (72 %) er enige eller overvejende enige i, at Otiom-appen gør det nemt at spore en beboer, der er blevet væk udendørs. De resterende medarbejdere brugte ikke funktionen.

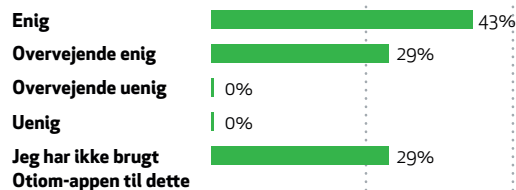


25% 50% 75% 100%

Otiom opfattes som mindre forstyrrende for beboerne at bære end en GPS-enhed


Plejepersonalet opfatter Otiom som en enhed, der giver flere muligheder for at placere den på beboeren end deres nuværende GPS-enhed.

Samtidig finder de også Otiom mindre generende for beboerne end GPS-enheden.

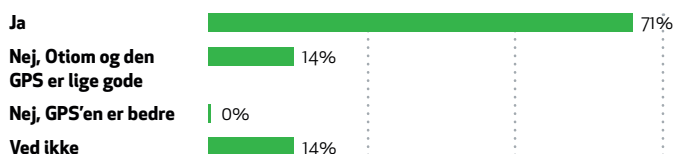


Otiom bevarer batteriet bedre end GPS-enheden

Alle medarbejdere, der har erfaring med batteriniveauer/tid, er enige om, at Otiom bevarer batteriet bedre end GPS-enheder. De resterende medarbejdere har ikke brugt funktionen.

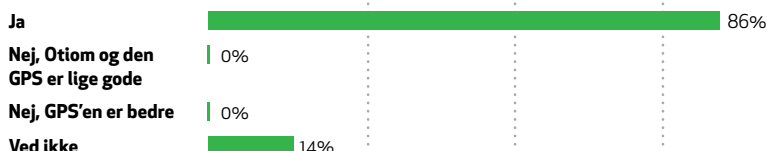


Otiom er mere præcis end GPS, når man følger en beboer udendørs

De fleste medarbejdere (71 %) mener, at Otiom er mere præcis, når de følger en beboer udendørs.

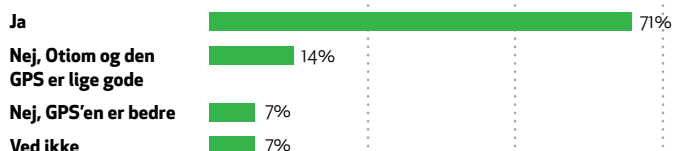

Otiom er mere præcis end GPS, når man følger en beboer indendørs


Langt de fleste medarbejdere mener, at Otiom er mere nøjagtig end GPS, når det drejer sig om at spore en beboer indendørs. Dette resultat var forventet, da GPS-enheden ikke kan spore beboere indendørs.

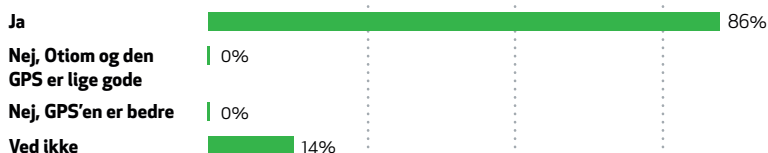

Jeg har generelt lettere ved at bruge Otiom end GPS'en

Langt de fleste medarbejdere (86 %) siger, at de synes, at Otiom er nemmere at bruge end GPS'en.


Samlet set viser gennemgangen af data, at Otiom-systemet kræver mindre tid og indsats fra medarbejderne sammenlignet med GPS-systemet.

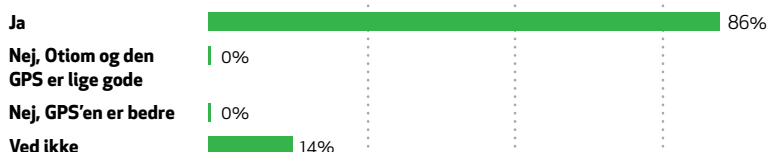

Jeg stoler generelt på, at Otiom gør det rigtige (f.eks. sender korrekte advarsler og opretholde et signal) end GPS-enheden

De fleste medarbejdere (71 %) har generelt tillid til, at Otiom gør det, som det skal sammenlignet med GPS-enheden.

Nogle få mener, at de to systemer er lige gode, eller svarede ikke på spørgsmålet.

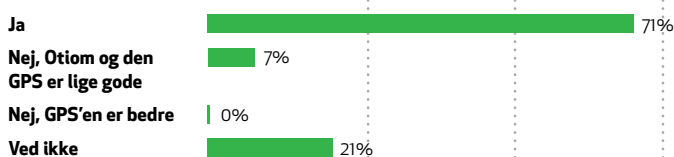

25% 50% 75% 100%

9 Otiom-fakta for beslutningstagere

1

Otiom lokaliserer personer både indendørs og udendørs

Otiom er den eneste løsning, der gør det muligt for plejepersonale at lokalisere beboere både indendørs og udendørs.

Dette er især nyttigt, når en beboer gemmer sig i et rum eller er gået på tur eller udflugt.

2

Op til flere uger mellem opladninger af batteriet

Med Otiom behøver plejepersonalet ikke at kontrollere batteriniveauet manuelt hele tiden.

Hvis en beboer forbliver inden for plejehjemmets grænser, kan Otiom-brikken opretholde batteri i op til flere uger.

4

Plejepersonalet får automatisk besked, når der sker noget vigtigt

Plejepersonalet kan nemt konfigurere Otiom til at advare alt personale på vagt.

Den sender også en notifikation, når det er tid til opladning.

3

Personlige tryghedsniveauer for hver enkelt beboer

Plejepersonalet kan nemt oprette individuelle tryghedsniveauer for hver enkelt beboer.

Et tryghedsniveau er et geografisk og/eller tidsbegrænset område, hvor beboeren kan bevæge sig frit uden at blive overvåget.

5

Forhindrer, at beboere bliver væk

I modsætning til tidligere systemer hjælper Otiom beboerne proaktivt, før de er klar over, at de er farende vild eller i fare.

Plejepersonalet kan lokalisere og guide dem hjem, før de opdager, at de ikke er i stand til at finde vej tilbage. Dette forhindrer ulykker og panik og giver stor sikkerhed på alle områder.

6

Fra plejere til plejere

Pårørende kan føle sig trygge ved at vide, at beboere, pårørende, forskere og fagfolk, som de selv, alle har været involveret i hele udviklingsprocessen.

7

Otiom overvåger ikke beboerne unødigt

Otiom giver beboerne mulighed for at leve deres liv uden at blive overvåget 24/7.

Den overvåger kun beboerne, hvis de overskrider de tryghedsniveauer, der er fastsat af plejerne.

8

Holder nemt styr på flere beboere

Med Otiom-appen kan plejere nemt administrere og holde styr på et ubegrænset antal beboere.

9

Holdbar, desinficerbar, vandtæt og maskinvaskbar

Otiom er i henhold til IP68, fuldstændig vandtæt, tåler at blive vasket i en vaskemaskine og bliver ikke beskadiget ved et fald.

**Anni G. Walther**

Initiativtager, Otiom-projektet og
Formand for Ældresagen

Otiumgården plejehjem



“Otiom-brikken er designet i en hvid farve og rund form. Det er en fordel, da det gør det muligt for beboeren at bære den diskret udenpå eller i tøjet. De vigtigste fordele ved Otiom er den lange batterilevetid, og at den automatisk adviserer plejerne, når den skal oplades. Otiom advarer også personalet, når en beboer forlader det tryghedsniveau, han har fået tildelt. Når dette sker, viser Otiom meget præcist, hvor beboeren befinder sig. Beboeren kan lokaliseres og bringes tilbage til plejehjemmet.”

Lotte Lund Jakobsen, leder

Otiumgården plejehjem

Otiumgården er et førende dansk plejehjem, i Nordjylland.

Otiumgården har 43 rummelige private lejligheder, et fælleshus med et stort aktivitetscenter og en festsal, alt sammen omgivet af haver og åbne fælles arealer.

Lejlighederne er placeret i to separate treetagers bygninger. Den ene er et lejlighedsbyggeri, der er bygget specielt til beboere med demens i mellem- og sen fasen.

Otiumgården yder den bedst mulige service til beboerne. Dette opnås ved at lære den enkelte beboers personlige liv, vaner og holdninger at kende. Hver beboer ses som et individ, og det afspejler sig i den pleje, der ydes.

Medarbejdere og ledelse på Otiumgården har været en del af udviklings- og testprocessen fra de tidlige udviklingsfaser af Otiom. De har identificeret plejebenhov og råd-

givning og har opretholdt en tæt dialog med beboerne og deres pårørende om den praktiske sikkerhedsløsning, som de har brug for. Dette har gjort det muligt for Otiom at designe et system, der tilbyder det højeste sikkerhedsniveau, som stadig respekterer beboerens privatliv, samtidig med at det giver plejepersonalet tryghed og frihed til at pleje mere og overvåge mindre.

Privat hjem



"Brikken vejer ikke meget og fylder ikke noget, så det er nemt at tage med."

Bjarne Pinholt, mand diagnosticeret med demens

"Jeg følger mig sikker i at vide, at jeg kan finde ham, hvis han farer vild, mens han er ude at gå en tur."

Mona Pinholt, hustru

Jeg har ikke bare lyst til at sidde i et hjørne

For knap et år siden blev Bjarne Pinholt diagnosticeret med demens, og han blev desorienteret og forvildet på et ukendt sted, under en ferie. Kort før en demenskoordinator foreslog parret, at de skulle prøve Otiom, måtte Mona ud at leder efter Bjarne, som havde mistet al tidsfornemmelse på en af sine lange gåture tæt på hjemmet og var blevet væk. Men Bjarne vil ikke opgive et liv med lange gåture og personlig frihed. Derfor betyder Otiom nu meget for Bjarne og hans hustru, Mona.

"En aften gik Bjarne en tur før aftensmaden. Der gik halvanden time, og det var ved at blive mørkt. Jeg blev meget urolig. Jeg skyndte mig ned til hans bror, som bor i nærheden, for at se, om han var der. Det var han ikke. Så gik vi ud sammen for at lede efter ham," siger Mona.

Da det blev mørkt, fornemmede Bjarne, at der var noget galt, og ved at følge vandløb lykkedes det ham at finde ud af, hvor han var.

"Jeg ved godt, hvor alt det her er på vej hen, men jeg er ikke typen, der sætter mig i et hjørne og har ondt af mig selv. Det hjælper mig ikke. Jeg vil leve mit liv, som jeg altid har gjort. Det er mit mål," siger Bjarne.

Mona støtter fuldt ud Bjarnes mål. Så da demenskoordinatoren gav Otiom til Bjarne og Mona, havde de ingen betænkeligheder.

"Det skal jo ikke begrænse Bjarnes frihed, at jeg er utryk ved, hvor han er," siger Mona.

"Det giver helt sikkert en tryghed at vide, at hun kan følge med i mine bevægelser. Otiom brikken vejer ikke meget og fylder ikke noget, så den er nem at tage med," siger Bjarne.

Både Mona og Bjarne anbefaler Otiom til andre med demens: "Vi hører jævnligt om folk, der vandrer rundt og farer vild, så det vil være en stor fordel at få Otiom udbredt," siger Mona.



Thomas Pedersen
Stifter og direktør



Anni G. Walther
Formand for Ældresagen





Vores manifest



Det anslås, at halvdelen af alle mennesker, der lider af demens, vandrer rundt og farer vild på grund af deres tilstand. Ingen skal være nødt til at acceptere det.

Når en person, vi holder af, begynder at vise tegn på demens, er det svært for venner og familie at vide, hvad de skal gøre. Tanken om, at de vandrer rundt og ikke bliver fundet i tide, er frygtelig. Vi har dog naturlige forbehold over for overvågning og sporing af mennesker, som ikke har bedt om det. Dette har været et dilemma indtil nu.

Hos Otiom er vores fokus "frihed". Både for mennesker med demens men også for deres pårørende. Frihed til at gøre, hvad de vil, og frihed fra bekymringer fra de pårørende. Med Otiom har vi skabt en løsning, der ikke forstyrrer de daglige rutiner. Pårørende eller plejere behøver ikke længere at bekymre sig om at oplade et produkt, logge på en app eller tjekke en skærm hele tiden. Og en person med demens behøver ikke at bære et ukendt ur eller pludselig være nødsaget til at opholde sig indendørs.

Vi har udviklet Otiom på baggrund af råd fra pårørende og familier og analysen, af behovene hos personer med demens, pårørende og plejere. Disse mange input har været afgørende for os, fordi mennesker ikke skal vandre - og hvis de gør det, skal de findes hurtigt og sikkert! Derfor er Otiom designet til at fungere inden- som udendørs uden konstant at overvåge vores kære. Samtidig giver brugen af den nyeste teknologi en meget længere batterilevetid.

Otiom er udviklet, designet og fremstillet i Danmark for at sikre, at det lever op til de europæiske ældreplejeudbydere og samfundets forventninger til kvalitet og funktionalitet.

Otiom er den hensynsfulde løsning, der giver frihed til plejere, pårørende og demente, samtidig med at den sikrer, at hvis de bliver væk, bliver de hurtigt fundet, så man undgår uro for den forsvundne person og plejeren og hurtigt får dem tilbage i sikkerhed.

otiom®

Raadyret 48
9530 Stoevring
Denmark

support@otiom.com
+45 3696 1010

