



Den producent i Tyskland, der har
flest elektrostimuleringsapparater i PG 09
anført i hjælpemiddelfortegnelsen.



Vi har altid en løsning til dig!

Smerter? Dysfunktion? Atrofi? Denervering?



**Smertebehandling
med DoloBravo (TENS)**



**Muskelstimulering
med RehaBravo (EMS)**

**Biofeedback-træning med
Sine/DuoBravo
(EMG/ETS)**



**Inkontinensbehand-
ling med BioBravo
(EMS)**



**Paresestimulering
med PeroBravo (FES)**



**Muskelstimulering
med MyoBravo**



**Iontoforese med
LontoBravo (MET)**

TENS Smertebehandling

Dolito (Basic)

Varenummer: 010E-200

UDI-DI: 4260279580825

Transkutan elektrisk
nervestimulering
til smertelindring
uden bivirkninger.

De hyppigste indikationer:

- Halshvirvelsøjlesyndrom
- Beckwith-Wiedemanns syndrom
- Lændehvirvelsøjlesyndrom
- Artrose
- Myalgier/neuralgier
- Ar- og fantomsmerter
- Epikondylit
- Sportsskader



DoloBravo (Premium)

Varenummer: 010E-001

UDI-DI: 4260279580207



EMS Muskelstimulering

Rehalito (Basic)

Varenummer: 010E-201

UDI-DI: 4260279580856

Elektrisk
muskelstimulering til
målrettet træning af
atrofierede muskler
gennem behandling med
strømpulser

De hyppigste indikationer:

- Forebyggelse eller udskydelse af muskelatrofi
- Opbygning og nyudvikling af atrofierede muskler
- Skoliosebehandling
- Bevarelse og udvidelse af bevægelsesområdet
- Forebyggelse af muskulære ubalancer
- Forøgelse af musklernes modstandsdygtighed over for svækkelse



RehaBravo (Premium)


Varenummer: 010E-002

UDI-DI: 4260279580238



ORTOSE LUMBOSTABIL

Lumbostabil ST
Varenummer: 040E-029

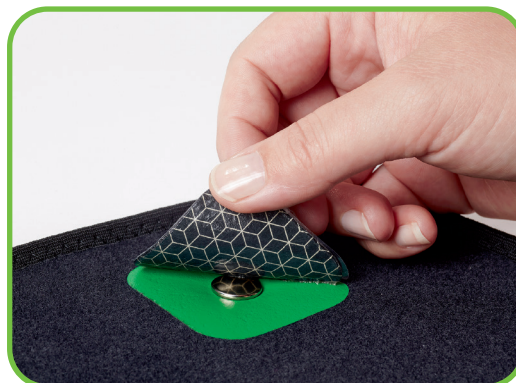

Stabiliserende ortose med
pelotte, trækelementer og
elektrostimuleringsapparat.



De hyppigste indikationer:

- Behandling af alvorlige smertetilstande i nakke- og lændeområdet
- Svær lumbago
- Recidiverende lumbago
- Osteochondrose
- Spondylartrose
- Mild iskias
- Mildt radikulært syndrom
- Spondylolyse uden glidende ryghvirvler
- Mild til middelsvær lumbal deformitet (degenerative glidende ryghvirvler)

FES Funktionel elektrostimulering

De 4 faser i behandlingen af denerverede muskler samlet med ét apparat:

Diagnose: Udarbejdelse af en I/T-kurve med henblik på at klarlægge skadens omfang.

Behandling: Denerverede muskler reagerer ikke på rektangulært formede impulser. Derfor starter behandlingen med trekantede eller trapezformede enkeltimpulser med forskellig længde. Ved hjælp af denne særlige strømform kan man fremkalde enkelte muskelsammentrækninger gentagne gange, så muskelatrofi i nervens regenereringsfase undgås.

Muskeltræning: Når musklen igen reagerer på normale rektangulære impulser, kan den normale regulære muskeltræning med strømimpulser gennemføres.

Gåtræning: I den forbindelse hjælper elektrostimuleringen – som udløses via en fodkontakt – med at løfte tåspidsen, når der tages et skridt.



De hyppigste indikationer:

- Peroneusparese
- Radialisparese
- Facialisparese
- Gåtræning med fodkontakt

PeroBravo
Varenummer: 010E-112
UDI-DI: 4260279581044

Fodkontakt til
gåtræning

Multifunktionsstimulator

Tyngdepunktet ligger i muskelstimuleringen. Her findes både programmer, som er målrettet muskulær rehabilitering og programmer hjælpe med at optimere præstationen og fremskynde regenerering ved sportsskader.

MyoBravo indeholder 31 fast installerede programmer til følgende områder:

- Muskelstimulering (EMS)
- Smertebehandling (TENS)
- Inkontinensbehandling
- Sport/fitness/regenerering

I Myolito findes der 12 programmer til smertereduktion (TENS), muskelopbygning (EMS) og inkontinensbehandling.



Myolito
Varenummer: 010E-105
UDI-DI: 4260279580979



MyoBravo
Varenummer: 010E-004
UDI-DI: 4260279580290

EMS/EMG/ETS Inkontinensbehandling

Biolito (Basic)

Varenummer: 010E-202

UDI-DI: 4260279580887



BioBravo (Premium)

Varenummer: 010E-039

UDI-DI: 4260279580269



Passiv stimulering (EMS),
aktiv biofeedback-behandling (EMG)
og EMG-udløst muskelstimulering (ETS)
til bækkenbund og lukkemuskulatur.

De hyppigste indikationer:

- Ufrivillig vandladning:
- Tranginkontinens (urge)
- Belastningsinkontinens (stress)
- Blandingsinkontinens
- Anal inkontinens



SineBravo

Varenummer: 010E-087

UDI-DI: 4260279580474



DuoBravo U

Varenummer: 010E-089

UDI-DI: 4260279580535

IVP/AVP Erektionshjælp

IVP 600 (manuel)


Varenummer: 030F-032

AVP 1000 (elektrisk)

Varenummer: 030F-033

De hyppigste indikationer:

- Erekttil dysfunktion
- Arteriel forsyningsforstyrrelse
- Venøs lækage

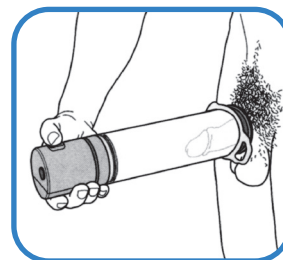

Vakuumerektionsystemer
ved mandlig impotens

ETS Biofeedback-terapi

Neurologisk biofeedback-behandling med EMG-udløst stimulering

DuoBravo N

Varenummer: 010E-090

UDI-DI: 4260279580566


Passiv stimulering f.eks. efter slagtilfælde udløst ved aktivt at stimulere sammentrækningen af patientens muskler.

De hyppigste indikationer:


- Rehabilitering efter slagtilfælde (kognitiv indlæring)
- Opbygning og nyudvikling af atrofierede muskler
- Afspænding af muskler med for høj hviletonus
- Forebyggelse af muskulære ubalancer
- Forebyggelse af muskelatrofier (f.eks. ved multipel sklerose)



DuoBravo – Download af hjemmebehandlinger/behandlingsdokumentation

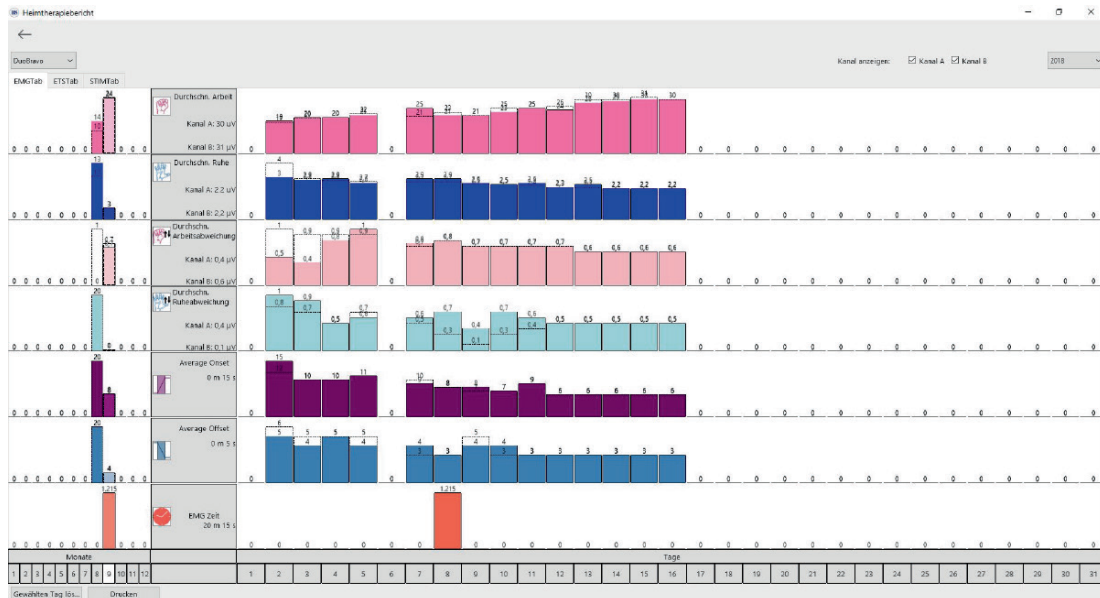

DuoBravo – Præstationsdiagnostik

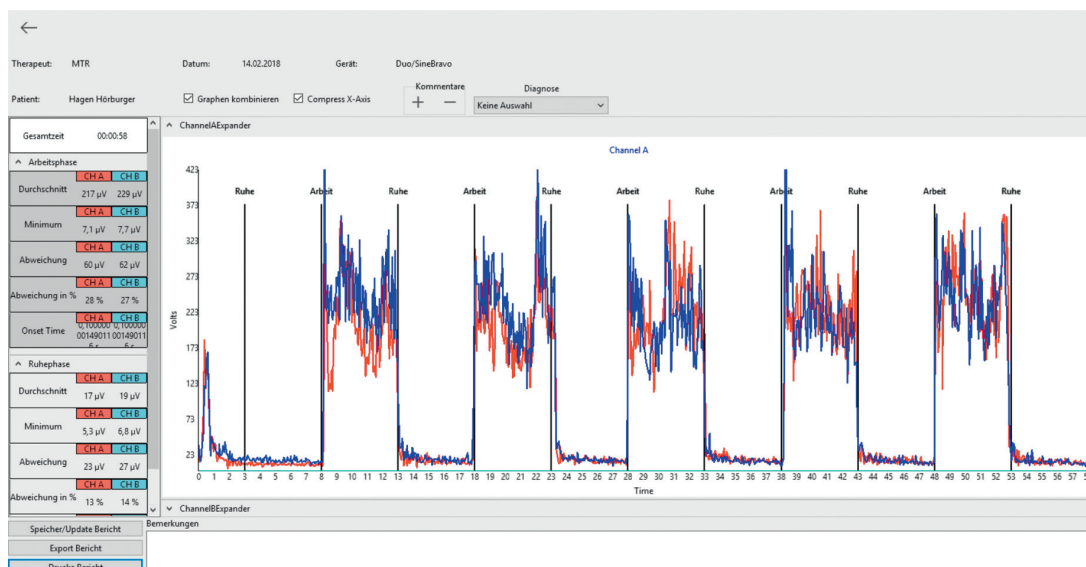

MET Medikamentel Iontoforese

IontoBravo GS

Konstant jævnstrøm

Varenummer 010E-189

UDI-DI: 4260279581402

IontoBravo PS

Pulsstrøm

Varenummer 010E-190

UDI-DI: 4260279581426

IontoBravo GS+PS

Kombiapparat

Varenummer 010E-188

UDI-DI: 4260279581334



De hyppigste indikationer:

- Hyperhidrosis manuum
- Hyperhidrosis pedum
- Hyperhidrosis axillaris




Iontoforese mod kraftig svedproduktion eller til forbedring af medikamenttransport.

Når pulsstrømmen bruges til at give en særlig behagelig strømfølelse, findes der en række ekstra finindstillinger.

Her kan pulsbredden (varigheden af hver enkelt impuls) ændres. Der kan vælges 50, 60, 70, 80 eller 90 mikrosekunder. Dette svarer til et strømflow fra 50 % til næsten 90 % af behandlingstiden. Via den variable pulsbredde kan pulsstrømmen sammensættes efter individuelle behov i henhold til den enkeltes sensibilitet.

Standardbehandlingen er fastsat til 15 minutter. Behandlingstiden kan fastlægges til mellem 5 og 30 minutter i 5-minutters-trin.

Hyperhidrosis axillaris

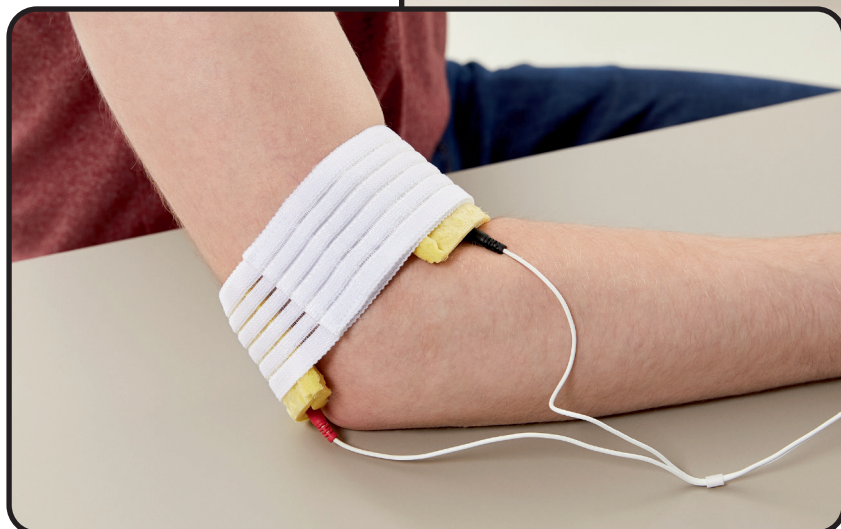


Medikament-iontoforese

I den forbindelse tilføres blodbane og nerver medikamenter via ionvandring gennem huden. Eksempel: Det bliver lettere at optage salver mod gigt.

Tilbehørsliste

Rubrik	Produkt	Varenummer:
Elektroder	40 x 40 mm elektroder	011E006
	40 x 80 mm elektroder	011E007
	Klæbeelektroder runde 32 mm	011E051
	Gitternetelektroder	041E023
	Butterfly trapez-elektroder	011E215
	Handskeelektrode (23-25 cm)	011E021
	Strømpeelektrode	011E022
	Elektrodekabel stk.	011E012
	Referencekabel til biofeedback	011E083
	Stk. elektrodekabel Duo/PeroBravo 1,5 m	011E120
	Fodkontakt PeroBravo	010E113
	Gummielektroder (45 x 50 mm)	011F114
	1 par svampelommer	011E115
	1 par elastiske burrebånd	011E116
Sonder	IncoProbe V	011E008
	IncoProbe R	011E009
	Probe V plus	011E017
	Probe R plus	011E018
	Gel til elektroder og sonder (75 g)	011F037

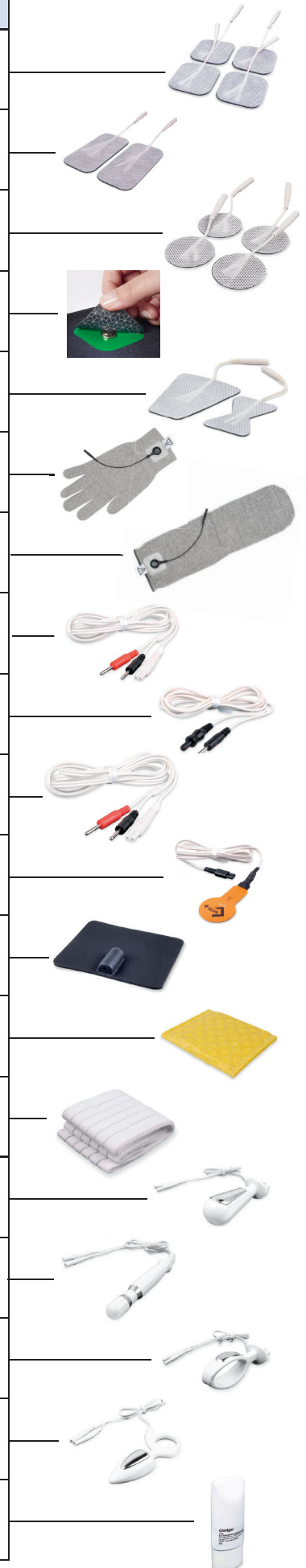

Din bestilling



FAX: 030-66 99 10 35

MTR+ Vertriebs GmbH

Kamenzer Damm 78

12249 Berlin

Dato/stempel/underskrift

Kd.-nr. _____

Telefon _____

Firma _____

Fax _____

Kontaktperson _____

E-mail _____

Gade/husnummer _____

Postnummer/by _____

Varenummer	Varenavn	Mængde	Enkeltpri	Samlet pris

Jeg vil gerne have

(sæt kryds):

☐ Produktinformationer

☐ Præsentation/kursus

☐ Personligt besøg

☐ Købstilbud

☐ Teststilling

☐ Andet _____

Med denne bestilling accepterer jeg de aktuelle generelle forretningsbetingelser samt leverings- og betalingsbetingelserne.

Alle priser er eksklusive moms




MTR+ er som producent godkendt iht. DIN EN ISO 13485:2016 og har specialiseret sig i udvikling, produktion og salg af apparater til elektrostimulering.

Firmaet blev grundlagt i 2001 i Berlin med det mål at levere digitale elektrostimuleringsapparater af høj kvalitet til fagfolk til brug for patientbehandling.

Ud fra vores mangeårige erfaring med elektrostimulering på det medicinske område har MTR+ varetager markedsføringen af apparaterne i "Lito"- og "Bravo"-serien på det tyske marked.

Fra vores strategisk velpacerede hovedsæde i **det sydvestlige Berlin** ønsker vi også i fremtiden at skille os ud som en troværdig samarbejdspartner for fagfolk i hele verden. Vi glæder os over alle nye salgspartnere, der deler vores filosofi om at sælge høj kvalitet til rigtige priser.

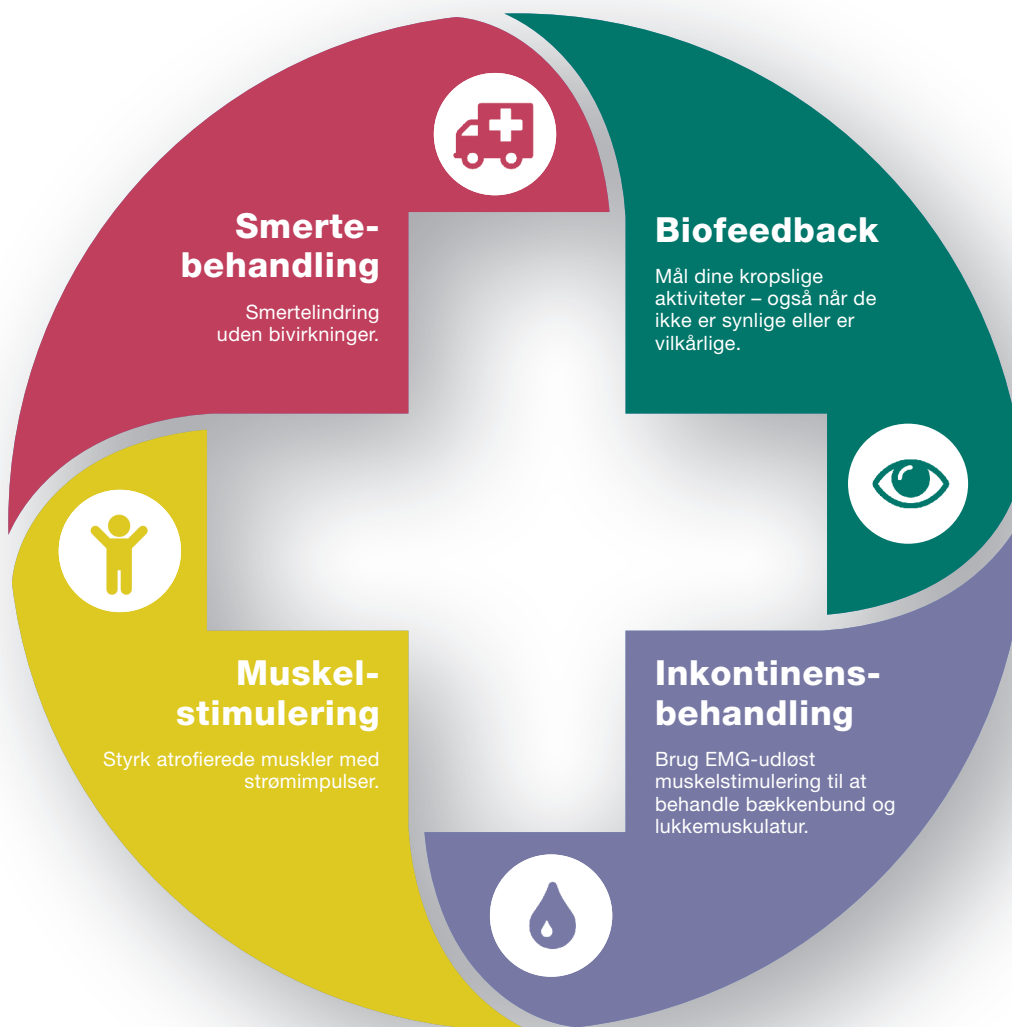

MTR+ Vertriebs GmbH

Kamenzer Damm 78 · 12249 Berlin

Tlf. +49 30/66 99 10 30 · Fax +49 30/66 99 10 35

www.mtrplus.com · info@mtrplus.com