




65x130cm

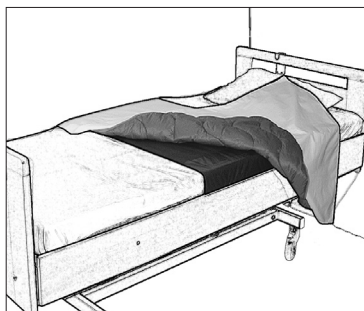

Max.: 300 kg / 661 lbs

TurnSheet placeres i sengen, når den redes, og har friktionsreducerende egenskaber for at lette vending i seng for både bruger og hjælper. TurnSheet består af to dele: et madrascover og et vendelagen. Madrascoveret lægges på omkring sengens madras, og vendelaget lægges derefter ovenpå. Madrascoveret har en midterdel med glidemateriale og et bremsemateriale på siderne.

SystemRoMedic er en serie med forskellige modeller af forflytningshjælpemidler. Valg af hjælpemiddel bestemmes af forflytningssituationen og brugerens funktioner og behov.



Kontrol af funktion

Visuel inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af hjælpemidlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



Læs altid manualen



Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.



Funktionskontrol

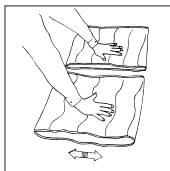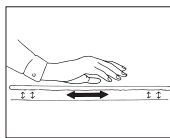


Test TurnSheets glidefunktion ved at rulle det, og vær opmærksom på, hvor let det glider. Sammenlign om muligt med at nyt produkt. Test bremsematerialet på samme måde; kontroller, at overfladen er ujævn og bremser som tidligere.

Bemærk




Bemærk udglidningsrisikoen. Vær omhyggelig med, at madrassen er så bred, at der er skridsikkert materiale på begge kanter af madrascoveret.

Placering

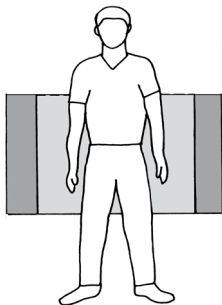

Madrascoveret placeres med glidefladen midt i sengen, og de ujævne bremsekanter fordeles jævnt på begge sider. Madrascoveret fastgøres let omkring madrassen med velcrobåndene.

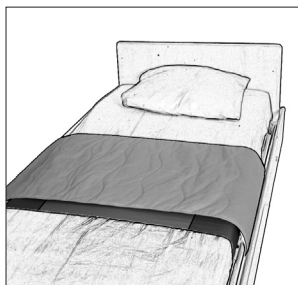

Vendelagenet placeres tværs over madrascoveret. Placer gerne et glidestykke ovenpå vendelagenet.


Brug



Brugeren kan selv anvende TurnSheet, hvis han/hun selv kan vende sig, men har brug for lidt hjælp.



TurnSheet glider let og gør dermed vendingen lettere for hjælperen. Tænk på arbejdsstillingen, arbejd med lige arme, i gangstilling og med tyngdeoverførsel.

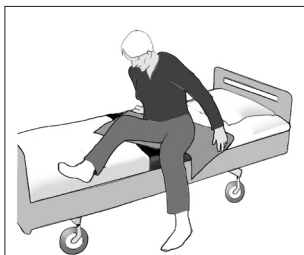

Med TurnSheet kan brugeren også få hjælp til at rejse sig fra liggende til siddende stilling på sengekanten. Det er lettere at svinge rundt og føre fødderne ud over kanten.

Materiale:

Polyamid, polyester, microfiber

Rengøringsvejledning:

Læs på vareetiketten



Anvend ikke skyllemiddel. Undgå tørretumbling for optimal levetid på materialet.

Vare nr.

2060

2081

Produktets navn

TurnSheet

Madrascovers

Størrelse LxB

65x130 cm

55 cm

Sengebredde

90 cm

Set

2080 (2060+2081)

65 x 130 cm

90 cm

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

