

VIKING

Montage- og brugervejledning Brugervejledning (DK)



DANSK

1 Generelle oplysninger

Kære kunde,

Denne brugervejledning beskriver et medicinsk udstyr og indeholder vigtige vejledninger for at sikre rigtigt og sikker brug af produktet. Det er afgørende, at man læser denne brugsanvisning grundigt inden man tager produktet i brug. Det er især vigtigt at læse og følge sikkerhedskravene.

REHASENSE udvikler sine produkter hele tiden og forbeholder sig retten til at ændre specifikationer og egenskaber af produkterne uden forudgående varsel.

Opstår der spørgsmål, kontakt venligst din REHASENSE forhandler direkte. Kontaktoplysninger findes på sidste side af brugervejledningen.

2 Tilsigtet anvendelse, vejledninger og forbud

Tilsigtet anvendelse: Rollatoren er designet for at hjælpe de personer, som har svært med at bevæge sig fx. med at stå eller gå selv. Rollatoren hjælper disse personer med at stå og gå uden problemer og med at opfylde flertallet af deres daglige opgaver og rutiner uden hjælp fra andre. Anden brug er forbudt.

Vejledninger: Rollatoren er beregnet specifikt for de personer, der på grund af en lang række af mulige sundhedsmæssige problemer, har brug for yderligere stabil støtte under gang.

Forbud: Den må ikke bruges af dem, der har alvorlige problemer med at holde kroppen i balancen eller af dem, der ikke kan stå eller gå på grund af for lav muskelkraft selv om de har ekstra støtte fra rollatoren. Behovet og muligheden for at anvende en rollator skal vurderes af en læge eller en fysioterapeut.

3 Levering & generel beskrivelse

Rollatorerne leveres i papkasser og kommer sammenfoldede for lettere transport.

Indholdet:

- ✓ 1 rollator, sammenfoldet, inkl. sæde og taske
- ✓ 1 brugervejledning

"VIKING" rollatoren har en ramme af pulverlakeret aluminium og er udstyret med 4 hjul. Letvægts-aluminiumsrammen gør det let at folde rollatoren sammen samt opbevare og transportere den. Den er let at manøvrere og er tilstrækkelig stabil. Skubbehåndtagene kan indstilles i højden. Rollatoren er fra fabrikken af udstyret med et monteret sæde og en indkøbstaske.

4 Sikkerhedskrav

Sørg for at denne brugervejledning bliver læst af alle, der vil bruge rollatoren. Producenten påtager sig intet ansvar for skader og/eller legemsbeskadigelse forårsaget af, at brugervejledningen ikke blev læst og fulgt.



Begrænsninger i brug


- Rollatoren må ikke belastes med mere end 150 kg.
- Rollatorens taske kan ikke belastes med mere end 5 kg.
- Rollatoren er designet til brug på flade, jævne overflader.
- Rollatoren er ikke beregnet til at sidde på.
- Bremserne SKAL sættes i låst position INDEN man forlader rollatoren.



Uheldsfare


- Brug kun rollatoren til det formål, den er beregnet til.

- Anvend kun rollatoren i perfekt teknisk tilstand.
- Undlad at lave konstruktive ændringer uden skriftlig tilladelse fra leverandøren.
- Under de forskellige justeringer, der er mulige på enheden, skal brugeren passe på ikke at fange fingrene eller andre kropsdele mellem to bevægelige elementer på enheden
- Rollatoren må kun anvendes på stabile overflader.
- Alle hjul **SKAL ALTID** have kontakt med gulvet under brug. Dette vil sikre, at rollatoren er korrekt afbalanceret og vil forebygge uheld.
- Når rollatoren anvendes i stationær stilling, **SKAL** håndbremsene være låst.

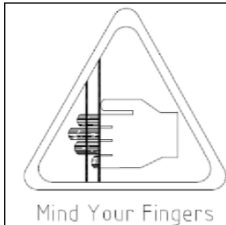

Vær forsigtig, når du ser dette symbol på rollatoren. Fingrene eller andre kropsdele af brugeren og/eller assistenten kan komme i klemme under foldning, udfoldning eller justering af rollatoren. Vær ekstra forsigtig under justering af rollatoren. Overhold afstanden mellem rollatorens elementer for at undgå at klemme dine fingre eller andre kropsdele.

5 Produkt beskrivelse

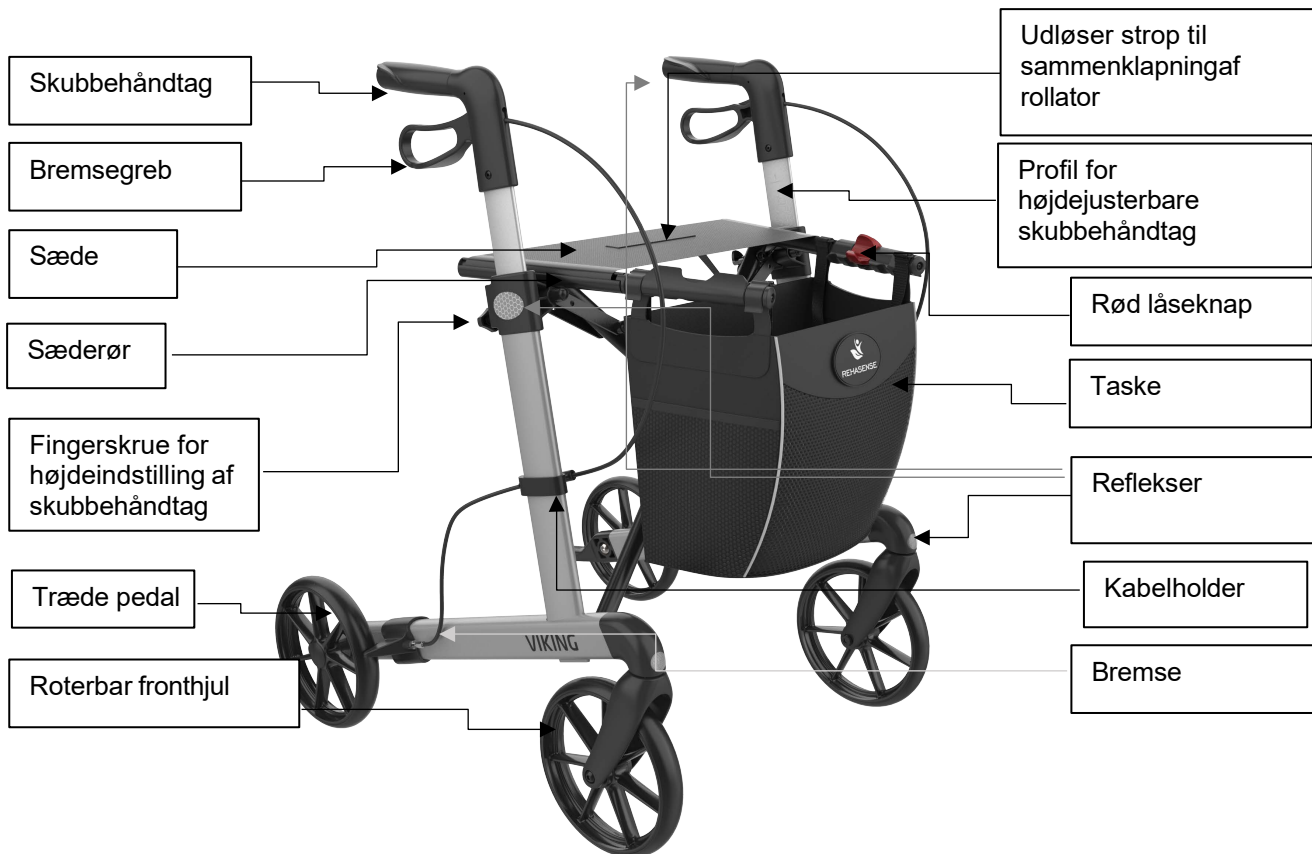

6 Brug

Kontrol ved modtagelsen

Efter at De har pakket rollatoren ud, skal De først kontrollere om noget mangler, og om alle delene, der er vist på tegningen, er der. Hvis De konstaterer, at der mangler nogle dele, skal De straks kontakte forhandleren.

Klargøring

- Sæt rollatoren med hjulene på gulvet. Tryk på den røde knap og tag fat om rørene ved sædet. Tryk disse nedad, indtil der høres et klik i låsemekanismen. Nu er rollatoren foldet ud og sikret mod at falde sammen.
- Kontroller inden brug, at boltene, der fastgør hjulene, er korrekt fastgjorte, og at rollatoren er stabil, så ingen dele kan bevæges.
- Kontroller desuden bremsens funktion, før rollatoren anvendes.



Sammenfoldning af rollator

- For at folde rollatoren sammen skal der trækkes opad i stroppen midt på sædet.
- Derefter udløses låsemekanismen, og rollatoren kan foldes sammen.

Højdeindstilling af skubbehåndtag

- For at indstille højden på skubbehåndtagene løsnes fingerskruen.
- Derefter indstilles håndtagene i den ønskede højde, hvorefter skruen igen fastspændes.



Vær opmærksom på at begge håndtag skal være indstillet i samme højde. Korrekt indstillede håndtag bør ca. være i brugerens albuehøjde, når denne står med løst hængende arme.

Justering af højden på skubbehåndtag - Løsn de 2 skubbehåndtags låseknapper.

- Juster højden.
- Stram de 2 knapper.



- Begge rør for skubbehåndtag bør justeres til samme højde.
- Skubbehåndtaget er justeret korrekt, hvis det er på højden af brugerens hofte.

Brug af bremserne

- FOR AT STOPPE ROLLATOREN træk blot bremsen opad hen til håndtaget.
- FOR AT STÅ STILLE hold bremsen i OPPE positionen.
- FOR AT BEVÆGE SIG slip bremsen. Håndtaget vil gå ned automatisk, og bremsen vil slippes.



- Man SKAL altid trække bremsen, hvis man ikke har tænkt sig at bevæge rollatoren.
- Man må aldrig efterlade rollatoren uden opsyn, når bremserne ikke er trukket!
- Man må aldrig efterlade rollatoren på en hældning, når bremserne ikke er trukket!

Lås/Slip bremserne

- For at låse bremserne skub bremsehåndtaget ned, indtil man hører et klik.
- For at slippe bremserne træk bremsehåndtaget op, indtil man bemærker, at hjulene kan køre uden hindring.



- Når rollatoren står, SKAL bremserne låses.

Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til rollatoren (fx rygstøtte, bord, slæbebremse, enhåndsbremse m.v.). Kontakt Deres forhandler for yderligere informationer.

Håndtering under transport

Det anbefales at transportere rollatoren i sammenfoldet stand. Dens konstruktion gør det muligt på en let måde at folde den ud og folde den sammen. Man bør sikre sig, at rollatoren befinder sig i en stabil position under transporten, så den ikke bliver skæv.

Anvendelse

Stil Dem midt bag ved baghjulene, tag fat om håndtagene og udløs bremserne. Bremserne er specialudviklet, så kun en lille kraftanstrengelse er nødvendig.

7 Rengøring

Generel:


- Gør rollatoren ren regelmæssigt og hold den i ren tilstand.
- Lettere snavs og støv kan fjernes med en våd klud.
- Hårdere snavs kan fjernes med et mildt vaskemiddel og varmt vand.
- Man må ikke anvende hårde slibemidler eller blegemidler, der kan beskadige rollatoren og forårsage misfarvning.
- Tør altid efter med en blød klud.
- Tåler vask i vasketunnel ved max 80° i max 10min.

Hjul:

- Gør hjulene rent med varmt vand og et mildt vaskemiddel. Tør med en ren klud.
- Smør regelmæssigt med multifunktionel olie med jævne mellemrum eller hvis når hjulene begynder at knirke.

8 Etiket

Produktetiketten er placeret på en af nederste rør af hovedrammen. Den indeholder vigtige oplysninger om produktet som navn, serienummer, fremstillingsdato, varenummer, maks. vægt af brugeren, maks. belastning af stofposen, rollatorens bredde, størrelse og oplysninger om producenten. Etiketten må aldrig fjernes fra produktet.

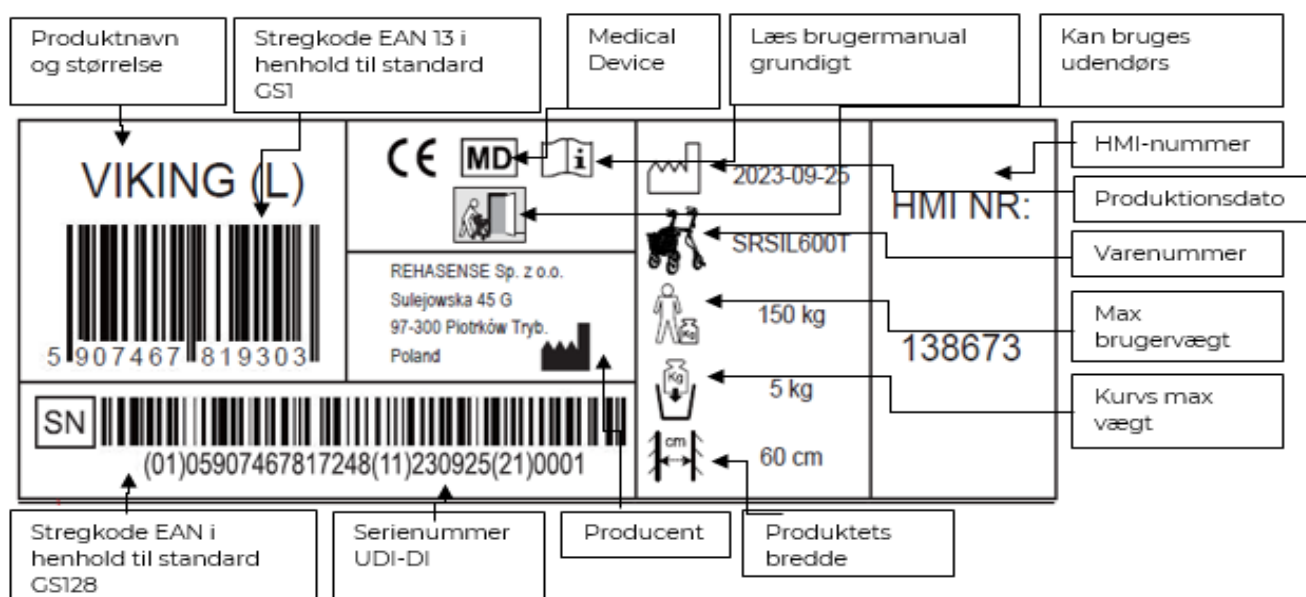

9 Teknisk data

VIKING	
Totalbredde åben / sammenfoldet	60 cm / 24 cm
Sædebredde	60 cm
Længde	68 cm
Sædehøjde	L/62 cm - M/55 cm – S/50 cm
Højde på skubbehåndtag (indstillelig)	L/74–102 cm - M/66–86 cm - S/63-79 cm
Max. belastning	150 kg
Max. belastning af indkøbstaske	5 kg
Totalvægt uden taske (Large)	6,2 kg & taske 0,3 kg
Totalvægt uden taske (medium)	5,9 kg & taske 0,3 kg
Bremser	2 x håndbremser med låsefunktion

10 Generel problemløsning

Problembeskrivelse	Mulige årsager	Løsning
Rollatoren kan kun med besvær skubbes eller styres	Der er skidt mellem hjulene og gaflerne	Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smørelolie.
Bremserne virker ikke, som de skal, eller én af bremserne virker bedre end den anden.	Bremseskoene er slidte, eller bremserne er ikke justeret korrekt.	Forsøg at justere bremsekablet eller udskift bremseskoene. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.
Sædet låser ikke i korrekt position.	Kontroller om låsemekanismen går i indgreb eller om den er defekt. Se om der evt. sidder noget i vejen eller om noget ikke er fastspændt.	Kontroller eller udskift låsemekanismen. Hvis dette ikke afhjælper problemet, kontaktes forhandleren.

11 Transport beskrivelse

Rollatoren er let at folde sammen og nem at transportere. Hvis man har brug for at transportere den, anbefaler vi at folde som beskrevet ovenfor i brugervejledningen. Rollatoren skal transporteres sådan, at den ikke bevæger sig pludseligt under transport.

12 Vedligeholdelse

- Sørg for at hvert element af rollatoren er spændt.
- Tjek om alle skruer er spændte. Hvis ikke, spænd eventuelt.
- Udskift ødelagte, beskadigede eller slidte elementer med det samme.

13 Genbrug

Rollatoren kan genbruges. Inden man videregiver den til en anden person, SKAL rollatoren tjekkes af en ekspert hos forhandleren.

Følgende punkter skal tjekkes:

- Visuel inspektion af rammen
- Tjek om alle møtrikker og bolter er spændte
- Tilstand af plastelementer
- Tilstand af hjul og kuglelejer
- Effektivitet og tilstand af bremserne

Hvis en af elementerne er beskadiget eller brækket, må den udskiftes med en ny. Der anbefales, at hjulene udskiftes når behovet opstår. Alle løse bolte og møtrikker skal spændes. Produktet SKAL rengøres grundigt og desinficeres før genbrug.

ADVARSEL! Det er forbudt at bruge rollatoren, når rammen er bøjet eller brækket.

Brugervejledningen skal altid vedhæftes, når rollatoren videregives.

14 Bortskaffelse

Rollatoren kan ikke bortskaffes med almindeligt affald. Den skal leveres på en genbrugsstation til genbrug eller genanvendelse.

15 Garanti

Garantien gælder ikke i tilfælde af uhensigtsmæssig brug af produktet.

Garantien omfatter ikke skader opstået som følge af ukorrekt betjening, uheld og/eller almindelig slitage.


Enhver form for modifikationer af produktet medfører bortfald af garantien. Garantien dækker ikke mekaniske skader.

Har du brug for en reparation i garantiperioden, ret venligst henvendelse til din lokale forhandler

16 Forventet levetid

Produktets forventede levetid er ti (10) år, hvis det anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsinstruktionerne, vedligeholdelses- og instruktionerne for korrekt brug, som findes i denne manual. Produktets faktiske levetid kan variere afhængigt af hvor meget og hvor intensivt det bruges

Hvis der opstår tekniske problemer, kontakt venligst din forhandler. Du kan også kontakte Rehasense® direkte.



Rehasense® Sp.z o.o.
Sulejowska 45 G
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

info@rehasense.com
www.rehasense.com

Rehasense Denmark
Garmestervej 18b, st. th
8600 Silkeborg
info@rehasense.com