


WAKE

Vække- og varslingssystem

Väckningsenhet

Täristin- ja herätyshälytin

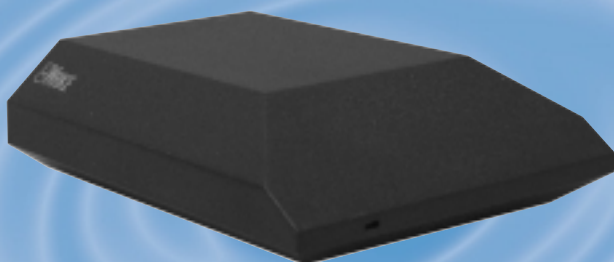

Ⓚ Brugervejledning

Ⓢ Bruksanvisning

Ⓣ Käyttöohje

)))))) **PhonicEar Logia™**

other resources online at www.phonicearlogia.com

table of contents

WAKE brugervejledning (dansk)	1-10
WAKE bruksanvisning (svenska)	11-20
WAKE käyttöohje (suomi)	21-30

WAKES funktion

WAKE er PUZZLE systemets vække- og varslingssystem. En kraftig vibrator placeret under hovedpuden sikrer, at du bliver vækket, når vækkeuret ringer, eller når én af PUZZLE systemets alarmsendere aktiveres (DETECT og/eller OBSERVER).

WAKE kan modtage op til 7 forskellige alarmer. Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, hvilket gør det nemmere at skelne mellem de forskellige alarmsignaler. De enkelte vibrationsmønstre vælges og indstilles på alarmsenderen (DETECT og/eller OBSERVER).

WAKE indstillinger


- ① 12V AC/DC tilslutning
Til tilslutning af 12 volt
transformer

- ② vibratortilslutning
Til tilslutning af vibrator

- ③ kanalomskifter
Til indstilling af personlig
kode

- ④ lysdiode
Indikerer, at WAKE er tændt

- ⑤ mikrofonens følsomheds-
kontrol
Til justering af mikro-
fonens følsomhed

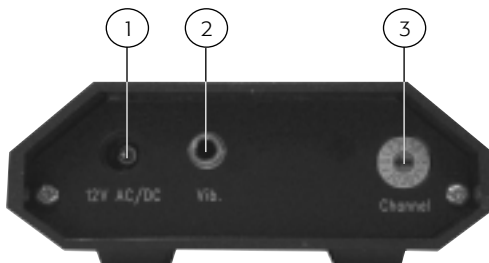

Bagside




Front



Bund


tilbehør til WAKE (inkluderet i WAKE systemet)

- ⑥ vibrator
Vibrerer, når vækkeuret ringer, eller når en alarm fra en af PUZZLE systemet alarmsendere modtages

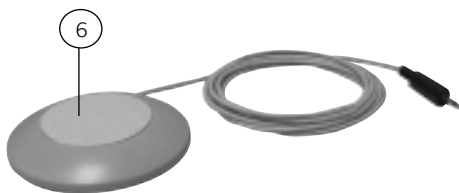


- ⑦ strømforsyning

- ⑧ skruetrækker
Til indstilling af personlig kode og mikrofonens følsomhed

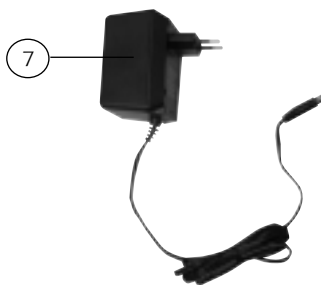

tilbehør til WAKE (ikke inkluderet, købes separat)

- ⑨ batteribackup
Forsyner WAKE med strøm ved strømafbrydelse

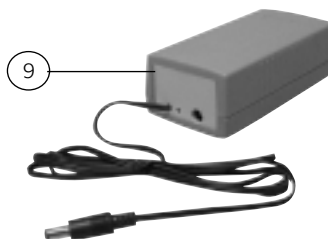

- ⑩ WAKE vækkeur
Billede ikke tilgængeligt


WAKE brugervejledning

1 placering af WAKE



WAKE placeres på sengebordet. Vækkeuret placeres så tæt som muligt på WAKES mikrofonhul.

2 tilslutning af strømforsyning

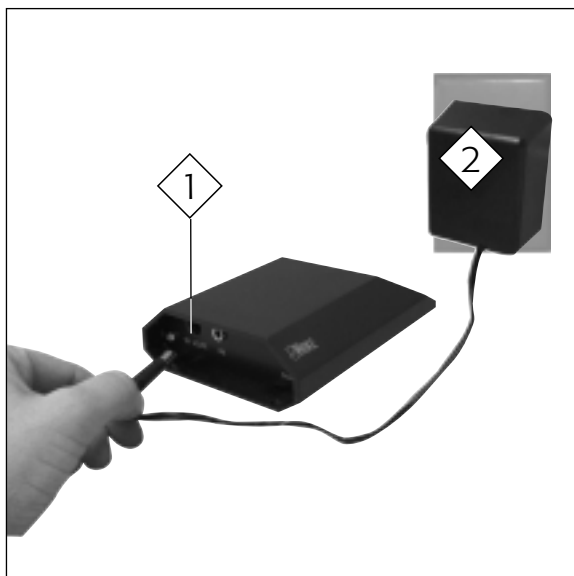

1 Strømforsynings ledning sættes i stikket mærket **12V AC/DC** på bagsiden af WAKE.

2 Strømforsyningen sættes derefter i stikkontakten, og stikkontakten tændes.

Såfremt WAKE er installeret korrekt, lyser den røde lampe, som sidder på fronten af WAKE.

WAKE brugervejledning

3 tilslutning af vibrator



Sæt vibratorledningen i stikket mærket **Vib** på bagsiden af WAKE.

4 placering af vibrator



Vibratoren placeres under hoved-puden.

WAKE brugervejledning

5 indstilling af personlig kode



På bagsiden af WAKE indstilles den personlige kode via omskifteren mærket **Channel**.

Bemærk: PUZZLE systemets forskellige sendere og modtagere skal indstilles til den samme personlige kode.

Bemærk: Den vedlagte skruetrækker anvendes til indstilling af den personlige kode.

6a justering af mikrofonens følsomhed



Mikrofonens følsomhed justeres ved hjælp af kontrollen, der er synlig gennem de aflange huller i bunden af WAKE.

Drejes kontrollen mod uret mindskes følsomheden. Drejes kontrollen med uret øges følsomheden.


Kontrollen bør kun flyttes ganske lidt, før ny afprøvning foretages.

Bemærk: Medmindre du oplever falske alarmer eller problemer med at aktivere WAKE ved hjælp af vækkeruret, bør fabriksindstillingen ikke ændres.

Bemærk: Den vedlagte skruetrækker anvendes til justering af følsomheden.


WAKE brugervejledning

6b) justering af mikrofonens følsomhed

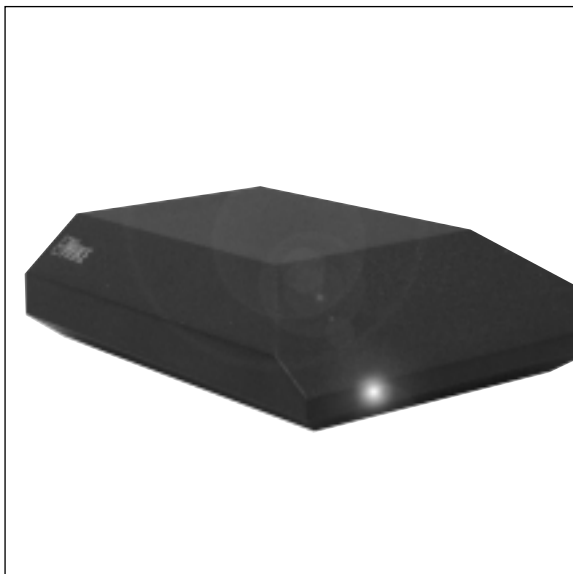

Batteribackup'en til WAKE sikrer, at WAKE virker ved en eventuel strømafbrydelse.

7) installation af batteribackup

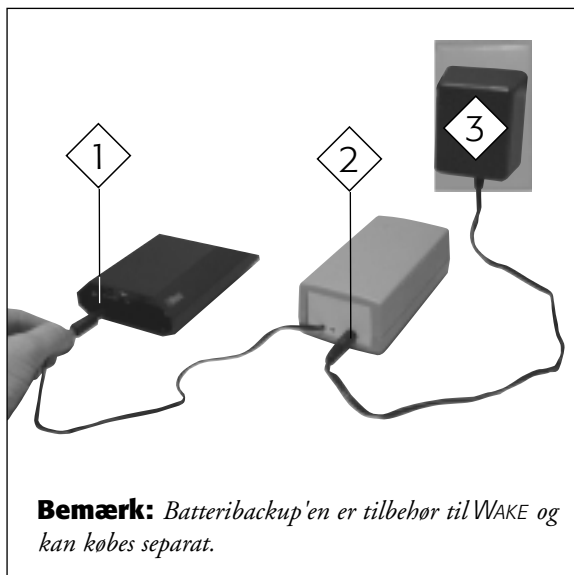


Batteribackup'en til WAKE sikrer, at WAKE virker ved en eventuel strømafbrydelse.

- 1 Sæt batteribackup-ledningen i stikket **12V AC/DC** på bagsiden af WAKE.
- 2 Tilslut strømforsyningsledning til batteribackup'en.
- 3 Sæt strømforsyningen i stikkontakten og tænd derefter for kontakten.

Den røde lampe på fronten af WAKE og den grønne lampe på bagsiden af batteribackup'en skal nu være tændt.

8 batteribackup'ens funktion

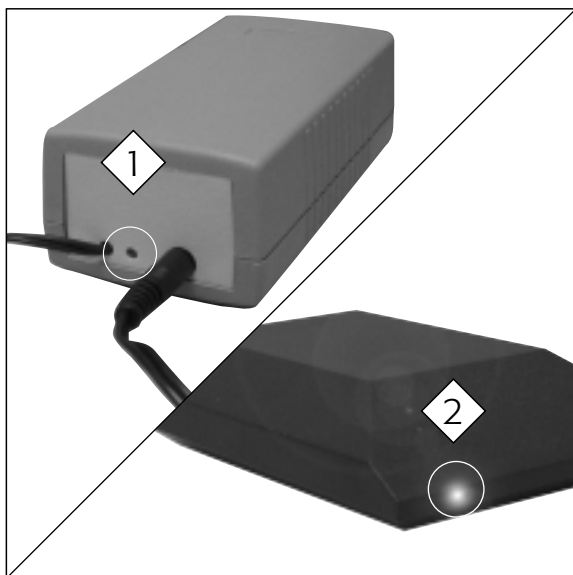

1 I tilfælde af en strøm-afbrydelse slukkes den grønne lampe på bagsiden af batteribackup'en.

2 Den røde lampe på fronten af WAKE vil fortsat lyse.

Batteribackup'en kan fuldt opladet forsyne WAKE i 24 timer i standby og efterfølgende i ca. 3 minutter, hvor vibratoren er aktiv.

Batteribackup'en oplades automatisk, når strømmen kommer tilbage. Det er derfor vigtigt, at stikkontakten på væggen ikke slukkes.

fejlsøgning

Fungerer dit WAKE vække- og varslingssystem ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

Den røde lampe på fronten af WAKE lyser ikke:

- Kontrollér, at stikkontakten på væggen er tændt.
- Sluk stikkontakten i 10 sekunder og tænd herefter igen.

Den røde lampe på fronten af WAKE lyser, men vibratoren vibrerer ikke, når en af PUZZLE systemets alarmsendere aktiveres:

- Kontrollér, at den personlige kode på henholdsvis WAKE og PUZZLE systemets alarmsendere er indstillet ens. Se punkt [5](#).

Den røde lampe på fronten af WAKE lyser, og vibratoren vibrerer, når en af PUZZLE systemets alarmsendere aktiveres, men ikke når vækkeuret ringer:

- Kontrollér, at mikrofonens følsomhed er korrekt justeret. Se punkt [6a](#) og [6b](#).

Vibratoren vibrerer - tilsyneladende uden grund:

- Kontrollér, at mikrofonens følsomhed er korrekt justeret. Se punkt [6a](#) og [6b](#).
- Skift den personlige kode ved hjælp af omskifteren mærket **Channel** på WAKES bagside.

Afhjælper ovenstående ikke problemet, kontakt da venligst din lokale autoriserede PhonicEar Logia forhandler/installatør (se information på bagsiden).

test og godkendelser

WAKE er godkendt og CE-mærket i henhold til R&TTE direktivet.

garanti

PhonicEar Logia yder en 2 års begrænset garanti på nye produkter.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejls opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

Den 2 årige begrænsede garanti dækker ikke for:

- 1 Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
- 2 Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 30 dage fra faktureringsdatoen.
- 3 Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
- 4 Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
- 5 Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
- 6 Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

PhonicEar Logia forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produkterne ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.


WAKE funktion

WAKE är PUZZLE systemets väckningsenhet. En extern vibrator gör att användaren blir medveten om när alarmklockan ringer.

WAKE gör dig också uppmärksam på när ett alarm tas emot av en av PUZZLE systemets alarmsändare. WAKE kan ta emot upp till sju olika alarm, förutom alarmer som talar om att batteriet behöver bytas. Varje alarm har sitt eget unika ljudmönster, vilket gör det lättare att skilja dem åt. De individuella ljuden ställs in via alarmsändaren.

WAKE innehåll

- ① 12V AC anslutning
Uttag för att ansluta transformator (12volt)
- ② anslutning av vibrator
Uttag för att ansluta vibrator
- ③ kanalväljare
Inställning av den personliga koden
- ④ indikatorlampa
Indikatorlampan visar att strömmen är påslagen
- ⑤ inställning av mikrofonskänsligheten

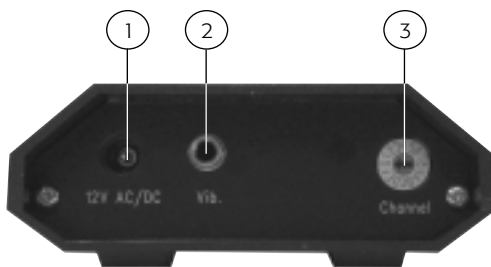

Baksida




Framsida




Undersida

WAKE tillbehör (Ingår i WAKE systemet)

- ⑥ vibrator
När väckarklockan ringer eller när en alarmsignal från PUZZLE systemet har mottagits, så uppmärksammas användaren om detta med hjälp av vibratorn

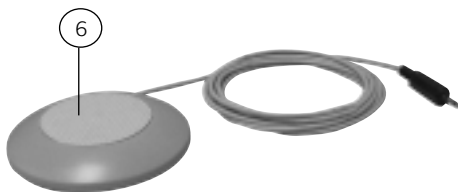

- ⑦ transformator
Förser WAKE enheten med ström

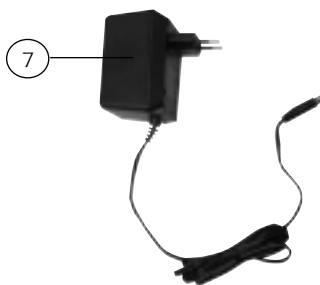


- ⑧ skruvmejsel
Används när den personliga koden ska ställas in eller vid justering av mikrofonens känslighet



WAKE tillbehör (Ingår ej, köpes separat)

- ⑨ batteri backup
Förser WAKE enheten med ström utifall strömmavbrott skulle inträffa

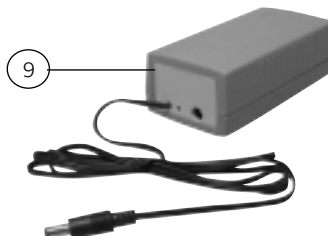

- ⑩ väckarklocka
Bild saknas


WAKE instruktioner

1 placering av WAKE enheten



Placera WAKE på nattduksbordet, och se till att mikrofonen är så nära väckarklockan som möjligt.

2 anslutning av transformator

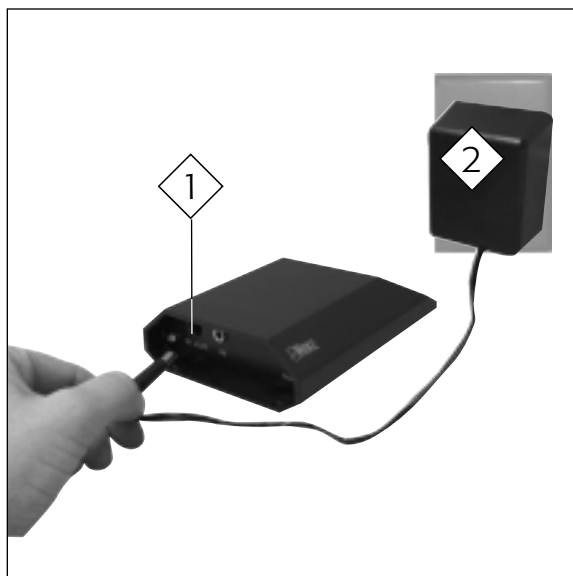

1 Koppla in transformatorsladden på baksidan av WAKE i uttaget märkt **12V AC/DC**.

2 Koppla in transformatorn i vägguttaget. Den röda lampan på framsidan av WAKE tänds.

WAKE instruktioner

3 anslut vibratorn



Koppla in vibratorn i uttaget märkt **Vib** på baksidan av WAKE.

4 placering av vibratorn



Placera vibratorn under kudden.

WAKE instruktioner

5 val av personlig kod



Använd kanalväljaren på baksidan av WAKE för att välja den personliga koden.

VIKTIGT: PUZZLES olika alarm-sändare och mottagare ska vara inställda på samma personliga kod.

VIKTIGT: Använd den medföljande skruvmejseln för att erhålla önskvärd inställning.

6a inställning av mikrofonens känslighet



Ändra känsligheten genom att justera kontrollen som sitter på undersidan av WAKE.


Vrid kontrollen moturs för att minska mikrofonens känslighet och medurs för att öka den.

Prova dig fram genom att stegvis göra små ändringar.

VIKTIGT: WAKES känslighet är förinställd på fabriken och bör ej ändras om inte falska alarm eller problem med att alarmklockan inte aktiverar WAKE.


Använd den medföljande skruvmejseln för att erhålla önskvärd inställning.

6b inställning av mikrofonens känslighet

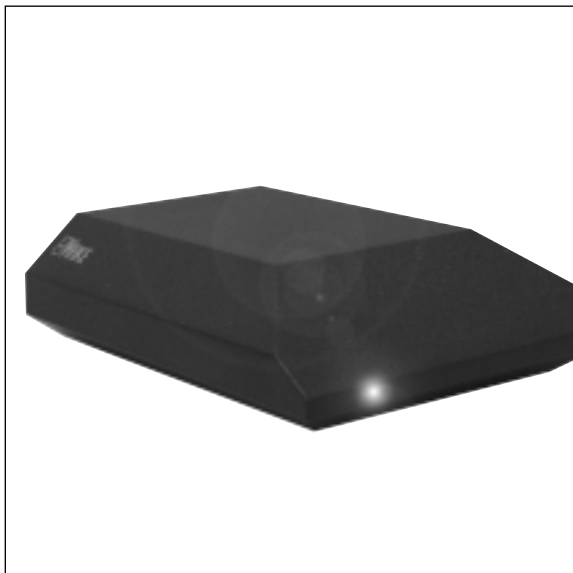

Känsligheten är korrekt inställd om den röda lampan på framsidan av WAKE blinkar eller om vibratorn vibrerar när väckarklockan ringer.

7 installation av batteri backup

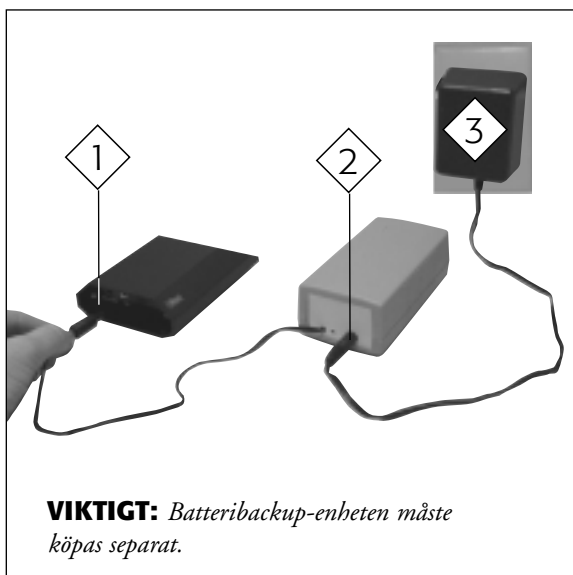


En backup för batteriet garanterar att WAKE kommer att fungera även under strömavbrott.

- 1 Anslut batteribackupen på baksidan av WAKE i **12V AC/DC** uttaget.
- 2 Anslut transformatorn till batteribackupens uttag.
- 3 Anslut transformatorn i vägguttaget.

En röd lampa på framsidan av WAKE och en grön lampa på batteribackupen tänds.

8 batteri backupens funktion

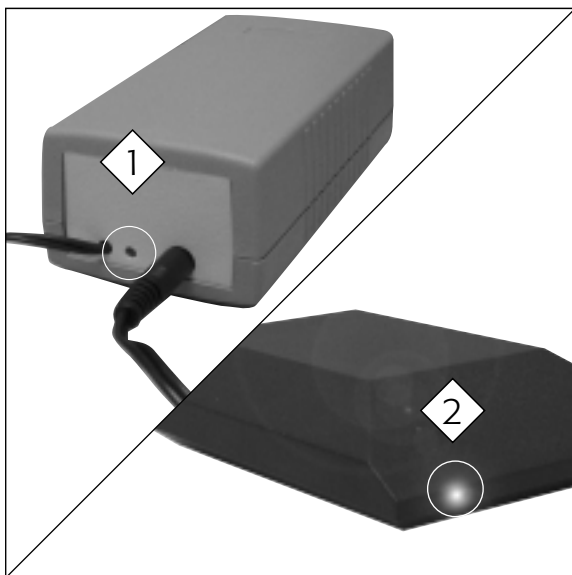

1 Om ett strömavbrott inträffar, så kommer den gröna lampan på den ena änden av batteribackupen att släckas.

2 Den röda lampan på framsidan av WAKE kommer att fortsätta lysa.

En fulladdad batteribackup kan förse WAKE med tillräckligt mycket ström under 24 timmar under standby, och cirka tre minuter när vibratorn är aktiv.

Batteribackupen laddas automatiskt upp när strömmen återkommer, så det är viktigt att låta väggkontakten sitta kvar hela tiden.

felsökning

Om din WAKE inte fungerar tillfredsställande, försök att med hjälp av nedanstående alternativ hitta lösningen på problemet.

Den röda lampan på framsidan av WAKE lyser ej

- Kontrollera att strömbrytaren är påslagen.
- Stäng av strömbrytaren i 10 sekunder och prova att slå på strömmen igen.

Vibratorn fungerar ej när PUZZLE systemets alarmsändare är aktiv, trots att den röda lampan på framsidan av WAKE lyser

- Kontrollera att den personliga koden är densamme för WAKE som för PUZZLE systemets alarmsändare. Se [5](#).

Den röda lampan på framsidan av WAKE lyser och vibratorn vibrerar när en av PUZZLE systemets sändare är aktiv, men inte när alarmklockan ringer

- Kontrollera att mikrofonens känslighet är korrekt inställd. Se [6a](#) och [6b](#).

Vibratorn är aktiv utan någon uppenbar anledning

- Kontrollera att mikrofonens känslighet är korrekt inställd. Se [6a](#) och [6b](#).
- Ändra den personliga koden med hjälp av kanalväljaren som är märkt **Channel** på baksidan av WAKE. Se [5](#).

Kontakta din återförsäljare, om inget av ovanstående alternativ löser ditt problem.

kontrollerad och godkänd

WAKE är godkänd och CE-märkt i överensstämmelse med R&TTE direktivet.

garanti

Ett års garanti lämnas till ursprungliga konsumenten av PhonicEar Logia för denna produkt.

Tidsperiod för garanti

Garantin börjar gälla fr.o.m inköpsdagen och gäller ett år framåt, så länge utrustningen förblir ursprungssägarens.

Garantin omfattar följande

Om produkten pga fel gällande tillverkning eller design inte fungerar tillfredställande, täcks reparationen, reservdelar och utfört arbete av garantin. Detta gäller under förutsättning att produkten har hanterats och använts enligt anvisningar. Kunden står för transportkostnaden till serviceverkstaden. Om reparation ej är genomförbar ersätts, efter överenskommelse mellan tillverkare och kund, varan med en likvärdig.

Garantin omfattar ej följande

Den ettåriga garantin omfattar ej:

- 1** Produkten fungerar dåligt pga misskötsel, försummelse, eller olyckshändelse.
- 2** När tillbehör som finns angivna i produktbroschyren, skickas tillbaka senare än 90 dagar från inköpsdatumet.
- 3** Alkaline batterier (om tillämpligt).
- 4** Hjälpmedlen har kopplats ihop, installerats, använts, eller anpassats i strid med gällande instruktioner som angetts av tillverkaren.
- 5** Skada eller följdskada som uppstått pga försening eller förlust av hjälpmedel. Denna garanti är strikt begränsad till reparationer och utbyte av hjälpmedel under gällande villkor.

PhonicEar Logia förbehåller sig rätten att ändra design eller konstruktion på samtliga hjälpmedel utan att ådra sig några skyldigheter att byta ut tidigare sålda enheter.

Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörcentral/återförsäljare kan ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörcentral/återförsäljare för mer information.

Om du behöver service

Om du behöver service inom tiden för garantin, var noga med att förpacka hjälpmedlet ordentligt för att undvika skador och sänd paketet till din hörcentral/återförsäljare (se information på baksidan). Sänd med ditt kvitto, en felbeskrivning, ditt fullständiga namn, fakturaadress och telefonnummer.


WAKE toiminta

WAKE on PUZZLE järjestelmän tärustin- ja herätyshälytin. Voimakkaan ulkoisen täristimen avulla WAKE herättää käyttäjän herätyskellon soidessa.

WAKE pystyy myös vastaanottamaan hälytyksiä PUZZLE järjestelmän lähettimistä (DETECT ja/tai OBSERVER). WAKE voi vastaanottaa seitsemän erilaista hälytystä paristovaihtoilmoituksen lisäksi. Jokaisella hälytyksellä on oma tärinätapansa, joten ne on helppo erottaa toisistaan. Nämä erilaiset tärinätavat säädetään lähettimistä (DETECT ja/tai OBSERVER).

WAKEN osat

- ① 12V AC liitäntä
12V:n muuntajaa varten
- ② tärustinliitäntä
Täristimen liittämistä varten
- ③ koodisäädin
Laitekohtaisen koodin
säätäminen

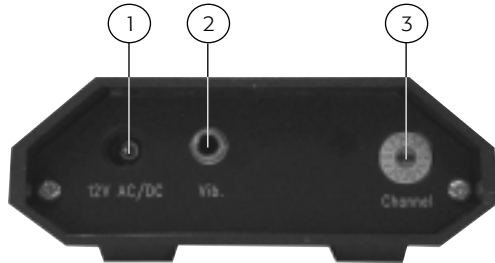

Takaosa

- ④ merkkivalo
Osoittaa, että laite on auki
- ⑤ mikrofonin herkkyden
säädin
Säädetään mikrofonin
herkkyys




Etuosa




Pohja

WAKE lisäosat (sisältyvät toimitukseen)

- ⑥ täristin
Tärisee herätyskellon soidessa tai kun WAKE vastaanottaa jonkin hälytyksen PUZZLEN lähettimistä

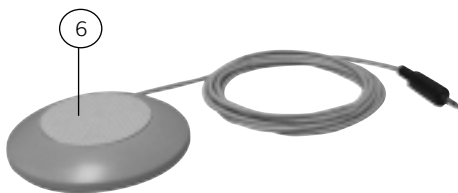

- ⑦ muuntaja
Verkkovirtaliitäntä WAKE yksikölle

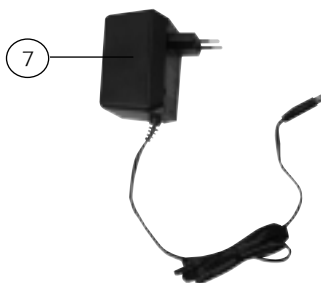


- ⑧ ruuvimeisseli
Laitekohtaisen koodin ja mikrofonin herkkyyden säätämiseksi



WAKE lisävarusteet (ostettava erikseen)

- ⑨ paristovarmistin
Tuottaa virran WAKE yksikköön sähkökatkoksen tapahtuessa

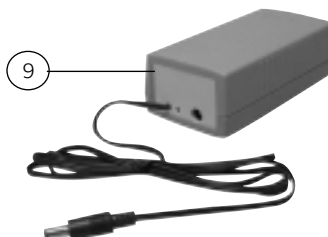

- ⑩ WAKE kello


WAKE asennusohje

1 WAKEn paikka



WAKE laitetaan yöpydälle, mikrofoni niin lähellä herätyskelloa kuin mahdollista.

2 muuntajan liitäntä

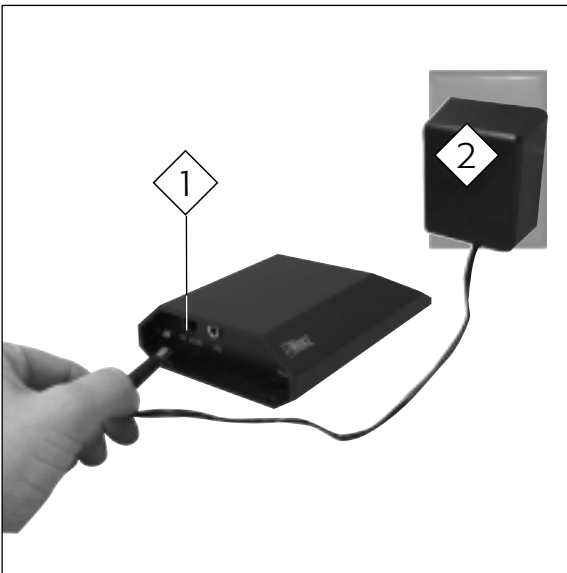

1 Kiinnitä muuntajan johto WAKE takaosan kohtaan **12V AC**.

2 Liitä muuntaja verkkovirtaan. Punaisen lampun WAKEn etuosassa tulisi syttyä.

WAKE asennus

3 täristimen kytkentä



Kytke täristimen johto WAKEn takana olevaan **Vib** liitäntään.

4 täristimen paikka



Laita täristin tyynyn alle.

5 laitekohtaisen koodin valinta



Käytä WAKEn takana olevaa **Channel** säädintä laitekohtaisen koodin asettamiseksi.

HUOMAA: *Kaikkiin muihin käytössä oleviin PUZZLE laitteisiin tulee säätää sama koodi.*

HUOMAA: *Käytä mukana olevaa ruuvimeisseliä säätääksesi koodin.*

6a mikrofonin herkkyuden säätäminen



Muuta herkkyyttä säätämistä, jotka näkyvät WAKEn pohjassa olevissa pitkulaisissa aukoissa.


Käännä säädintä vastapäivään pienentääksesi herkkyyttä ja myötäpäivään suurentaaksesi herkkyyttä.

Säädintä tulisi kääntää vain hieman kokeilujen välillä.

HUOMAA: *WAKEn herkkyys on tehtaalla säädetty ja sitä saa muuttaa vain mikäli tapahtuu väärää hälytystä tai herätyskello ei aktivoi tärähtintä.*


HUOMAA: *Käytä mukana olevaa ruuvimeisseliä säätämiseen.*

6b) mikrofonin herkkyuden säätäminen

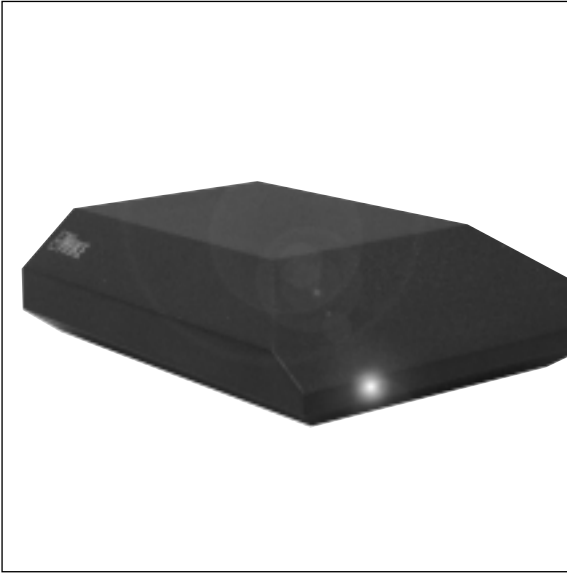

Herkkyys on oikein säädetty jos WAKEn etupuolella oleva punainen lamppu vilkkuu tai jos tärustin toimii herätyskellon soidessa.

7) paristovarmistimen (lisävaruste) asennus

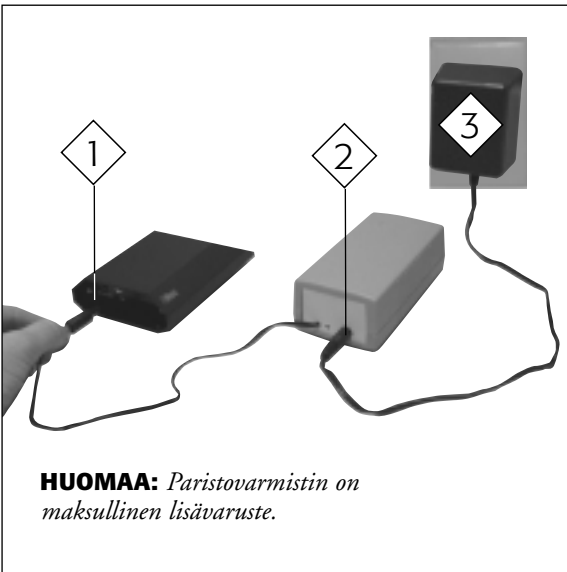


Paristovarmistin varmistaa, että WAKE toimii vaikka sähköjakalessa on häiriötä

- 1 Kytke paristovarmistimen johto WAKEn takaosassa olevaan liitäntään **12V AC**.
- 2 Kytke muuntajan johto paristovarmistimen liitäntään.
- 3 Kytke muuntaja verkkovirtaan.

Sekä WAKE yksikön etuosassa olevan punaisen lampun että paristovarmistimen päädysssä olevan vihreän lampun tulisi syttyä.

8 paristovarmistimen toiminta

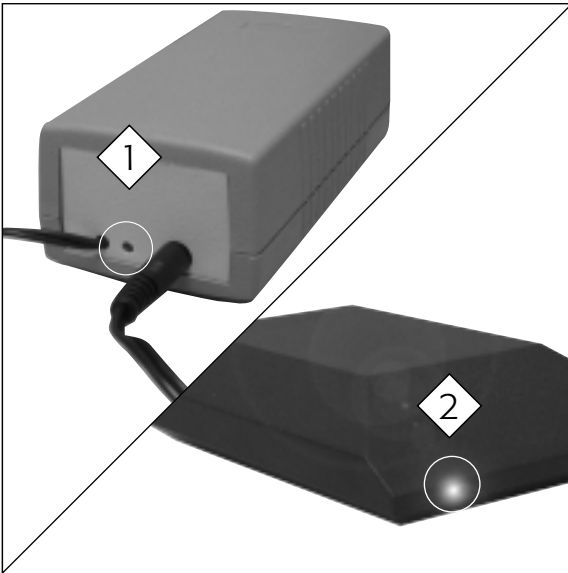

1 Sähkökatkoksen tapahtuessa paristovarmistimen päässä oleva vihreä lamppu sammuu.

2 WAKEn etuosassa oleva punainen lamppu jatkaa palamista.

Paristovarmistimen ollessa täyteen ladattu WAKE toimii sen varassa 24 tuntia lepotilassa ja noin kolme minuuttia täristimen aktivoituessa.

Paristovarmistin latautuu automaattisesti, kun sähkökatkos on ohi.

vian paikallistaminen

Jos WAKE ei toimi tyydyttävästi, kokeile seuraavaa:

Punainen lamppu WAKEN etuosassa ei syty:

- Tarkista onko muuntaja verkkovirrassa.

WAKEN punainen lamppu syttyy, mutta tärustin ei toimi, kun jokin PUZZLEN lähettimistä aktivoituu:

- Tarkista, että WAKEN ja PUZZLEN lähettimien laitekohtainen koodi on sama. Katso 5.

WAKEN punainen valo syttyy ja tärustin toimii PUZZLEN lähettimen aktivoituessa, mutta ei herätyskellon soidessa:

- Tarkista, että mikrofonin herkkyys on oikein säädetty. Katso 6a ja 6b.

Tärustin toimii ilman syytä:

- Tarkista, että mikrofonin herkkyys on oikein säädetty. Katso 6a ja 6b.
- Muuta laitekohtainen koodi **Channel** säätimestä WAKEN takaosassa. Katso 5.

Jos sinulla on edelleen ongelmia tarkistettuasi yllä olevat asiat, ota yhteys laitteen myyjään tai maahantuojaan.

testaukset ja hyväksynnät

WAKE on hyväksytty ja CE merkitty T&TTE direktiivin mukaan.

takuu

Laitteella on ensimmäisestä käyttöönotosta alkava 1 vuoden rajoitettu takuu.

Takuuaika

Takuu alkaa päivästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä ottaa sen käyttöönsä ja on voimassa kalenterivuoden ollessaan saman alkuperäisen käyttäjän hallinnassa.

Mitä takuu kattaa

Mikä tahansa laitteen elektroninen osa, joka ei toimi oikein normaalikäytössä johtuen teko-, tuotanto- tai suunnitteluvirheestä, korvataan tai korjataan veloituksetta, kun laite palautetaan maahantuoijalle. Kuljetuksen maksaa laitteen käyttäjä. Jos laitetta ei voida korjata, koko laite saatetaan vaihtaa vastaavaan laitteeseen asiakkaan ja maahantuojan yhteisellä sopimuksella.

Mitä takuu ei kata

Tätä yhden vuoden takuuta ei sovelleta:

- 1 jos laitetta on käytetty tai hoidettu väärin tai vika johtuu onnettomuudesta
- 2 laitteen ulkopuoliseen osaan, jota ei ole palautettu 30 päivän kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä
- 3 paristoihin
- 4 jos laite on kytketty, asennettu, säädetty tai sitä on käytetty maahantuojan antamista ohjeista poiketen
- 5 vahinkoihin, jotka aiheutuvat laitteen katoamisesta tai toimintahäiriöistä. Takuu rajoittuu ainoastaan ja vain tämän laitteen korjaamiseen tai vaihtamiseen
- 6 kuljetusvahinkoon, ellei vahingosta ole ilmoitettu rahdin kuljettajalle ja laitetta palautettu vahinkoilmoituksen kanssa lähettäjälle


PhonicEar Logia pidättää oikeuden tehdä muutoksia kaikkien valmistamiensa laitteiden muotoiluun tai rakenteeseen koska tahansa, veloituksetta tehdä muutoksia aikaisemmin valmistettuihin laitteisiin. Tämä takuu korvaa kaikki aikaisemmin annetut takuut. Kaikki muulla tavoin ilmaistut tai saadut takuut lakkaavat välittömästi tämän takuun luovuttamisesta. Kenelläkään laitetta myyvällä tai asentavalla yrityksellä tai henkilöllä ei ole oikeutta laajentaa yllä olevaa takuuta myydessään tai käyttäessään valmistamiemme laitteita.

Yllä oleva takuu ei vaikuta mihinkään laillisiin oikeuksiin, joita kansallinen lainsäädäntö kulutus-tavaroiden myynnistä antaa.

Jos tarvitset huoltoa

Jos laite tarvitsee huoltoa tai takuun alaisia korjauksia, pakkaa laite huolellisesti vahinkojen välttämiseksi ja palauta se maahantuoijalle (katso osoite takakannesta). Ilmoita mitä kautta olet saanut laitteen tai liitä mukaan ostokuitti tai vastaava, yksilöity selvitys viasta, nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Your local dealer:



europe: +45 3917 7101 • **website:** www.phonicearlogia.com