
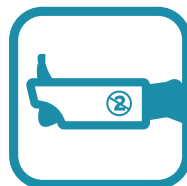


# DECUHEEL™

THE CURE IS CARE

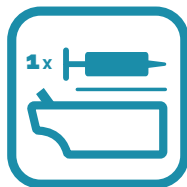

Decumed ApS · Skovringen 3 · DK - 2950 Vedbæk · +45 40168632 · sb@decumed.com

[WWW.DECUMED.COM](http://WWW.DECUMED.COM)

Version 082014





## BRUGERMANUAL



Decuheel oppustelig patientspecifik hæløfter

- Hæløfteren må kun anvendes til forebyggelse af hælssår, i forbindelse med behandling af hælssår og til elevation af hæl. Fold hæløfteren ud. Indfør pumpespidsen i den selvlukkende ventil. Pump hæløfteren 3/4 op, ikke mere. Hæløfteren må ikke være fuldt oppustet, da den så bliver hård til skade for patienten og fordi den kan blive beskadiget. Hæløfteren er nu klar til anvendelse. Anbring patientens fod i den oppustede hæløfter.
- Fodsålen skal hvile mod den del, der er markeret med en tegnet fod på hæløfteren. Læggen skal bæres af den store luftfyldte del i bunden.
- Hælen skal være løftet over underlaget (madrassen). Juster lufttrykket så den korrekte løftehøjde af hælen opnås (1-2 cm), dette kan ske mens patientens ben bliver liggende i hæløfteren.
- Trykket i hæløfteren sænkes ved hjælp af den medfølgende pind, der forsigtigt indføres i ventilen, så luft lukkes ud indtil ønsket tryk er opnået. Bændlet lukkes. OBS: Bændlet må ikke stramme.
- Før bortskaffelse kan hæløfteren punkteres, f.eks. ved afklipning af et hjørne.
- Bortskaffes som almindelig dagrenovation.
- Hæløfteren bruges direkte mod huden. Hæløfteren er patientspecifik og må ikke bruges til patient nummer 2. Ved tilsmudsning af hæløfteren skal den erstattes af en ren hæløfter.

Indeholder ikke ftalater



## ADVARSEL

- Ved for højt tryk i hæløfteren kan den bryde med højt lydtryk til følge.
- Hæløfteren må kun fyldes med atmosfærisk luft.
- Fyldning af hæløfteren med andre luftarter kan medføre brandfare.
- Hæløfteren må ikke komme i direkte kontakt med sår på grund af infektionsrisiko.
- Vedligehold altid korrekt tryk i hæløfteren. Ved manglende tryk i hæløfteren er der risiko for at tryksår kan opstå.
- Hæløfteren må kun anvendes i oppustet tilstand.
- Må ikke anvendes i nærheden af åben ild.
- Defekte hæløftere skal straks kasseres.

# ONEMED

#### Distributer:

OneMed A/S  
P.O. Pedersens Vej 16  
DK-8200 Aarhus N  
Denmark

Office (+45) 86 109 109  
Fax (+45) 86 109 209  
info.dk@onemed.com  
www.onemed.dk