



CARY Base

Brugervejledning

Art. nr: 508900

DK 1.0

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Om CARY Base	4
Erklæret formål	4
Om dette dokument	4
Oversigt over CARY Base	5
Kom i gang med CARY Base	6
Placering CARY Base i hjemmet	6
Start CARY Base	6
Indstilling af CARY Base	6
Brug CARY Base	7
Brug hovedvisningen	7
Brug påmindelser	7
Skift lydstyrke for talestøtte	7
Dagsintervaller	8
Tilpas CARY Base	9
Gå til menuen Power	9
Ændring af indstillingerne	10
At vælge display-information	11
Administrer kalenderen	12
Tilslut eksternt udstyr	15
Vedligeholdelse	16
Kontrollér for nye programversioner	16
Gendannelse til fabriksindstillinger CARY Base	16
Rengøring CARY Base	16
Fejlfinding	17
Opbevaring og bortskaffelse	18
Produktspecifikationer	19
Vigtig information	20
Sikkerhedsdefinitioner	20
Kontaktoplysninger	23

Introduktion

Om CARY Base

CARY Base er et kalenderur til personer, der har brug for ekstra hjælp til at holde styr på dagen og til at huske ting. Skærmen viser dato, ugedag, tidspunkt, og om det er morgen, dag, aften eller nat. Du kan få informationerne oplæst ved at trykke på skærmen eller ved at bruge en styrekontakt.

Det er muligt at vise brugerens daglige aktiviteter på skærmen og at give personlige påmindelser på de ønskede tidspunkter. Kalenderen administreres direkte på enheden eller via webtjenesten myAbilia.

For at imødekomme brugerens behov kan mængden af information på displayet reduceres, og sproget kan indstilles til et af de mange tilgængelige sprog.

Erklæret formål

CARY Base er et kalenderur, der er beregnet til at yde støtte til personer, der har mangler i tidsorientering og hukommelse.

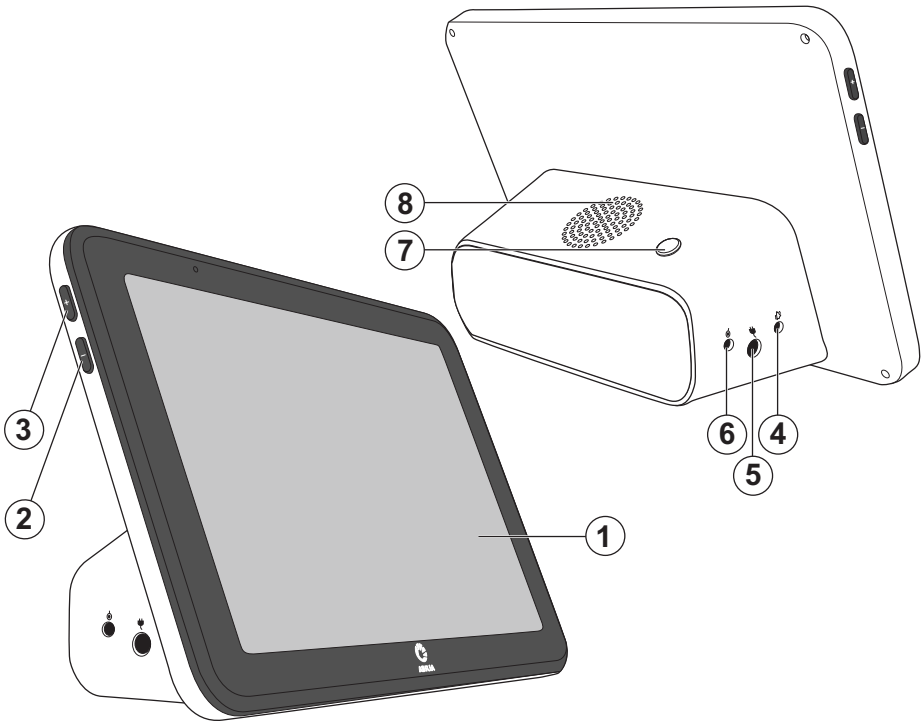
CARY Base er beregnet til indendørs brug i hjemmet.

Om dette dokument

 Læs de vigtige oplysninger, på side 20 før du bruger produktet.

I dette dokument lærer du, hvordan du starter og personaliserer produktet CARY Base for den person, der skal bruge det.

Oversigt over CARY Base



1. Display med touchskærm
2. Lydstyrke -
3. Lydstyrke +
4. Relæudgang til udsendelse af påmindelsessignal
5. Strømskik
6. Stik til kontaktindgang (tilbehør)
7. Tænd-/slukknop
8. Højttaler

Inkluderede dele

- CARY Base
- Strømadapter

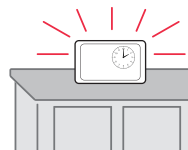
Inkluderede dokumenter

- Brugervejledning (dette dokument)

Kom i gang med CARY Base


Placering CARY Base i hjemmet


Beslut dig for, hvor du vil CARY Base placere den i hjemmet. Placer den et sted, hvor den er nem at se, f.eks. på køkkenbordet. Sørg for, at der ikke er nogen reflekser fra lys eller vinduer på displayet.




Start CARY Base

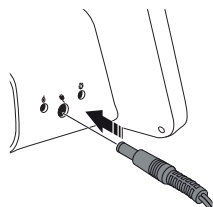⚠ ADVARSEL: Brug kun den strømadapter, der leveres med CARY Base.



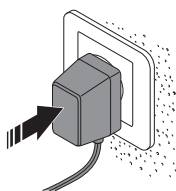1. Slut kontakten til strømstikket, der er markeret med .



2. Slut strømadapteren til en stikkontakt.

Indstilling af CARY Base

Når du starter CARY Base for første gang, bliver du guidet til at indstille dit foretrukne sprog, dato og klokkeslæt. Hvis du ønsker det, kan du også ændre de oplysninger, der vises på skærmen.

Se *Ændring af indstillingerne* på side 10 for at få flere oplysninger.

Brug CARY Base

Brug hovedvisningen

- Se dags dato og klokkeslæt på displayet.
- Se dagens aktiviteter.

Denne funktion er kun tilgængelig, når dagplanen er aktiveret i indstillingerne.

- Tryk på displayet for at høre de viste oplysninger.

Denne funktion er kun tilgængelig, når dit valgte sprog har taleunderstøttelse, og taleunderstøttelse er aktiveret i indstillingerne.



Brug påmindelser

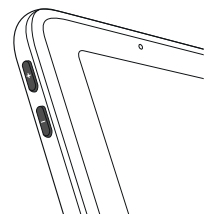
Der vises en påmindelse, når aktiviteten starter. Hvis du ikke selv lukker påmindelsen, lukker den automatisk efter 30 minutter.

- Tryk på et vilkårligt sted på displayet for at stoppe påmindelsessignalet.
- Tryk på Afspil for at gentage påmindelsen.
- Tryk på OK for at lukke påmindelsen.



Skift lydstyrke for talestøtte

Du kan ændre lydstyrken for talestøtte via knapperne + og - på siden af CARY Base.



Dagsintervaller

CARY Base viser den del af dagen, der svarer til dagsintervallerne. Dagsintervallerne kan ændres, se *Ændring af indstillingerne* på side 10.

Dagsintervallerne er forprogrammeret som følger:

- Tidlig morgen: 06:00–09:00
- Formiddag: 09:00-12:00
- Eftermiddag: 12:00-18:00
- Aften: 18:00-23:00
- Nat: 23:00-06:00

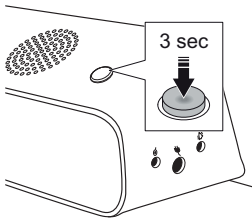
I nattetimerne reduceres displayets lysstyrke automatisk. Hvis Mørk baggrund er valgt, er farven på baggrunden mørk i nattetimerne.

TIP: Du kan slukke for displayet ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Displayet lyser op for påmindelser.

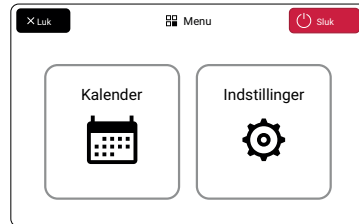
Tilpas CARY Base

Gå til menuen Power

Menuen Power giver dig adgang til Indstillinger og Kalender. Du kan også deaktivere CARY Base fra denne menu.




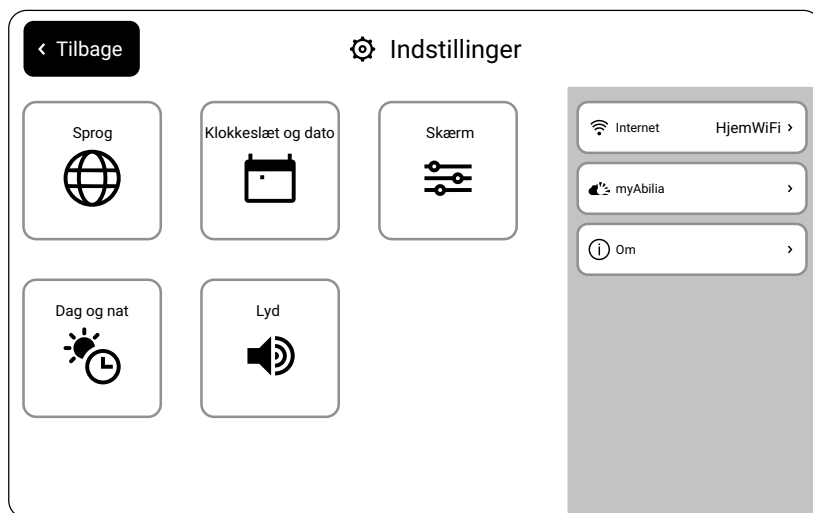
1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde.



2. Menuen Power åbnes.


Ændring af indstillingerne


Hvis du vil ændre indstillingerne for CARY Base, skal du gå til menuen Power og trykke på .




 **Sprog**
Vælg sprog. De sprog, der er markeret med , understøtter tale.


 **Klokkeslæt og dato**
Indstil dato og klokkeslæt.

 **Skærm**
Se *At vælge display-information* på side 11.


 **Dag og nat**
Skift dagsintervaller, indstil skærmens lysstyrke, og tænd for mørk baggrund.

EKSEMPEL: Indstil starttidspunktet for morgenen til dit normale opvågningstidspunkt.

 **Lyd**
Tilpas talestøtten og påmindelsessignalet.


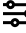
 **Internet** (valgfrit)
Opret forbindelse til Internettet for:


- At få dato og klokkeslæt automatisk.
- Brug myAbilia.


 Valgfrit: **myAbilia**
At fjernopdatere kalenderen, se *Fjernsupport via myAbilia* på side 14.


 **Om**
Se *Kontrollér for nye programversioner* på side 16.


At vælge display-information

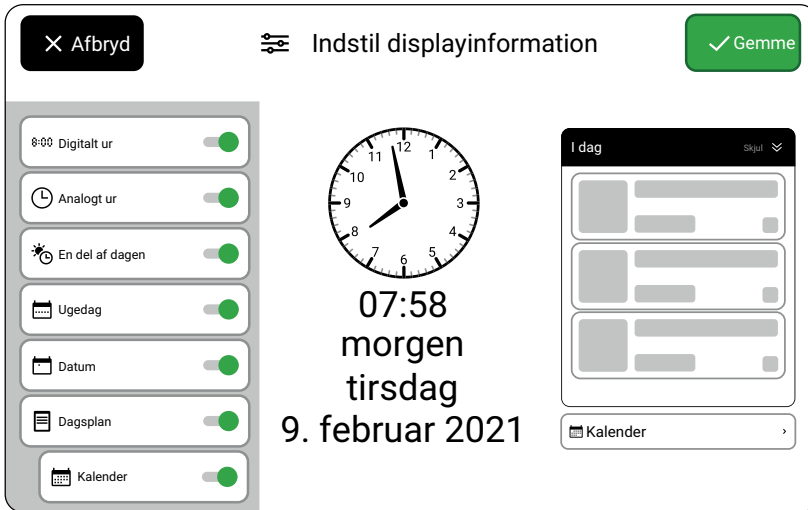Vælg, hvilke oplysninger der skal vises på displayet, ved at gå til menuen Power og trykke på  og derefter trykke på .




 **Digitalt ur**
Vis eller skjul det digitale ur.


 **Analogt ur**
Vis eller skjul det analoge ur.

 **En del af dagen**
Vis eller skjul den del af dagen, f.eks. morgen eller aften. Dagsintervallerne indstilles i Dag og Nat, se *Ændring af indstillingerne* på side 10.

 **Ugedag**
Vis eller skjul ugedagen.

 **Dato**
Vis eller skjul datoen.

 **Dagsplan**
Vis eller skjul dagsplanen med dagens aktiviteter.



 **Kalender**
Vis eller skjul knappen Kalender, se *Administrer kalenderen* på side 12.

TIP: Når du reducerer mængden af information på displayet, CARY Base bliver det endnu enklere og tydeligere.

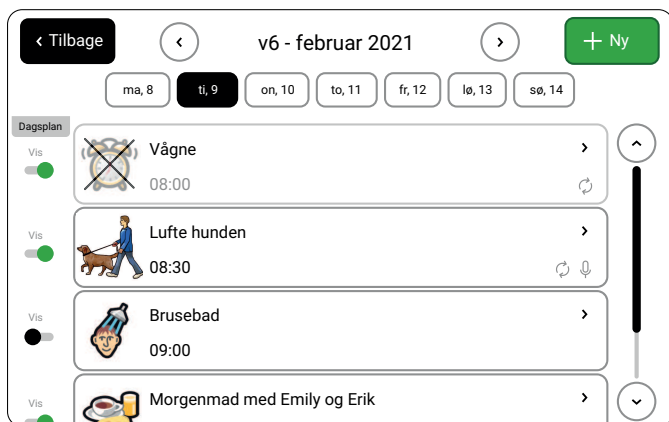
Administrer kalenderen

⚠ ADVARSEL: Må ikke anvendes CARY Base som eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.

Opdater visningen Kalender

Gå til menuen Power for at opdatere kalenderen. Tryk på , og tryk derefter på  eller tryk på knappen Kalender i hovedvisningen (hvis tilgængelig).


Her listes alle aktiviteter i kronologisk rækkefølge pr. dag. Tidligere aktiviteter er overstreget i listen.




Vælg dag
 Tryk på en dag for at se dens aktiviteter.

Forrige uge
 Gå til forrige uge.

Næste uge
 Gå til næste uge.

Dagsplan
 Angiver, om aktiviteten vises i dagsplanen.

Tilføj aktivitet
 Se *Tilføj en aktivitet* på den modstående side.
 Se *Rediger eller slet en aktivitet* på side 14 for at ændre eller slette en aktivitet.

TIP: Begræns antallet af aktiviteter i dagsplanen for at fremhæve aktiviteter af stor betydning for brugeren.

Tilføj en aktivitet

For at tilføje en aktivitet skal du gå til Kalender, se *Gå til menuen Power* på side 9.

Navn Det navn, der vises i dagplanen. Det skal være beskrivende og kort.

Beskrivelse Yderligere oplysninger, der vises i påmindelsen.



Dato

Datoen for aktiviteten.



Afspil tekst ved alarm

Navnet og beskrivelsen læses højt, når påmindelsen starter.



Tidspunkt

Tidspunktet for start af aktiviteten.



Optag besked

Meddelelsen afspilles, når påmindelsen starter. Dette er ikke muligt, når Afspil tekst er tændt.



Gentagelse

Hvis og hvordan aktiviteten gentages.



Tilføj billede

Vælg et billede fra biblioteket for at visualisere aktiviteten. Se *Fjernsupport via myAbilia* på side 14 hvordan du bruger dine egne billeder.



Vis i dagplan

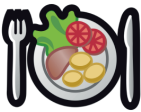
Om en aktivitet vises i dagens plan eller kun som en påmindelse.

Rediger eller slet en aktivitet

For at redigere eller slette en aktivitet skal du gå til Kalender, se *Gå til menuen Power* på side 9. Tryk på den aktivitet, du vil redigere eller slette.

✕ Afbryd
✎ Rediger aktivitet
✓ Gemme

Billede



↻ Lave om
✖ Fjerne

Navn

Frokost >

Beskrivelse

📄 Optag besked
0:23 sek >

Dato 09-02-2021 >

Tid 11:45 >


Gentagelse Enkelt >


Vis i dagsplan

afspil tekst ved alarm

🗑 Slet

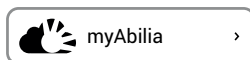
 **Ændre**
Skift det aktuelle billede.



 **Slet aktivitet**
Slet aktiviteten.

 **Fjerne**
Fjern det aktuelle billede.

Fjernsupport via myAbilia

Med kan myAbilia du fjernopdatere kalenderen og tilføje billeder til billedbiblioteket.





For at konfigurere forbindelsen mellem CARY Base og myAbilia skal du gå til menuen Power, trykke på  og derefter trykke på . Følg anvisningerne på displayet.

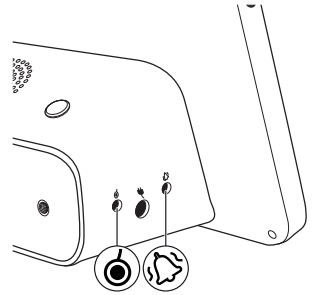
Hvis du ikke har en myAbilia brugerkonto, kan du oprette en på myabilia.com. Du skal bruge en e-mailadresse til dette.

Tilslut eksternt udstyr

⚠ ADVARSEL: Brug kun CE-mærket udstyr.

Følgende eksterne udstyr kan tilsluttes CARY Base:



- *Styrekontakt*
Bruges i stedet for at trykke på skærmen. For eksempel for at få stemmestøtte eller for at deaktivere påmindelser. Tilslut styrekontakten til -stikket.
- *Udstyr til udsendelse af påmindelsessignal*
For eksempel en vibrationsalarm eller indikatorlampe. Slut udstyret til relæudgangen .



Kontakt din produktleverandør for rådgivning om eksternt udstyr, se www.abilia.com/en/abilias-world/distributors.



Vedligeholdelse

Kontrollér for nye programversioner


1. Gå til menuen Power.
2. Tryk på .
3. Tryk på .
4. Tryk på Check for opdateringer.
5. Tryk på Opgrader, hvis der er en ny version.

Gendannelse til fabriksindstillinger CARY Base

Det kan være nødvendigt at nulstille CARY Base i forbindelse med reovering af produktet eller fejlfinding. Gendannelse til fabriksindstillinger fjerner alle indstillinger og personlige oplysninger.

1. Gå til menuen Power.
2. Tryk på .
3. Tryk på .
4. Tryk på Nulstilling.

Rengøring CARY Base

 **ADVARSEL:** Må ikke nedsænkes CARY Base i vand.

Rengøres CARY Base med en let fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel.

CARY Base kan rengøres med sprit.

Fejlfinding


Hvis du har brug for support til CARY Base, henvises til *Kontaktoplysninger* på sidste side i denne brugervejledning eller til www.abilia.com/intl/manuals.

Problem	Årsag	Løsning
En indstillet påmindelse slukker ikke.	Apparatet er ikke tændt.	Se instruktionerne i kapitel <i>Start CARY Base</i> på side 6.
	Påmindelseslydstyrken er indstillet til 0.	Forøg påmindelseslydstyrken, se <i>Ændring af indstillingerne</i> på side 10.
Uret viser den forkerte tid.	Uret er ikke synkroniseret.	Opret forbindelse til Internettet.
		Indstil tiden manuelt, se <i>Ændring af indstillingerne</i> på side 10.
Displayets lysstyrke er for høj om natten.	Indstillingen Mørk baggrund er ikke slået til.	Tænd for Mørk baggrund, se <i>Ændring af indstillingerne</i> på side 10.
Skærmen lyser for tidligt.	Dagsintervallerne er ikke angivet som foretrukne.	Skift dagsintervaller, se <i>Dagsintervaller</i> på side 8.
Jeg kan ikke optage en meddelelse for en aktivitet.	Indstillingen for Afspil tekst ved alarm er sat til <i>Til</i> .	Sæt Afspil tekst ved alarm til <i>Fra</i> i aktiviteten.
Jeg kan ikke søge efter opdateringer.	CARY Base har ikke forbindelse til internettet.	Opret forbindelse til Internettet, se <i>Ændring af indstillingerne</i> på side 10
Produktet fungerer ikke korrekt.		Sluk CARY Base og start den igen, se <i>Gå til menuen Power</i> på side 9.
		Udfør en gendannelse til fabriksindstillinger, se <i>Gendannelse til fabriksindstillinger CARY Base</i> på side 16.
		Kontakt support.

Opbevaring og bortskaffelse

Produktet skal opbevares indendørs ved stuetemperatur og må ikke udsættes for fugt.

BEMÆRK: Sluk for strømmen, CARY Base før strømkablet fjernes.

For at slukke for CARY Base skal du gå til menuen Power og trykke på .

CARY Base gemmer indstillingerne i ca. et år. Hvis CARY Base gemmes i længere tid, skal indstillingerne gentages.



Produktet indeholder elektriske komponenter, der skal genanvendes. Bortskaf produktet på et egnet sted.

Produktspecifikationer

CARY Base

Mål, HxBxD	207 x 137 x 74 mm
Vægt	520 g
Vindue	8" med 1280 x 800 opløsning
Strømforsyning	5 V 2 A
Strømforbrug	Maks. 10 W
Reservebatteri	1 x CR2032 3 V og 1 x 2000 mAh 3,7 V
Højttaler	Maks. 82 dB på 1 meters afstand
Netværk	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz
Bluetooth®	Bluetooth v 4.2
Operativsystem	Android 8.1
IP-klasse	IP31
Miljøbetingelser for brug	+5 °C til +35 °C. Maksimalt 90 % relativ luftfugtighed
Stik til kontaktindgang	3,5 mm
Relæudgang til udsendelse af påmindelsessignal	3,5 mm
Anslået levetid	5 år

Tilbehør

CARY Base fås med følgende tilbehør:

- Strømadapter
- Eksterne kontakter

Du kan finde flere oplysninger om CARY Base og tilbehør hertil på www.abilia.com eller ved at scanne QR-koden.



Scan mig!

Vigtig information

Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne brugervejledning.

Sikkerhedsdefinitioner

⚠ ADVARSEL: Der er risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges.

⚠ FORSIGTIGHED: Der er risiko for beskadigelse af produktet, hvis instruktionerne ikke følges.

BEMÆRK: Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

TIP: Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet.

Sikkerhedsinstruktioner inden du bruger CARY Base

⚠ ADVARSEL: Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet.

- Brug kun den strømadapter, der leveres med CARY Base.
- Må ikke anvendes CARY Base som eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.
- Brug kun CE-mærket udstyr.
- Må ikke nedsænkes CARY Base i vand.

Alvorlige hændelser

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal denne rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land. En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført eller kunne have medført en patients, brugers eller en anden person død, midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en anden persons helbredstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.

Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr

CARY Base markedsføres som et teknisk hjælpemiddel til personer med handicap og er i overensstemmelse med alle nødvendige krav, bestemmelser og direktiver vedrørende medicinsk udstyr.

Produktansvar

Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971. Manualen og de tekniske specifikationer er udarbejdet i henhold til sikkerhedsvurderingerne i risikoanalysen. Tag altid højde for sikkerheden ved brug af produktet. Abilia AB er ikke ansvarlig for konsekvenser som følge af forkert brug eller installation af produktet. Enhver form for skade eller manipulation med produktet giver bortfald af rettigheder og fra beskrivelse af leverandørens ansvar. Produktets estimerede levetid gælder, når det anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner.

Kontaktoplysninger

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Det Forenede Kongerige

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Det Forenede Kongerige
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International

www.abilia.com/intl/get-products/distributors



508900_Brugerveiledning_CARY Base_DK juli, 2021



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com



ABILIA