


PIMPF

Den lille med den store effekt!

Produktnr.: PIMPF 3200 BL / IV / RD

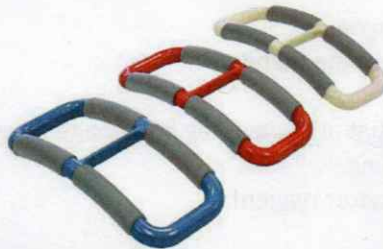

Kære kunde,

vi er glade for, at du har valgt et kvalitetsprodukt fra *rehastage GmbH*. Et godt forhold til vores kunder er af stor betydning for *rehastage*. Hvis du har spørgsmål om produktet, skal du kontakte din forhandler, behandlende læge eller terapeut for at sikre, at det passer til dig og opfylder dine behov.

- ⚠ **Af hensyn til din personlige sikkerhed skal du læse disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger produktet. Hvis der er forståelsesproblemer med de noter, advarsler og instruktioner, der er anført her, bedes du kontakte din specialforhandler for at undgå mulige skader eller materielle skader på grund af forkert betjening.**

Smid ikke disse instruktioner væk, så du kan bruge dem senere, hvis det er nødvendigt.

Tilsigtet anvendelse:

"PIMPF"-hjælpemidlet til siddende stilling er designet som et hjælpemiddel til plejepersonale, terapeuter og andet hjælpepersonale, der skal hjælpe personer med behov for hjælp til at rejse sig op fra en siddende stilling på en måde, der er skånsom for ryggen af den person, der hjælper.

Indikation:

Hjælpen til at rejse sig "PIMPF" kan anvendes til personer med behov for hjælp, som har begrænset evne til at rejse sig selvstændigt fra en siddende stilling på grund af nedsat eller nedsat mobilitet, uden aldersbegrænsning.

Kontraindikationer:

- ⚠ I princippet skal den person, der har brug for hjælp, være i stand til at støtte processen med at komme op på egen hånd og stå midlertidigt fri.
- ⚠ Der bør træffes yderligere sikkerhedsforanstaltninger for personer, der tilhører visse risikogrupper. Dette omfatter personer med en mental funktionsnedsættelse (herunder personer under påvirkning af medicin), meget høje personer eller personer med svær fedme samt enhver tilstand, der forstyrrer en kortvarig fristilling for den person, der har brug for hjælp.
- ⚠ Hvis den person, der har brug for det, lider af en sygdom eller skade eller tager medicin, der påvirker deres følelse af balance eller evne til at stå, skal du kontakte deres læge, før du bruger dette produkt. Forkert brug af produktet kan resultere i alvorlige læsioner eller personskade.

Sikkerhedsinstruktioner

"PIMPF" må kun bruges til at trække personer - op til en maksimal vægt på 120 kg - fra en stol, lænestol, bæk, seng eller andre standard-siddepladser til en stående stilling. Det er ikke egnet til at hjælpe folk fra en liggende stilling eller person, der sidder på gulvet, til en stående stilling. Begge personer skal have tilstrækkelig mobilitet og styrke i krop, arm og hænder.

Begge personer skal have begge fødder sikkert og skridsikkert på gulvet. Begge personer skal være i stand til at gribe håndtaget sikkert og skridsikkert. Løsn aldrig håndtaget, før begge personer er i en sikker position. Brug aldrig "PIMPF" med en person, der ikke kan stå uden hjælp.

Opretningshjælpen "PIMPF" er medicinsk udstyr i klasse I henhold til Europa-Parlamentets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Så nemt er det:

Hjælperen står foran den siddende person i armlængde.

Begge personer griber fast i siden af håndtaget med begge hænder.

Den siddende person læner sig lidt fremad.

Plejeren trækker nu den siddende fremad ved forsigtigt at bevæge sig lidt tilbage og eventuelt også trække forsigtigt i håndtaget i hans eller hendes retning.

Et lille vejetrin giver en ekstra gearingseffekt og beskytter ryggen!






Rengøringsinstruktioner:

Rengør opretningshjælpen "PIMPF" regelmæssigt med en fugtig svamp, mild sæbe og et husholdningsdesinfektionsmiddel. Tør det med en tør blød klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler såsom skuremælk eller pulver, dette kan føre til ødelæggelse eller beskadigelse af overfladerne.

Genbrug / levetid:

Opretningshjælpen "PIMPF" er ikke egnet til genbrug.

Forklaring af anvendte symboler, mærkning og oplysninger, der skal gives:

	EC REP	MD		
Fabrikant, fabrikantens navn og adresse	Fabrikantens bemyndigede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab	Medicinsk produkt	OBS! Oplysninger såsom advarsler eller forholdsregler	Importør

Med forbehold for tekniske ændringer

EC REP
EMERGO EUROPA
Prinsessegracht 20
2514 Ap Haag
Nederlandene

 Stander Inc.
2410 Kulturav Dr.
Se hele annoncen 8432
Hedensted Tj Campaya.dk
I dag 1.500 kr.
USA

 Rehasstage GmbH
Artlandstrasse 80
D-49610 Quakenbrück,
Tyskland
Tetland
E-mail: info@rehasstage.de

