

# Support – positioneringssele

## Support Pro serie

Vi er stolte af at kunne præsentere vores nye Support serie: Support Pro.

### Nyt materiale

Er mere slidstærkt og bibeholder sin stretchfunktion

### Længere skulderpolstringer

For en endnu bedre pasform

### Nye blødere bånd

Nemme at håndtere samt mere behagelige mod kroppen

### Individuel fremstilling

Bed os fremstille en sele efter dine ønsker og behov

### Nye bæltepuder

For bedre pasform og forskellige trækretninger

### Flere forskellige spænder

Stort udvalg af spænder til forskellige behov



## 1 Nyt design


Vi har nu udviklet og forbedret vores Support positioneringsbæltserie i 19 år, hvilket har givet os stor erfaring om positioneringsproblematikker. Vi er stolte af at kunne præsentere Support Pro serien. Disse nye seler og bæltter er lavet af et stærkere materiale, har flere funktioner og en mængde forskellige spænder at vælge imellem.



1



2

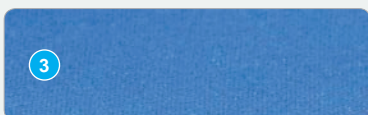


3

## 2 3 forskellige varianter

Nyt softmateriale!

1. **Soft, sort** Neoprenlignende materiale med stretchegenskaber.
2. **Ekklusiv** Kunstlæder.
3. **Soft, blå** Neoprenlignende materiale med stretchegenskaber.

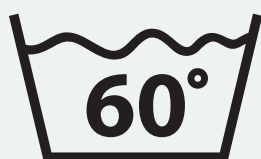


## 3 Vask og vedligeholdelse

- ▶ Samtlige seler kan vaskes ved 60°.
- ▶ Samtlige materialer er vand- og smudsafvisende og enkle at tørre af.



## 4 Fleksibel afprøvningspakke

- ▶ Forenkler afprøvningen
- ▶ Hænges enkelt op på f.eks. en dør
- ▶ Indeholder alle seler, bæltter samt spænder

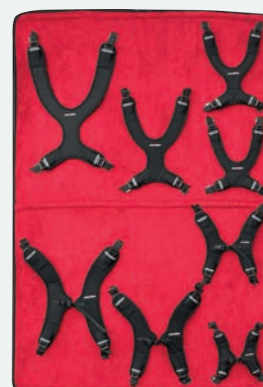

# Positioneringsbælter og seler

**Zitzi**  
**SUPPORT PRO**


- ✓ Forbedret igennem 19 år for at give stabilitet, tryghed og balance på rette sted
- ✓ Monteres enkelt på forskellige siddesystemer og kørestole

Sammenhæng mellem tal og mål:

1 = Diagonalt 2 = Bredde 3 = Højde



**Sternumstøtte**

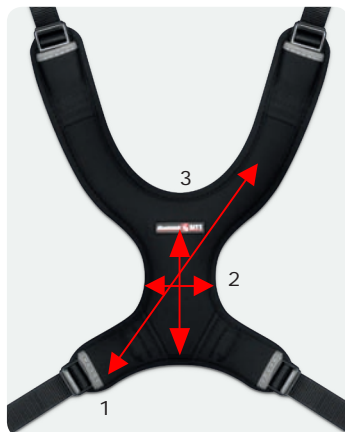


Sternumstøtte	1	2	3
X- Small:	23	7	10 cm
Small:	33	7	14 cm
Medium:	39	7	17 cm
Large:	51	7	20 cm

**Sternumstøtten** giver en koncentreret støtte over sternum.



**Sternumvest**

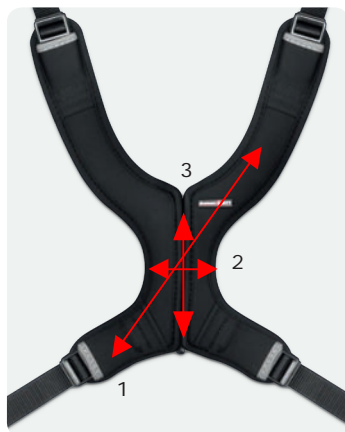


Sternumvest	1	2	3
X- Small:	23	7	10 cm
Small:	33	7	14 cm
Medium:	39	7	17 cm
Large:	51	7	20 cm

**Sternumvesten** giver en koncentreret støtte over sternum. Sternumvesten adskiller sig fra sternumstøtten ved at den har en gennemgående lynlås.



**Krydssele**

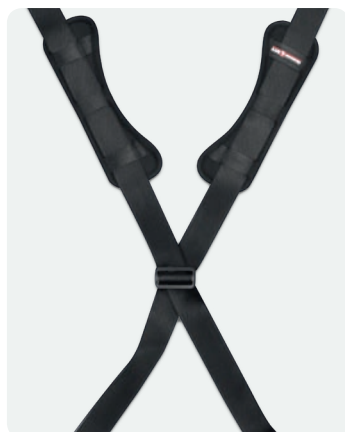

Krydssele	1	2
Mål, bæltepuder		
Small:	16	5 cm
Large:	25	7 cm

**Krydssele** giver støtte til skulderpartiet.



**H-sele**



H-sele	1	2
X- Small:	19,5	15-27 cm
Small:	26	17-31 cm
Medium:	34	18-38 cm
Large:	41	20-40 cm

**H-selen** giver støtte til både skulder og side. Kan eksempelvis bruges ved rotation for at være med til at holde skulderpartiet tilbage.

Varenr.				HMI-nr.	Produktnavn
Pro Soft	Ekklusiv	Soft sort	Soft blå		
374001	3751	37511	375111	39576	Sternumstøtte str. X-Small
374002	3752	37521	375211	30563	Sternumstøtte str. Small
374003	3753	37531	375311	30564	Sternumstøtte str. Medium
374004	3754	37541	375411	30565	Sternumstøtte str. Large
374006	3756	37561	375611	50609	Sternumvest str. X-Small
374007	3757	37571	375711	50610	Sternumvest str. Small
374008	3758	37581	375811	50611	Sternumvest str. Medium
374009	3759	37591	375911	50612	Sternumvest str. Large
374011	3761	37611	376111	30566	Krydssele str. Large
374012	3762	37621	376211	30567	Krydssele str. Small
374015	3783	37651	376511	43086	H-sele str. X-small
374016	3784	37652	376521	43087	H-sele str. Small
374017	3785	37653	376531	43088	H-sele str. Medium
374018	3786	37654	376541	43089	H-sele str. Large

### Fæste mellem skubbehåndtag

Fæste mellem skubbehåndtag bruges, når man skal montere en hovedstøtte eller en sternumstøtte og der ikke umiddelbart er mulighed for montering på den pågældende kørestolsryg.

Fæste mellem skubbehåndtag monteres rundt om kørestolens skubbehåndtag.

Passer rundt om såvel runde som firkantede rør med størrelsen 20–30 mm i diameter. Fæste til hovedstøtte indgår, som en del af produktet.

Varenr.: 7022



### Montering på stabil rygstøtte

Korrekt montering af positioneringsstøtten er vigtig for at sikre, at støtten får den rette funktion. Trækretningen på de øverste bånd skal være lige bag eller op ad fra skulderpartiet.

Spænderne monteres som vist på billedet. Hvis ryglænet slutter nedenfor skulderpartiet, findes der forhøjningsstænger, som tilbydes som tilbehør. De nedre fæstepunkter monteres nedad med medfølgende triglidespænde.



### SITTBELT Afprøvningspakke

Indeholder alle størrelser af hoftebæltet.

Spænder, bånd samt vore triglide følger med pakken til en fleksibel afprøvning.



## SittBelt

Et hoftebælte kan være mindst lige så vigtig som en trykafastende siddepude. SittBelt med fire fastgørelsespunkter anvendes for at fastholde bækkenet i rette position, samt modvirke fremadskridning og dermed unødigt højt tryk på halebenet og sædeknoglerne, eller træk i huden. Tilbydes i materialet Soft.

Tilbydes i fire forskellige udformninger.

- SittBelt L med S742 spænde
- SittBelt L med autospænde
- SittBelt L med S40 spænde
- SittBelt S med fixlås



## SittBelt Comfort

Positioneringsbælte til kørestole, hvor der kun er plads til et fæstepunkt i hver side. Comfortbæltet er et godt alternativ til det traditionelle SittBelt. Tilbydes i materialet Soft.

Tilbydes i to varianter.

- SittBelt Comfort L med S742 spænde
- SittBelt Comfort S med fixlås



## Forskellige spænder



**1 Spænde 742** Er let at justere på to sider

**2 Autospænde** Kraftigt spænde i metal

**3 Spænde S40** Stærkere end S742, knap på siden

**4 Spænde 740** Fixlås, standard på SittBelt

**5 Sikkerhedsspænde** Forhindrer uønsket åbning af bælte

**6 Flyspænde** Kraftig konstruktion i "flyspændemodell"

**7 Chromeline** Fleksibelt spænde i metal

### Varenr.

#### Pro Soft

#### Ekklusiv

#### Soft sort

#### Soft blå

374030	3791	37911	379111
374031	-	-	-
374032	3793	37931	379311
374033	-	-	-
374034	3792	37921	379211
374035	-	-	-

374041	-	-	-
374045	3794	37941	379411
374049	-	-	-

374050	-	37971	-
374051	-	37981	-

### HMI-nr.

### Produktnavn

30571	SittBelt med S742-spænde str. Large
30573	SittBelt med S740-spænde str. Large
51271	SittBelt med S40-spænde str. Large
30572	SittBelt med flyspænde str. Large
	SittBelt med autospænde str. Large
	SittBelt forstærket str. Large
53427	SittBelt str. M (725 spænde)
53428	SittBelt str. S (725 spænde)
53429	SittBelt str. XS (725 spænde)
53430	SittBelt Comfort Soft str. Large (S742)
53431	SittBelt Comfort Soft str. Small (Fixlås)

### Håndmanchet

Et hjælpemiddel for de brugere, som har besvær med at fiksere hånden/hænderne på styret/kørehåndtaget.

Tilbydes i Support Eksklusiv.

Tilbydes i størrelserne: Small, Medium, Large

#### Mål, håndens længde:

Small	0–100 mm
Medium	100–150 mm
Large	160 –220 mm



#### Varenr.

Pro Soft	Exklusiv	Soft sort	Soft blå
-	3775	-	-
-	3776	-	-
-	3777	-	-

#### HMI-nr.

#### Produktnavn

39899	Håndmanchet str. Small (stk.)
39899	Håndmanchet str. Medium (stk.)
39899	Håndmanchet str. Large (stk.)

### Armbind


Armbind monteres diagonalt og benyttes for at afhjælpe ufrivillige bevægelser samt for at hindre overstrækning af de pågældende led.

Tilbydes i Support Eksklusiv & Soft.

Tilbydes i størrelserne: Small, Large

#### Mål, bæltepuder:

Voksen / Large	200 – 50 mm
Barn / Small	160 – 50 mm

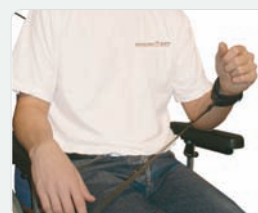

#### Vare-nr.

Pro Soft	Exklusiv	Soft sort	Soft blå
-	3781	37811	378111
-	3782	37821	378211

#### HMI-nr.

#### Produktnavn

30575	Armbind str. Large (sæt)
30576	Armbind str. Small (sæt)

### Ankelbespænding

Ankelbespændingen giver en stabil støtte for at forhindre ufrivillig supination og pronation af foden. Velcrobåndene gør det nemt at montere og afmontere ankelbespændingen.

Tilbydes i Support Eksklusiv & Soft.

#### Mål rundt om anklen:

Small	140 – 170 mm
Medium	170 – 200 mm
Large	200 – 250 mm



#### Varenr.

Pro Soft	Exklusiv	Soft sort	Soft blå
-	3771	37711	377111
-	3772	37721	377211
-	3773	37731	377311

#### HMI-nr.

#### Produktnavn

30568	Ankelbespænding str. Small (sæt)
30569	Ankelbespænding str. Medium (sæt)
30570	Ankelbespænding str. Large (sæt)


### Vedligeholdelse

Samtlige seler og bæltter kan vaskes ved 60°.



### Mulighed for individuel fremstilling og tilpasning

Efter egne ønsker og behov.

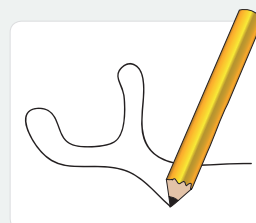

# Sædeseler

En sædesele kan holde bækkenet i rette position, samt modvirke fremadskridning og dermed unødigt højt tryk på halebenet og sædeknoglerne, eller træk i huden. Selerne monteres nemt og fås i forskellige størrelser og materialer.


## Sædesele, standard



- ✓ Fås i bomuld
- ✓ Fås i blødt kunstlæder (skai)
- ✓ Fås i neopren

### AxBxCxD

Gr. 1	(21x14x38x9)
Gr. 2	(26x20x44x12)
Gr. 3	(30x25x53x16)
Gr. 4	(40x30x60x20)

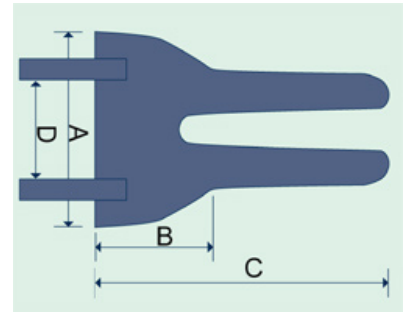


## Sædesele, kontur



- ✓ Fås i bomuld
- ✓ Fås i blødt kunstlæder (skai)
- ✓ Fås i neopren

### AxBxCxD

Gr. 1	(21x15x33x9)
Gr. 2	(26x18x36x12)
Gr. 3	(30x20x42x15)
Gr. 4	(40x25x55x20)

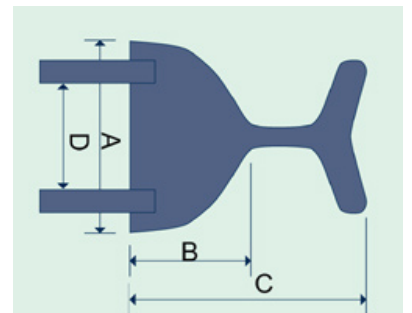


## Sædesele, T-model



- ✓ Fås i bomuld
- ✓ Fås i blødt kunstlæder (skai)
- ✓ Fås i neopren

### AxBxCxD

Gr. 1	(22x8x25x12)
Gr. 2	(26x11x31x14)
Gr. 3	(29x14x37x16)
Gr. 4	(31x15x42x18)

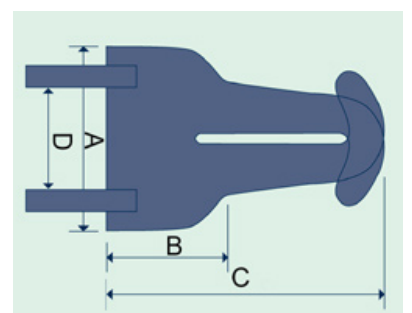

Varenr.	Navn
9111S	Sædesele, std. str. 1, sort bomuld
9112S	Sædesele, std. str. 1, sort neopren
9113S	Sædesele, std. str. 1, sort skai soft
9111T	Sædesele, T-model str. 1, sort bomuld
9112T	Sædesele, T-model str. 1, sort neopren
9113T	Sædesele, T-model str. 1, sort skai soft
9111K	Sædesele, kontur str. 1, sort bomuld
9112K	Sædesele, kontur str. 1, sort neopren
9113K	Sædesele, kontur str. 1, sort skai soft
9121S	Sædesele, std. str. 2, sort bomuld
9122S	Sædesele, std. str. 2, neopren sort
9123S	Sædesele, std. str. 2, sort skai soft
9121T	Sædesele, T-model str. 2, sort bomuld
9122T	Sædesele, T-model str. 2, neopren sort
9123T	Sædesele, T-model str. 2, sort skai soft
9121K	Sædesele, kontur str. 2, sort bomuld
9122K	Sædesele, kontur str. 2, sort neopren
9123K	Sædesele, kontur str. 2, sort skai soft
9131S	Sædesele, std. str. 3, sort bomuld
9132S	Sædesele, std. str. 3, sort neopren
9133S	Sædesele, std. str. 3, sort skai soft
9131T	Sædesele, T-model str. 3, sort bomuld
9132T	Sædesele, T-model str. 3, sort neopren
9133T	Sædesele, T-model str. 3, sort skai soft
9131K	Sædesele, kontur str. 3, sort bomuld
9132K	Sædesele, kontur str. 3, sort neopren
9133K	Sædesele, kontur str. 3, sort skai soft
9141S	Sædesele, std. str. 4, sort bomuld
9142S	Sædesele, std. str. 4, sort neopren
9143S	Sædesele, std. str. 4, sort skai soft
9141T	Sædesele, T-model str. 4, sort bomuld
9142T	Sædesele, T-model str. 4, sort neopren
9143T	Sædesele, T-model str. 4, sort skai soft
9141K	Sædesele, kontur, str. 4, sort bomuld
9142K	Sædesele, kontur, str. 4, sort neopren
9143K	Sædesele, kontur, str. 4, sort skai soft

