

Brugermanual DK E-Move



 **decon mobility**

Modelår 2017-

Decon mobility
2020 – vers. 1.0

Indholdsfortegnelse

1.1. Forord	1
1.2. Anvendte symboler i denne manual	1
1.3. Diagnosekontrol	2
1.4. Diagnosekontrol udført af hjælper	3
1.5. Advarsler og noter ved betjening	4
1.6. Placering af advarselmærkater	25

2. Navne på dele 26

2.1. E-Move JWX-2	26
2.2. NikkelMetalHydrid batteri (JWB2)	27
2.3. NikkelMetalHydrid batterioplader (JWC-2)	28
2.4. Lithium-Ion batteri (ESB1)	29
2.5. Lithium-Ion batterioplader (ESC1)	30

3. Før der gøres brug af kørestolen 31

3.1. Inspektion af kørestolen	31
3.2. Kontrol af dit tøj	32
3.3. Kontrol af resterende kapacitet på batteriet	33

4. Kørsel i kørestolen 35

4.1. Sidde i kørestolen	35
4.2. Bevægelse af kørestolen	36
4.3. Kontrol af resterende kapacitet på batteriet under betjening	37
4.4. Øvrige funktioner	37
4.5. Udførsel af basisfunktioner	38

5.	Efter brug af kørestolen	40
5.1.	Udstigning af kørestolen	40
5.2.	Afmontering af batteriet	41
6.	Håndtering af batterier og oplader	42
6.1.	Batterityper	42
6.2.	Vedligeholdelse	42
6.3.	Advarsler og noter ved håndtering af batteriet	43
7.	NikkelMetalHydrid batteri og oplader	46
7.1.	Funktioner for NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)	46
7.2.	Sådan bruges NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)	46
7.3.	Kendetegn og håndtering af NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)	47
7.4.	Sådan oplades NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)	49
7.5.	Genopfrisk(refresh)-opladning af NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)	51
7.6.	Temperatur på NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2) under opladning	52
7.7.	Indikationslamper på opladeren (JWC-2)	53
8.	Lithium-Ion batteri og oplader	54
8.1.	Funktioner for Lithium-Ion batteriet (ESB1)	54
8.2.	Sådan bruges Lithium-Ion batteriet (ESB1)	54
8.3.	Kendetegn og håndtering af Lithium-Ion batteriet (ESB1)	55
8.4.	Sådan oplades Lithium-Ion batteriet (ESB1)	58
8.5.	Temperatur på Lithium-Ion batteriet (ESB1) under opladning	60
8.6.	Indikationslamper på oplader	60

9. Transport og opbevaring af køreskolen	61
9.1. Indlæsning af kørestolen i en bil	61
9.2. Aflæsning af kørestolen fra en bil	63
9.3. Opbevaring af kørestolen	64
9.4. Ombordstigning på et fly	65
10. Brug kørestolen mere komfortabelt	66
10.1. Afmontering og installation af enheden	66
10.2. Smart Tune indstillinger	69
11. Vedligeholdelse, periodisk- og dagligt eftersyn	70
11.1. Vedligeholdelse	71
11.2. Dagligt eftersyn	72
11.3. Afslut brugen af E-Move. Genanvendelse	72
12. Dimensioner og specifikationer	73
12.1. Dimensioner	73
12.2. Specifikationer	74
13. Fejlfinding, reparationer, garanti	76
13.1. Før der anmodes om reparation	76
13.2. Anmodning om reparationer og inspektioner	79
13.3. Placering af serienummer	79
13.4. Garanti	79


Introduktion

Dette er en manual til hjælpemotoren, "E-Move assist", som anvendes til kørestole. Før du læser denne manual bør du undersøge hvilket produkt du bruger.

Instruktionsbogen er trykt i skriftstørrelse 30 til synshandicappede personer. Kontakt din forhandler.

Dette produkt består af både venstre og højre drivhjul, batteri og batterioplader. Drivhjulene er allerede installeret på kørestolens ramme. Ved første anvendelse er det ikke nødvendigt, at bruge værktøj o.l. for at samle kørestolen. Se "2. Navne på dele" for at sikre, at disse komponenter er installeret på kørestolen du har købt, og at batteri og oplader er inkluderet. Hvis du konstaterer, at nogle af disse komponenter ikke er installeret, ikke er vedlagt eller er beskadiget, før du bruger kørestolen, skal du straks kontakte forhandleren uden at gøre brug af kørestolen.

E-Move

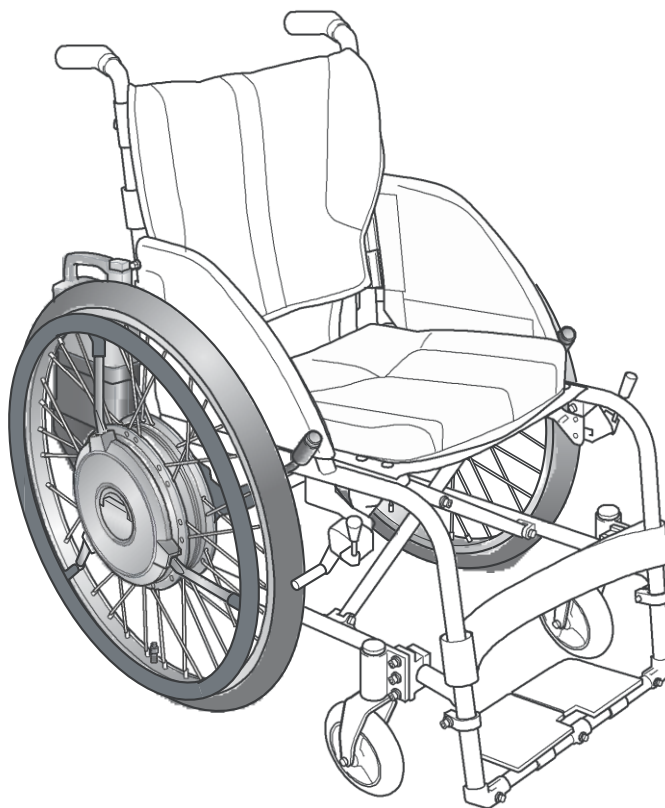

Se kørestolsmanual for info. angående betjening af selve kørestolsrammen og garanti af denne.

1. Læs venligst før brug

1.1. Forord

Tak for dit køb af E-Move.

Generelt, ved kørsel i en kørestol er der en potentiel risiko for at pådrage sig personskade eller skader på kørestolen ved fejlagtig brug. Afhængigt af typen eller omfanget af brugerens handicap, kan det være farligt at køre uledsaget.

Før der gøres brug af kørestolen, bør både assistent og bruger læse denne vejledning, for at sikre fuld forståelse.

- (1) De kørestole hvor E-Move er blevet installeret, er kørestole til fysisk handicappede personer, og de har juridisk status som en fodgænger. Sørg for at overholde færdselsreglerne som var du en fodgænger.
- (2) E-Move tåler en belastning på 150 kg. Brug derfor kun en samlet total belastning på 150 kg. inklusiv stolerammen. Hvis rammen, på hvilken E-Move er installeret, har en endnu lettere belastningsevne, skal du sikre, at du ikke overskrider denne værdi.
- (3) For at sikre sikker brug er advarselmærkater påsat dette produkt. Sørg for at overholde advarselmærkaterne. Se "1.6. Placering af advarselmærkater" for at se placeringerne af advarselmærkaterne.
- (4) Brug ikke dette produkt til andet formål end som en motordreven kørestol.
- (5) Nogle af illustrationerne i denne manual er billeder af generelle motordrevne kørestole. Det faktiske produkt kan være anderledes end vist på billederne.

1.2. Anvendte symboler i denne manual



Indikerer sikkerhedsrelaterede advarseloplysninger.



WARNING

Angiver at fejlagtig brug kan have fatale konsekvenser.

NOTICE

Angiver at fejlagtig brug kan medføre materiel skade.



Angiver ting du ikke må gøre.

TIP

Angiver korrekte metoder og centrale punkter ved betjening af produktet.

1.3. Diagnosekontrol

Afhængig af omfanget af dine handicap kan det være farligt at køre uledsaget. Brug denne diagnosekontrol som en guide til at afgøre, om du kan rejse uledsaget.

1

Diagnosetjek 1

- (1) Er du i stand til at køre ved hjælp af drivhjulene?



- (2) Er du i stand til visuelt korrekt, at opfatte betingelserne for vejbanen og dine omgivelser, og undgå farlige områder?



Kan betjene begge

Problemer ved én eller begge.


Brug af motorhjælp er farligt.
Brug ikke E-Move.

Diagnosetjek 2

- (1) Er du i stand til at betjene kontakter og parkeringsbremsen?



- (2) Er du i stand til at komme ind og ud af kørestolen, og udskifte batteriet?

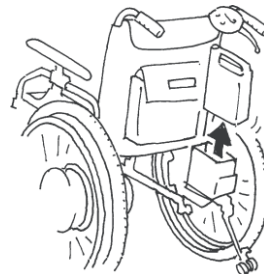

Kan betjene begge.

Problemer ved én eller begge.

Gør brug af en assistent som kan ledsage dig.



Du kan køre uledsaget. Husk at køre forsigtigt af hensyn til din sikkerhed.

I situationer som dem, der er nævnt i advarslerne i "1.5. Advarsler og noter ved betjening", skal du sørge for at have en assistent til at ledsage dig, og være opmærksom på sikkerheden under kørsel.



WARNING

- Før du gør brug af kørestolen, skal du sørge for, at vurdere dine kompetencer og afgøre, hvorvidt du har brug for en assistent.

Desuden bør du rådføre dig med en ekspert når nødvendigheden af en assistent vurderes.

Hvis din dom udelukkende er baseret på din egen mening, kan du, eller andre mennesker omkring dig, komme til skade.



1.4. Diagnosekontrol af assistent

Brug diagnosekontrollen nedenfor som en guide til at afgøre hvorvidt du kan assistere brugeren under betjening.

Diagnosetjek

Hvis du er utilpas med én eller flere af de 3 nedenstående opgaver, bør du ikke yde assisterende hjælp.

- (1) Er du i stand til korrekt at opfatte betingelserne for vejbanen og dine omgivelser, og undgå farlige områder?
- (2) Er du i stand til at hjælpe brugeren til at komme til og fra kørestolen, og at udskifte batteriet?
- (3) Er du i stand til at yde assisterende hjælp ved betjening af en manuel kørestol?





WARNING

- Hvis en assistent skal ledsage dig og betjene kørestolen, skal du sørge for at vurdere hans/hendes kompetencer.

Desuden bør du rådføre dig med en ekspert ved vurderingen af assistentens kompetencer.

Hvis din dom udelukkende er baseret på din egen mening, kan du, eller andre mennesker omkring dig, komme til skade.



- Hvis du mangler kompetencer til at yde assisterende hjælp under betjening, skal du ikke forsøge at yde hjælp.



1.5. Advarsler og noter ved betjening

Læs denne manual før du gør brug af produktet.

Læs denne manual omhyggeligt for at sikre en sikker og komfortabel betjening. Efter at have læst den, bør du opbevare den, hvor den er let tilgængelig for fremtidig brug.

Medmindre andet er specifikt angivet er følgende oplysninger gældende, når brugeren selv betjener kørestolen, eller når en assistent betjener kørestolen.

1.5.1. Før du tager kørestolen i brug



WARNING

- Før du bruger kørestolen, skal du sørge for at vurdere dine kompetencer og afgøre hvorvidt du har brug for en assistent.

Desuden bør du rådføre dig med en ekspert når nødvendigheden af en assistent vurderes.

Hvis din dom udelukkende er baseret på din egen mening, kan du, eller andre mennesker omkring dig, komme til skade.



- Praktiser kørsel i et sikkert område med en ledsager, indtil du er fortrolig med betjeningen. Hvis du kører på offentlige veje mens du endnu er uvant med betjeningen, kan du, eller andre mennesker omkring dig, komme til skade.




1.5.2. Før du dagligt gør brug af kørestolen




WARNING

- Udfør daglig kontrol før brug.
Gør det til en vane at inspicere kørestolen hver dag.
Bruges kørestolen mens der er problemer med kørestolens stel eller hjulene, kan det medføre skader på kørestolen under kørsel, og resultere i at brugeren vælter.

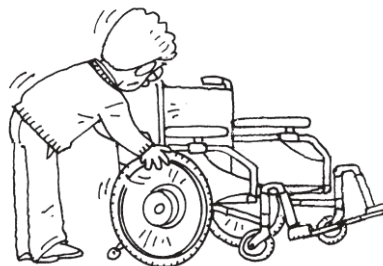


- Hver dag bør du, før brug af kørestolen, sikre at der er luft i dækkene. Sørg altid for at holde lufttrykket i dækkene på et normalt niveau. Hvis lufttrykket i dækkene falder, kan parkeringsbremserne blive ineffektive.

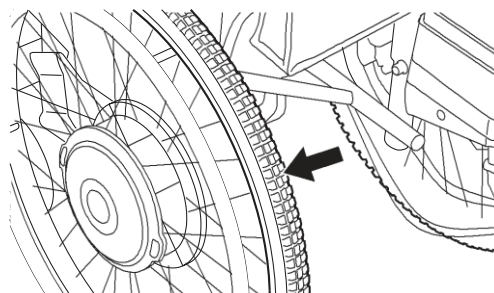

- Hver dag bør du før brug af kørestolen sikre, at anti-tip enheden er i den korrekte position. Hvis anti-tip enheden ikke er i den korrekte position, kan kørestolen vælte bagover.



- Hver dag bør du, før brug af kørestolen, kontrollere den resterende kapacitet i batteriet. Hvis den resterende kapacitet i batteriet er lav, kan batteriet løbe tør under driften, og du vil være ude af stand til, at køre i motordreven tilstand.

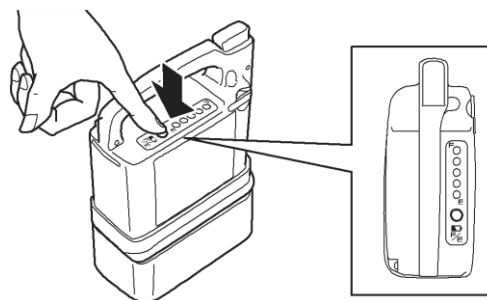


1.5.3. Håndtering af kørestolen




WARNING

- Ændringer af enheden eller dets montering kan påvirke ydeevnen og sikkerheden. Foretag derfor aldrig ændringer.

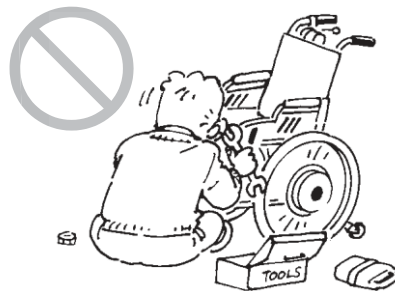


- Hvis kørestolen har dele, der kan foldes eller er aftagelige, må du ikke betjene kørestolen når disse dele er foldet eller afmonteret.

- Hold ikke i aftagelige dele når du løfter kørestolen.

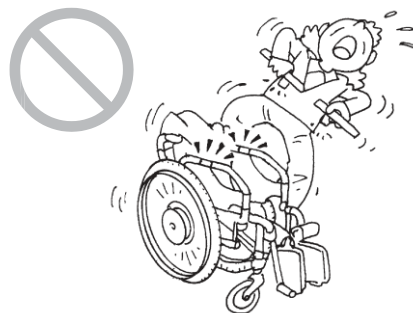


- Kør ikke med tung bagage hængende over ryglænet, eller med tunge genstande i rummet bag ryglænet. Kørestolen kan let vælte bagover på en skrå hældning, hvilket kan medføre, at du, eller andre mennesker omkring dig, kommer til skade.

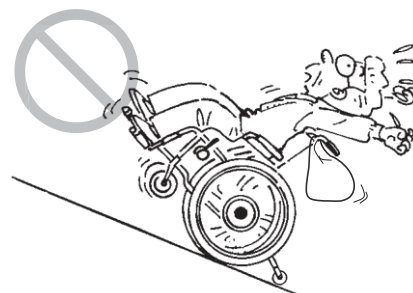

- Kørestolen kan vælte, hvis den betjenes uden anti-tip enheden, eller med sikkerhedshjulene opad. Vær sikker på at sætte anti-tip enheden korrekt og betjene kørestolen med sikkerhedshjulene i korrekt position.



- Der må ikke tilsluttes elektriske instrumenter til batteriets stik. Dette stik er til at forbinde Smart Tune software. Tilslutning af andre elektriske instrumenter, såsom en mikrofon eller hovedtelefoner, kan forårsage problemer på enheden. Se afsnit 10 for informationer om Smart Tune software.

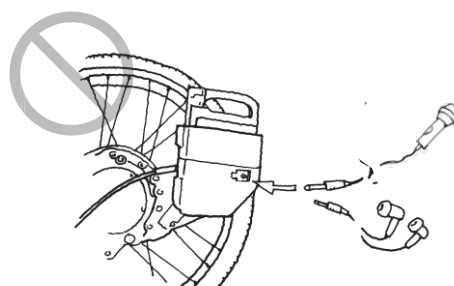




WARNING

- Afmontering af batteriet under kørsel kan sætte bremserne, der skal anvendes til baghjulene, ud af funktion, og kan forårsage at du, eller andre mennesker omkring dig, kommer til skade.



- Mens kørestolen betjenes, eller efter betjening, må du ikke røre bagsiden af drivenheden. Under eller efter betjening, kan bagsiden af drivenheden være varm. Desuden kan overfladen af enheden, herunder drivhjulene, blive varme på grund af udsættelse for varme fra sollys eller varmeapparater. Rør ikke enheden når den forventes at være varm.

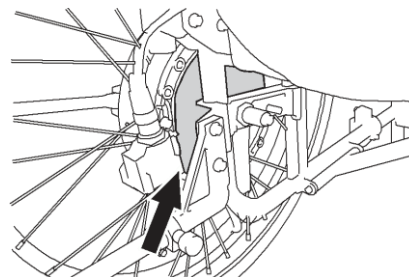

Bagsiden af enheden
(Begge sider)

- Ved betjening af kørestolen skal du passe på ikke, at få dine hænder viklet ind i egerne, hjulene, huller osv.



1.5.4. Ind- og udstigning af kørestolen



WARNING

- Når du sætter dig i kørestolen ved egen hjælp, eller med hjælp fra en assistent, skal du sikre, at kørestolen er placeret på et plant underlag. Hvis brugeren forsøger at sætte sig i kørestolen på en skråning, kan han eller hun miste balancen og falde ud af kørestolen.



- Hvis du benytter en kørestol uden parkeringsbremsen, skal assistenten holde kørestolen for at sikre, at den ikke bevæger sig. Manglende overholdelse af ovenstående kan medføre, at kørestolen kan bevæge sig uventet, og dermed resultere i at du, eller andre mennesker omkring dig, kommer til skade.



- Læn dig ikke ud af kørestolen for at nå en genstand, da der er risiko for, at du kan falde ud af kørestolen, eller kørestolen vælter.



1.5.5. Generel kørsel



WARNING

- Kør aldrig to i kørestolen. Der kan opstå funktionsfejl eller personer i kørestolen kan komme til skade.





WARNING

- Anvend aldrig kørestolen efter indtagelse af alkohol eller medicin der forårsager sløvhed.



- Anvend aldrig kørestolen mens du holder en paraply eller andre genstande.



- Slæb aldrig kørestolen. Brug ikke kørestolen til at trække eller slæbe noget.

- Hvis du ønsker at bruge en mobiltelefon eller lignende, stop da kørestolen på et sikkert sted, og sluk for kørestolen. Ved kørsel i motordreven tilstand, bør mobiltelefoner og andre elektroniske enheder være slukket, ellers er der risiko for en ulykke.



- Brug ikke kørestolen nær en enhed som udsender stærke radiobølger. Hvis kørestolen er i nærheden af en kilde til radiobølger, og begynder at fungere unormalt, skal du straks slukke for strømmen, og hurtigt bevæge dig væk fra stedet ved hjælp af en assistent eller ved manuel betjening.



De svage elektromagnetiske bølger der udsendes af E-Move, kan påvirke andre elektroniske enheder, såsom automatiske døre og tyverisikring af butikker. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen og betjene kørestolen manuelt, eller ved hjælp af en assistent.




WARNING

- Sluk ikke for strømmen mens du kører. Det medfører at bremserne, der skal anvendes til baghjulene, sættes ud af drift, og kan forårsage, at du falder ned fra kørestolen.



- Brug ikke kørestolen til transport af bagage eller til andet formål end at yde bistand til en handicappet.

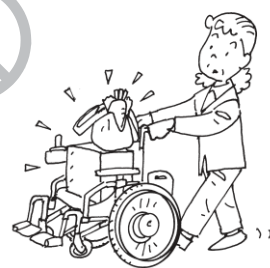

- Brug ikke tøj som udgør en risiko for dig som bruger, under kørsel, såsom det vist nedenfor. Hvis du kører med en sådan beklædning, kan du, eller andre mennesker omkring dig, komme til skade. Lange tørklæder, tøj med løse ærmer, bukser/nederdele med brede kanter, bare fødder, sandaler, hjemmesko, dårligt passende fodtøj, osv.

Lange tørklæder




Tøj med løse ærmer



Bukser/nederdele med brede kanter



Bare fødder, sandaler, hjemmesko, dårligt passende fodtøj osv.

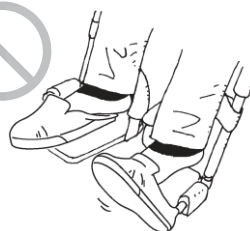

I de følgende situationer og miljøer kan du med fordel gøre brug af en assistent til, at ledsage dig og til at betjene kørestolen for dig.

I disse tilfælde bør du have en assistent til at ledsage dig. Kørsel på egen hånd i sådanne situationer kan medføre skade.

Desuden bør du undersøge om der er fare ved de veje du benytter til dagligt, såsom dem der er vist nedenfor. Hvis dette er tilfældet, bør du omlægge din rute, så du ikke passerer disse områder.

Tjek altid omgivelsernes betingelser af hensyn til din sikkerhed.

1.5.6. Kørsel på offentlige veje



WARNING

- Når kørestolen benyttes udendørs har brugeren juridisk status som en fodgænger. Sørg for at overholde dennes regler.
- Vær forsigtig på almindelige veje, og vær opmærksom på biler, cykler og fodgængere. Navnlige fodgængere bør brugerens opmærksomhed være rettet mod.


- Selvom kørestolen kan betjenes på veje kun tilegnet til fodgængere, kan den ikke betjenes hvor fodgængere ikke har tilladelse (veje kun tilegnet biler, midt på kørebanen osv.).



- Hvis vejen har et fortov, skal kørestolen betjenes på fortovet.
- Hvis vejen ikke har et fortov, skal kørestolen betjenes på ydresiden af rabatstriben hvor fodgængere går.
- Hvis vejen ikke har rabatstriber, skal kørestolen betjenes på den side af vejen hvor fodgængere går.



- Hvis to eller flere kørestole kører sammen udendørs, bør kørestolene køre i en enkelt linje med tilstrækkelig plads mellem hinanden. Kørestolene må ikke anvendes side om side.

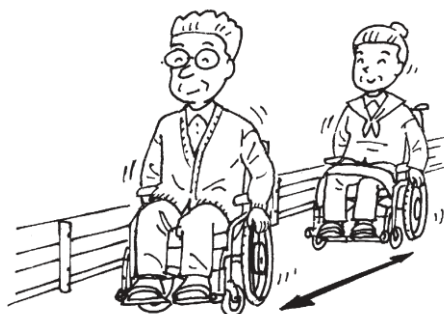


- Vær opmærksom på andre mennesker og forhindringer omkring dig ved start eller baglæns kørsel.
- Det er yderst farligt, at køre på en smal gade uden fortov. Vælg en sikrere vej når det er muligt.



WARNING

- Vær forsigtig med ikke, at køre for tæt på kanten af en skråning osv. på en vej. Afhængigt af tilstanden på kanten af vejen, kan du ved et uheld køre af vejen.

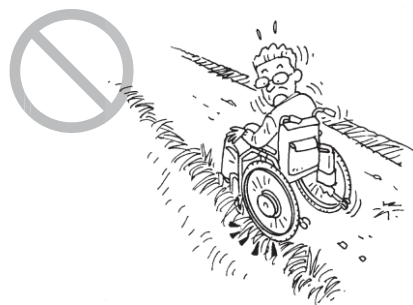

- Når du kører på et fortov, der ikke har et autoværn, er der risiko for, at falde ud på vejen. Benyt en assistent til at ledsage dig i stedet for at køre alene.



- Når du kører i nærheden af en grøft, kan dækket falde i, hvis der er et hul, selvom hullet er tildækket. Benyt en assistent til at ledsage dig i stedet for at køre alene.



- Hvis der er nogle forhindringer, stop da kørestolen og tjek foran og bag dig om det er sikkert at forsætte.

- Hvis et modkørende køretøj er nær dig, stop da kørestolen, og vent på at køretøjet har passeret, og kontrollér derefter foran og bag dig om det er sikkert at fortsætte.



- Brug ikke kørestolen udendørs om natten. Når du ikke kan se vejforholdene, kan du miste balancen og falde, eller personer eller biler kan kolliderer med dig, hvis de ikke er i stand til at se dig.





WARNING

- Brug ikke kørestolen udendørs hvis det regner eller sneer. Biler og andre køretøjer kan kolliderer med dig, hvis de ikke kan se dig. Hvis det begynder, at regne eller sne mens du er udendørs, skal du søge indendørs så hurtigt som muligt.



1


1.5.7. Kørsel på skråninger




WARNING

Kørestole der er udstyret med E-Move er bygget til, at være lettere i forhold til andre tungere elektriske kørestole, der bruger et normalt blybatteri. Af denne grund, flyttes det samlede tyngdepunkt højere, når en person sidder i den. Derfor skal der udvises forsigtighed når der køres på skråninger.


- Brug ikke kørestolen på en skråning stejlere end 6 grader (10% stigning). Den kan vælte eller bremsen kan blive ineffektiv.

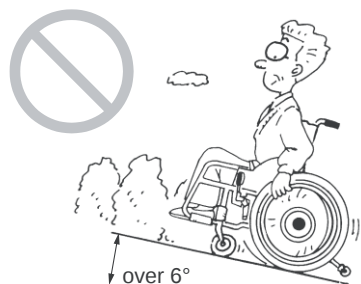

- Når du kører op/ned af en bestemt skråning for første gang, bør en assistent ledsage dig af hensyn til din sikkerhed.

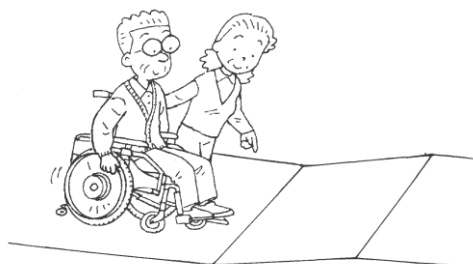

- Brug ikke on/off kontakten på en skråning. Kørestolen opfører sig som en normal kørestol når kontakten er slukket, og kan begynde at bevæge sig.
Parkér på et plant niveau og træk håndbremsen når du betjener on/off kontakten.

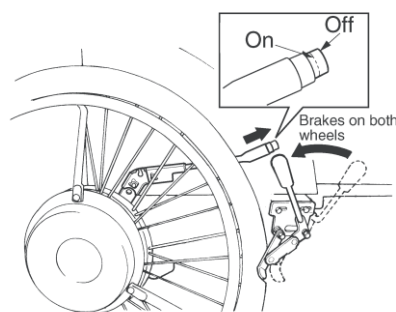



WARNING


- Vend ikke pludseligt på en skråning. Hertil kommer, ikke at krydse vandret eller diagonalt på tværs af en stejl skråning. Du kan let miste balancen og vælte.



- I områder hvor kørestolen hælder skarpt til højre eller venstre er der risiko for, at kørestolen vælter til siden. Bliv ledsaget af en assistent.



- Ved kørsel ned af en skråning, med hjælp fra en assistent, bør der køres baglæns. Hvis assistenten skubber kørestolen forlæns ved nedkørsel kan brugeren falde forover og ud af kørestolen.

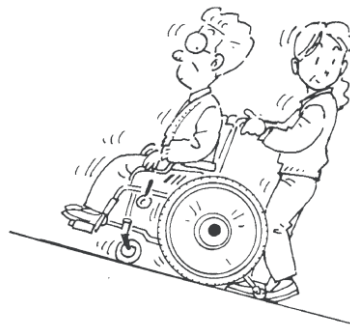


1.5.8. Kørsel op/ned af kantsten



WARNING

Kørestole der er udstyret med E-Move er bygget til, at være lettere i forhold til andre tungere elektriske kørestole, der bruger et normalt blybatteri. Af denne grund, flyttes det samlede tyngdepunkt højere, når en person sidder i den. Derfor skal der udvises forsigtighed, når der køres på skråninger.


- Når du kører i motordreven tilstand, kan kørestolen klare niveauforskelle på op til 25 mm. Eventuelle større niveauforskelle bør afhjælpes med hjælp fra en assistent, ved manuel betjening.

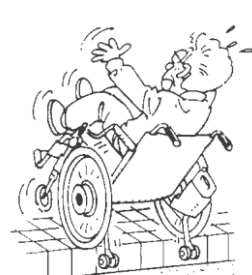



WARNING

- Når du kører op/ned af en kantsten for første gang, bør du have en assistent til, at ledsage dig i stedet for at køre alene.

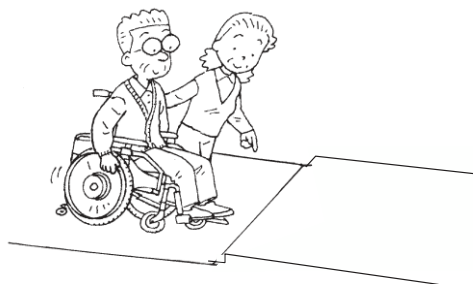

- Når du kører over en kantsten, skal du passe på ikke at miste balancen.


- Når du kører over en kantsten, skal du kører vinkelret på kantstenen. Kør ikke diagonalt med kantstenen.



- De forreste hjul på kørestolen er små, og er derfor kun i stand til, at køre over små kantsten. Derfor er det nødvendigt, at udvise forsigtighed ved kørsel over en kantsten i motordreven tilstand.




- Vær opmærksom på kantsten, når du kører mellem et fortov og en vej.

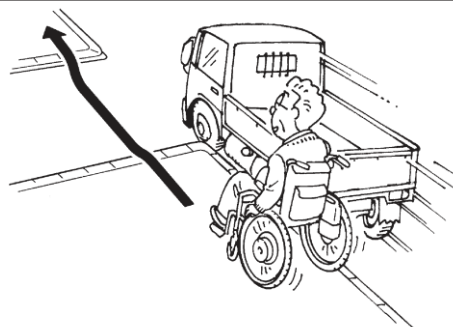



WARNING

- Ved kørsel ned af en kantsten, med hjælp fra en assistent, bør der køres baglæns. Hvis assistenten skubber kørestolen forlæns ved nedkørsel kan brugeren falde forover og ud af kørestolen.

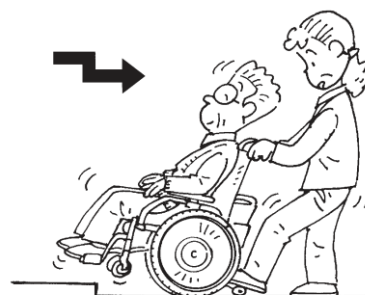

- Når du kører op/ned af en kantsten med hjælp fra en assistent, kan anti-tippens sikkerhedshjul hæves eller foldes midlertidigt, afhængig af højden på kantstenen. Når kantstenen er passeret, skal du sørge for, at placere sikkerhedshjulene i den korrekte position inden du fortsætter.




1.5.9. Krydse en vej




WARNING

- Du må ikke krydse en vej, hvor fodgængere ikke har tilladelse.

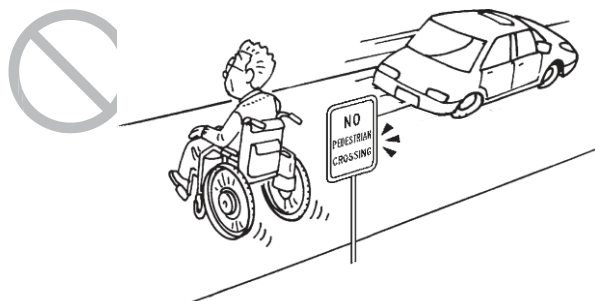


- Ved passering af en ukendt vej bør en assistent ledsage dig.
- Hvis den resterende kapacitet i batteriet er lav, kan kørestolen gå i stå, mens du krydser en vej. Kontrollér den resterende kapacitet på batteriet før passage.

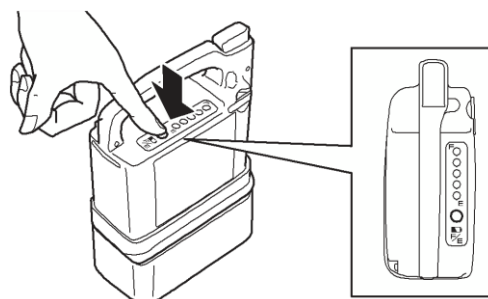




WARNING


- Før du krydser en vej, skal du sørge for, at kontrollere til venstre og højre af hensyn til din sikkerhed.

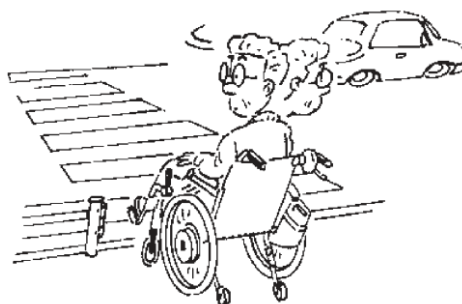

- Kryds ikke en vej, hvis det kan være farligt, såsom hvis en bil nærmer sig.

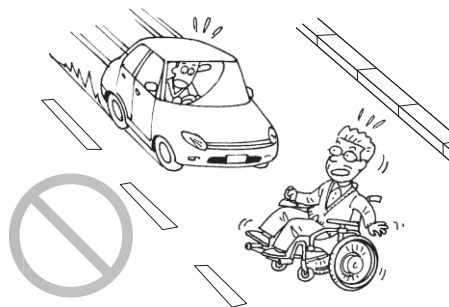


- Når du krydser en vej, bør du fortsætte, så vidt som muligt, i en ret vinkel til vejen. Kryds ikke vejen diagonalt.

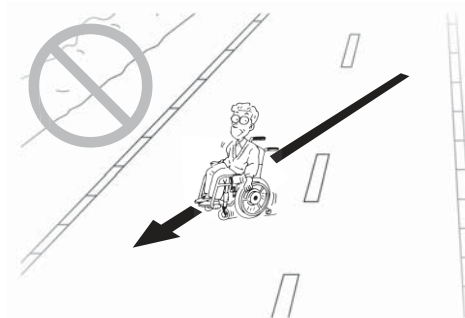

- Kryds vejen et sted hvor der er et lyskryds eller en fodgængerovergang.

- Når du krydser en vej ved et fodgængerfelt, men uden et lyskryds, skal du være ekstra opmærksom på trafikken.

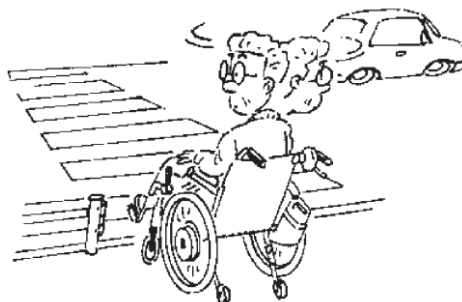

- Hvis der er et signallys til fodgængere, skal du adlyde dette. Hvis signalet blinker grønt eller er rødt, skal du ikke begynde at krydse vejen.
- Hvis vejen er bred, kan signalet ændres, inden du er færdig med at passager vejen. På sådanne steder bør du vente på det næste grønne lys for, at have nok tid til at krydse vejen.





WARNING

- Ved kryds hvor der ikke er et lyskryds eller en fodgængerovergang, bør du stoppe i de følgende 3 situationer:
 1. Stop før du kører ud på vejen.
 2. Stop hvor du kan blive set af biler.
 3. Stop hvor du har et godt overblik over vejen.

1.5.10. Jernbaneoverskæring



WARNING


- Undgå jernbaneoverskæring hvis du har mulighed for at vælge en alternativ rute.

- Hvis du ikke har noget andet valg end, at køre over en jernbaneoverskæring bør en assistent ledsage dig.



- Stop før du passerer jernbanenoverskæringen og tjek til højre og venstre.

- Når du kører over en jernbaneoverskæring, bør du fortsætte, så vidt som muligt, i en ret vinkel. Hvis du kører diagonalt, kan kørestolens hjul sidde fast i jernbanesporet.

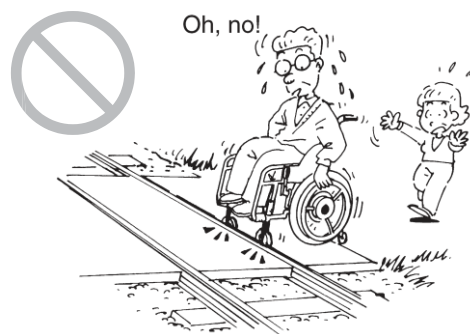

- Kør ikke for tæt på kanten når du krydser en jernbaneoverskæring, ellers kan et uheld opstå, og hjulene falde uden for overskæringen. I en nødsituation skal du ikke gå i panik. Få din assistent, eller en person omkring dig, til at trykke på nødafbryderen og flyt dig fra jernbaneoverskæringen så hurtigt som muligt.

1.5.11. Dårlige vejforhold



WARNING

Kørestole der er udstyret med E-Move er bygget til, at være lettere i forhold til andre tungere elektriske kørestole, der bruger et normalt blybatteri. Af denne grund, flyttes det samlede tyngdepunkt højere, når en person sidder i den. Derfor skal der udvises forsigtighed, når der køres over kantsten.

- Kør ikke på grusveje, hullede veje, mudrede veje, stier, osv. Hvis du ikke har andet valg end, at benytte disse veje, bør en assistent ledsage dig.



- Kør ikke på en frossen overflade. Du er muligvis ikke i stand til at stoppe kørestolen.



- Undgå steder hvor sne eller vand har oparbejdet sig, eller bliv ledsaget af en assistent. På sådanne steder, hvor du ikke kender vejforholdene eller hvis kørestolen glider, kan du miste kontrollen eller bremserne kan blive ineffektive. Hvis kørestolen bevæger sig gennem en dyb vandpyt, og vand trænger ind i drivenhederne, kan kørestolen stoppe.



- Hvis du ser en hældning i vejen eller fortovet, bør du undgå disse. Hvis du kører ned i hældningen kan kørestolen vælte. Hvis du ikke har andet valg end at fortsætte, bør en assistent ledsage dig af hensyn til din sikkerhed.




1.5.12. Parkeringspladser



WARNING

- Kør ikke direkte bag eller foran biler på en parkeringsplads. Chaufføren er ikke i stand til at se dig, hvis du er direkte bag eller foran bilen.

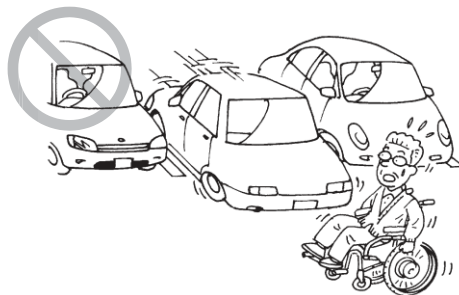

- Kør ikke mellem bilerne på en parkeringsplads, ellers kan du beskadige bilerne eller komme i klemme, når en bil begynder at bevæge sig.




1.5.13. Anvendelse af offentlig og privat transport




WARNING

- Når du benytter offentlig transport, bør du på forhånd kontrollere at kørestolsbrugere har adgang. Desuden skal du følge regler og anvisninger for indstigning i køretøjet.
- Når du benytter en privat bil skal du ikke bruge kørestolen som sæde. Sid i stedet i et af bilsæderne.
- Når du flytter dig til/fra en lift bør en assistent hjælpe dig af hensyn til din sikkerhed.

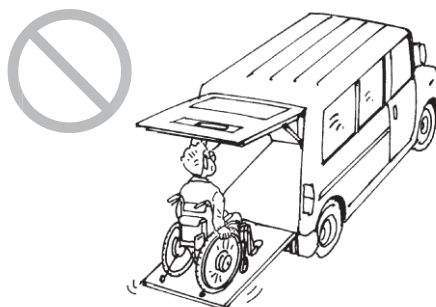


- Når du kører på en togstation, skal du altid have en assistent til at ledsage dig. Stop kørestolen på perronen så den holder parallelt med jernbanesporet, og anvend parkeringsbremsene. Nogle togperroner er placeret i en lille vinkel til jernbanesporet. Vær forsigtig så du ikke falder ned på sporet, og kommer til skade.

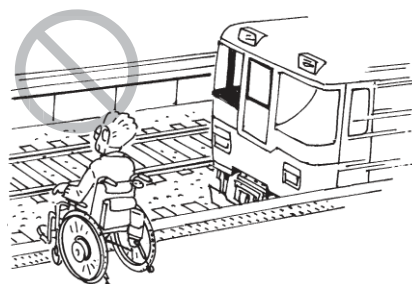



WARNING

- Ved ind-/udstigning af en bus eller tog skal du altid have en assistent til, at ledsage dig af hensyn til din sikkerhed.

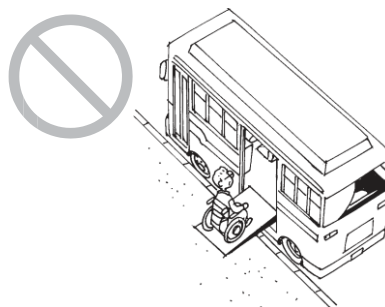

- Når du stiger af en bus, en taxa eller et tog, skal du sørge for, at sikkerhedshjulet er i den korrekte position, inden du sætter dig i kørestolen.



1.5.14. Menneskefyldte områder




WARNING

- Når du kører i kørestolen i et menneskefyldt område, skal du være opmærksomhed på dine omgivelser. Hvis du støder ind i personer eller genstande, kan du vælte forover, eller andre mennesker omkring dig, kan komme til skade.



- Når du stopper i et overfyldt område, skal du sørge for, at slukke for strømmen og anvende parkeringsbremsene. Hvis en person i dit omkringliggende område rammer drivhjulene med hans/hendes hånd eller arm, kan kørestolen begynde at bevæge sig uventet, hvilket kan forårsage skade på mennesker omkring dig.

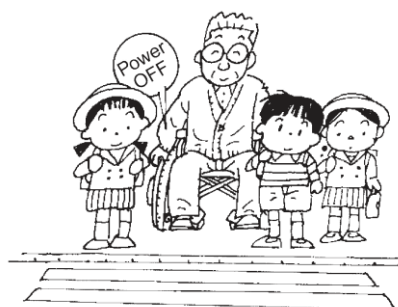


1.5.15. Transport og opbevaring af kørestolen



WARNING


- Når du løfter en kørestol med et vipbart armlæn, må du ikke løfte i armlænet, ellers kan armlænet falde af og forårsage en skade eller beskadigelse af udstyret.

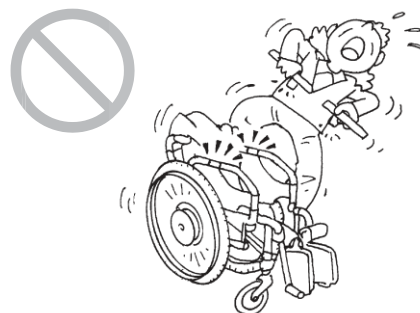


- Når du løfter en kørestol, må du ikke løfte den i batteriet eller kabelet, ellers kan en af disse enheder gå løs og forårsage en skade eller beskadigelse af udstyret.



- Vend ikke kørestolen på hovedet. Det kan medføre, at dele af kørestolen falder af, hvilket resulterer i en skade eller beskadigelse af udstyret.

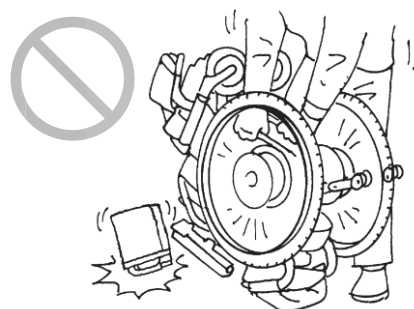

- Anbring ikke dine hænder eller fingre ved siden af , eller under sædestangen. Dette kan medføre, at din finger(e) kommer i klemme.

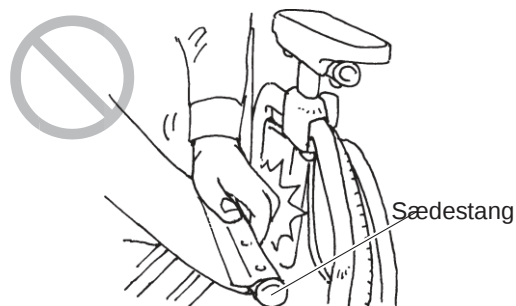


- Under transport må batteriet eller kørestolen ikke placeres på et sted, der kan blive meget varmt, eller i direkte sollys. Dette kan føre til funktionsfejl, eller kan medføre en forringelse af batteriet.





WARNING

- Sørg for at fjerne batteriet, når det ikke er i brug, således at det ikke tænder uventet ved opbevaring eller under transport.

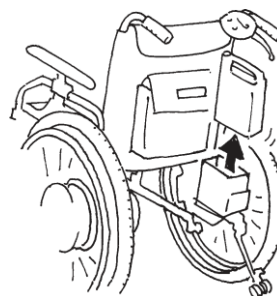


- Sørg for at opbevare det afbrudte batteri med beskyttelseskapsel på. Ubeskyttede kontakter kan forårsage kortslutninger, og føre til brand eller brud på batteriet.




Beskyttelseskapsel


- Må ikke opbevares på steder der kan blive våde af Regn, eller har høj luftfugtighed.

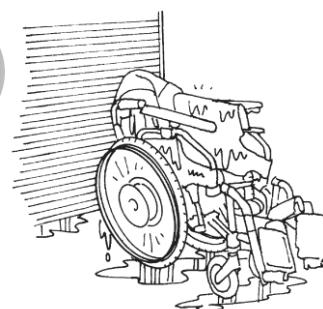

- Opbevar ikke et sted der har været vådt i lang tid, eller der er snavset. Dette kan medføre funktionsfejl.

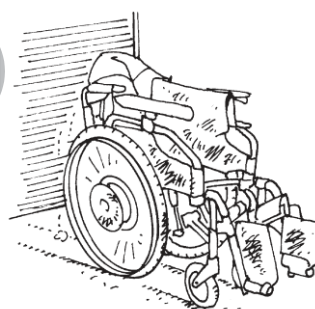


- Undgå opbevaring i direkte sollys, eller på steder hvor temperaturen kan blive høj.

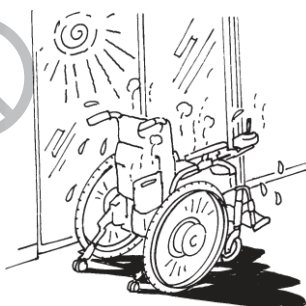


**WARNING**

- Må ikke vaskes ved direkte spuling med vand, eller ved brug af damp. De elektroniske enheder kan blive beskadiget, hvilket kan føre til funktionsfejl.

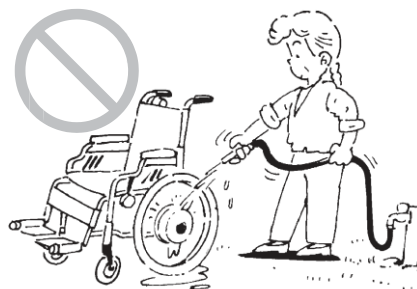

- Rengør ikke med opløsningsmidler såsom benzin eller fortynder. Dette kan beskadige maling og plastdele.

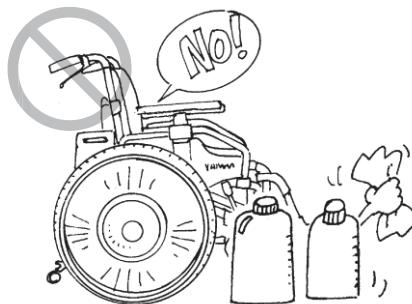
**1.5.16. Betjening i nødsituationer ved hjælp af en assistent****WARNING**

- Hvis der opstår en nødsituation under betjening ved hjælp af en assistent, skal assistenten skifte koblingshåndtaget til manuel position, og skubbe kørestolen til et sikkert sted.




1.6. Placering af advarselsmærkater


• Motor

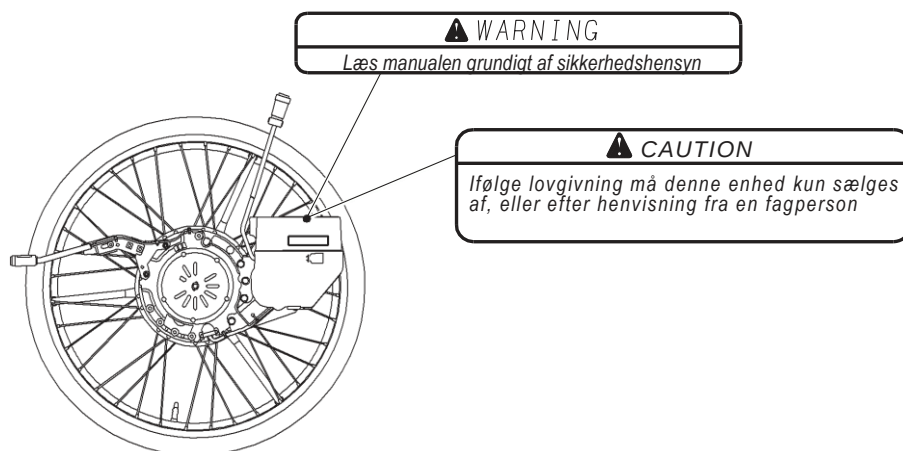

• Lithium-Ion batteri og oplader

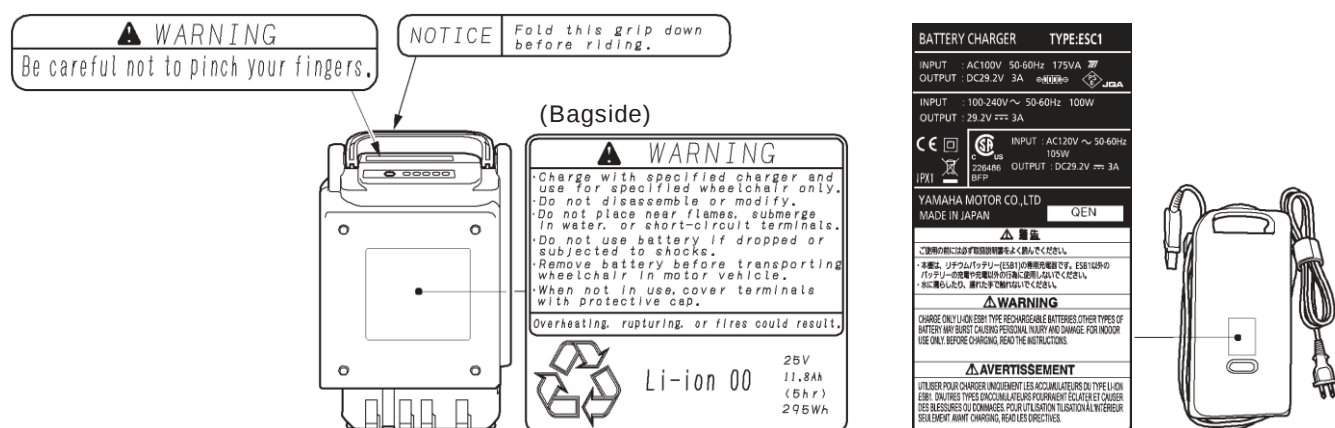



• NikkelMetalHydrid batteri og oplader

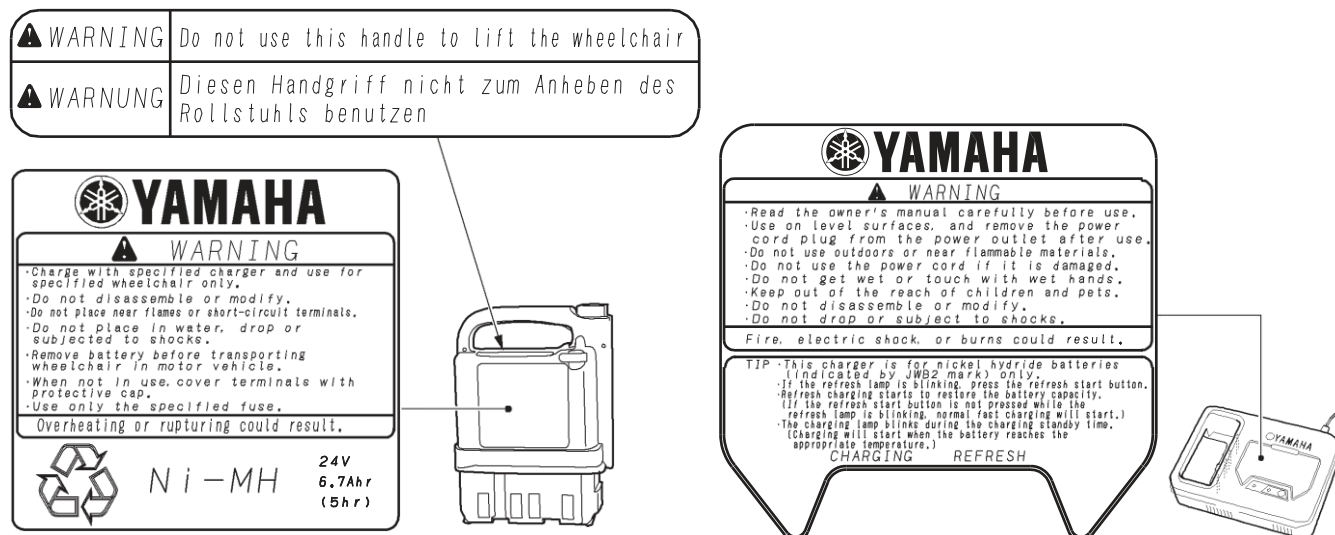

2. Navne på dele


2.1. E-Move

2

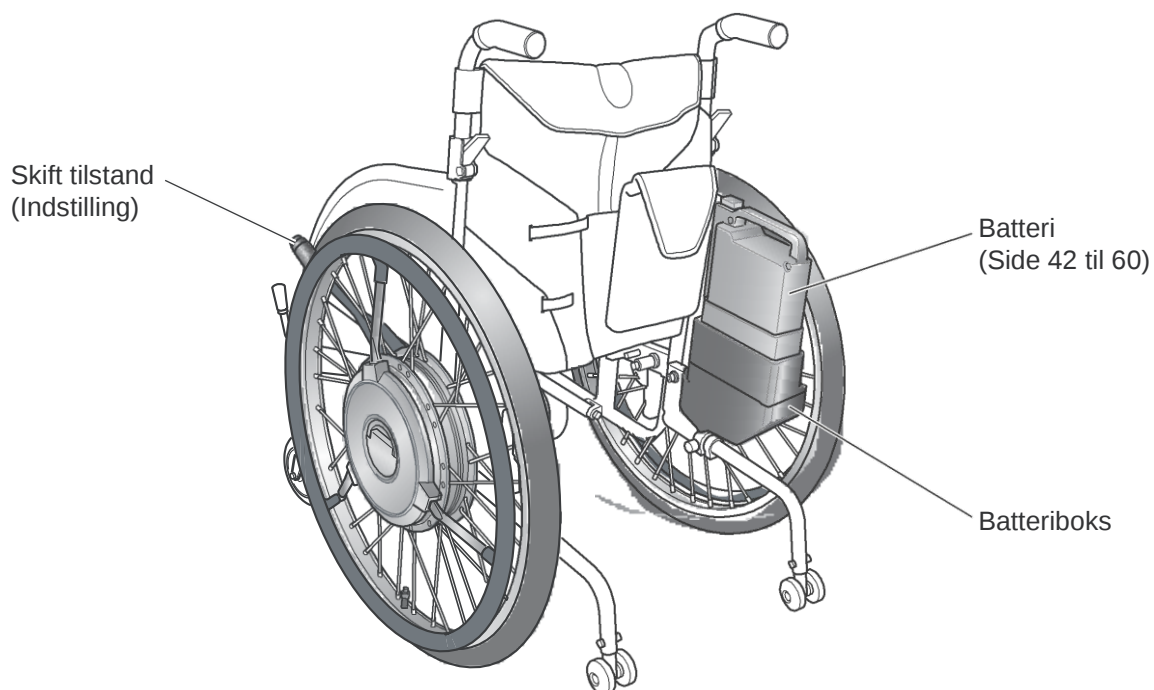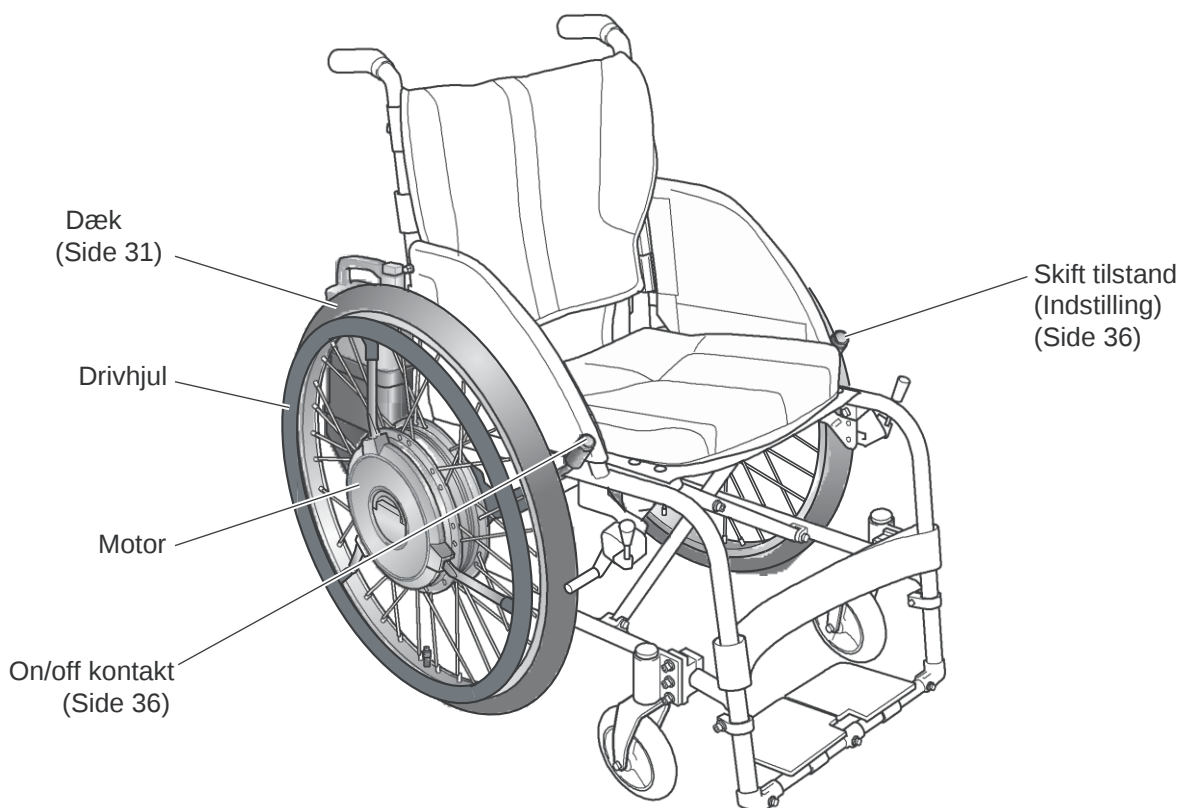

Enten medfølger et NikkelHydrid batteri eller et Lithium-Ion batteri.


2.2. NikkelMetalHydrid batteri (JWB2)

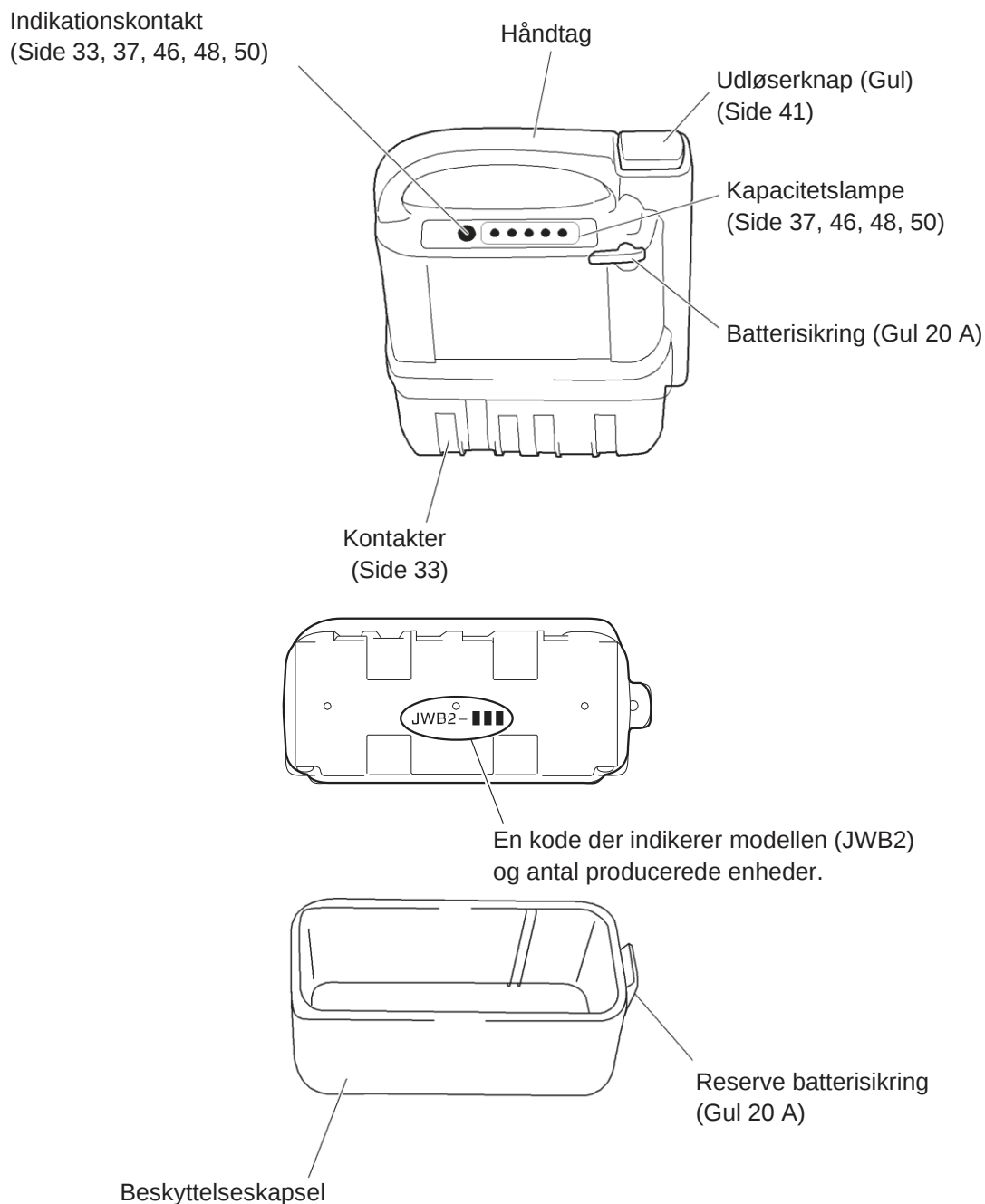



NOTICE

- Hvis batterisikringen springer, skal du ikke udskifte den selv, men i stedet kontakte din forhandler. Hvis du udskifter sikringen uden, at fjerne det der forårsagede skaden, kan sikringen springe igen, eller en funktionsfejl kan opstå.

2.3. NikkelMetalHydrid batterioplader (JWC-2)

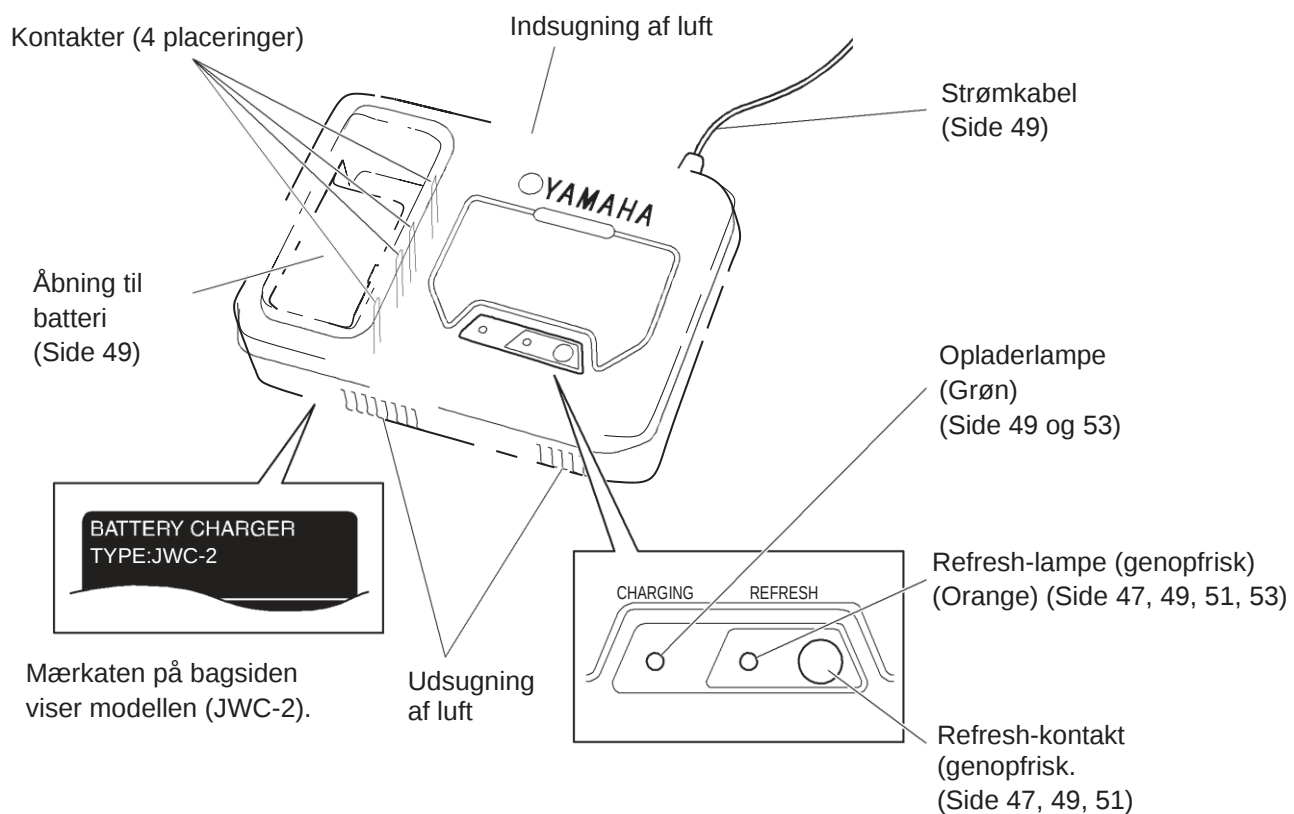


2.4. Lithium-Ion batteri (ESB1)

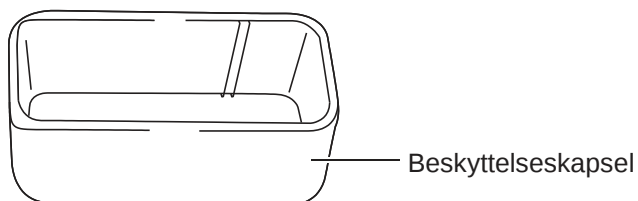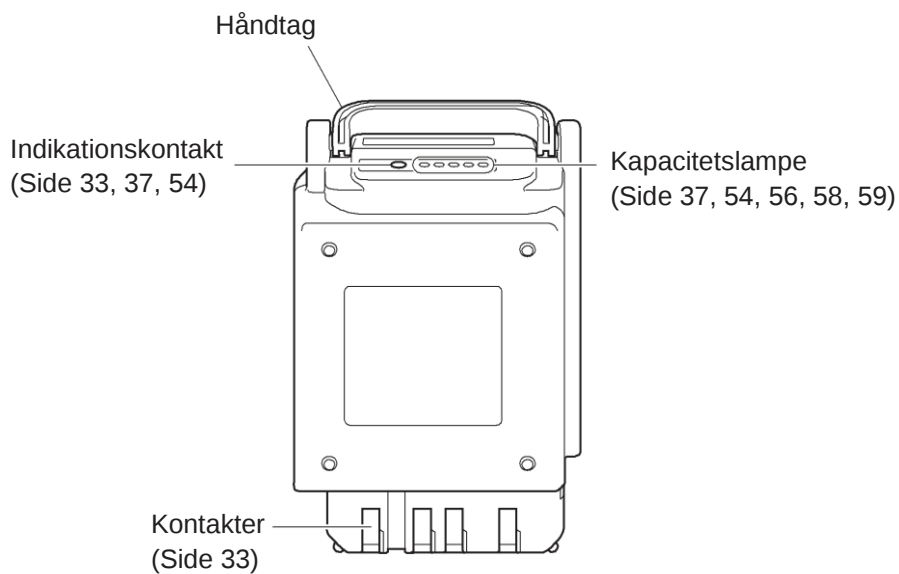

2.5. Lithium-Ion batterioplader (ESC1)

2

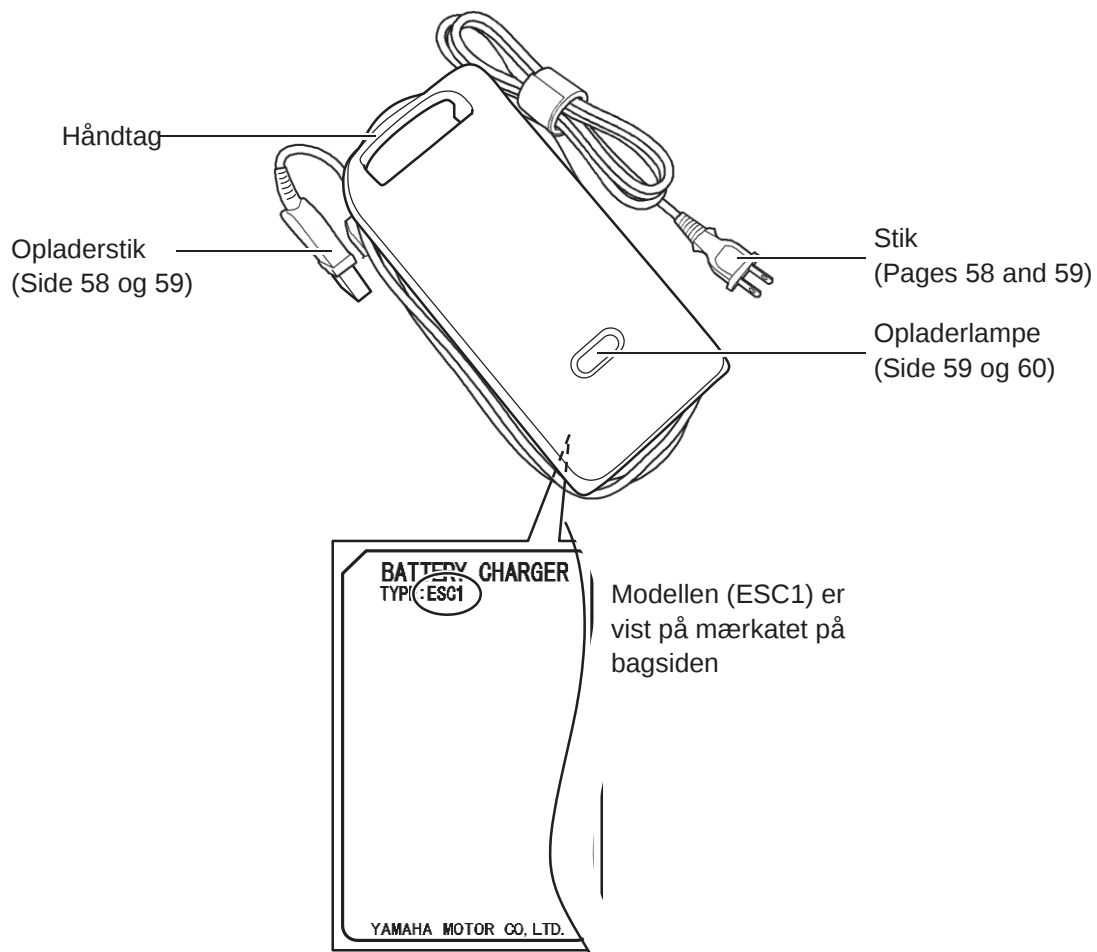

3. Før der gøres brug af kørestolen

3.1. Inspektion af kørestolen

Undersøg kørestolen. Hvis du opdager et problem med kørestolen, skal du kontakte din forhandler.

(1) Anti-tip enhed

Kontrollér anti-tip enheden som er installeret på din kørestols ramme for at sikre, at den ikke er deform eller stærkt beskadiget.

Tjek anti-tip enhedens sikkerhedshjul for at sikre, at den er i den korrekte position.

Der henvises til kørestolsrammens manual.



WARNING

- **Kørestolen kan vælte hvis den betjenes uden anti-tip enheden, eller hvis sikkerhedshjulet ikke er i den korrekte position. Brug ikke kørestolen når sikkerhedshjulene ikke er i den korrekte position. Sikkerhedshjulene må kun være foldet sammen eller vende opad ved kørsel over forhindringer, eller andre lignende situationer, når du ledsages af en assistent.**
- **Vedvarende brug af kørestolen, mens der er et problem med kørestolens ramme eller hjul, kan forårsage pludselige skader på kørestolen under kørsel, og kan resultere i at brugeren vælter.**


(2) Bagdæk

Kontrollér dæk dybden.

Kontrollér overfladen på dækket for at sikre at der ikke er revner i det.

Kontrollér at der er luft i dækket. (Tryk på dækket med fingeren.)

Hvis der ikke er nok luft i dækket skal du pumpe op til 450 kPa.

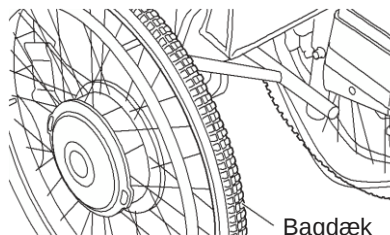


Bagdæk

(3) Parkingsbremser

Kontrollér at parkeringsbremserne er installeret.

Skub kørestolen mens bremserne anvendes på begge hjul for at sikre, at dækkene ikke bevæger sig.

Kontrollér parkeringsbremserne for at sikre at der ikke er slør på bremserne.

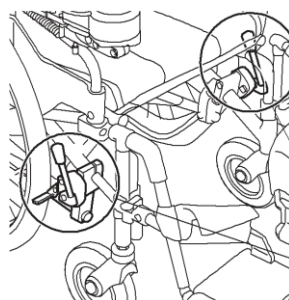


Parkeringsbremse
(Eksempel)

(4) Hjulene

Kontrollér hjulene for at sikre at de ikke er deformeret eller beskadiget.

Kontrollér området hvor hjulet møder rammen for at sikre, at det ikke slingrer.

Kontrollér egerne for at sikre at de ikke er brækket.

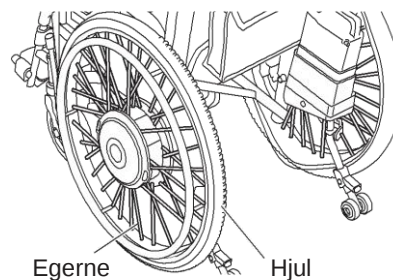

(5) Styrehjul

Kontrollér dæk dybden.

Kontrollér dækkene for at sikre at de ikke er beskadiget.

Kontrollér styregaflerne for at sikre at der ikke er revner i dem.

Kontrollér møtrikkerne for at sikre at de ikke er løse.

**WARNING**

- Hvis lufttrykket i bagdækkene falder, kan parkeringsbremsene blive ineffektive. Hold lufttrykket i bagdækkene på det korrekte niveau.
- Vedvarende brug af kørestolen, mens der er et problem med kørestolens ramme eller hjul, kan forårsage pludselige skader på kørestolen under kørsel, og kan resultere i at brugeren vælter.
- Hvis du finder nogle usædvanlige forhold på kørestolen under disse inspektioner, skal du kontakte din forhandler.

3.2. Kontrol af dit tøj


Bær lyst, let synligt tøj når du betjener kørestolen. Brug ikke kørestolen iført tøj der ikke er egnet til kørestolsbrug. Se "1.5.5. Generel betjening"(side 8).

**WARNING**


- Kør ikke med tøj der ikke er sikkert for kørestole. Hvis du kører i kørestolen med en sådan beklædning kan du, eller andre mennesker omkring dig, komme til skade.

3.3. Kontrol af resterende kapacitet på batteriet og installation af batteriet på kørestolen

- (1) Tryk på indikationskontakten for at kontrollere den resterende kapacitet på batteriet. Den resterende kapacitet på batteriet vil blive vist på indikationslamperne.

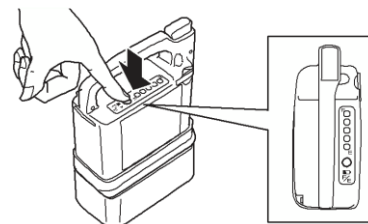

- (2) Kontrollér kontakterne for at sikre at de ikke er snavsede eller rustne. Hvis kontakterne er beskidte eller meget rustne, kan kørestolen blive immobil.

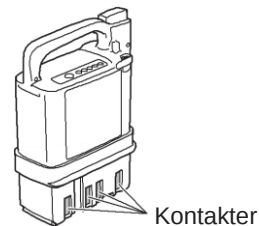


- (3) Installér batteriet på kørestolen.

<Sådan installeres et NikkelMetalHydrid (Ni-MH) batteri>

Sluk for on/off kontakten

Indsæt batteriet indtil det klikker på plads

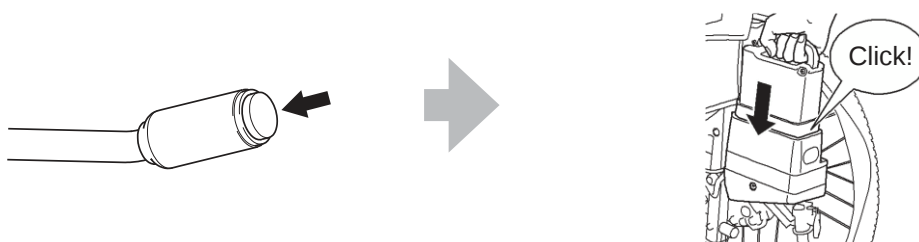


<Sådan installers et Lithium-Ion (Li-ion 00) batteri>

Sluk for on/off kontakten.

Indsæt batteriet.

1 Træk håndtaget ned til siden

2 Indsæt batteriet

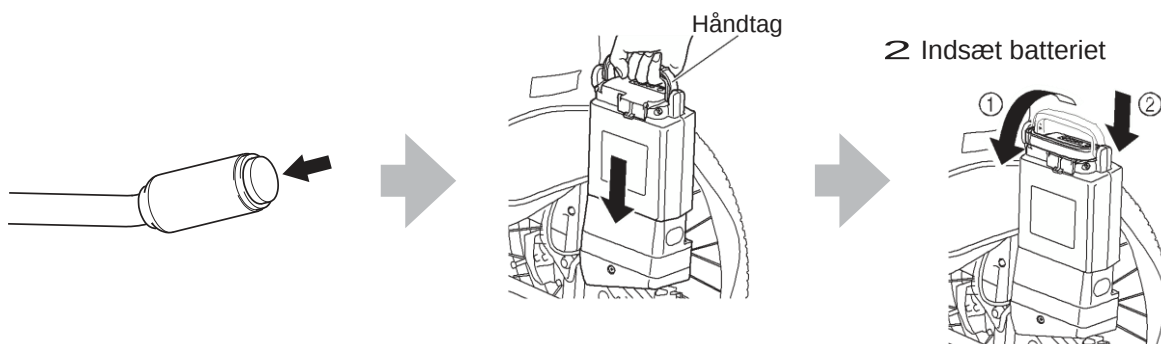



WARNING

- Undgå at tabe eller støde batteriet. Dette kan medføre, at batteriet bliver beskadiget, overophedet eller ødelagt.
- Indsæt ikke batteriet hvis batteriet er snavset eller vådt. Dette kan medføre en kortslutning og føre til brand eller ødelæggelse af batteriet.



WARNING

- Ved håndtering af et Lithium-Ion batteri skal du være forsigtig, så du ikke klemmer dine fingre i håndtaget. Dette kan skade dine fingre.


NOTICE

- Udskift ikke batteriet når strømmen er tændt. Dette kan beskadige batteriet og forårsage funktionsfejl.

4. Kørsel i kørestolen

4.1. Sidde i kørestolen

- (1) Placér kørestolen på et plant og stabilt sted og sluk for strømmen.
- (2) Anvend parkeringsbremsene. Hvis kørestolen ikke har parkeringsbremsen skal en assistent holde fast i kørestolen.
- (3) Sæt dig godt til rette i kørestolen så du ikke falder ud.

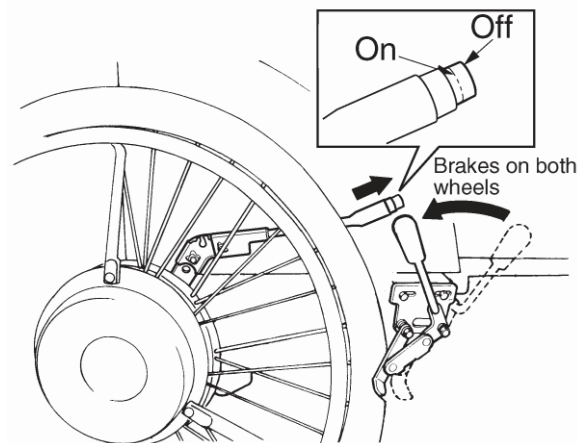

WARNING

- Sæt dig i kørestolen på et jævnt og stabilt sted. Hvis du parkerer kørestolen på en skråning, og forsøger at sætte dig i kørestolen, kan du miste balancen og falde ud.
- Hvis du sætter dig i kørestolen, når parkeringsbremsene er frakoblet, kan kørestolen bevæge sig uventet, og du kan falde ud og komme til skade. Når du sætter dig i kørestolen, skal du sørge for, at parkeringsbremsene er anvendt.
- Hvis du bruger en kørestol uden parkeringsbremsen, skal en assistent holde kørestolen for at sikre, at den ikke bevæger sig, når du sætter dig. Hvis du sætter dig i en kørestol uden parkeringsbremsen, alene, kan kørestolen bevæge sig uventet, og du kan komme til skade.

4.2. Bevægelse af kørestolen



- (1) Motoren aktiveres ved at tænde på on/off kontakten. Efter advarselsslampen har lyst i tre sekunder, vil batteriets kapacitetslamper lyse i intervaller på 2,5 sekunder, og derefter gentages det to gange for at advare brugeren om den resterende batterikapacitet.
- (2) (Valgfrit) Hvis din E-Move har en funktionsvælger, skal du vælge køretilstand ved at skubbe funktionsvælgeren. Der findes to funktioner, tilstand 1 og tilstand 2, som kan vælges. Funktionsforholdene på hver tilstand er indstillet med Smart Tune software. For at indstille forholdene skal du kontakte din forhandler.

Tilstand 1: Denne tilstand er aktiveret når motoren tændes.

LED er "on". Et enkelt bip når tilstand 1 er aktiveret.

Tilstand 2: LED er "off". To bip når tilstand 2 er aktiveret.

- (3) Frigør parkeringsbremsene.

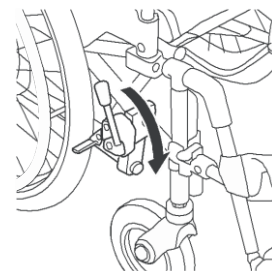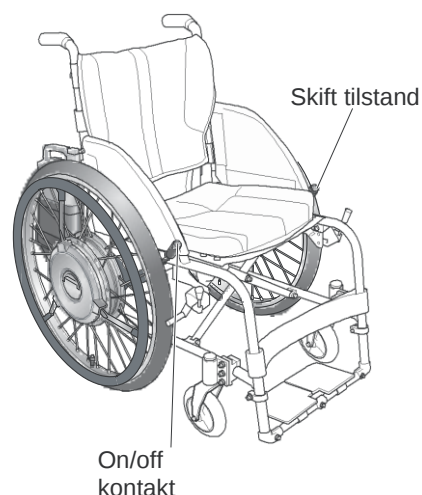

- (4) Kørestolen assisterer dig når du bevæger drivhjulene. Begyndere henvises til side 38 og 39 for, at praktisere de grundlæggende funktioner, indtil du er fortrolig med dem.



TIP Hvis der lyder et bip og kørestolen ikke yder motorhjælp

Hvis der skubbes til drivhjulene når du tænder for strømmen, høres et advarsel-bip og sikkerhedssystemet vil blive aktiveret, hvilket forhindrer kørsel. Stop med at skubbe til drivhjulene og tænd for strømmen igen.

TIP Hvis der lyder et bip under kørsel

Hvis belastningen på motoren er for stor under kørsel, vil et bip lyde konstant.

- (a) Er belastningen for stor?

Den maksimale belastning for E-Move er 130 kg. Overskrid ikke den maksimale belastning.


- (b) Forsøger du at køre op af en stejl skråning?

Den praktiske stigningsvinkel er 6 grader. Vælg en rute, der ikke overstiger denne.


4.3. Kontrol af resterende kapacitet på batteriet under betjening

Under betjening kan du altid tjekke den resterende kapacitet på batteriet ud fra batteriets indikationslampe.

- (1) Når batteriets restkapacitet bliver mindre end 10 % vil advarselsslampen blinke, og et kort bip vil lyde 4 gange.

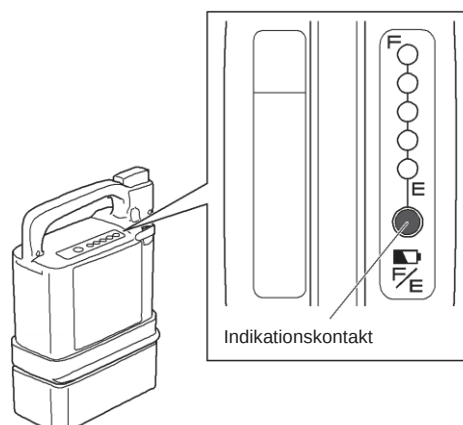

- (2) Når batteriet løber tør vil advarselsslampen tænde, og et langt bip vil lyde én gang.

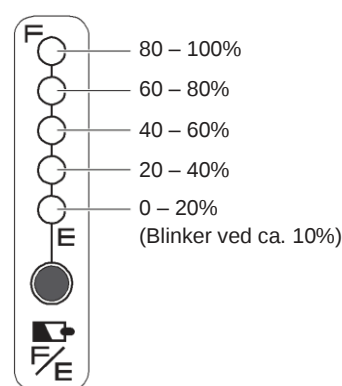

4.4. Øvrige funktioner

- (1) Automatisk “off” funktion

Hvis strømmen er tændt men joysticket ikke betjenes i 5 minutter slukkes strømmen automatisk. For at genoptage driften skal du først slukke på kontakten, og derefter tænde igen. Tiden for hvornår motoren automatisk slukkes kan ændres. Kontakt din forhandler.



WARNING

- Når der lyder et bip der indikerer lav restkapacitet på batteriet, skal du straks flytte til et sikkert sted, slukke for strømmen og oplade batteriet, eller udskifte det med et ekstra batteri (sælges separat). Der kan opstå farlige situationer hvis du pludselig ikke er i stand til at bruge motorhjælp, såsom når du skal krydse en vej.

4.5. Udførsel af basisfunktioner

(1) Øv de grundlæggende funktioner på et sikkert, stort og plant sted.

Basisfunktion 1

- 1 Start med at lære, at bruge drivhjulene.
 - Start med at bevæge drivhjulene langsomt.



- 2 Lær fornemmelsen af at betjene drivhjulene.
 - For at køre langsomt skal du bevæge drivhjulene svagt.
 - For at køre stærkt skal du bevæge drivhjulene yderligere.
 - For at stoppe skal du bevæge drivhjulene baglæns.



- 3 Prøv at køre på følgende måder.

■ Fremad og stop



■ Baglæns

- Gør dig bekendt med håndtering og udførsel af baglæns kørsel.
- Kontrollér bag dig af hensyn til sikkerhed.




■ Drejninger

- Lav drejninger på et enkelt sted.
- Øv dig i at dreje til højre og venstre.



■ S-formet kurve

- Øv dig indtil du kan køre i den ønskede retning.
- Lær fornemmelsen af fart og timing når du drejer.

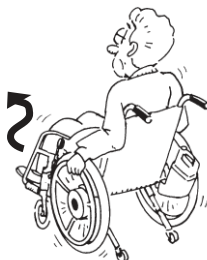

■ Undgå forhindringer

- Øv dig i at undgå forhindringer.
- Stop før du når forhindringen.



- 4 Øv de ovenstående manøvrer i forskellig tempi.

NOTICE

- Hvis du gør brug af en assistent, skal du være opmærksom på ikke, at kolliderer med ham/hende når du kører baglæns.

(2) Øv dig på en faktisk placering hvor du agter at bruge kørestolen.

Basisfunktion 2

1 Fortov

- Pas på du ikke kører ind i fodgængere eller forhindringer.
- Indstil din betjening så den passer til vejbelægningens forhold.




2 Op og ned ved niveauforskel

- Lær, hvordan du sikkert manøvrerer op og ned ad en kantsten.
- Stop kørestolen før en kantsten, og fortsæt derefter forsigtigt.



3 Fodgængerovergang

- Giv dig tid til at krydse vejen ved en fodgængerovergang.
- Vær opmærksom på kantsten mellem vejen og fortovet.

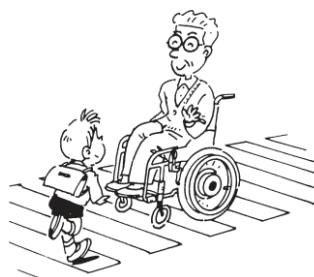


4 Skråning

- Få fornemmelsen af at køre op og ned ad en skråning.
- Vær forsigtig med at genstarte på en opadgående skråning.



5 Automatisk dør

- Øv dig i en passende stoppe-position.

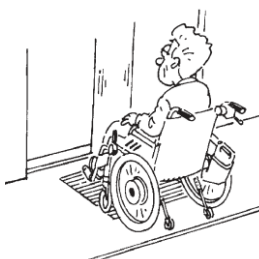

TIP Kontrollér tilstanden af den vej du benytter på daglig basis

Er der en stor niveauforskel, stejl skråning eller ujævn vej?


Prøv at benytte en rute der ikke passerer gennem sådanne farlige steder.

5. Efter brug af kørestolen

5.1. Udstigning af kørestolen


(1) Parkér køresolen på en plan flade.

(2) Sluk for on/off kontakten.

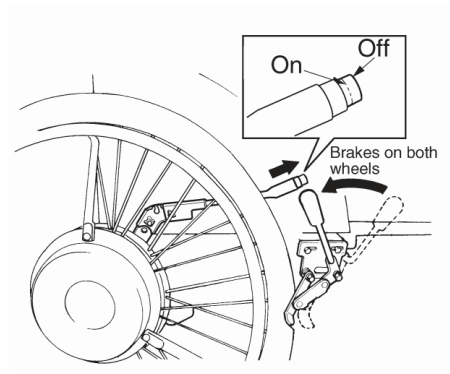

(3) Anvend parkeringsbremserne.

(4) Stig ud af kørestolen og over på en seng eller andet.

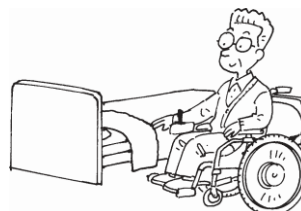


WARNING

- Når du er færdig med at benytte motorfunktionen, skal du huske at slukke for strømmen. Hvis strømmen er tændt når du stiger ud af kørestolen, kan din krop ramme drivhjulene og kørestolen vil bevæge sig, og vil forårsage at du, eller andre personer i dine omgivelser, kan komme til skade.
- Udstigning skal ske på et jævnt og stabilt sted. Hvis du parkerer kørestolen på en skråning, og forsøger at stige ud fra kørestolen og over på en seng eller en stol, kan du miste balancen og falde ud af kørestolen.
- Hvis du stiger ud af kørestolen uden anvendelse af bremserne, kan kørestolen bevæge sig uventet, og du kan falde ud og komme til skade. Når du rejser dig fra kørestolen, skal du sørge for at parkeringsbremserne anvendes.

5.2. Afmontering af batteriet

Frakobl batteriet fra kørestolen. Opbevar batteriet med beskyttelseskapslet på.


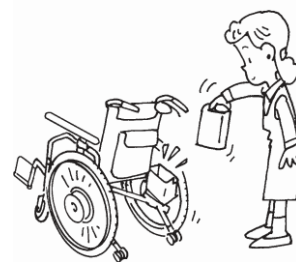


<Sådan afmonterer du et NikkelMetalHydrid (Ni-MH) batteri>

Sluk for on/off kontakten.

Afbryd batteriet ved at trække det lige ud af dets placering, mens du trykker på udløserknappen.

Opbevar batteriet med beskyttelseskapslen på.

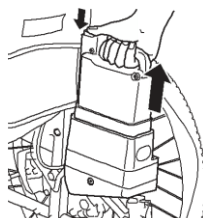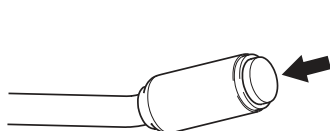




Beskyttelseskapsel

<Sådan afmonterer du et Lithium-Ion (Li-ion 00) batteri>

Sluk for on/off kontakten.

1 Anbring håndtaget i oprejt position.
2 Afbryd batteriet ved at trække det lige ud af dets placering. (Må ikke trækkes ud i en vinkel.)

Opbevar batteriet med beskyttelseskapslen på.

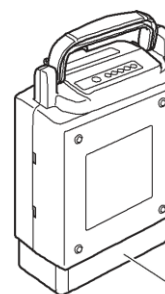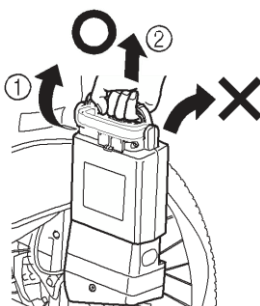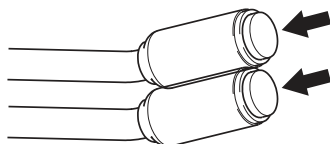


Beskyttelseskapsel



WARNING

- Sørg for at opbevare det afbrudte batteri med beskyttelseskappen på. Blottede kontakter kan forårsage kortslutninger og føre til brand eller brud på batteriet.

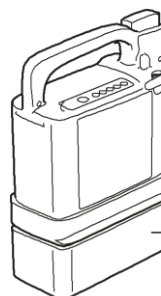


Beskyttelseskapsel

6. Håndtering af batterier og opladere

6.1. Batterityper

Der er to typer af batterier som du kan bruge til E-Move.

Da batterierne er forskellige i karakter og opladningsmetode, skal du kontrollere batteritypen, som du ønsker at benytte.

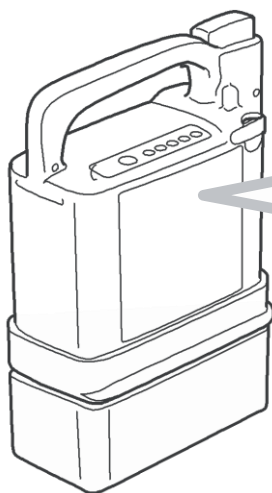

Kontrollér mærkatet på batteriet.

Mærkatet på NikkelMetalHydrid batteriet viser: **“Ni-MH”**.

Mærkatet på Lithium-Ion batteriet viser: **“Li-ion 00”**.

NikkelMetalHydrid og Lithium-Ion batterierne leveres med hver sin oplader.

Læs "7. NikkelMetalHydrid batteri og oplader", hvis du bruger et NikkelMetalHydrid batteri, og "8. Lithium-Ion batteri og oplader", hvis du bruger et Lithium-Ion batteri.



Genbrug batteriet.

Batteriet til E-Move er et genanvendeligt batteri, der indeholder værdifulde ressourcer. Kontakt forhandleren for at genbruge dine brugte batterier.

6.2. Vedligeholdelse

Hold altid kontakterne på batteri og oplader rene. Hvis kontakterne er beskidte, skal du tørre dem af med en tør klud. Brug ikke et vådt håndklæde, eller berør kontakterne direkte, da det kan medføre elektrisk stød. Hvis ydersiden af batteriet eller opladeren er snavset, skal du tørre den af med et håndklæde. Hvis det er meget snavset, skal du bruge et hårdt opvredet håndklæde.

6.3. Advarsler og noter ved håndtering af batteriet



WARNING



- Fejlhåndtering af et af disse batterier, eller dets oplader, kan resultere i varmeudvikling, brud, elektrisk stød eller personskade. Hold dig til nedenstående punkter.

Hvis batteriet, eller opladeren, er deform eller har en usædvanlig lugt, eller hvis du oplever andre uregelmæssigheder, skal du ikke bruge batteriet.



Når du indsætter eller afmonterer Lithium-Ion batteriet, skal du passe på ikke at klemme dine fingre i håndtaget, ellers kan du skade dine fingre.

Rør ikke metal-tilslutningerne på batteriet, eller opladeren, med fingrene, eller rengør polerne med et vådt håndklæde, da det kan resultere i elektrisk stød eller kortslutning.


Genoplad ikke batteriet ved hjælp af en anden oplader end den angivne oplader, og brug ikke batteriet på en anden kørestol end den angivne.

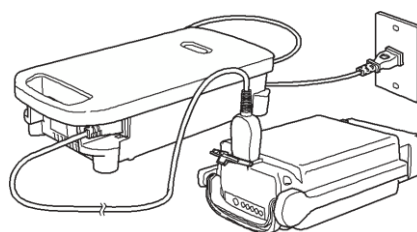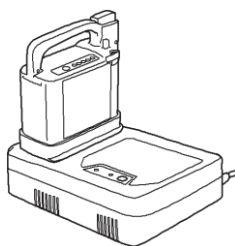


Du må ikke adskille eller ændre batteriet.

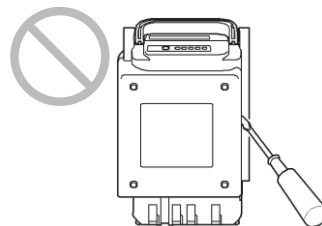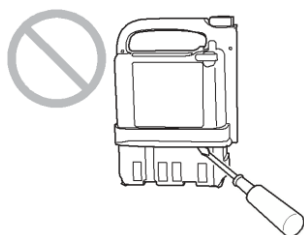



Batteriet må ikke placeres i nærheden af åben ild, eller smides ind i åben ild.

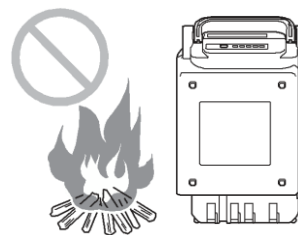

Batteriet må ikke placeres i vand.

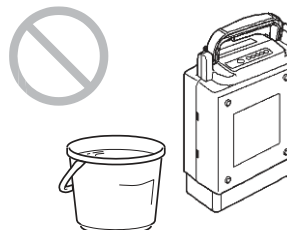

Ved transport af kørestolen, for eksempel i en bil, skal du afmontere batteriet fra kørestolen.

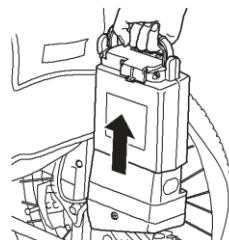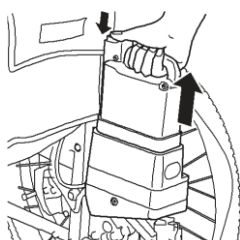





WARNING

- Fejlhåndtering af et af disse batterier eller dets oplader, kan resultere i varmeudvikling, brud, elektrisk stød eller personskade. Hold dig til nedenstående punkter.

Kortslut ikke batteriets terminaler med ledninger eller andre metaller. Sæt altid beskyttelseskapslen på, når batteriet ikke er i brug.


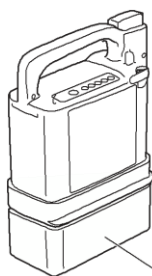


Beskyttelseskapsel


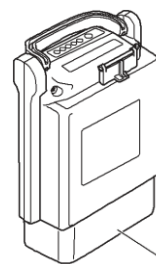


Beskyttelseskapsel



Opbevar ikke batteriet på et sted hvor børn eller kæledyr kan komme i nærheden af det.

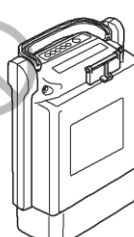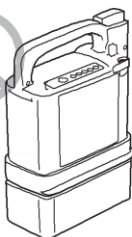



Tab eller stød ikke batteriet.

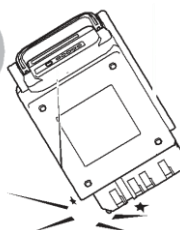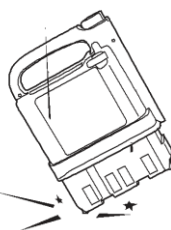



Anvend ikke et beskadiget batteri.

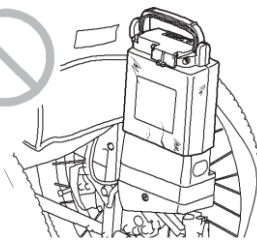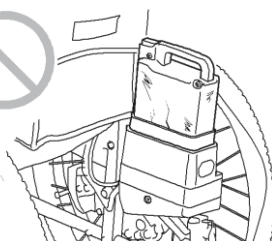

Oplad ikke batteriet på et sted hvor børn eller kæledyr kan komme i nærheden af det.

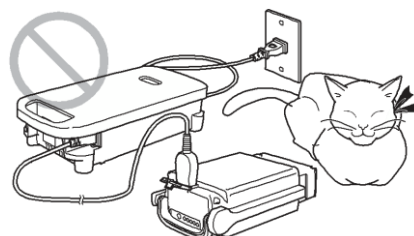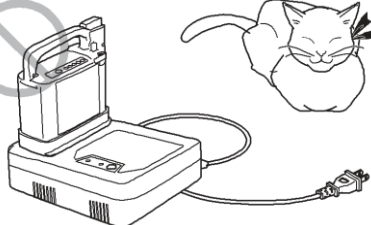

Oplad batteriet på en plan overflade. Efter brug må opladeren ikke forblive tilsluttet i stikkontakten.

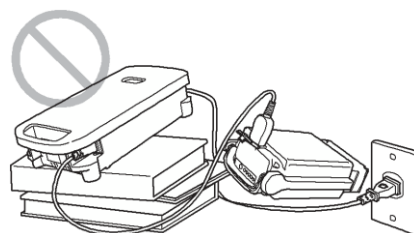
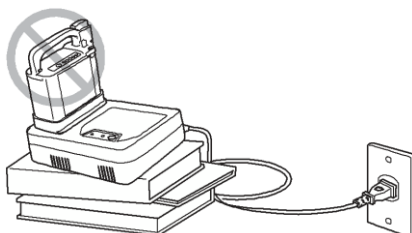





WARNING

- Fejlhåndtering af et af disse batterier, eller dets oplader, kan resultere i varmeudvikling, brud, elektrisk stød eller personskade. Hold dig til nedenstående punkter.



Brug ikke opladeren udendørs eller i nærheden af et brandbart objekt.

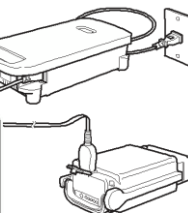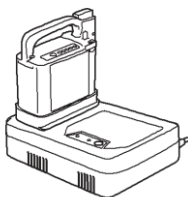



Brug ikke en beskadiget ledning.

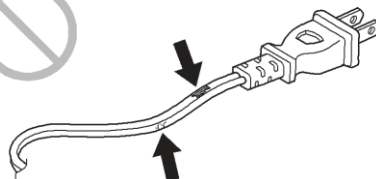


Anbring ikke opladeren i vand, eller plask vand på det.

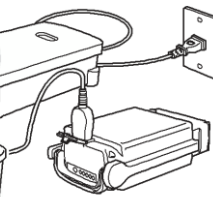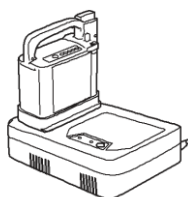



Du må ikke adskille eller ændre opladeren.

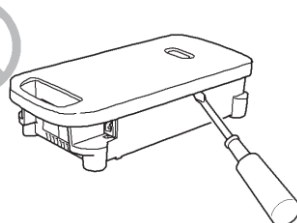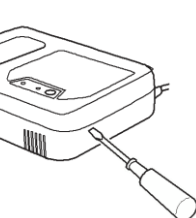

Tab eller stød ikke opladeren.

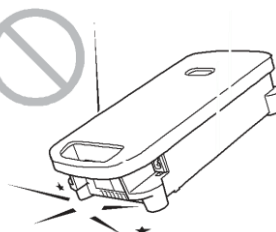

Under opladning må du ikke blokere indsugningen og udluftningen af luft på opladeren.

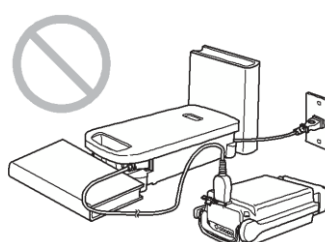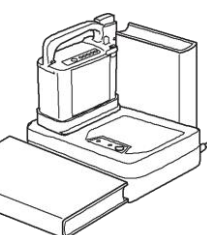

7. NikkelMetalHydrid batteri og oplader

7.1. Funktioner for NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)

- Udstyret med Battery Management Control System (BMC). (Indbygget mikroprocessor). Et internt mikrocomputer system, der bruger en computer til at spore ladning/afladnings status, driftsforhold og temperatur.
- Et miljøvenligt batteri der ikke indeholder kviksølv eller kadmium.
- Kompakt, men høj kapacitet. (Kapacitet: 24 V × 6,7 Ah)


7.2. Sådan bruges NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)

- (1) Montering og afmontering af batteriet på kørestolen.

For instruktioner om montering og afmontering af batteriet på kørestolen, se "3. Før der gøres brug af kørestolen" og "5. Efter brug af kørestolen".

- (2) Kontrol af resterende kapacitet i batteriet

Tryk på indikationskontakten for at se batteriets resterende kapacitet.

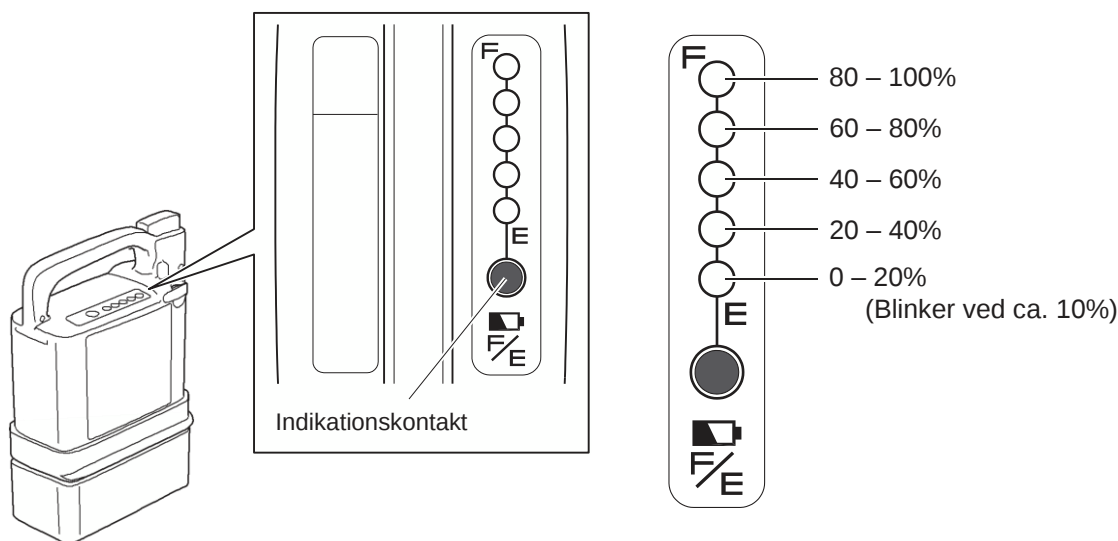


- (3) Opbevaring af batteriet

Opbevar batteriet på et køligt, tørt område. (En placering med en temperatur mellem 10° C - 25° C er optimalt for lagring).

Oplad batteriet helt hvis du planlægger ikke at bruge det i en lang periode.

Hvis du ønsker at opbevare batteriet i mere end 3 måneder uden at bruge det, bør du oplade batteriet hver 3. måned.

Anvend altid beskyttelseskapslen ved opbevaring af batteriet.

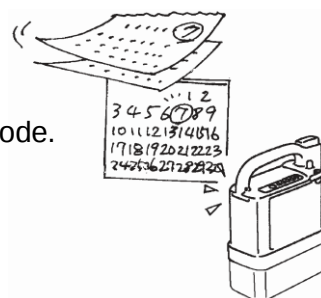

7.3. Kendetegn og håndtering af NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)

(1) Omgivelsestemperatur

Distancen som kan tilbagelægges, kan blive afkortet afhængigt af den omgivende temperatur. For at maksimere batteriets ydeevne anbefales det, at du bruger batteriet under følgende betingelser.

Når kørestolen er i brug:

Temperatur mellem 0 til 35° C (32 – 95 °F)

Efter brug af kørestolen og ved opbevaring:

Temperatur mellem 10 til 25° C (50 – 77 °F)

Ved opladning:

Temperatur mellem 10 til 25° C (50 – 77 °F)

- Opbevaring af batteriet i høje eller lave temperaturer vil fremskynde nedslidningen, og kapaciteten vil hurtigt falde.
- Brug af kørestolen i ekstremt lave temperaturer vil medføre, at batteriets kapacitet hurtigt vil falde. For information om nedslidning, se "Kendetegn for nedslidning af batteriet" på næste side.




(2) Hukommelsesegenskab og refresh-opladning (genopfrisk)

Når et NikkelMetalHydrid batteri ikke aflades og oplades helt, gentagne gange, opstår en hukommelsesegenskab, hvor den faktiske brugbare kapacitet falder.

Hukommelsesegenskaben kan forebygges og elimineres ved fuld afladning af batteriet og derefter genopladning (refresh-opladning).

Hvis refresh-lampen på opladeren blinker, under genopladning skal du trykke på knappen for at udføre en refresh-opladning.

Refresh-opladningen tager længere tid end en normal opladning.

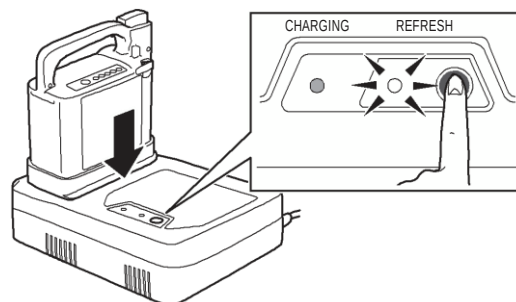

For flere detaljer om refresh-opladning, se "7.5. Refresh-opladning af NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)" (Side 51).

(3) Kendetegn for nedslidning af batteriet


Alle batterier er forbrugsvarer. Et batteri forringes gradvist og kapaciteten aftager med tiden, og i takt med brug.

I hvilket omfang kapaciteten falder ved nedslidning, afhænger af i hvilke forhold man bruger batteriet. For et NikkelMetalHydrid batteri vil kapaciteten falde til cirka 60 %, set i forhold til et nyt batteri, efter 300 opladninger/afladninger, ved normalt brug.

Selvom et batteri ikke anvendes når det opbevares i en længere periode, vil det blive forringet og kapaciteten vil falde.

Hvis du har flere batterier bør du skifte mellem batterierne.

Omfanget af forringelsen af et NikkelMetalHydrid batteri kan kontrolleres, når opladningen er færdig, ved at trykke på indikationskontakten.

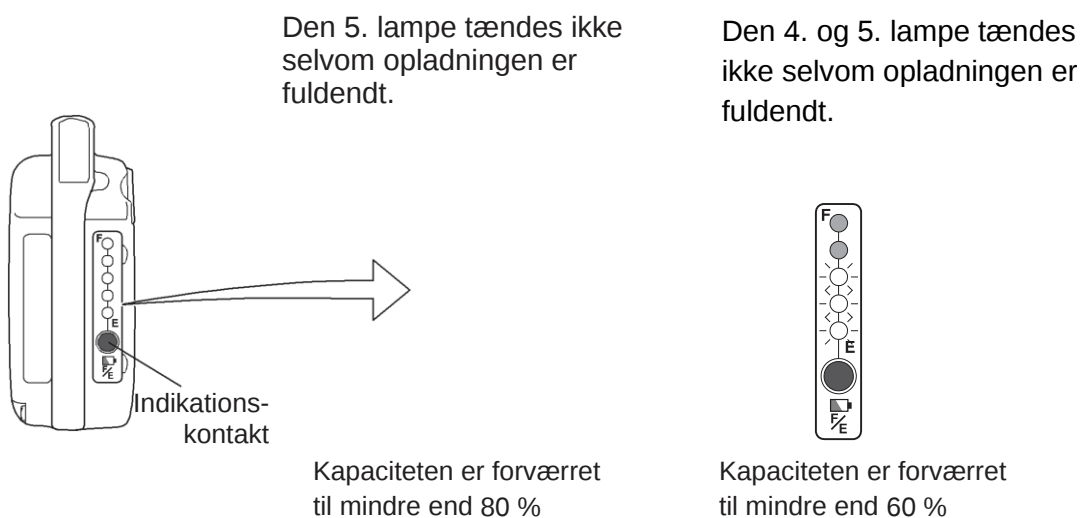



● : Slukket

☉ : Tændt


☼ : Blinker

7.4. Sådan oplades NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)


- (1) Sæt strømkablet til den medfølgende oplader (JWC-2), og tilslut til en stikkontakt.

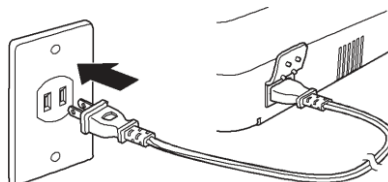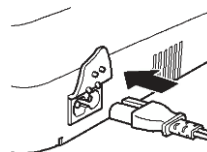


- (2) Sæt batteriet i opladeren som vist på tegningen.

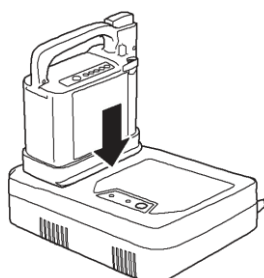

- (3) Opladerlampen (grøn) på opladeren tændes, og batteriet begynder at oplade.

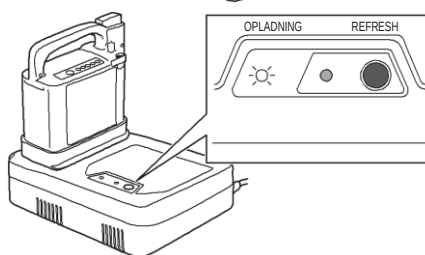

Hvis opladerlampen (grøn) ikke tændes, og refresh-lampen (orange) blinker, henvises til "7.5. Refresh-opladning af NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)" (Side 51).

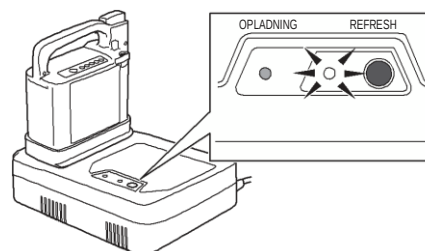


Hvis opladningen starter fra tom tilstand, tager opladningen fra start til slut typisk 2,5 til 3 timer. Hvis opladning sker på et sted med høj temperatur, eller hvis batteriet er helt nyt, kan det tage længere tid.

● : Slukket

☀ : Tændt

☀ : Blinker


- (4) Kontrollér at opladningen er færdig.
Når opladningen er færdig, vil batteriets kapacitetslampe og opladerlampe (grøn) slukke.

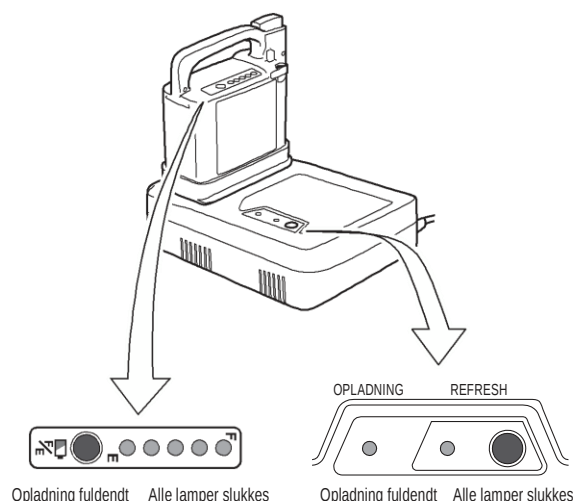


Efter opladningen er fuldendt, kan du tjekke den opladede kapacitet ved, at trykke på batteriets indikationskontakt.

Hvis ikke alle lamper tændes kan det følgende være sket:

- Under opladning kan batteriets temperatur være steget for meget, hvilket får beskyttelsesmekanismen til at afbryde opladningen.
- Forringelsen af batteriet har udviklet sig og kapaciteten er faldende.

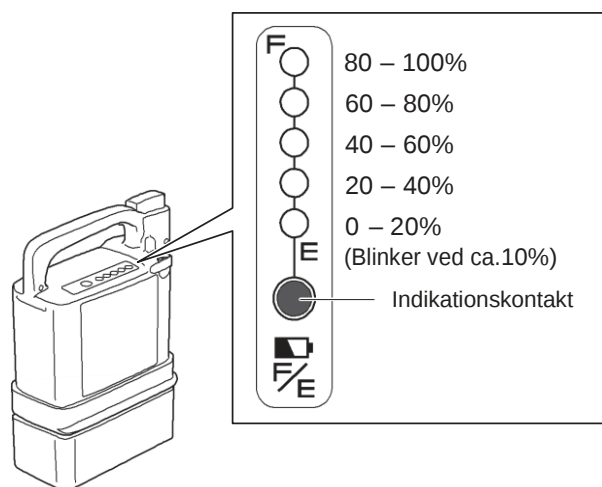

- (5) Tag ledningen ud af stikkontakten.
- (6) Fjern batteriet fra opladeren.
Hvis du ønsker at opbevare batteriet i denne tilstand, skal beskyttelseskapslen sættes på.

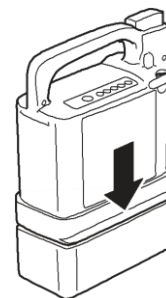

WARNING

- Sørg for at opbevare det afbrudte batteri med beskyttelseskapslen på. Synlige kontakter kan forårsage kortslutninger, og føre til brand eller brud på batteriet.

NOTICE

- Træk ikke i ledningen. Dette kan medføre at ledningerne knækker og dermed ødelægges.

TIP Hvis du ikke er i stand til at oplade batteriet

Se "13. Fejlfinding" på side 76.

7.5. Refresh-opladning af NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2)


En refresh-opladning er nødvendig på et NikkelMetalHydrid batteri for at fjerne hukommelsesegenskaben.

Hvis refresh-lampen blinker når batteriet er indsat i opladeren, skal du trykke på refresh-kontakten for, at udføre en refresh-opladning.


(Refresh-lampen blinker efter hver 20. til 30. opladningsperiode.)

- (1) Mens refresh-lampen (orange) blinker skal du trykke på refresh-kontakten.

- Refresh-lampen (orange) blinker kun når refresh-opladning er nødvendig.

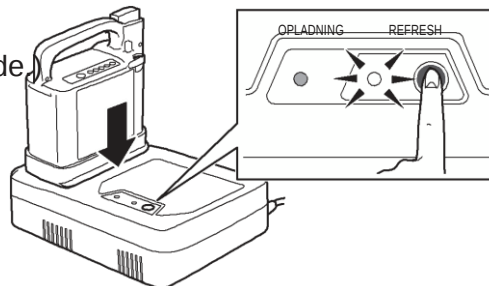

- (2) Refresh-lampen (orange) blinker, og refresh-opladningen starter.

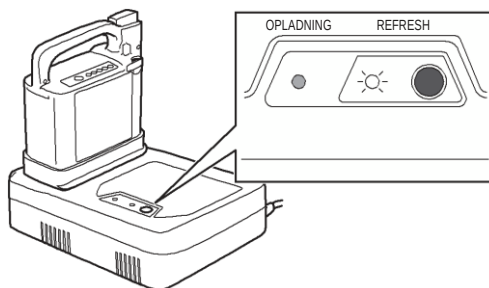

Efter alt resterende elektricitet er blevet udledt i en refresh-opladningsproces, slukkes refresh-lampen. Opladerlampen lyser og en normal opladning begynder. Den tid det tager fra starten af refresh-opladningen til færdiggørelsen af en normal opladning er 3-13 timer.

- Hvis batteriets temperatur stiger i løbet af en refresh-opladning, vil opladerlampen (grøn) blinke, og opladningen vil holde pause. Når batteriet opnår en passende temperatur, vil opladerlampen holde op med at blinke, og opladningen starter automatisk.
- Selv hvis du undlader at trykke på refresh-kontakten kan du kortvarigt fjerne batteriet fra opladeren, og derefter sætte batteriet i igen for at se refresh-opladningens alarmmelding.
- Hvis du ikke trykker på refresh-kontakten, mens refresh-lampen (orange) blinker, vil den blinkende refresh-lampe slukke efter 1 minut. Derefter vil opladerlampen lyse og en normal opladningsproces begynder. I dette tilfælde vil refresh-lampen blinke igen, næste gang du oplader batteriet.

TIP Tips til opladning

- Det anbefales, at du oplader batteriet mens du sover.
- Da refresh-opladningen sker efter at alt resterende elektricitet er udledt, vil det tage lang tid, hvis du udfører det på et batteri med en høj restkapacitet. Det anbefales, at du udfører en refresh-opladning på et batteri, der er drænet så meget som muligt.

● : Slukket

☉ : Tændt

☼ : Blinker

7.6. Temperaturen på NikkelMetalHydrid batteriet (JWB2) under opladning

Oplad batteriet i et miljø med en temperatur på 10 til 25° C (50 til 77° F).

- Hvis batteriets indvendige temperatur er under 0° C (32 ° F) eller over 40° C (104° F), startes opladningen ikke for at beskytte batteriet. I stedet går batteriet på standby-tilstand. I løbet af denne periode vil opladningslampen (grøn) blinke.

Når batteriet opnår en passende temperatur, mens standby-tilstanden er anvendt, vil opladerlampen skifte fra at blinke til en "on"-tilstand, og opladningen starter automatisk. (Længden af standby-tilstanden varierer afhængigt af forholdene.)

Hvis der udføres en refresh-opladning når batteriets indvendige temperatur er under 0° C (32° F) eller over 40° C (104° F), kan opladningen gå på standby-tilstand, da det overgår til normal opladning efter afladning af den resterende elektricitet.

- Batteriets temperatur stiger under opladning, dog vil opladeren stoppe opladningen, hvis batteriets temperatur stiger til over 50° C (122 ° F), og strømmen til opladeren slukkes.

Da opladningen ikke er afsluttet, er det nødvendigt at oplade igen efter batteriets temperatur er faldet.

Opladning af et batteri straks efter brug, eller opladning af et nyt batteri, kan forårsage at temperaturen stiger, hvilket øger sandsynligheden for, at opladeren vil stoppe opladning før afslutning.


- Køleventilation sker automatisk hvis opladerens temperatur stiger under opladning. Under opladning må indsugning og udluftning på opladeren ikke blokeres.

7.7. Indikationslamper på opladeren (JWC-2)

- (1) Opladerlampe (grøn) er tændt

Angiver normal opladning.


Opladerlampen slukker når opladningen er færdig.

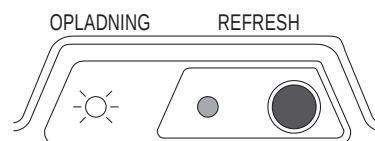

- (2) Opladerlampe (grøn) blinker

Opladning på standby

- Når batteriets temperatur ikke er inden for opladningsområdet (0 til 40° C 32 til 77° F), vil opladeren gå på standby-tilstand og opladerlampen (grøn) vil begynde at blinke.
- Når batteriets temperatur falder, og er inden for opladningsområdet, vil opladningen starte automatisk, og opladerlampen (grøn) skifter fra at blinke til en "on"-tilstand. Hvis opladningstiden fortsætter i lang tid, vil opladningen stoppe, og strømmen til opladeren slukkes.

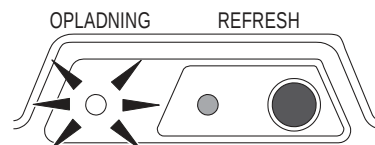


- (3) Refresh-lampen (orange) blinker

Refresh-opladning bliver efterspurgt.


Mens refresh-lampen blinker skal du trykke på refresh-kontakten for at udføre en refresh-opladning.

Hvis du ikke trykker på kontakten vil en normal opladning begynde efter 1 minut.

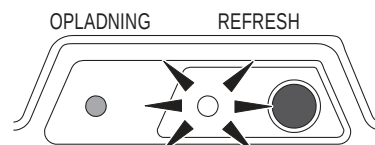

- (4) Refresh-lampen (orange) er tændt

Den resterende strøm aflades som en del af refresh-opladningsprocessen. Når udledningen er færdig vil den normale opladning starte.

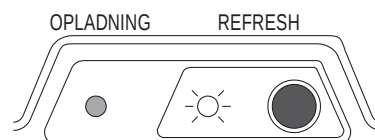

● : Slukket

☀ : Tændt

☀ : Blinker

8. Lithium-Ion batteri og oplader

8.1. Funktioner for Lithium-Ion batteriet (ESB1)

- Har en højere energikapacitet i forhold til NikkelMetalHydrid batteriet.
- Udstyret med Battery Management Control System (BMC). (indbygget mikroprocessor)
Det er et system, der bruger en computer til at spore ladning-/afladningsstatus, driftsforhold og temperatur.
- Selv med gentagne små opladninger, er det vanskeligt for hukommelsesegenskaben at forekomme. Derfor er refresh-opladningen ikke nødvendig, og opladningen kan fornyes additivt.
- Et miljøvenligt batteri der ikke indeholder kviksølv eller kadmium.
- Kompakt, men høj kapacitet. (25 V × 11,8 Ah).


8.2. Sådan bruges Lithium-Ion batteriet (ESB1)

- (1) Montering og afmontering af batteriet på kørestolen

For instruktioner om fastgørelse og afmontering af Lithium-Ion batteriet på kørestolen, se "3. Før der gøres brug af kørestolen" og "5. Efter brug af kørestolen".

- (2) Kontrol af resterende kapacitet i batteriet

Tryk på indikationskontakten for at se batteriets resterende kapacitet.

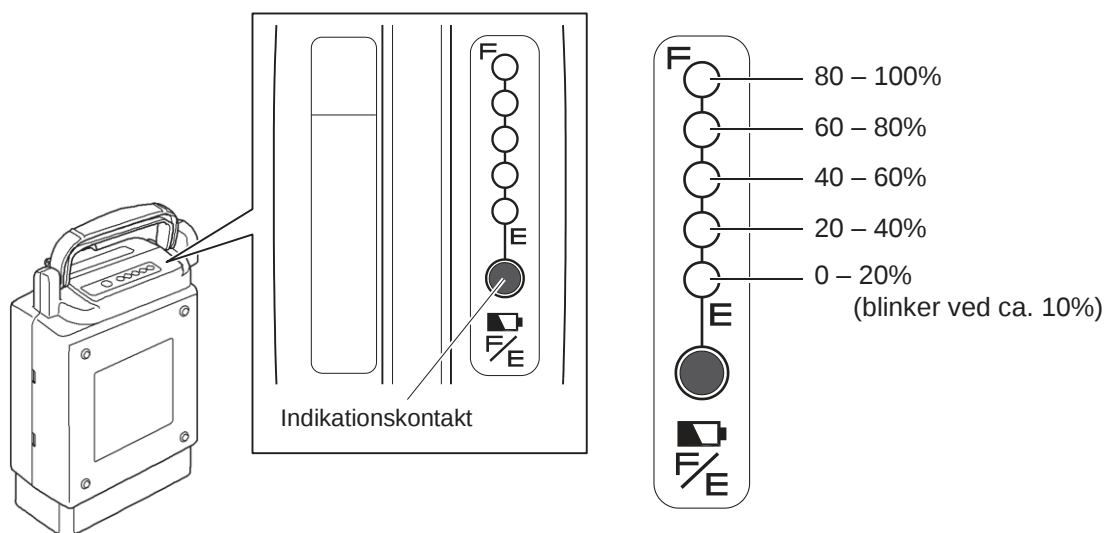


- (3) Opbevaring af batteriet

Opbevar batteriet på et køligt, tørt område. Hvis du planlægger ikke at bruge batteriet i en længere periode, skal det oplades så 3 af kapacitets-indikationslamperne lyser.

Hvis du opbevarer batteriet uden at bruge det i over 3 måneder, bør du tjekke batteriet hver 3. måned for, at kontrollere at alle 3 kapacitets-indikationslamper lyser. Hvis 2 eller færre lamper tændes, skal du oplade batteriet indtil 3 lamper tændes.

Sæt altid beskyttelseskapslen på ved opbevaring af batteriet.

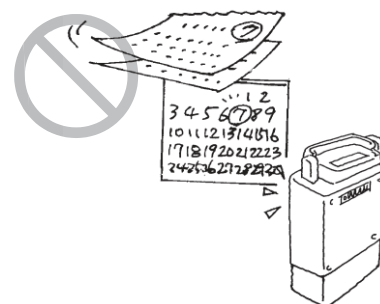

8.3. Kendetegn og håndtering af Lithium-Ion batteriet (ESB1)

(1) Omgivelsestemperatur

Distancen som kan tilbagelægges kan blive afkortet, afhængigt af den omgivende temperatur. For at maksimere batteriets ydeevne anbefales det, at du bruger batteriet under følgende betingelser.

Når kørestolen er i brug:

Temperatur mellem 0 til 35°C (32 – 95 °F)

Efter brug af kørestolen og ved opbevaring:

Temperatur mellem 10 til 25°C (50 – 77 °F)

Ved opladning:

Temperatur mellem 10 til 25°C (50 – 77 °F)

- Opbevaring af batteriet i høje eller lave temperaturer vil fremskynde nedslidningen, og kapaciteten vil hurtigt falde.
- Brug af kørestolen i ekstremt lave temperaturer vil medføre, at batteriets kapacitet hurtigt vil falde. For information om nedslidning, se "Kendetegn for nedslidning af batteriet" på næste side.



TIP Hvis den indvendige temperatur i Lithium-Ion batteriet bliver for høj eller for lav, under kørsel, vil en brummende lyd underrette dig.

- Når du bruger et Lithium-Ion batteri, vil en lyd bippe i 5 sekunder, hvis batteriets indvendige temperatur falder til 0° C (32° F) eller derunder, eller stiger til 45° C (113° F), eller derover.
- Når summeren bipper, skal du straks returnere til et miljø, der er inden for den anbefalede operationelle temperatur.
- Ved nedkørsel af en skråning i kørestolen vil hjælpemotoren, i modsætning til normal drift, genererer elektricitet og oplade batteriet. Opladning af et Lithium-Ion batteri, når temperaturen er 0° C (32° F) eller under/45° C (113 ° F) eller over, medføre forringelser meget hurtigt. Af denne grund kan kørestolen holde op med at fungere for, at beskytte batteriet når du kører ned af en skråning i sådanne temperaturer. Når dette sker, vil du høre 5 lange bip, før kørestolen stopper, og derefter et langt bip i 10 sekunder imens kørestolen stopper.

(2) Kendetegn for nedslidning af batteriet

Alle batterier er forbrugsvarer. Et batteri forringes gradvist og kapaciteten aftager med tiden og i takt med brug.

I hvilket omfang kapaciteten falder ved nedslidning, afhænger af i hvilke forhold man bruger batteriet.

Selvom et batteri ikke anvendes, når det opbevares i en længere periode, vil det blive forringet og kapaciteten vil falde.

TIP Umiddelbart efter Lithium-Ion batteriet har afsluttet opladning (fuldt opladt), vil alle 5 lamper være tændt, når der trykkes på indikationskontakten. Selv hvis batteriet er forringet vil alle 5 lamper tændes.

(3) Levetiden for et Lithium-Ion batteri


Levetiden for et Lithium-Ion batteri (ESB1) er 8 år fra første opladning, eller en opladningskapacitet på 8.000 Ah.

• Alarm for batteriets levetid

Kapacitetslampen begynder at advare dig 3 måneder før batteriet ikke længere er opladeligt pga. batteriets levetid, eller når den integrale opladningskapacitet når 7.800 Ah. Når opladningen er færdig, og opladerstikket er frakoblet, vil kapacitetslampen tænde og slukke som vist på figuren til højre.

• Når batteriet når slutningen af sin levetid


Når batteriet når slutningen af sin levetid, vil lampen på opladeren ikke tænde, når du forsøger at oplade batteriet. Desuden vil batteriets kapacitetslampe ikke længere tænde, og batteriet kan ikke oplades.

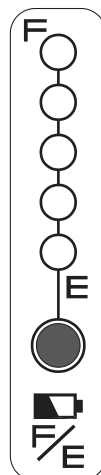

Kapacitetslampen tænder og slukker i 5 sekunder i den rækkefølge som pilene går.

TIP Hvis du glemmer den dato, du begyndte at bruge dit Lithium-Ion batteri.

Batteriets fremstillingsdato er trykt på dets bund. Brug den som en reference.

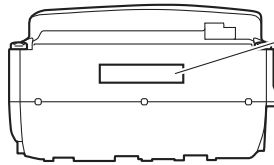

Fremstillet: april(4) 25, 2013


- Startdatoen for brugen af batteriet, er defineret som den dato, hvor brugeren opladet batteriet for første gang efter afsendelse fra fabrikken.
(Dette svarer ikke til den fremstillede dato ovenfor.)
- Når den opladningskapacitet når 8.000 Ah, vil batteriet ikke længere være anvendeligt, selv om det ikke har været i brug i 8 år.
 - * En opladningskapacitet 8.000 Ah er cirka 700 gange kapaciteten af "ESB1" Lithium-Ion batteri (det svarer dermed til cirka 700 opladninger, når batteriet bliver fuldt opladet fra restkapaciteten 0).

8.4. Sådan oplades Lithium-Ion batteriet (ESB1)




Der er to måder hvorpå batteriet kan oplades; Enten ved at afmontere det fra kørestolen, eller mens det stadig er fastgjort til kørestolen.

(1) Opladning af batteriet når det er afmonteret fra kørestolen

- 1 Kontrollér at beskyttelseskapslen er på batteriet.
Hvis den ikke er, skal du sørge for at fastgøre beskyttelseskapslen.
- 2 Sæt strømkablet til den medfølgende oplader (ESC1), og tilslut til en stikkontakt.
- 3 Med batteriet hvilende på sin side, åbn dækslet, og indsæt opladerstikket i batteriet.
- 4 Kontrollér at opladerlampen (grøn) på opladeren tændes.
Hvis opladerlampen ikke lyser grønt, skal du se "8.6. Indikationslamper på oplader"(side 60).
- 5 Under opladning kan du kontrollere opladningstilstanden af batteriet på opladerlampen.
Opladerlampen slukker når opladningen er færdig. Antages det, at opladningen startede da batteriet var tomt, vil det typisk tage 4,5 timer før opladningen er fuldendt.
- 6 Når opladningen er færdig, skal du trække stikket og strømstikket ud, og sikkert lukke batteriets dæksel.

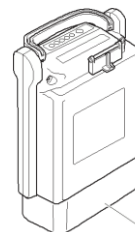

Beskyttelseskapsel

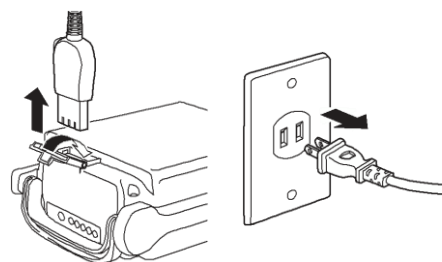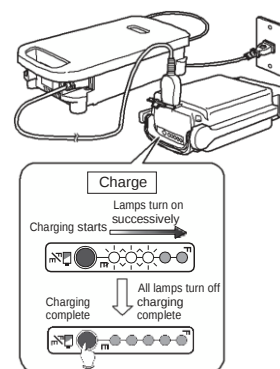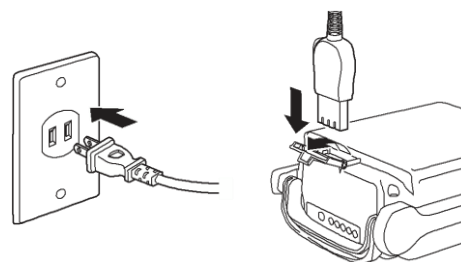

(2) Opladning af batteriet imens det er monteret på kørestolen

1 Forbered opladning.

Fjern eventuelle tasker og bagage fra ryglænet, og alt andet, der potentielt kan indvikle opladningskablet.

Parkér kørestolen indendørs på et plant gulv, anvend parkeringsbremsene, og indstil venstre og højre koblingshåndtag i motordreven position.


2 Sluk for strømmen på kørestolen.

Som en sikkerhedsforanstaltning under opladning, kan kørestolen ikke tændes, selvom den er tændt.




3 Sæt strømkablet til opladeren (ESC1), og tilslut til en stikkontakt.


4 Sæt opladerstikket i batteriet.

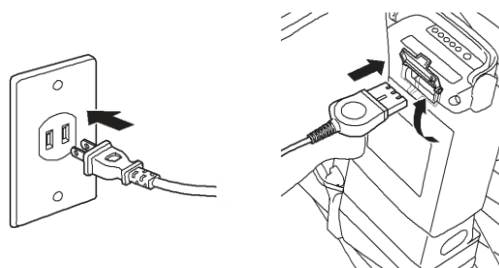


5 Kontrollér at opladerlampen (grøn) på opladeren tændes. Hvis opladerlampen ikke lyser grønt, skal du se "8.6. Indikationslamper på oplader"(side 60).

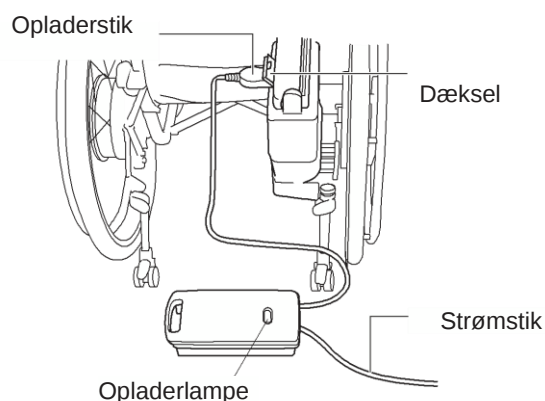

6 Under opladning kan du kontrollere opladningstilstanden af batteriet på opladerlampen. Opladerlampen slukker når opladningen er færdig. Antages det, at opladningen startede da batteriet var tomt, vil det typisk tage 4,5 timer før opladningen er fuldendt.

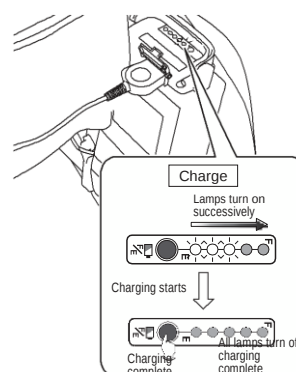

7 Når opladningen er færdig, skal du trække stikket og strømskikket ud, og sikkert lukke batteriets dæksel.

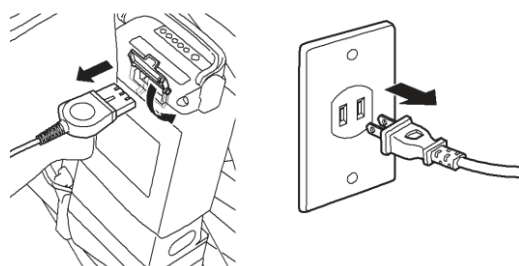

8.5. Temperaturen på Lithium-Ion batteriet (ESB1) under opladning

Oplad batteriet i et miljø med en temperatur på 10 til 25° C (50 til 77° F)

- Hvis batteriets indvendige temperatur er under 0° C (32° F) eller over 40° C (104° F), er opladningen ikke i stand til, at starte for at beskytte batteriet. I stedet går det på standby-tilstand. I løbet af denne periode vil opladningslampen (grøn) blinke.

Når batteriet opnår en passende temperatur, mens standby-tilstanden er anvendt, vil opladelampen skifte fra at blinke til en "on"-tilstand, og opladningen starter automatisk. (Længden af standby-tilstanden varierer afhængigt af forholdene.)

- Batteriets temperatur stiger under opladning. Hvis batteriets temperatur stiger til over 45° C (113° F) vil strømmen til opladeren slukkes for at beskytte batteriet.

Da opladningen ikke er afsluttet, er det nødvendigt at oplade igen, efter batteriets temperatur er faldet.

Opladning af et batteri straks efter brug, eller opladning af et nyt batteri, kan forårsage at temperaturen stiger, hvilket øger sandsynligheden for, at opladeren vil stoppe opladning før afslutning.


- Den varme der genereres under opladning vil blive udledt fra overfladen af opladeren. Under opladning skal du sørge for, at efterlade tilstrækkelig plads omkring opladeren så varmen kan bortledes.

8.6. Indikationslamper på oplader

- (1) Lyser grøn

Angiver normal opladning.

Opladningslampen slukker efter opladningen er færdig.

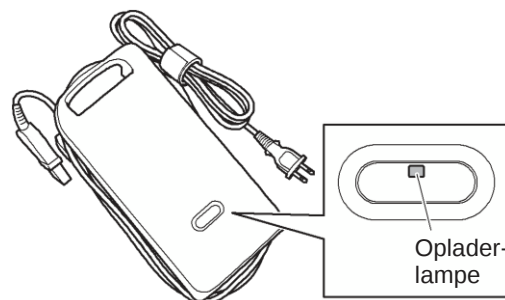

- (2) Blinker grønt
Opladning standby

- Når batteriets temperatur ikke er inden for opladningsområdet (0 til 40° C, 50 til 77° F), går opladeren på standby-tilstand og opladeren begynder at blinke grønt.
- Når opladningen er på standby, og batteriets temperatur igen falder til opladningsområdet, vil opladerlampen lyse konstant grønt, og opladningen starter automatisk. Men hvis opladningen er på standby i lang tid, bliver opladningen afbrudt. Når dette sker, vil opladerlampen blinke hurtigt grønt.

- (3) Konstant eller blinkende rød

Opladeren har registreret et problem i opladeren, eller batteriet, og er ude af stand til at oplade. Stop opladningen ved at afbryde opladerstikket og strømstikket. Kontrollér batteri, oplader og ledningstilslutningen for ethvert problem, og prøv derefter at oplade igen.

Hvis lampen lyser eller blinker rødt, kan en materiel fejl være opstået. Stop opladningen ved at afbryde opladerstikket og strømstikket, og få udstyret inspiceres af din forhandler.

9. Transport og opbevaring af kørestolen

Der henvises til advarsler i "1.5.15. Transport og opbevaring af kørestolen" på side 23 til 25.

9.1. Indlæsning af kørestolen i en bil


- (1) Sluk for strømmen på kørestolen.



- (2) Afmonter batteriet.

Sørg for at fjerne batteriet fra kørestolen, så strømmen ikke tændes uventet under transport.

Vær sikker på at sætte beskyttelseskapslen på det afmonterede batteri.

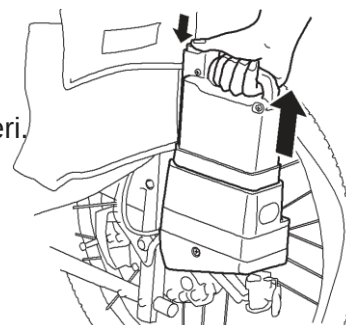

- (3) Lås hjulene.

Anvend parkeringsbremsene.

- (4) Fjern eventuelle aftagelige dele.

Fjern fod/benstøtter og andre dele der kan løsne sig.


- (5) Frigør drivenheden.

Hvis det er nødvendigt, skal du frigøre drivenhederne fra kørestolsrammen.

Se "10.1. Afmontering og installation af enheden" (side 66 til 68).

- (6) Fold kørestolen.


Hvis det er nødvendigt, fold da kørestolen.

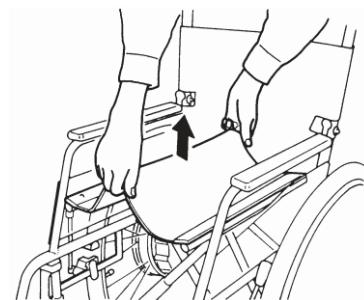



WARNING


- Sørg for at opbevare det afbrudte batteri med beskyttelseskapslen på. Synlige kontakter kan forårsage kortslutninger og føre til brand eller brud på batteriet.

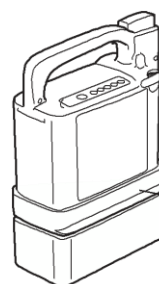

Beskyttelseskapsel

9


- (6) Indlæsning af kørestolen i en bil.
Indlæs kørestolen forsigtigt ved at holde rammen med begge hænder.

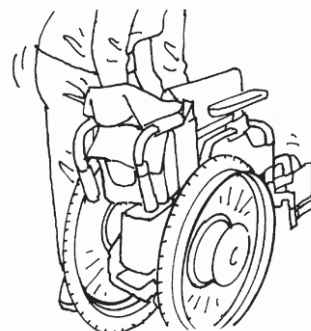

- (7) Fastgør kørestolen.
Fastgør kørestolen for at forhindre den i at bevæge sig eller ramme nogle omgivende objekter.


TIP Ved læsning:

- Dette produkt bruger elektroniske dele. Påfør ikke hårde stød.
- Læs den oprejst når det er muligt.

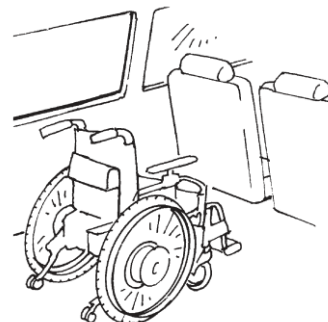

TIP Fastgør kørestolen


- Spænd kørestolen fast med f.eks. et bælte, eller placér et stødabsorberende materiale under og omkring kørestolen.

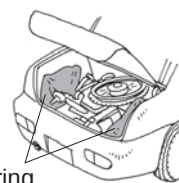

Polstring

9.2. Aflæsning af kørestolen fra en bil

- (1) Aflæs kørestolen fra bilen.

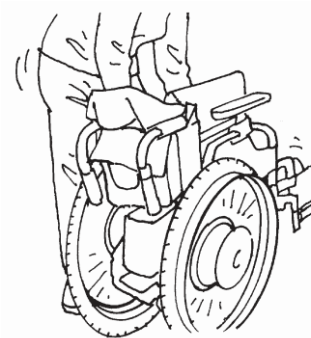

- (2) Sæt de afmonterede dele og fritliggende enheder tilbage på deres oprindelige pladser, og udfold kørestolen.



- (3) Kontrollér at parkeringsbremsene er anvendt.

- (4) Kontrollér at anti-tip enheden er i den korrekte position.



TIP Ved læsning:

- Dette produkt bruger elektroniske dele. Påfør ikke hårde stød.





WARNING

- Hvis fod- og benstøtten fjernes, eller foldbare dele foldes, skal du sørge for, at placere dem i deres oprindelige positioner før du betjener kørestolen. Anvend aldrig kørestolen når dele er afmonteret eller foldede. Du kan komme til skade.
- Hvis anti-tip enheden er foldet eller trukket tilbage, skal du sørge for, at placere den i den oprindelige position og kontrollere, at den er låst før du betjener kørestolen. Betjen aldrig kørestolen med anti-tip enheden foldet eller tilbagetrukket.


9.3. Opbevaring af kørestolen

- (1) Anvend parkeringsbremsene.
- (2) Sluk for strømmen og afmontér batteriet.
- (3) Opbevar kørestolen under normale temperaturer indendørs hvor der er mindre fugtighed.
- (4) Brug et hårdt opvredet håndklæde til at aftørre snavs eller pletter før opbevaring.

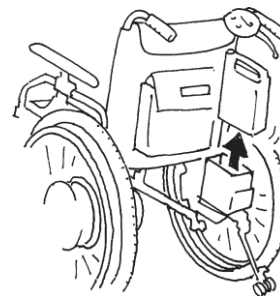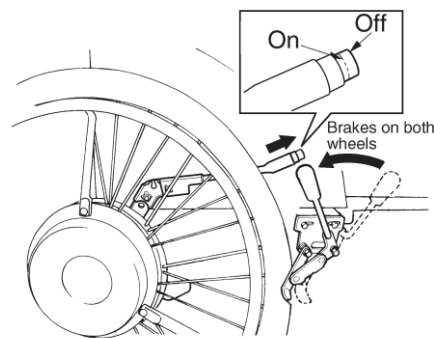

WARNING

- Sørg for at afmontere batteriet når det ikke er i brug, således at strømmen ikke tændes uventet under opbevaring.
- Sørg for at opbevare det afmonterede batteri med beskyttelseskapslen på. Blottede kontakter kan medføre kortslutninger og føre til brand eller brud på batteriet.

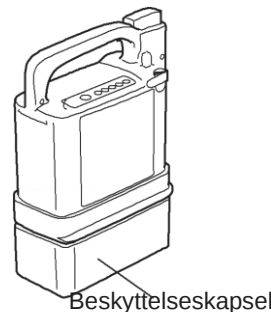

TIP Ved opbevaring af batteriet i en længere periode, se afsnit nedenfor, og vær opmærksom på advarende noter.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| • NikkelMetalHydrid batteriet | “7.2. (3)Opbevaring af batteriet” |
| • Lithium-Ion batteriet | “8.2. (3)Opbevaring af batteriet” |

Der henvises til advarsler i "1.5.15. Transport og opbevaring af kørestolen" på side 22 til 24.

9.4. Ombordstigning på et fly

Når din flyrejse er fastlagt skal du, i forvejen, informere dit flyselskab om, at du bruger en elektrisk kørestol, og følge deres anvisninger. På dette tidspunkt skal du give flyselskabet oplysninger om din kørestol. Se specifikationerne for batteriet du bruger nedenfor:

- NikkelMetalHydrid batteri (vist som “Ni–MH” på etikken)
 - Model JWB2
 - Spænding 24 V
 - Kapacitet 6.7 Ah
 - Type Tørelement med indbygget mikrocomputer
- Lithium-Ion batteri (vist som “Li-ion 00” på etikken)
 - Model ESB1
 - Spænding 25 V
 - Kapacitet 11.8 Ah (280 Wh)
 - Type Tørelement med indbygget mikrocomputer

Om Lithium-Ion batteriet

Der kan være begrænsninger i forhold til, at bære Lithium-Ion batteriet om bord, eller at checke det ind som bagage. Vær sikker på at rådføre dig med flyselskabet på forhånd.

10. Brug kørestolen mere komfortabelt


E-Move har en række funktioner til at forbedre styrbarheden. Brug disse funktioner i henhold til dine formål. For information om kørestolens stel, som E-Move er monteret på, se brugervejledningen fra kørestolsproducenten.

10.1. Afmontering og installation af enheden



Strømforsyningen til E-Move kan afmonteres fra rammen, når de nuværende hjul erstattes med manuelle hjul, eller når du transporterer kørestolen.

(1) Afmontering af strømforsyning

- 1 Sluk for strømmen, og afmontér batteriet.
Sæt beskyttelseskapslen på det afmonterede batteri.

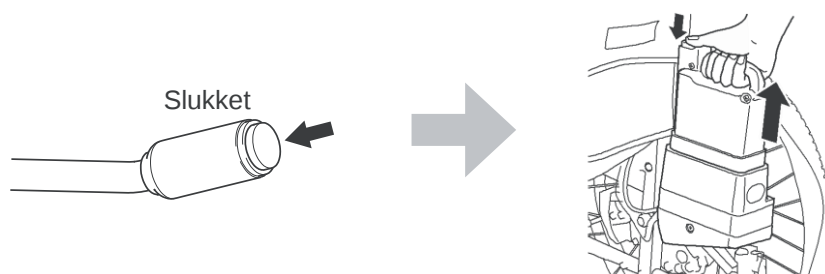


- 2 Afbryd kablerne "a" fra højre strømforsyning. Hvis du vil frakoble et stik, skal du dreje den yderste ring, på stikket, mod uret indtil den stopper, og trække stikket ud.
- 3 Placér kørestolen så den ikke bliver ustabil, når strømforsyningen er afmonteret.
- 4 Frigør parkeringsbremserne.
- 5 Mens du holder navet med hånden og trækker i den midterste ring, "a", med fingrene, skal du trække strømforsyningerne ud med begge hænder.

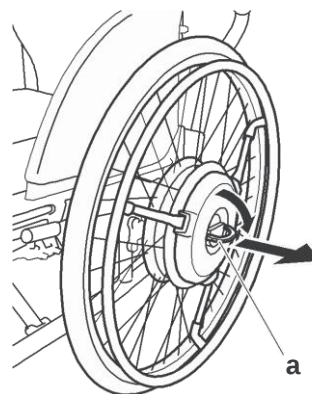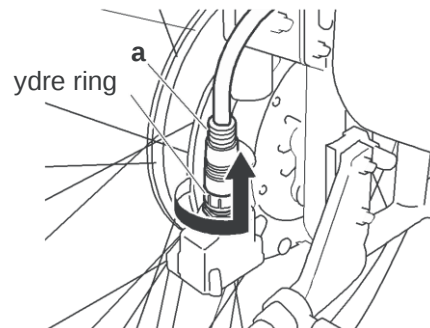


(2) Installation af strømforsyningen

1 Placer kørestolen så den ikke bliver ustabil.


2 Når du trækker i den midterste ring "a" med fingrene, skal du installere hver strømforsyning med begge hænder, så drejningsmomentets aksel, "b", passer ind i den modtagende komponent.

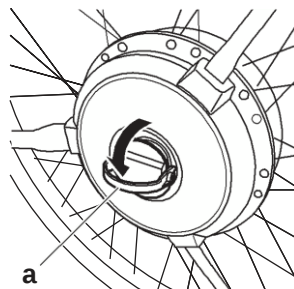


• Eksempel 1

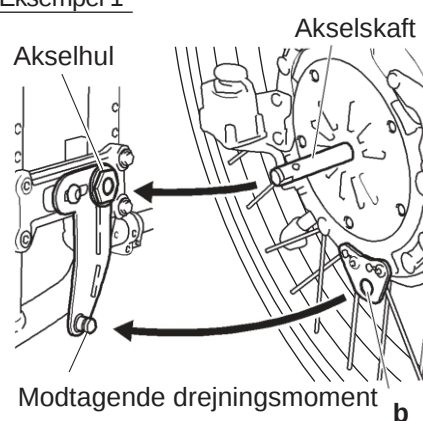

• Eksempel 2

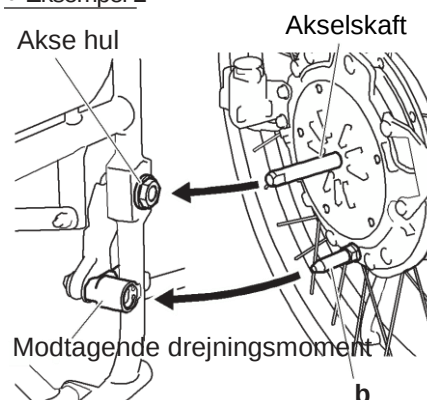


3 Skub hver strømforsyning helt i. Kontrollér for at sikre at de to kugler, "a", på enden af akslen kan ses helt.


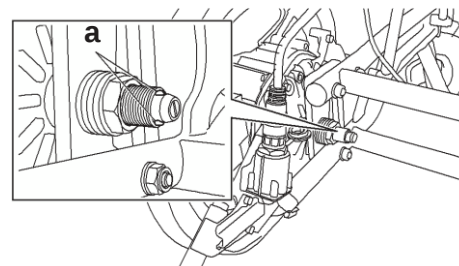


4 Træk i hver strømforsyning for at sikre, at de ikke falder ud.


- 5 Placér strømforsyningerne i deres normale position, og anvend derefter parkeringsbremsene.

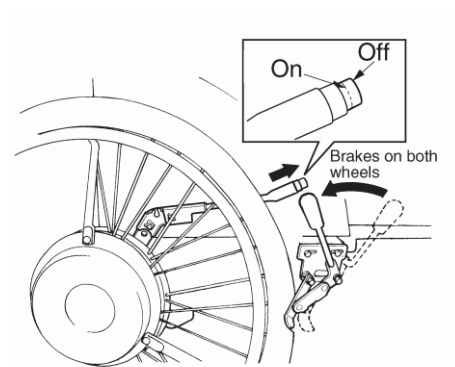

- 6 Tilslut kabelstikket til venstre strømforsyning. For at tilslutte stik "a", skal du følge pilen, som vist på tegningen, til position "b", og skubbe stikket i, og dreje ringen for at fastgøre stikket.

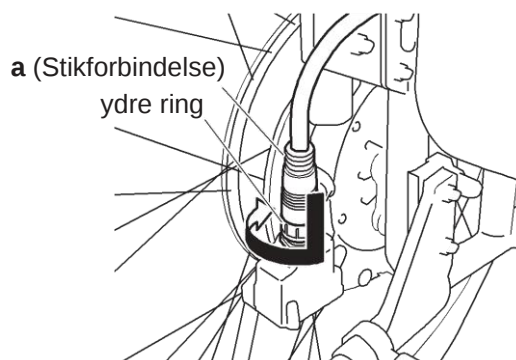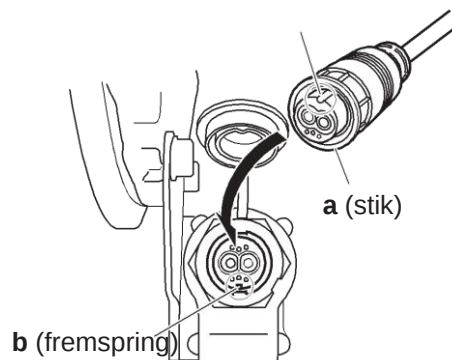

- 7 Installér batteriet.

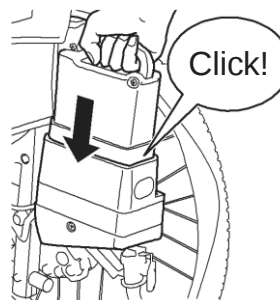

WARNING

- Når en person sidder i kørestolen, må du ikke afmontere eller installere hjulene. Personen i kørestolen, eller folk omkring kørestolen, kan komme til skade.
- Efter strømforsyningen er installeret til rammen, skal du sørge for at kontrollere, at boldene på enden af hver aksel kan ses, og at enhederne ikke kan falde ud, hvis der bliver trukket i dem. Hvis akslerne ikke er sikret, kan akslerne pludselig falde ud, mens kørestolen er i brug, og kørestolen kan vælte og forårsage alvorlig personskade.

10.2. Smart Tune indstillinger

Funktions- og motorforhold af E-Move kan ændres så de passer til brugeren. Disse ændringer udføres ved Smart Tune software. Rådfør dig med din forhandler om ændringer af indstillingerne.

(1) Funktionelle forhold

1 Automatisk slukning af motorkraft (auto-sluk)

Dette er en funktion, der slukker for strømmen efter en bestemt tid uden betjening.

Standard indstilling Strømmen slukker hvis drivhjulet ikke har været brugt i 5 minutter.

Andre indstillinger Strømmen slukker hvis drivhjulet ikke har været brugt i 1 eller 3 minutter.

Auto-sluk kan også deaktiveres.

2 Lyd

Denne funktion indeholder, at en lyd vil afgives, når der tændes for strømmen, eller når en fejl opstår.

Standard indstilling Lyden er aktiveret

Indstilling 1 Lyder ikke når strømmen tændes, ved valg af tilstand osv.

Det er ikke muligt helt at deaktivere lyden.

(2) Motorforhold

Motorforhold såsom motorhjælp, højre/venstre ligevægt osv. kan justeres.

1 Motorhjælp

Valg fra 0 - 100% håndhjulpen motorkraft.

2 Karakteristika ved ligeud kørsel/drejning

Valg mellem 9 trin

3 Højre/venstre ligevægt

Valg af følsomhed. Højre/venstre - valg mellem 9 trin

WARNING


- Ved vurdering af behovet for, at ændre indstillingerne, og vælge de faktiske ændringer, bør du rådføre dig med en ekspert såsom en fysioterapeut eller ergoterapeut hos forhandleren.



11. Vedligeholdelse, periodisk- og dagligt eftersyn

Det anbefales, at E-Move inspiceres med jævne mellemrum hos forhandleren. (Der opkræves et gebyr for inspektion.)

For at sikre langsigtet holdbarhed, anbefaler vi, at der foretages regelmæssige inspektioner hver 6. måned efter første anvendelse.

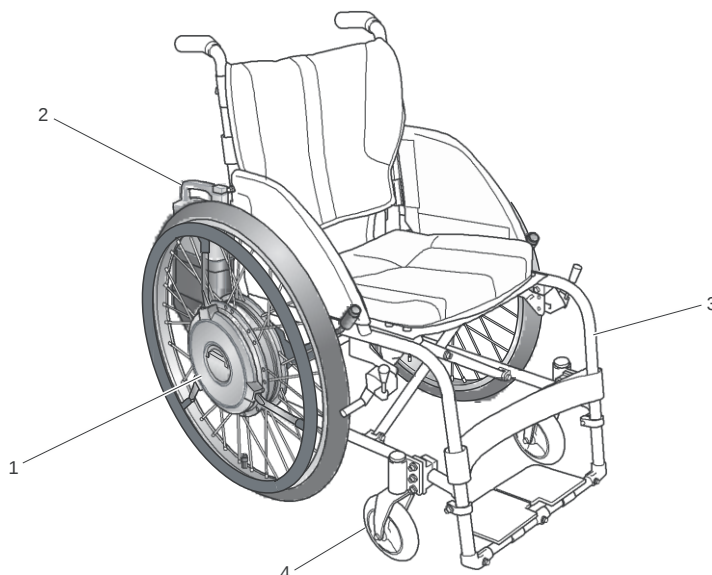

Eksempel på et inspektionsskema

Inspektionsprodukt	Dato for inspektion	Inspektionsområde	Kontrolleret	Korrigerede foranstaltninger
1 Enhed		Støj, fastklemmt objekt		
		Dæktryk (450 kPa, 4,5 kg/cm ²), slid, revner, løs ventil, dæksel		
		Løse drivhjul, beskadigelse, lyde, skarpe punkter, osv.		
		Løse ege eller brud herpå		
		Stramning af drejningsmoment		
		Installation af støvdæksel		
		Løshed på anti-tip enheden, deformation, skade		
		Snavsede poler på batteri		
		Løshed på kabeltilslutning, beskadigelse		
2 Batteri og oplader		Løse bolte, skader, brugt tilstand, opladningsfrekvens, refresh-status		
3 Ramme (eksempel) eller (reference)		Deformation, løse bolte, beskadigelse, lyde, skarpe punkter, osv.		
		Foldefunktion		
		Knirkende lyd		
		Løshed på fodstøtten		
		Parkeringsbremsernes effektivitet, slid		
4 Styrehjul (eksempel) eller (reference)		Luftryk (på dæk)		
		Slid, revner		
		Løshed, slør, lyd		
		Forvredet ventil, dæksel (på dæk)		



WARNING

- Fortsat brug af kørestolen, imens et problem på kørestolen eller hjulene er opstået, kan medføre skader på kørestolen, og resultere i at brugeren vælter.

11.1. Vedligeholdelse

[Rengøring]

Hvis E-Move bliver snavset som følge af almindelig brug, skal du bruge et tæt, hårdt opvredet håndklæde til at tørre snavset af. Hvis snavset er for omfattende, skal du bruge et håndklæde og et neutralt rengøringsmiddel til at fjerne snavset. Efter rengøring skal du sørge for, at tørre eventuelt resterende rengøringsmiddel af.

Må ikke vaskes ved direkte spuling med vand, eller ved hjælp af damp. De elektroniske enheder kan blive beskadiget, hvilket kan føre til funktionsfejl.



Rengør ikke med opløsningsmiddel, såsom benzin eller fortynder. Dette kan beskadige maling og plastdele.



Ved desinfektion af kørestolen, skal du afmontere E-Move fra rammen, og derefter kun desinficere rammen. Du kan få din forhandler til at afmontere E-Move fra rammen. Når E-Move desinficeres må du ikke: varme, presse, trykke, påføre elektricitet, bestråle med elektromagnetiske bølger, nedsænke i væske, eller anvende et flydende rengøringsmiddel eller spray. I stedet aftørres E-Move ved hjælp af et håndklæde og sprit.

[Lette reparationer]

Når der er behov for en reparation, skal du kontakte din forhandler, selvom der er tale om en mindre reparation.

[Normale reparationer]

Hvis delene er beskadiget eller gået tabt, skal du straks kontakte forhandleren, og få forhandleren til at udskifte delene eller reparere kørestolen.

For normal vedligeholdelse, reparationer eller service, skal du kontakte forhandleren. Brugeren bør ikke reparere eller udføre service på kørestolen selv, eller afmontere, pakke og sende dele for at anmode om reparationer. Hvis kørestolen ikke repareres eller samles helt, kan brugeren eller personer omkring brugeren, komme til skade.

For at udføre reparationer og service, skal forhandleren benytte sig af en servicemanual, reservedelskatalog og anden dokumentation. Disse sælges ikke til offentligheden.

Når du anmoder om reparation, skal du ikke sende kørestolen direkte, men derimod først kontakte forhandleren.

Den anslåede levetid af E-Move er 5 år. Dele der er nødvendige for reparationer, vil være til rådighed i 5 år efter produktionen af E-Move.

Desuden vil der ikke blive stillet en kørestol til rådighed under reparation eller eftersyn. Du skal selv betale for reparationer som ikke er omfattet af garantien.

11.2. Dagligt eftersyn

Udfør følgende kontroller hver dag, før du betjener kørestolen. For detaljer henvises til "3.1. Inspektion af kørestolen".

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ydreside | Kontrollér komponenterne for at sikre at de ikke er beskadiget. |
| 2 | Anti-tip enhed | Sørg for at anti-tip enheden er i den korrekte position og låst i denne position. |
| 3 | Bagdæk | Kontrollér dæk dybden, at der ikke er revner, og der er tilstrækkelig lufttryk.
Hvis der ikke er tilstrækkeligt lufttryk, skal det pumpes op til 450 kPa. |
| 4 | Parkeringsbremser | Sørg for at bremserne kan forhindre hjulene i at bevæge sig, og at de er forsvarligt monteret på rammen. |
| 5 | Hjul | Sørg for at hjulene ikke er deformeret, og at egerne ikke er brudt eller beskadiget. |
| 6 | Styrehjul | Sørg for at der er dæk dybde, og der ikke er revner.
Sørg for at styregaflerne ikke er beskadiget.
Sørg for at møtrikkerne, der fastholder dækkene, ikke er løse. |
| 7 | Batteri | Kontrollér den resterende kapacitet. |

Få forhandleren til at reparere kørestolen hvis du finder eventuelle problemer.

11.3 Afslut brugen af E-Move - Genanvendelse

Når du afslutter brugen af E-Move, skal du kontakte din lokale forvaltning for genanvendelse, og følge deres anvisninger. Du kan også kontakte din forhandler for at genanvende din brugte E-Move og dets batterier.

12.1 Dimensioner

Technical drawing of a door handle assembly, showing the handle, spindle, and mounting plate. The drawing includes the following dimensions:

- Venstre enhed** (Left unit) width: 155mm
- Spindle length**: 316mm
- Mounting plate thickness**: 4mm
- Spindle offset**: 94mm
- Mounting plate offset**: 39mm
- Mounting plate width**: 101mm
- Mounting plate height**: 151mm
- Handle diameter**: 38mm
- Handle offset**: 78mm
- Handle width**: 92mm
- Diameter rustfri drivhjul** (Stainless steel drive wheel): 536mm (502mm)
- Beklædt** (Covered): 540mm (506mm)

Technical drawing of a bicycle seatpost and saddle assembly. The drawing includes the following dimensions and labels:


- Højre enhed** (Right unit) at the top.
- 155mm** for the total width of the seatpost.
- 4mm** for the width of the seatpost clamp.
- 94mm** for the height of the seatpost clamp.
- 40mm** for the height of the saddle.
- 232mm** for the total height of the saddle.
- 87mm** for the width of the saddle.
- 38mm** for the width of the saddle base.
- 78mm** for the width of the saddle base.
- 92mm** for the width of the saddle base.
- Dækkets ydre diameter 615mm (566mm)** for the outer diameter of the tire.

12.2 Specifikationer

Model			Motorhjælp til kørestole
			E-Move
Vægt	Totalvægt med batteri (uden hjælpende styreenhed)	NikkelMetalHydrid batteri	17 kg
		Lithium-Ion batteri	18 kg
	uden batteri		14 kg
	Vægt pr. del	Højre enhed	7.5 kg
		Venstre enhed	6.5 kg
		Ni-MH batteri	3 kg
Li-ion batteri		4 kg	
Dækstørrelse			24"
Bagdæk	Dæk-specifikationer		37-540 (24x1 3/8)
	Anbefalet lufttryk		450 kPa (65 PSI)
Motor			AC servomotor 24V 110W x 2 (30 minutters nominel ydelse)
Driftssystem			Baghjulstrukken
Bremsesystem			Motorbremse
Styringssystem			Håndbetjening
Kontrolsystem			Mikroprocessor
Minimumsbredde ved vending			Varierer afhængigt af kørestolen som enheden er installeret på Det er muligt at vende på et punkt. *1
Maksimal hældningsvinkel			6 grader
Maksimal bredde på grøft der kan forceres			Varierer afhængigt af kørestolen som enheden er installeret på, og hjulstørrelsen.
Betjeningsforhold	Miljø	Indendørs og udendørs	
	Temperatur	0°C til 35°C	
	Luftfugtighed	Ingen kondens	
IEC vandtæt			IPX4 (resistent overfor vandsprøjt)
Belastningskapacitet (inklusive bruger, bagage, og ramme)			130 kg *2
Kørestrækning	Kontinuerlig kørestrækning. I overensstemmelse med Yamaha	med Ni-MH batteri (JWB2)	18 km *3
		med Li-ion batteri (ESB1)	30 km *3

*1 Minimumsplads nødvendig til at dreje, på et punkt, bestemmes af kørestolens ramme.

Minimumsbredde ved vending

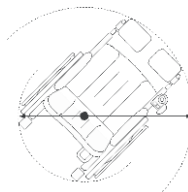

*2 Værdien er belastningskapaciteten for E-Move. Når kørestolen er helt samlet, må den samlede vægt, med bruger og bagage, ikke overstige belastningskapaciteten for kørestolens stel.

Hvis kørestolen betjenes kontinuerligt med en belastning, der overskrider denne værdi, kan der opstå funktionsfejl, produktet kan blive beskadiget, eller levetiden kan blive forkortet.

*3 Kørestrækningen varierer afhængigt af vejbanens forhold (kørsel over kantsten, på skrånninger, m.m.), og kan være kortere end denne værdi.

Batteri og oplader			NikkelMetalHydrid	Lithium-Ion
Batteri	Model		JWB2	ESB1
	Type		Genopladeligt batteri med indbygget mikroprocessor	
	Nominel ydeevne		24 V	25 V
	Normeret ydeevne (5 timer)		6.7 Ah (160.8 Wh)	11.8 Ah (280 Wh)
Oplader	Model		JWC-2	ESC1
	Opladningsmetode		Automatisk opladning kontrolleret af microprocessor	
	Normeret ydeevne under opladning		29 V · 2.6 A	29.2 V · 3 A
	Opladelig batteri		JWB2 *4	ESB1 *4
	Opladningstid	Tid til normal opladning	2.5–3.5 timer	Ca. 4.5 hr
		Tid til refresh-opladning	3–13 timer	—

*4 Ni-MH batteriet og Li-ion batteriet har hver deres oplader. Opladerne kan ikke udskiftes med hinanden.

13. Fejlfinding, reparationer, garanti

Hvis du har problemer med dine dæk, skal du kontakte din forhandler. E-Moves dæk er opbygget på samme måde som et cykeldæk. Generelt set kan cykelhandlere derfor godt reparere dækkene.

13.1. Før der anmodes om reparation

Tjek fejlfindingstabellen nedenfor.

Ved betjening af kørestolen

Problem	Advarselslampe	Alarm	Kontrolpunkt	Hvad kan du gøre
Kørestolen begynder ikke at bevæge sig, eller stopper under kørsel.		Bipper (Pi —)	Er batteriet løbet tør for strøm?	Oplad batteriet.
			Bruger du Lithium-Ion batteriet i en lufttemperatur under frysepunktet, eller på en meget varm sommerdag? Blev kørestolen opmagasineret på et sted, hvor den ydre lufttemperatur faldt til under frysepunktet, eller hvor temperaturen blev varm, såsom inde i en bil?	Brug eller opbevar kørestolen i et miljø med en hensigtsmæssig lufttemperatur.
	Blinker 5 gange	Bipper (Pi —)	Er motoren overophedet som følge af grov/vild kørsel?	Sluk for strømmen. Vent lidt før du fortsætter.
	Blinker 3 gange	Bipper (Pi —)	Tænder du for strømmen mens drivringene forskydes?	Bring drivringene til en neutral position, og tænd derefter for strømmen.
			Er strømmen automatisk blevet slukket?	Sluk for strømmen, og tænd herefter for strømmen igen.
			Er batteriet indsat korrekt?	Indsæt batteriet korrekt.
Ude af stand til at køre			Er bremserne i brug på kørestolen?	Frigør bremserne.
Mangel på strøm			Er batteriet svækket?	Udskift med et nyt batteri. Ved brug af et NikkelMetalHydrid batteri, prøv refresh-opladning.
	Blinker	Bipper (Pi —) Kontinuerligt	Påføres en stor belastning samtidig med kørsel på en stejl skråning?	Det vil stoppe med at bippe, når belastningen er reduceret.
	Blinker	Bipper (Pi —) Kontinuerligt	Påføres en stor belastning, hvilket får motoren til at overophede?	Let belastningen, så motoren ikke bliver overophedet.
			Er den omgivende temperatur lav?	Brug kørestolen i et miljø med en passende udendørstemperatur.
Kort kørselsstrækning, utilstrækkelig hastighed			Er batteriet fuldt opladt?	Udskift med et nyt batteri. Ved brug af et NikkelMetalHydrid batteri, prøv refresh-opladning.
			Er den omgivende temperatur lav?	Brug kørestolen i et miljø med en passende udendørstemperatur.
			Bærer kørestolen på en tung last eller kører op ad en bakke?	Tung last har en tendens til at forkorte den mulige kørselsstrækning.
			Er hjælpemotoren indstillet til en lav indstilling?	Kontakt forhandleren for at ændre indstillingerne
Langsom manuel kørsel			Er lufttrykket i dækkene for lavt?	Pump luft i dækkene.
			Er bremserne i brug på kørestolen?	Frigør bremserne.
Unormale vibrationer eller støj			Er det område, hvor akslen er monteret løst?	Spænd det, eller kontakt forhandleren.
			Kommer støjen fra drivenheden?	Kontakt forhandleren.
			Er kørestolens ramme eller forhjulene i ubalance?	Kontakt forhandleren.

Under opladning (Ni-MH NikkelMetalHydrid batteri)

Problem	Lampe på oplader	Lampe på batteri	Kontrolpunkt		Hvad kan du gøre
	Opladning Refresh	Resterende kapacitet			
Vil ikke oplade	Opladerlampe (grøn) og refresh- lampe (orange) blinker skiftevis	Alle indikationslamper for resterende kapacitet er slukket.	Er batterisikringen sprunget?	Kontakt din forhandler.	
			Vil et andet batteri acceptere opladning (Hvis du har et ekstra batteri)	Kontakt din forhandler.	
	Opladerlampen (grøn) og refresh- lampen (orange) er begge slukket	Alle indikationslamper for resterende kapacitet er slukket.	Er strømkablet tilsluttet?	Tilslut strømkablet til en strømkilde.	
			Vil et andet batteri acceptere opladning (Hvis du har et ekstra batteri)	Kontakt din forhandler.	
			Vil et andet batteri acceptere opladning (Hvis du har et ekstra batteri)	Opladeren er normalt, hvis den kan oplade. Udskift batteriet.	
Langvarig opladningspause	Opladerlampe (grøn) blinker	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Er batteriets temperatur passende?	Vent indtil den når en passende temperatur.	
			Er den omgivende temperatur hensigtsmæssig?	Oplad batteriet i et miljø med en passende temperatur.	
Tager for lang tid at oplade	Refresh-lampe (orange) er tændt	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt, og derefter slukket	Oplader du batteriet vha. refresh-opladning?	Batteriet aflades. Refresh-opladning tager 3 til 13 timer.	
Stopper opladning halvvejs	Opladerlampe (grøn) og refresh lampe (orange) er begge slukket	Indikationslamper for resterende kapacitet er kun halvt tændt	Er batteriets temperatur høj?	Efter batteriets temperatur er faldet, prøv at oplad igen.	
Når opladningen er færdig, tryk på indikationskontakt -ten på batteriet for at kontrollere, at der ikke er nogle kapacitetslamper der lyser.	Opladerlampen (grøn) og refresh-lampen (orange) er begge slukket	Ikke alle 5 restkapacitets lamper er tændte	Kontrollér antallet af gange eller dage, du har brugt batteriet.	Prøv at oplad batteriet igen, når batteriet er kølet ned. Hvis symptomet ikke ændrer sig, er batteriet forringet. Udskift med et nyt batteri.	
Opladeren udsender en lyd	Lampedisplayet skifter afhængigt af forholdene	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Kommer der en lyd fra ventilationen når den kører?	Opladeren bliver afkølet. Ventilatoren vil stoppe afhængigt af opladerens tilstand.	
Opladeren bliver usædvanlig varm	Lampedisplayet skifter afhængigt af forholdene	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Kommer der en lyd fra ventilationen når den kører?	Temperaturen på opladeren kan blive helt op til 50° C, hvilket er normalt så længe ventilationen er i drift. Hvis ventilationen ikke fungerer, skal du kontakte din forhandler.	
Opladeren lugter	Lampedisplay et skifter afhængigt af forholdene	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Sker det lige efter at du er begyndt, at anvende opladeren?	Opladeren kan lugte straks efter den anvendes, men lugten vil med tiden aftage. Hvis lugten varer ved, stop brugen af opladeren og kontakt din forhandler.	

Under opladning (Li-ion 00 Lithium-Ion batteri)

Problem	Lampe på oplader	Lampe på batteri	Kontrolpunkt	Hvad kan du gøre
		Resterende kapacitet		
Vil ikke oplade	Rød LED lyser	Slukket		Batteriet kan have en funktionsfejl. Kontakt din forhandler.
	Rød LED blinker	Slukket	Fortsætter symptomet efter gentilslutning af batteriet og opladeren?	Det er muligt, at opladerstikket ikke blev tilsluttet problemfrit. Hvis der opstår det samme fænomen efter gentilslutning af batteriet, kan batteriet have en funktionsfejl. Kontakt din forhandler.
	Slukket	Slukket	Er strømstikket tilsluttet?	Tilslut strømstikket til en strømkilde.
Langvarig opladningspause	Grøn LED blinker	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Er batteriets temperatur passende?	Vent, indtil det når en passende temperatur.
	Grøn LED blinker	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Er den omgivende temperatur hensigtsmæssig?	Oplad batteriet i et miljø med en passende temperatur.
Opladeren udsender en lyd	Lampedisplayet skifter afhængigt af forholdene	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Kommer der en lyd fra ventilationen når den kører?	Opladeren bliver afkølet. Ventilatoren vil stoppe afhængigt af opladerens tilstand.
Opladeren bliver usædvanlig varm	Lampedisplayet skifter afhængigt af forholdene	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Kommer der en lyd fra ventilationen når den kører?	Temperaturen på opladeren kan blive helt op til 50° C, hvilket er normalt så længe ventilationen er i drift. Hvis ventilationen ikke fungerer, skal du kontakte din forhandler.
Opladeren lugter	Lampedisplayet skifter afhængigt af forholdene	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt	Sker dette umiddelbart efter du starter brugen af opladeren?	Opladeren kan lugte straks efter den anvendes, men lugten vil med tiden aftage. Hvis lugten varer ved, stop brugen af opladeren og kontakt din forhandler.
Batteriet bliver meget varmt	Lampedisplayet skifter afhængigt af forholdene	Indikationslamper for resterende kapacitet er tændt		Stop omgående opladning, og kontakt din forhandler.


13.2. Anmodning om reparationer og inspektioner

Ved inspektion, reparation og servicebehov, skal du kontakte den forhandler, hvorfra du har købt E-Move. Når du kontakter forhandleren, kan dit produkts serienummer være påkrævet. Se nedenfor for at lokalisere serienummeret.

Forhandler:
Langhøj Live
Hasselager Centervej 26
8260 Viby J
Tlf. 87411040

13.3. Placering af serienummer

Serienummeret er placeret i bunden af batteriboksen.

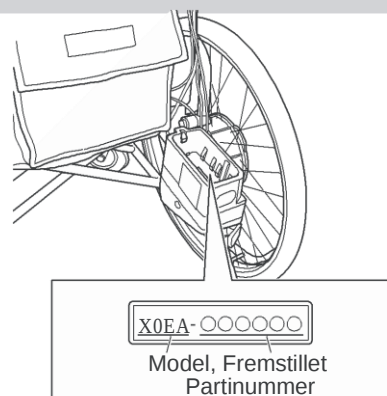

13.4. Garanti

Garantiperioden for E-Move er 2 år fra købsdatoen.

I denne garantiperiode vil materiale- eller fabrikationsfejl på din E-Move blive udbedret. De defekte dele vil blive udskiftet eller repareret uden beregning. Garantien dækker motoren og opladeren. Forbrugsdele, såsom batteri, dæk og slanger, er undtaget fra denne garanti.

Denne garanti dækker ikke funktionsfejl, som skyldes enten brugerens forsætlige misbrug eller uagtsom brug, såsom fejl forårsaget af brug, der ikke er angivet i denne brugervejledning. Denne garanti dækker heller ikke fejl, der er opstået pga. ændringer af apparatet, eller kontinuerlig brug under andre omstændigheder end de angivne betingelser, såsom overskridelse af den maksimale vægt osv., uanset årsagen til funktionsfejlen.

Ridser, mathed og snavs på overfladen af produktet, forårsaget af normal brug, er ikke omfattet af garantien. Hvis garantireparationer er nødvendige, skal du kontakte den forhandler, hvorfra du købte produktet.



 **decon mobility**

Kontakt: mft@decon.dk

Telefon: +45 22434270

web: www.deconmobility.dk

