


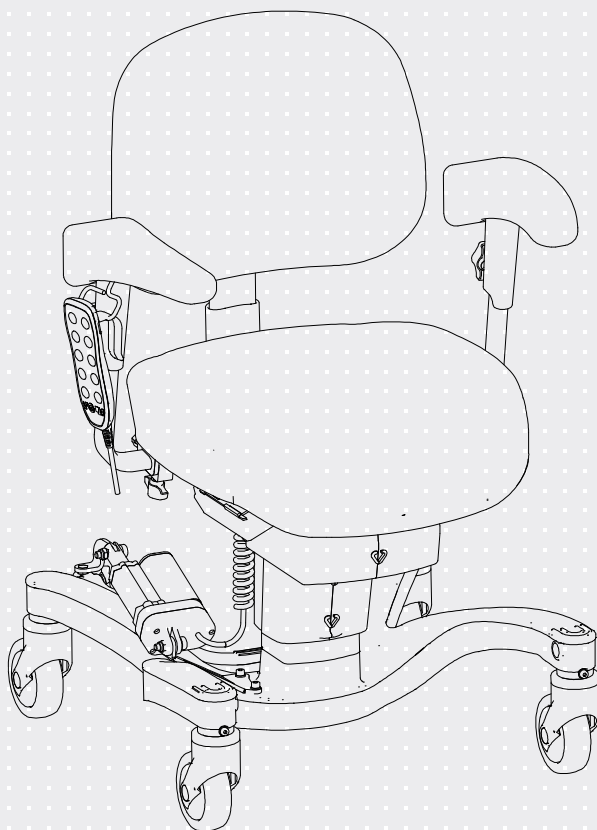


## VELA Tango

VARIANT: 700E M/UDSTIGNINGSHJÆLP

Manual. nr. 105695


ISO 9001  
ISO 14001

## STOLENS FUNKTIONER

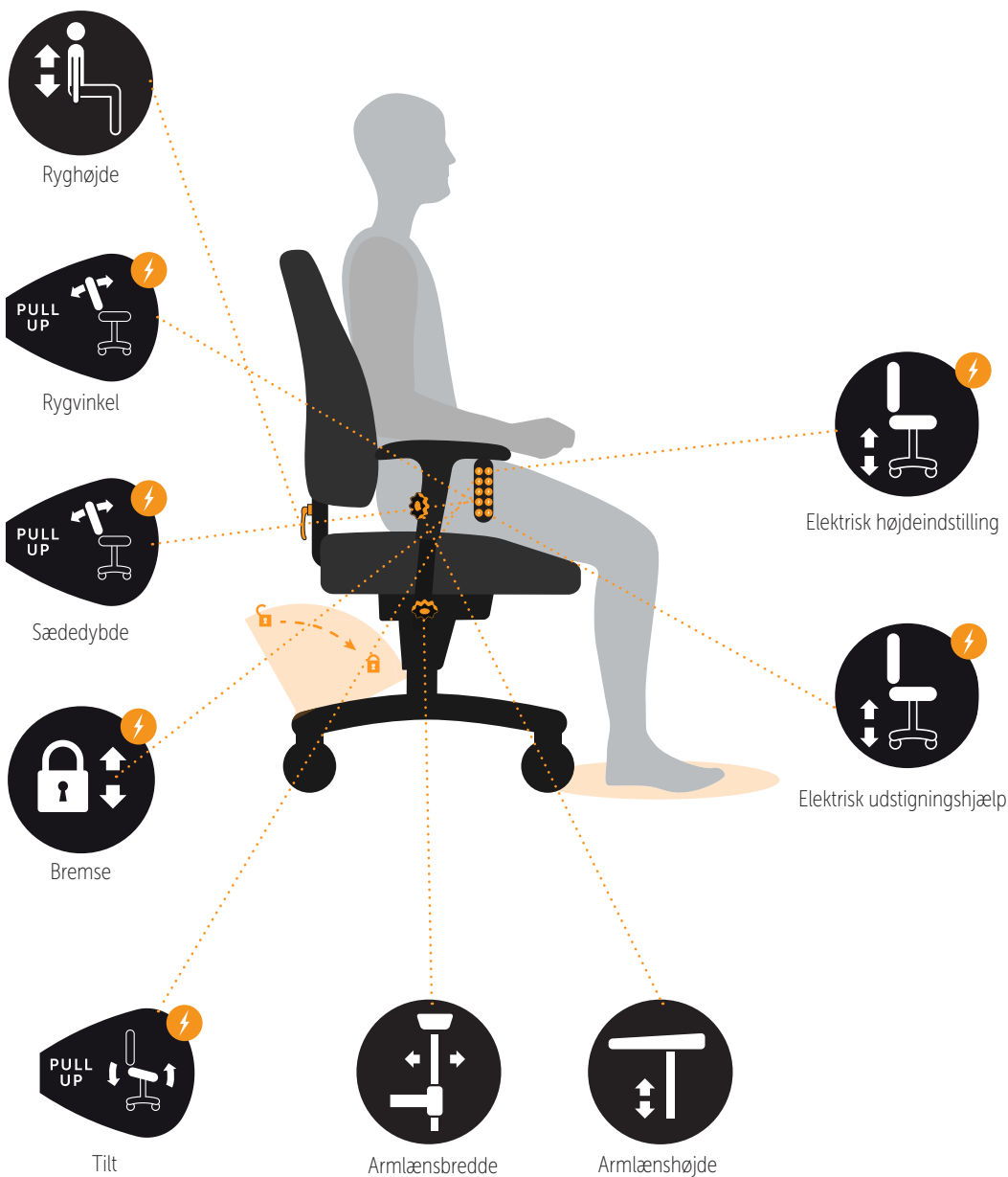

## KOM GODT I GANG

- 1 Brems stolen og sæt dig tilbage i sædet, så du mærker ryglænet.
- 2 Der skal være ca. 3 cm luft mellem sæde og knæhase.
- 3 Indstil sædevinkel og -højde så du sidder behageligt med fødderne fladt på gulvet.
- 4 Indstil ryglænhøjde og -vinkel, så du støttes i lænd og ryg.
- 5 Indstil armlænsbredde og -højde, så underarm hviler på armlænspude, når du slapper af i skuldrene.

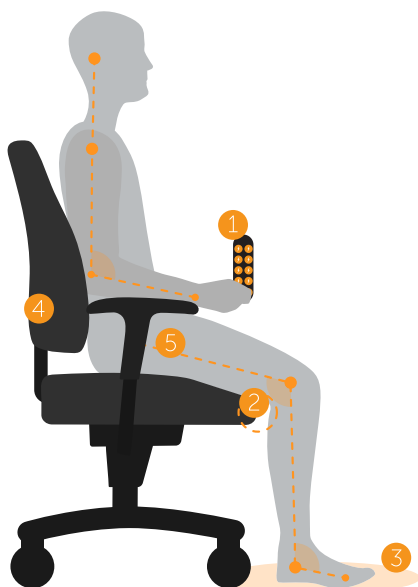

[vela.my/GetStarted](https://vela.my/GetStarted)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.0. INDLEDNING</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>1.1. ADVARSLER</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>1.2. FEJLFINDING</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>1.3. VELA TANGO MED ELEKTRISK HØJDEJUSTERING</b> | <b>8</b>  |
| 1.3.1. Effekinput                                   | 8         |
| 1.3.2. Emission                                     | 8         |
| 1.3.3. Overstrømssikring                            | 8         |
| <b>1.4. MÆRKER ANVENDT PÅ STOLEN</b>                | <b>9</b>  |
| <b>1.5. SIKKERHED</b>                               | <b>9</b>  |
| 1.5.1. Tiltænkt anvendelse                          | 9         |
| 1.5.2. Transport                                    | 10        |
| <b>1.6. REKLAMATIONSRET</b>                         | <b>10</b> |
| <b>1.7. UDPAKNING AF STOLEN</b>                     | <b>10</b> |
| <b>1.8. VEDLIGEHOLDELSE</b>                         | <b>11</b> |
| 1.8.1. Hjul                                         | 11        |
| 1.8.2. Stel                                         | 11        |
| 1.8.3. Polsteroverflader                            | 11        |
| 1.8.4. Genbrugshjælpemiddel                         | 11        |
| <b>1.9. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE</b>                | <b>11</b> |
| <b>2.0. INDSTILLINGSMULIGHEDER</b>                  | <b>12</b> |
| 2.0.1. Påsætning af ryglæn                          | 12        |
| 2.0.2. Håndboks                                     | 12        |
| 2.0.3. Indstilling af siddehøjde                    | 12        |
| 2.0.4. Indstilling af rygvinkel                     | 13        |
| 2.0.5. Indstilling af sædetilt                      | 13        |
| 2.0.6. El-bremse                                    | 13        |
| 2.0.7. Udstigningshjælp                             | 13        |
| 2.0.8. Indstilling af sædedybde                     | 14        |
| 2.0.9. Indstilling af ryghøjde                      | 14        |
| 2.0.10. Vinkel-rigle                                | 14        |
| 2.0.11. Indstilling af lændestøtte, ALB-ryg*        | 14        |
| 2.0.12. Indstilling af armlæn, højde                | 15        |
| 2.0.13. Indstilling af armlæn, bredde               | 15        |
| 2.0.14. Nedklappelig armlæn*                        | 15        |
| 2.0.16. Udskiftning af sæde                         | 16        |
| 2.0.17. Opklappelig fodstøtte*                      | 16        |
| 2.0.18. Sidemonteret udklappelig fodstøtte*         | 16        |
| 2.0.19. Skubbebjøgle*                               | 16        |
| 2.0.20. 4-hjulsbremse*                              | 17        |
| 2.0.21. Opladning                                   | 17        |
| 2.0.22. Tilbehørsliste                              | 17        |
| <b>2.1. PERSONLIG TILPASNING AF UDSIGNINGSHJÆLP</b> | <b>18</b> |
| 2.1.1. Personlig tilpasning af Siddestillingen      | 18        |
| 2.1.2. Personlig tilpasning af udstigningshjælp     | 18        |

## 1.0. INDLEDNING

### KÆRE KUNDE

Tillykke med din nye VELA-stol med udstigningshjælp. Vi er sikre på, at denne stol bliver til daglig glæde for dig.

Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening og vedligeholdelse.

### Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge stolen. Brugermanualen kan også findes på [www.vela.dk](http://www.vela.dk), hvor du også kan finde anden relevant information om vores stole.

Har du spørgsmål, oplever fejl eller utilsigtede hændelser, kontakt da din VELA-leverandør.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

### VELA

Gøteborgvej 8-12  
9200 Aalborg SV  
Danmark  
[www.vela.dk](http://www.vela.dk)

## 1.1. ADVARSLER



|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brug           | Ved allergisk reaktion, stop med at anvende stolen og konsulter egen læge                                                                                     |
| Brug           | Brug kun originale VELA-reservedele                                                                                                                           |
| Brug           | Brug kun den medfølgende oplader til at oplade stolen                                                                                                         |
| Brug           | Lav ikke om på tilbehøret, der følger med stolen                                                                                                              |
| Brug           | Brug kun stolen til det tiltænkte formål                                                                                                                      |
| Brug           | Indstil kun sæde- og rygvinkel, imens brugeren sidder i stolen med fødder i kontakt med gulv                                                                  |
| Brug           | Stolen skal altid være bremsset, når man sætter sig ned eller rejser sig op fra den                                                                           |
| Brug           | På glatte overflader så som højpolerede gulve eller marmorfliser, kan det opleves at stolen glider. Her anbefales det at anvende en 4-hjulsbremse             |
| Brug           | Brug aldrig stolen på ujævne overflader, herunder områder med niveauforskelle eller løse tæpper, da dette kan medføre risiko for, at stolen mister stabilitet |
| Brug           | Service, ud over almindelig rengøring, bør altid udføres af en fagperson                                                                                      |
| Brug           | Servicer aldrig stolen, imens den bruges                                                                                                                      |
| Brug           | Følg altid den anbefalede vedligeholdelses- og rengøringsvejledning                                                                                           |
| Brug           | Stolens funktioner er tiltænkt brugeren af stolen. Kun brugeren eller trænet fagpersonale bør indstille på stolen, imens brugeren sidder i den                |
| Brug           | Elektriske højdeindstilling må maksimalt bruges 2 minutter af ad gangen                                                                                       |
| Brug           | Der kan opstå klemfare ved bevægelige dele. Brug derfor aldrig stolen, hvis brugeren eller andre holder fast under sædet og nedefter                          |
| Kvælningsfare  | Kvælningsfare ved små dele. Lad aldrig små børn lege med stolen, da små dele kan tages af                                                                     |
| Kvælningsfare  | Har stolen elektrisk højdeindstilling, vil der være lange kabler til stede. Lad aldrig børn lege med disse                                                    |
| Elektrisk støj | Brug af andre kabler end standard, kan øge den elektriske emission eller mindske den elektriske immunitet                                                     |
| Elektrisk støj | Undgå at placere stolen tæt på apparater, der afgiver elektrisk støj                                                                                          |
| Elektrisk støj | Stolen må kun bruges sammen med tilbehør nævnt i denne brugermanual, da elektromagnetiske forstyrrelser ellers kan forekomme                                  |
| Elektrisk støj | Hvis stolen bevæger sig utilsigtet eller ikke fungerer som forventet, find da en anden placering til stolen                                                   |

## 1.2. FEJLFINDING

| Fejl                                                                                                                        | Mulig årsag og løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk højdeindstilling virker ikke<br> | Stikket sidder ikke i armlænet. Sæt stikket i<br><br>Der er ikke strøm på stolens batteri. Lad batteriet op med medfølgende oplader<br><br>Sikringen er brudt. Se punkt 1.3.3.<br><br>Fortag en nulstilling af aktuatoren. Hold begge højdeindstillingsknapper inde (op og ned) på samme tid i 20 sek. Bliv ved med at holde knapperne inde, indtil aktuatoren er kørt helt i bund, og den har kørt ca. 5 mm op igen. |
| Bremsefunktion virker ikke                                                                                                  | Bremsen er ikke aktiveret. Se punkt 2.0.6. og/eller 2.0.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Armlænet virker løst                                                                                                        | Håndskruen er løs enten i bredde- eller højdejustering. Efterspænd håndskruen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stolen ruller dårligt                                                                                                       | Hjul er blokeret. Rens hjulene for trådrester o.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Understel er i vejen når jeg bevæger mig i stolen                                                                           | Du har en stol med sæderotation. Anvend sæderotation til at rette stolen op igen. Se punkt 2.0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Løser ovenstående ikke dit problem, kontakt da din VELA-leverandør.

## 1.3. VELA TANGO MED ELEKTRISK HØJDEJUSTERING

### 1.3.1. EFFEKTINPUT

Spænding: 24Vdc

Strøm: 0,5A

Effekt: 12VA

### 1.3.2. EMISSION

En VELA-stol med elektriske funktioner er testet og overholder gældende krav vedrørende elektromagnetisk stråling (EMC-krav). Stolen testes efter følgende specifikationer:

:: Emission class CISPR 11, Group 1, Class B

Se flere detaljer på [www.vela.dk](http://www.vela.dk)

### 1.3.3. OVERSTRØMSSIKRING

Der sidder en smeltesikring på stolen, der sikrer mod overstrøm. Den udskiftelige del af sikringen har følgende specifikationer:

:: Flad sikring, type: ATOF Blade fuse, fast acting

:: Spænding: 32V

:: Strøm: 10A


:: Maks. strøm: 1000A

Sikringen må kun skiftes af en fagperson, da årsagen til fejlen samtidig skal undersøges, så stolen fortsat er sikker at bruge.



## GENERELT

### 1.4. MÆRKER ANVENDT PÅ STOLEN
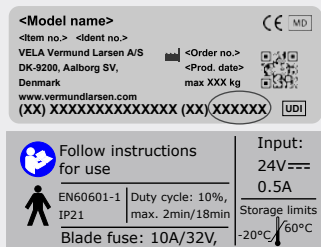
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advarsel | Klemfare: Hold hænder og fingre væk fra bevægelige dele                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| Ikon     | Læs manual før brug                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Ikon     | Anvendt del:<br>Type B jf. IEC60601-1<br>dækkende over følgende område af stolen:                                                                                                                                                                                      | <br> |
| Labels   | 60 x 22,5 mm<br><br>De sidste seks cifre er produktets id-nummer:<br>Dette label gælder kun for stol<br>med elektriske funktioner:<br>Stolen er IP21 godkendt, hvilket svarer til<br>beskyttelse mod vanddråber og samt mod<br>berøring af farlige dele med en finger. |                                                                                       |

Mærker på stolen bør læses i ca. 40 cm afstand ved almindeligt dagslys.  
For mærker relateret til betjening henvises der til afsnit 2.0.

### 1.5. SIKKERHED

Denne stol er CE-mærket og overholder gældende EU-regler.  
Stolen er produceret af:  
VELA, Gøteborgvej 8-12,  
9200 Aalborg SV, Danmark.

VELA Tango 700E med udstigningshjælp overholder alle sikkerhedskrav i henhold til IEC 60601-1, herunder krav til EMC i henhold til IEC60601-1-2.

#### 1.5.1. TILTÆNKT ANVENDELSE

Denne stol er beregnet til at støtte en bruger i en siddende stilling, imens brugeren udfører indendørs daglige aktiviteter, herunder arbejdsaktiviteter.

- :: Stolen er ikke bygget til at stå på
- :: Stolen skal altid bremses når man sætter sig eller rejser sig.

Alle varianter af denne stol er testet og godkendt til en maksimal belastning på 160 kg. For optimal anvendelse er stolens anbefalede brugervægt 50-145 kg med elektrisk hejs.

**Bemærk:** Personer, der bruger sele i stolen, skal altid være under opsyn, når selen er i brug.

### **1.5.2. TRANSPORT**

Ved transport af stolen i bil, fly og andre transportmidler, bør man altid anvende stolens bremse. Stolen er ikke godkendt som passagersæde i transportmidler og må derfor ikke anvendes som sådan.

### **Stolen kan klare følgende transportspecifikationer:**

Temperatur: - 20°C til + 60°C  
Luftfugtighed: 15-95%

Lad stolen stå i 24 timer inden den tages i brug, såfremt den har været opbevaret koldere end - 10°C.

### **1.6. REKLAMATIONSRET**

VELA giver reklamationsret efter gældende lovgivning i det land, hvor stolen er erhvervet. Reklamationsretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af fagpersoner.

**Bemærk:** hvis der er indgået en særlig kontraktmæssig aftale direkte med VELA, gælder denne!

VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

:: Transport

:: Misbrug

:: Almindelig slitage

:: Forkert brug

:: Brug af uoriginale reservedele og tilbehør

:: Tilpasninger foretaget af uautoriserede personer

### **1.7. UDPAKNING AF STOLEN**

Stolen leveres i miljøvenlig og genbrugseget emballage.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte din VELA-leverandør. I sådanne tilfælde må du ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

### **Ved levering har du modtaget:**

:: VELA-stol

:: Brugermanual tilhørende stolen

:: Oplader (kun for stole med el)

**Bemærk:** se pkt 2.0.1. for korrekt påsætning af ryglæn.

## 1.8. VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler et årligt eftersyn af stolen for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde alle indstillelige dele. På [www.vela.dk](http://www.vela.dk) findes diverse vejledninger.

### 1.8.1. HJUL

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester o.l. Visse gultyper akkumulerer snavs på hjulbanerne. Rens derfor hjulbanerne efter behov.

### 1.8.2. STEL

Rengøres med lunkent vand evt. tilsat en pH-neutral sæbe.

### 1.8.3. POLSTEROVERFLADER

**Stof:** Rengøres ved kemisk rens, med møbelrensemiddel eller en hårdt opvreden klud med vand.

**Kunststof/kunstlæder:** Rengøres med en hårdt opvreden klud med vand eller mild sæbe.

**Læder:** Rengøres ved støvsugning med blød børste. Undgå brug af rengøringsmiddel.

**Bemærk:** På [www.vela.dk](http://www.vela.dk) kan du finde rengøringsvejledninger for alle vores standard polstertyper.

### 1.8.4. GENBRUGSHJÆLPEMIDDEL

Din VELA-stol kan genbruges, når du ikke længere har brug for den, såfremt den serviceres af en tekniker forinden.

Den forventede levetid på stolen er 5 år ved normal og korrekt brug. Vi

anbefaler at VELA, din VELA-leverandør eller uddannet fagpersonale udfører et årligt eftersyn med evt. udskiftning af sliddele.

## 1.9. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Dette produkt indeholder materialer, som kan genbruges. Derfor skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse og genbrug er medvirkende til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

**Bemærk:** Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier er mærket med nedenstående ikon. Dette symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.



Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.




## 2.0. INDSTILLINGSMULIGHEDER

Udskiftning af elektrisk hejs må kun ske af en tekniker fra VELA eller af en uddannet person inden for dette felt.



### 2.0.1. PÅSÆTNING AF RYGLÆN


Ryglænen sættes ned i hul. Skru håndtaget på igen og stram det godt til.

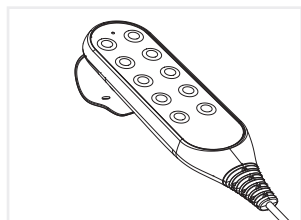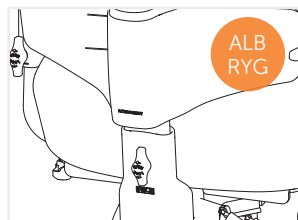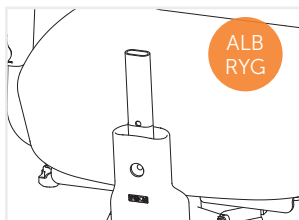

### 2.0.2. HÅNDBOKS

Håndboksen anvendes via trykknapper på fronten. VELA håndbokse kan have en eller flere funktioner. Se på håndboksens ikoner, hvilke funktioner knapperne dækker.

**Bemærk:** Elektriske funktioner må kun anvendes kontinuerligt i to minutter, derefter ni minutters pause.

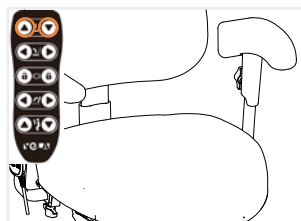


### 2.0.3. INDSTILLING AF SIDDEHØJDE

Brugerens siddehøjde ændres op og ned. Aktiveres via håndboksen. Indstil, så siddehøjden passer til aktiviteten og til brugeren af stolen.

**Bemærk:** funktionen kan være placeret anderledes på enkelte håndbokse. Tjek ikon på håndboxen før brug.


**Bemærk:** Indstilling af rygvinkel og sædevinkel skal altid ske med fødderne hvilende på gulv.

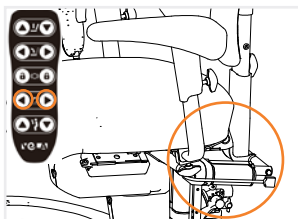

#### 2.0.4. INDSTILLING AF RYGVINKEL

Ryglænet bevæger sig frem/tilbage. Aktiveres via håndboksen. Indstil, så ryglænsvinklen passer brugeren af stolen.


**Bemærk:** funktionen kan være placeret anderledes på enkelte håndbokse. Tjek ikon på håndboxen før brug.

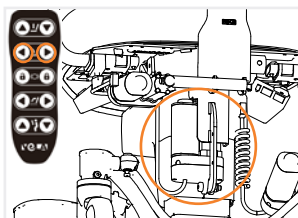

#### 2.0.5. INDSTILLING AF SÆDETILT

Hele siddeenheden bevæger sig (sæde og ryglæn sammen). Aktiveres via håndboksen. Indstil, så sædevinklen passer til aktiviteten og til brugeren af stolen.


**Bemærk:** funktionen kan være placeret anderledes på enkelte håndbokse. Tjek ikon på håndboxen før brug.

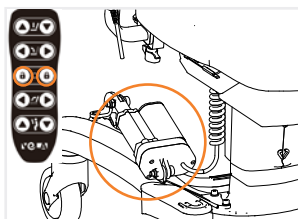

#### 2.0.6. EL-BREMSE

El-bremsen bremses og oplåses via håndboks. Det tilrådes at bremse/oplåse stolen helt, når denne funktion anvendes. Kan også bruges sammen med 4-hjulsbremse (se pkt. 2.0.20.)


**Bemærk:** funktionen kan være placeret anderledes på enkelte håndbokse. Tjek ikon på håndboxen før brug.

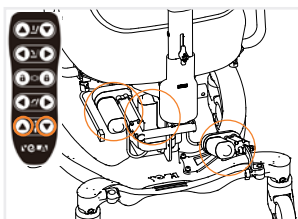

#### 2.0.7. UDSSTIGNINGSHJÆLP

Bremsen låses og sædetilt, ryglænsvinkel og siddehøjde ændrer sig. Hjælper til at kunne rejse og sætte sig. Kan indstilles til en optimal udstigningsindstilling og en neutral siddeindstilling (se pkt. 2.1.1.-2.1.2.). **Bemærk:** Ud- og indstigningshjælp har hukommelse, så brugeren kan pause sekvensen op til et minut\* imens denne retter sig i sædet og så genoptage sekvensen.


\* Sekvensen annulleres ved mere end et minuts pause, eller ved tryk på andre knapper. Ved annullering indstiller stolen sig til neutral position, før en ny udstigningssekvens kan påbegyndes.

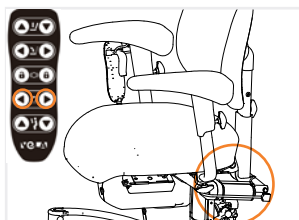

### 2.0.8. INDSTILLING AF SÆDEDYBDE


Aktivises via håndboksen. Indstil ryglænet, så sædedybden passer brugeren af stolen.

**Bemærk:** funktionen kan være placeret anderledes på enkelte håndbokse. Tjek ikon på håndboxen før brug.

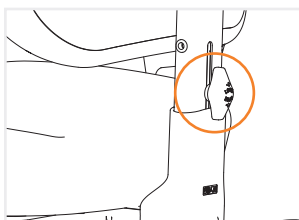


### 2.0.9. INDSTILLING AF RYGHØJDE

Løsn håndtaget, som er placeret bag på ryggen. Indstil ryggen. Husk at stramme håndtaget bagefter.

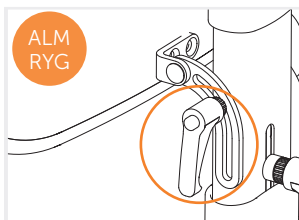


### 2.0.10. VINKEL-RIGLE

Ryglænet kan indstilles til en specifik vinkel ved at indstille og fæstne riglen, der er monteret bag på stoleryggen.

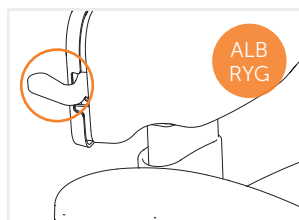


### 2.0.11. INDSTILLING AF LÆNDESTØTTE, ALB-RYG\*

Ryglænet kan indstilles til at give optimal lændestøtte ved at trække op i håndtaget på højre side af ryglænet. Ryglænet indstiller sig til at passe og støtte lænden. Slip håndtaget, og ryglænet bliver i den ønskede lændevinkel.

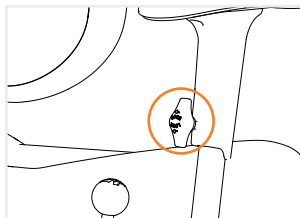

#### 2.0.12. INDSTILLING AF ARMLÆN, HØJDE

Indstilles ved at løsne skruen på armlænsstangen og regulere højden på armlænet. Husk at stramme skruen igen.

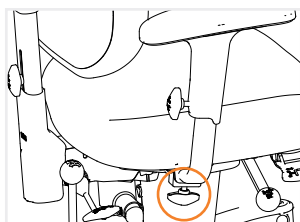

#### 2.0.13. INDSTILLING AF ARMLÆN, BREDDE

Indstilles ved at løsne skruen under sædet, bag på bærepladen og regulere armlænsbredden ved at trække ud i armlænet. Husk at stramme skruen igen.




#### 2.0.14. NEDKLAPPELIG ARMLÆN\*

Når armlænet skal klappes ned, trykkes knappen på siden af armlænet ind, og armlænet skubbes bagud og ned.


**Bemærk:** Armlænet er kun låst, når det er i opret position. For at armlænet kan klappes ned, skal breddeindstillingen af armlæn tillade det.

\* Tilbehør

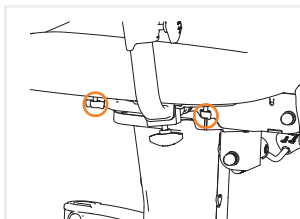


### 2.0.16. UDSKIFTNING AF SÆDE

Sædet kan udskiftes ved at afmontere fire vingeskruer, der er placeret i hvert sit hjørne under sædet.

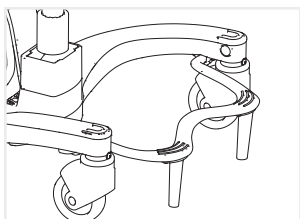


### 2.0.17. OPKLAPPELIG FODSTØTTE

Stabiliserende fodstøtte, der også kan bruges som trinbræt ind og ud af stolen.

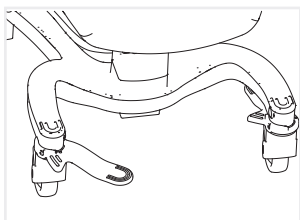

### 2.0.18. SIDEMONTERET UDKLAPPELIG FODSTØTTE\*


Monteret på undersiden af forreste højre og/eller venstre stoleben. fodstøtten kan drejes ud/ind og give støtte til et ben efter behov. Når fodstøtten er inde, er den gemt væk under stolens stel. Fodstøtten har rotationsstop i både inder- og i yderposition.

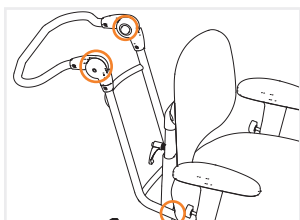

### 2.0.19. SKUBBEBØJLE\*

Skubbebøjle til persontransport i stolen. Skubbebøjlen monteres i beslag under sædet vha. to fingerskruer, hvor dybden også indstilles. Højden indstilles ved, at trykke de to knapper på siden af bøjlen ind, samtidigt med, at håndtaget placeres i den ønskede højde.




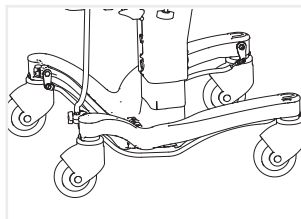

#### 2.0.20. 4-HJULSBREMSE\*

Aktivieres med håndbremse/fodbremse på alle stole men via håndboks eller kontakter på stole med el-bremse. 4-hjulsbremse bremser stolen på alle hjul og giver en stabil stol på ujævne/skæve overflader.

**Bemærk:** Ved el tilrådes det at bremse/oplase stolen helt, når funktionen anvendes.

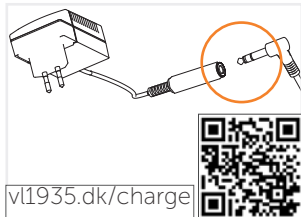

#### 2.0.21. OPLADNING

Oplad hver dag. Betjeningsstik tages ud af håndboksen og sættes i ladekontakt som vist på billede. El-stikket fra laderen sættes i stikkontakt. Stolen oplader, når dioden på opladeren lyser gul. Når stolen er opladt lyser dioden grøn. Hvis batterispændingen er lav, oplad da hurtigst muligt stolen.

**Bemærk:** Stolen må ikke bruges under opladning.

#### 2.0.22. TILBEHØRSLISTE


Denne stol kan fås med et bredt udvalg af tilbehør. Se komplet tilbehørsliste på: [www.vela.dk](http://www.vela.dk)

**Bemærk:** Oplader medfølger som tilbehør ved anskaffelse af en VELA-stol med elektriske funktioner.

\* Tilbehør

## 2.1. PERSONLIG TILPASNING AF UDSSTIGNINGSHJÆLP

**Bemærk:** Få eventuelt hjælp af en terapeut til at indstille en optimal siddestilling og udstigningsposition.

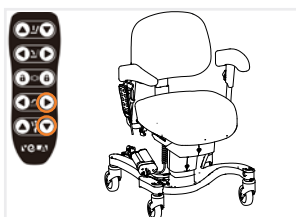

### 2.1.1. PERSONLIG TILPASNING AF SIDDESTILLINGEN

Sørg for at stolen er bremsset! Indstil siddehøjde, sædetilt og ryglænsvinkel, så du sidder godt og stabilt med fødderne fladt på gulvet (se pkt.: 2.0.3.-2.0.5.). Når stolen er indstillet, trykker du på de to knapper nederst til højre i fem sekunder. Når du hører et klik er indstillingen gemt.



### 2.1.2. PERSONLIG TILPASNING AF UDSSTIGNINGSHJÆLP

Sørg for at stolen er bremsset! Indstil siddehøjde, sædetilt og ryglænsvinkel, så du står godt og stabilt med fødderne fladt på gulvet (se pkt.: 2.0.3.-2.0.5.). Når stolen er indstillet, trykker du på de to knapper nederst til venstre i fem sekunder. Når du hører et klik er indstillingen gemt.



