



Brugsanvisning

Din trappelift er specielt et sofistikeret produkt udviklet til at bære en person, der sidder på stolen op til en maksimal vægtpå kapacitet på 125 kg.

Oplysningerne i denne manual er baseret på generelle specifikationer vedrørende konstruktionen, materialeegenskaber og arbejdsmetoder, vi kender på tidspunktet for offentliggørelsen; ændringer og forbedringer forventes derfor. Læs venligst denne manual omhyggeligt og gør dig bekendt med arbejdet og betjeningen af din nye trappelift.

Din trappelift er konstrueret ved hjælp af det nyeste teknologi, i overensstemmelse med EN81:40 standarder og anerkendte sikkerhedsforskrifter. Forkert brug af trappelift kan medføre risiko for brugeren eller andre eller evt skader på din Trappelift eller andet gods. Følg venligst brugervejledning i overensstemmelse med denne brugervejledning. Hold denne brugervejledning tæt på og inden for rækkevidde.

Teknisk support eller problemer:

Skulle der opstå et problem, som ikke er nævnt heri håndbog kontakt venligst din trappeliftleverandør. De serviceafdeling vil altid gerne hjælpe og hjælpe dig.

Det er vigtigt, at du har følgende oplysninger tilgængelig, når du foretager et opkald:

- Din manual
- Dine fulde kontaktoplysninger
- Dit lift- eller købsnummer

Garanti og ansvar:

Som bruger af denne trappelift er du fuldt ud ansvarlig for overholdelse af lokalt gældende sikkerhedsbestemmelser og retningslinjer. Producentgarantien er 24 måneder (ekskl. batterier). Ethvert materiale/komponenter, der går i stykker i denne periode, vil blive erstattet gratis.

Udelukkelse fra garantier:

Skader forårsaget af normal slitage, overbelastning eller forkert brug, udskiftning af batterier i fjernbetjeningerne. Udførelse af eventuelle ændringer på produktet er ikke tilladt og vil påvirke din garanti, ligesom liften muligvis ikke længere er i overensstemmelse med vores standarder.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af sådanne ændringer.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser forårsaget af utilstrækkelig overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og sikkerhedsinstruktionerne i denne manual; eller ved uagtsomhed under installation, brug, vedligeholdelse og reparation af denne trappelift. Installation og service må kun udføres af ansvarlige installatører, som er certificeret og autoriseret af producenten, under hvilke de nødvendige forskrifter skal overholdes.


Forklaring af Synergy



- ① Nøgle lås
- ② Hovedafbryder
- ③ LCD Display
- ④ Fodplade

— SYNERGY —

Forklaring af Synergy

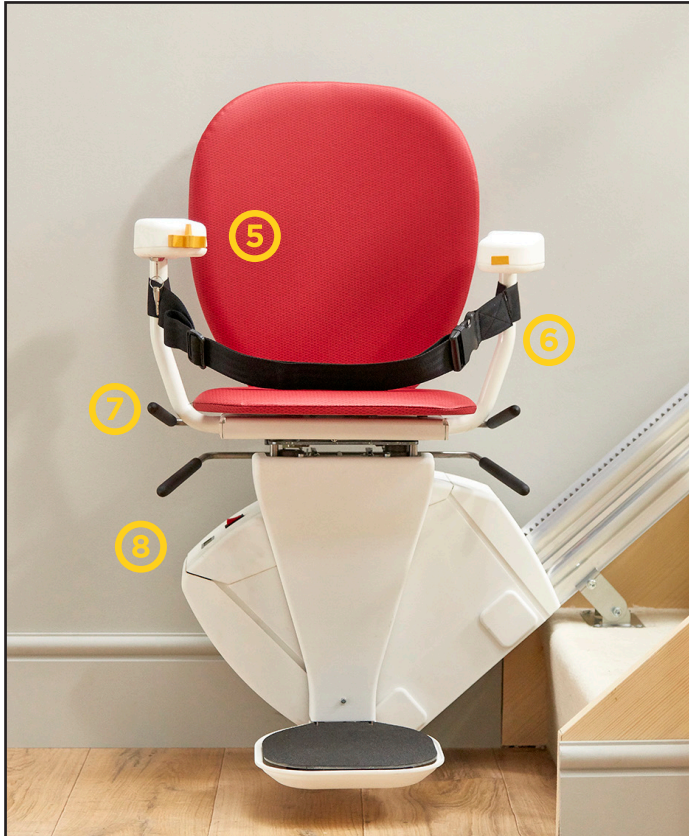

- ⑤ Joy stik
- ⑥ Sikkerheds bælte
- ⑦ Håndtag til sædedrej
- ⑧ Fodplade håndtag

— SYNERGY —

- Begynd med den foldede stol
- drej nøglelås for at tænde (1).



- Tænd for hovedafbryder (2).



- Sænk armlæn.
- Sæt dig godt tilrette i sæde.



- Sørg for at sikkerheds bælte et klikket i



- Ræk ud efter fodstøtتهåndtaget, og sænk forsigtigt fodstøtتهen til køreposition.
- EUsure yo



- Hold hånden på vippekontakten i kørselsretningen
- Din trappelift er klar til at bevæge sig op eller ned ad trappen



— SYNERGY —

Fortsæt med at holde vippekontakten i kørselsretningen, indtil du når slutningen af rejsen.



- Du er nu nået til toppen af trappen.
- Sørg for, at stolen har nået opladningspositionen, et hørbart bip lyder, hvis den er placeret forkert.



- Sørg for, at du er stoppet sikkert, før du begynder at dreje sædet.
- For at dreje skal du trykke på håndtaget under sædet og dreje stolen sikkert væk fra trappen.



- Løsn din sikkerhedssele
- Sørg for, at det er sikkert at stå af.
- Sørg for, at din trappelift har fuldført sin rejse for at sikre, at elevatoren oplader korrekt.
- HVIS TRAPPELIFTEN IKKE LADER KORREKT, LYDER ET LYDLIGT BIP



- Din stol skal parkeres sikkert på et ladepunkt
- Sæt drejesædet tilbage til den oprindelige position
- Fold armlæn og fodstøtte



Tillæg til brugsanvisning brug af ”hinge” elektrisk skinneklap funktion.

- Når du vil køre op-og ned med din ”hinge” Synergy trappelift betjenes den som beskrevet i brugsanvisningen med det gule ”joystik” på højre armlæn, du trykker/vipper det, i den retning du ønsker at køre.
- Når du kører op til 1 sal.-og stolen automatisk stopper, tryk nu en ekstra gang på det gule joystik, skinnestykket forned vil nu klappe op, så døråbningen er fri.
- Når du kører ned til stueetagen, tryk på det gule ”joystik” du vil nu se, at skinnestykke i bunden vil klappe ned, tryk nu igen på ”joystik” og køre helt ned-og står af. OBS! Stolen vil nu komme med en ”bip-lyd” dette indikere at stolen ikke oplader. Tryk-og hold nede på håndbetjeningens lille gule ovale knap, nu vil stolen køre lidt op af skinnen, til den når først kommende oplade-punkt, nu vil ”bip-lyd” forsvinde da stolen oplader, samtidig er skinnen klappet op så døråbning er fri.





Sikkerhedsinstruktioner

Når du bruger trappeliften, skal du altid overholde de lokalt gældende sikkerhedsbestemmelser vedrørende risiko for elektrisk stød og fysisk skade.

1. 1. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer, hvor trappeliften skal installeres. Hele banen skal være fri for forhindringer. Spørg din installatør, hvis du er i tvivl.
2. 2. Tag hensyn til miljøpåvirkninger såsom fugtigt eller ekstremt sollys. Hele banen skal være synlig for at undgå at snuble.
3. 3. Hold uautoriserede personer og husdyr væk fra trappeliften. Liften er ikke designet til at transportere dyr eller varer.
4. 4. Trappeliften bør kun bruges af én person ad gangen.
5. 5. Hold børn væk fra din trappelift, medmindre de er under

6. Tag nøglen ud af nøgleafbryderen, hvis liften ikke er i brug.
7. Hold lemmer og tøj væk fra bevægelige dele. Sørg for, at løstsiddende tøj ikke kan blive fanget eller fanget mellem stolen eller skinnen.
8. Sørg for en sikker siddestilling. Sæt dig så langt tilbage som muligt tilbage i din stol, brug armlænene og placer fødderne lige på fodstøtten. Stå ikke på din trappelift
9. Bær altid din sikkerhedssele!
10. Hvis du føler, at din Trappelift er defekt, skal du kontakte din lokale forhandler eller installatør.
11. Brug kun kvalificerede teknikere til at udføre reparationer på liften

General vedligehold

- Tjek og rengør trappeliften regelmæssigt
- Undgå overdreven brug af vand
- Rengør sæde, arm og fodstøtte med kun en fugtig klud

Ingeniør instruktioner

Tjek liften for eventuelle skader.

Kontroller, at alle dele og pakker er på stedet.

Sørg for, at du har din installationsvejledning på stedet. Efterse alle dele er i fuld funktionsdygtig stand.

Brug kun originale liftdele (dette kan potentielt påvirke din garanti).

Sørg for, at alle sikkerhedsanordninger er monteret korrekt, disse må kun fjernes, hvis der er behov for vedligeholdelse eller reparation og kun serviceres af

en kvalificeret ingeniør.

Liften må ikke bruges eller efterlades, hvis sikkerhedsanordningerne ikke er funktionelle eller ufuldstændige.

Sikkerhedsanordningerne skal kontrolleres regelmæssigt for at se, at alt er i funktionsdygtig stand, hvis ikke bør disse repareres med det samme.

Brug enheden i overensstemmelse med den tilsigtede brug.

Sørg for at PPE er på plads, når det er nødvendigt, f.eks. sko, sikkerhedsbriller, sikkerhedshjelm, handsker under montering og servicering af liften Husk at have reservedele og det korrekte værktøj i din varevogn/køretøj.

Fejlsøgning

Displaydiagnosefunktionen, der kan informere ingeniøren om eventuelle problemer, som Synergy Stairlift er stødt på under installationen eller ved almindelig brug. Afhængigt af problemet viser Synergy Trappeliften et udvalg af fejlmeddelelser for at indikere, hvad problemet er, hvilket gør det muligt for teknikeren at lokalisere fejlen og løse hurtigt uden behov for eliminering af andre potentielle fejl



Fejlsøgning



- **Lift oplader ikke**
- •Tjek at lift er parkeret på opladepunkt
- •Tjek spændingen ved ladepunktet, strømmen er tændt og polariteten er korrekt.



Hovedchassis sikkerhedsafbryder aktiveret

- Tjek for forhindringer og dæksler, der kan bevæge sig
freely

Kontroller Mainframe ledningsvæv for kontinuitet som markeret på printkortet og ved hjælp af ledningsdiagrammet eller korrekte afbryderkabler

Fejlsøgning



Fodstøttes sikkerhedsafbryder aktiveret

- Tjek for forhindringer og dæksler, der kan bevæge sig freely
- Kontroller fodstøttens ledningsvæv for kontinuitet som markeret på printkortet og ved hjælp af ledningsdiagrammet eller korrekte afbryderkabler




- Sædedrejelig sikkerhedsafbryder aktiveret (vil også vis, når motordrevet drejeled er i bevægelse)
-

Kontroller, at drejekontakten er lukket, placeret på th drejeknap under sædet.

- Kontroller kontinuiteten på den orange ledning placeret i mainframe loom.

Fejlsøgning

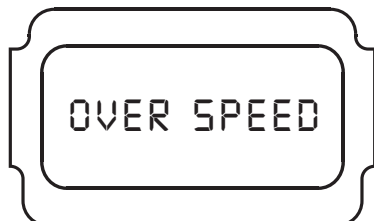

Overhastighedskontakten er aktiveret


- Vilk liften opad ved hjælp af håndvinderen.



Relæet klæber på hovedprintkortet


- Tryk forsigtigt på relæet for at frigøre mekanismen, hvis dettække virker, vil et nyt PCB være påkrævet

Fejlsøgning

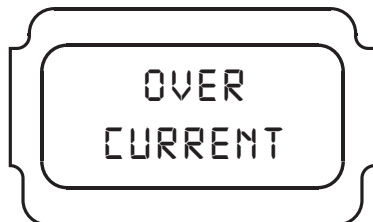

Liften trækker for meget strøm

- Kontroller, at tandstangen er fri, så liften kan bevæge sig
- Tjek, at kundens vægt ikke overstiger grænsen

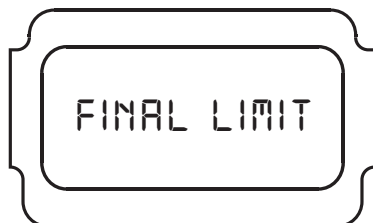

Liften har kørt over på endestop

- Vikl liften væk fra endestoppet og prøv toppen

Fejlfinding

Tak fordi du valgte Skræddersyede Trappelifte.

Din trappelift vil give dig mange års pålidelig service og give dig mulighed for at nyde den fulde brug af dit hjem. Din trappelift er dækket af en producents garanti i 2 år, der dækker udgifterne til reservedele. Sørg for, at kun en autoriseret og kvalificeret Skræddersyet Trappelift-uddannet ingeniør installerer og servicerer trappeliften. Under ingen omstændigheder må andre end en ingeniør, der er uddannet og autoriseret til at installere, justere, servicere eller modificere nogen mekanisk eller elektrisk enhed på dette produkt. Manglende overholdelse af denne advarsel kan resultere i kompromittering af sikkerhedssystemet, hvilket kan resultere i alvorlig personskade eller død. Bespoke Stairlifts påtager sig intet ansvar for skader på ejendom, garantikrav eller personskade, herunder dødsfald, i denne omstændighed.

Efter installationen kræver pålidelig drift og kontinuerlig sikker drift regelmæssig service og inspektion. Som ejer er du ansvarlig for, at regelmæssig service og eftersyn sker rettidigt. OPRETHOLDELSE

En gang om året tilrådes det at ringe til din Skræddersyede Trappelifte/ autoriserede forhandler for at udføre den årlige inspektion, som omfatter alle vedligeholdelses- og sikkerhedsinspektioner og reparationer, hvor det er nødvendigt.

Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for at holde din trappelift i korrekt driftstilstand.

Vi anbefaler kraftigt, at du kun bruger autoriserede ingeniører til at udføre alt nødvendigt vedligeholdelses-, service- og reparationsarbejde.

Fejlsøgning

Installationsdato
Installationsudbyder
Serviceudbyder Telefon
Installationsingeniør Signatur
Kundesignatur

Service dato
Næste service forfalder.....
Serviceudbyder
Tjenesteudbyder Telefon
Servicetekniker Signatur
Kundesignatur

Service dato
Næste service forfalder.....
Serviceudbyder
Tjenesteudbyder Telefon
Servicetekniker Signatur
Kundesignatur

Service dato
Næste service forfalder.....
Serviceudbyder
Tjenesteudbyder Telefon
Servicetekniker Signatur
Kundesignatur

Certificate of Conformity



Vi erklærer hermed, at den nedenstående trappelift overholder og opfylder alle relevante bestemmelser i følgende direktiv:

Maskindirektiv 98/37/EF og 2006/42/EF

Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF

EMC-direktiv 2004/108/EF

Produktbeskrivelse: Trappelift

Mærke: Skræddersyede trappelifte

Model nr.: Synergy Straight

Serienummer: Fra 0001 til Nuværende


Fremstillet af: Bespoke Stairlifts Ltd

Adresse: Unit 9 , Old Fieldhouse Industrial Estate, Old Fieldhouse Lane, Huddersfield, West Yorkshire, HD2 1FA

Trappeliften er designet og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 1050, EN 60204-1, BS EN 81-40, BS 5776

Den tekniske dokumentation er udarbejdet af David Forsyth, administrerende direktør, Bespoke Stairlifts

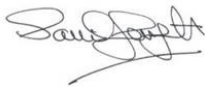

Signed

Date 15th April 2019

Name: David Forsyth

Position: Managing Director



BESPOKE
STAIRLIFTS LIMITED

**Your Bespoke Stairlifts Approved
Dealer**

**Jøhl Human Care, Holmekrogen 10, 2830
Virum, telefon 39202007**

www.bespokestairlifts.com

— SYNERGY —