



BRUGERVEJLEDNING



C10P023 . Rev B . 21-06-2024.

Denne brugervejledning SKAL udleveres til brugeren af produktet. Læs denne vejledning FØR brug af produktet, og gem den til fremtidig brug. Oplysningerne i dette dokument er uden kontrakt og kan ændres uden varsel.

Billederne i denne vejledning er vejledende og uden kontraktmæssig værdi.

INDLEDNING	P. 4
FUNKTIONALITET	P. 4
GARANTI	P. 5
SOFAO	P. 5
BETJENING AF SOFAO	P. 6
SPECIFIK BETJENINGSTEKNIK	P. 7
<u>Ved swimmingpoolen</u>	p. 7
<u>Ved havet</u>	p. 7
PLACERING AF PASSAGEREN PÅ SOFAOEN	P. 8
<u>Overførslen</u>	p. 8
<u>Fastholdelsen</u>	p. 8
<u>Komforten</u>	p. 8
SIKKERHEDSREGLER FOR BRUG AF SOFAO	P. 8
<u>Mandskabet</u>	p. 8
<u>Forsikring</u>	p. 8
<u>Under badning</u>	p. 8
TEKNISK TEGNING AF SOFAO	P. 9
VEDLIGEHOLDELSE	P. 10
VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE	P. 10
RENGØRING	P. 10
DESINFEKTION	P. 10
INSPEKTIONSLISTE	P. 11
LANGTIDSOPBEVARING	P. 12
EFTER BRUG	P. 12
AFFALDSHÅNDTERING	P. 12
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	P. 12
UDFOLDNING AF SOFAO	P. 14
KONTAKT	P. 17

INDLEDNING

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om håndteringen af Sofao. For at sikre sikker brug af produktet, skal du læse brugervejledningen omhyggeligt og følge sikkerhedsanvisningerne før brug.

Hvis du finder skrifttypen i den trykte version af brugervejledningen for lille til at læse, kan du downloade vejledningen som en PDF-fil på websitet www.joeletteandco.com. Du vil derefter kunne justere skriftstørrelsen på skærmen for at forbedre din visuelle komfort.



FUNKTIONALITET

Brug kun Sofao, hvis det er i perfekt stand. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du risikere at bringe dig selv og andre i fare. Listen nedenfor er ikke udtømmende; den har blot til formål at påpege nogle situationer, der kan påvirke funktionaliteten af din Sofao.

Det anbefales at stoppe brugen af din Sofao, hvis dens funktionalitet er påvirket, især af følgende årsager:

- fejl i låsesystemet på ryglænet (indekseringsfingre)
- fejl i låsesystemet på sædet (indekseringsfingre)
- utilstrækkeligt dæktryk
- beskadigede flydere
- beskadigede sæde-, ryglæn- eller benstøttestoffer
- beskadiget fastholdelsesanordning
- beskadigede, bøjede, klemte eller løsnede kabler
- manglende sikkerhedsstifter (baghjul)
- unormale eller usædvanlige lyde

GARANTI

Garantien er på 2 år. Sofao skal bruges i overensstemmelse med sin tiltænkte funktion, behandles omhyggeligt og vedligeholdes. Der er risiko for ulykker og bortfald af garantien ved manglende vedligeholdelse og pleje (side 10).

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå ulykker forårsaget af usynligt slid er det vigtigt, at Sofao gennemgår en årlig inspektion og mindst én kontrol om året.

Hvis du oplever en funktionsfejl på din Sofao, bør du ikke forsøge at udbedre fejlen selv, da dette kan medføre bortfald af garantien; kontakt os i stedet.

Reservedele vil være tilgængelige i en periode på **5 år**.

ADVARSEL

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af Sofao skal anmeldes til producenten.

**KUN BEREGNET TIL
FRITIDSAKTIVITETER.**

SOFAO

Sofao er en badestol og en nedsænkningstol, der gør det muligt for en ledsager at transportere sin passager fra bilen til vandet uden nogen form for overførsel og uden specielt tilpasset adgang. Ledsageren håndterer ind- og udstigning af vandet ved hjælp af det forreste håndtag.

Al innovation ligger i brugen af 4 flydere-stabilisatorer, der understøtter passageren under en ægte svømmetur, hvor kroppen er nedsænket op til skuldrene.

Afslapning kan følge svømmeturen, stadig uden overførsel, da Sofao ved blot at læne ryglænet tilbage forvandles til en komfortabel liggestol.

Sofao er fuldt sammenklappelig uden brug af værktøj; den kan rulles sammen, og den passer i bagagerummet på en lille bil, så den kan tages med overalt.

Den er designet til en bred vifte af brugere med forskellige behov.



BETJENING AF SOFAO

Sofao kan betjenes på forskellige måder afhængigt af de valgte tilvalg:

- Uden tilvalg er den enkleste løsning at trække Sofao ved hjælp af det forreste håndtag.
- Med forhjul til poolen skubbes Sofao ved at holde på toppen af ryglænet.
- Tire-Sofao er beregnet til at trække Sofao fra fronten. Det anbefales at bruge det ekstra hjulsæt med denne mulighed.

JUSTER RYGLÆNET

- Stå bag Sofao og hold på toppen af ryglænet.
- Træk i gummihåndtaget midt på ryglænet, og sænk det, indtil du hører et «klik» fra låsen.

JUSTER HØJDEN PÅ FLYDERNE

- Stå bag Sofao.
- Skub flyderen langs røret, mens du trækker i låseknappen, indtil du hører et «klik» fra låsen.





SPECIFIK BETJENINGSTEKNIK

VED SWIMMINGPOOLEN

- Hvis poolen har en rampe, skal du placere dig bag Sofao og bevæge dig fremad i køreretningen.

- For at gå ned ad trappen i en pool, skal du placere dig bag Sofao, med ryggen mod skråningen. Bevæg dig baglæns ned i vandet, mens du holder stolen tilbage. For at gå op ad trappen, stå med front mod stolen og træk den op ved hjælp af håndtaget for at få den ud af vandet.

Gå ned ad trappen



Gå op ad trappen



- For at få Sofao ind eller ud af vandet over en kantsten, hold Sofao bagpå ved styret, og kontroller nedstigningen, eller træk stolen ud af vandet. Denne manøvre kan udføres af to personer, med én person foran og én bagved.



VED HAVET

Kontrollér, at der er nem adgang til vandet. Hvis sandet er løst, anbefaler vi brug af det ekstra hjulsæt (tilvalg) for at lette styringen af stolen.

PLACERING AF PASSAGEREN PÅ SOFAO

OVERFØRSEL

Hvis passageren ikke kan overføre sig selv fra kørestolen til Sofao, løft passageren og placer vedkommende på badestolen.

FASTHOLDELSE

Før hver badetur eller transport skal sikkerhedsstropperne fastgøres om passagerens ben og torso.

KOMFORT

Indstil ryglænets hældning før hver transport for at sikre passagerens maksimale komfort.

SIKKERHEDSREGLER I SOFAO

MANDSKAB

Der kræves kun én fører til at styre Sofao. Ved brug på havet skal der være en anden fører til stede for at forhindre stolen i at drive væk.


FORSIKRING

Hver ledsager skal have en ansvarsforsikring. Brug af Sofao kræver ikke en specifik forsikring, men denne aktivitet bør meddeles din forsikringsgiver.

UNDER BADNING

- Følg de anvisninger, der gives af livreddere.
- Tjek havvejret, og undgå at bruge Sofao ved bølger, dønninger, vind osv.
- Ledsageren skal altid holde en hånd på ryglænet af Sofao.
- Svøm ikke uden for de overvågede svømmesoner.
- En ledsager skal altid være tæt på stolen. Ved brug på havet skal der være en anden ledsager til stede for at forhindre stolen i at drive væk.

TEKNISK TEGNING AF SOFAO

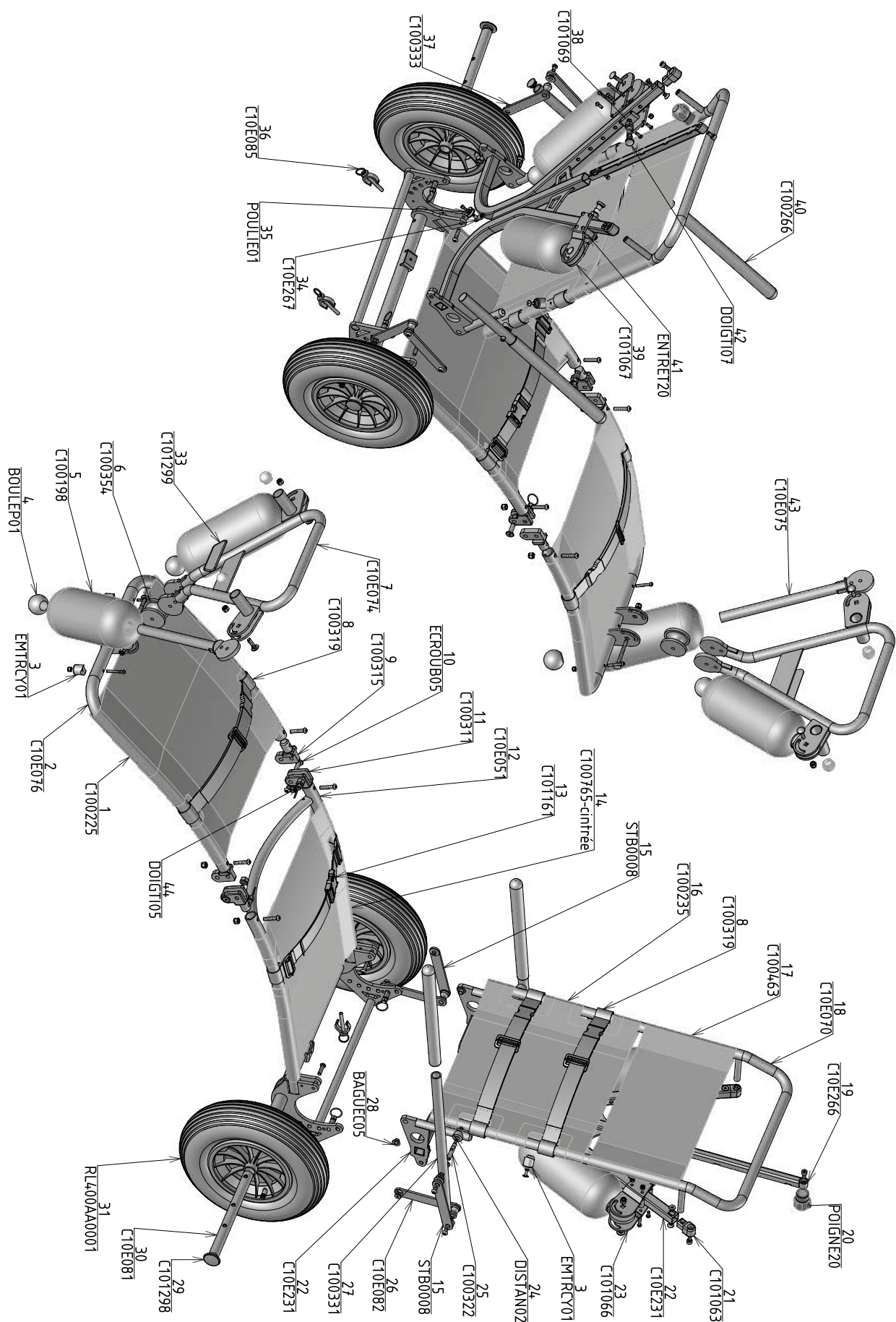

VEDLIGEHOELDELSE

PLEJE OG VEDLIGEHOELDELSE

Begrebet «Vedligeholdelse» dækker alle aktiviteter, der har til formål at holde Sofao i god stand og sikre dets egnethed til transport. Vedligeholdelse omfatter områder som regelmæssig rengøring, inspektioner, reparationer og generel eftersyn.

Den bør udføres mindst én gang om året, uanset hvor ofte Sofao anvendes. En anden vedligeholdelsessession er nødvendig ved regelmæssig brug (flere gange om ugen).

Dette indebærer kontrol af:

- dæktrykket
- tilstedeværelsen af sikkerhedsstifter.



FARE !

Risiko for materielle skader eller alvorlige til livstruende skader

Ukorrekt reparation og/eller vedligeholdelse af Sofao udført af brugere/ledsagere eller af ikke-kvalificerede teknikere kan føre til materielle skader eller alvorlige, endda livstruende skader.

- Udfør **INGEN** vedligeholdelsesopgaver udover dem, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Disse reparationer og/eller vedligeholdelse SKAL udelukkende udføres af producenten eller kvalificeret personale.

RENGØRING

Ved rengøring af Sofao skal følgende punkter følges:

- Skyl stolen efter hver brug for at reducere de korroderende virkninger af salt eller klor.
- Brug ikke slibemidler til rengøring.
- Brug ikke højtryksrensere til rengøring.

DESINFEKTION

Desinfektion ved hjælp af godkendte og testede desinfektionsmidler kan udføres med en fugtig klud eller ved sprayning. På Robert Koch-institutets websted, <http://www.rki.de>, kan du finde en liste over desinfektionsmidler, der i øjeblikket er godkendt til rengøring med en fugtig klud eller sprayning.

INSPEKTIONSLISTE

Tabellerne nedenfor indeholder en liste over de inspektioner, som brugeren skal udføre med de angivne intervaller.

Før hver brug af Sofao

ELEMENT	INSPEKTIONSKONTROL	I TILFÆLDE AF FEJL
Låsesystem for sædet	Sørg for, at indeksfingrenes bevægelse er fri uden fastklemning, og at låsningen af sædet fungerer korrekt.	Kontakt os
	Sørg for, at indeksfingrene er ordentligt indsat i leddene.	Kontakt os
Dæk	Sørg for, at dækkene ikke er beskadigede, og at der ikke er lækager ved oppustningsventilerne.	Kontakt os
	Sørg for, at dækket er oppustet til den korrekte tryk.	Pust dækket op. Henvi til tabellen for hovedhjulets dæk i kapitlet 'Tekniske specifikationer'. For reparation af slangen, kontakt os eller henvend dig til en cykelhandler.
Tilstedeværelse af stifter og sikkerhedsstifter	Sørg for, at stifterne i hjulakslerne er til stede.	Kontakt os
Fastholdelsesanordning	Sørg for, at sikkerhedsselerne fungerer korrekt. Tjek, at syningerne ikke er beskadigede.	Kontakt os

Regelmæssigt

ELEMENT	INSPEKTIONSKONTROL	I TILFÆLDE AF FEJL
Alle Batyline-stoffer	Kontroller for skader og slid. Tjek, at lynlåse på sædet er lukket korrekt.	Kontakt os

LANGTIDSOPBEVARING

Hvis du ikke bruger din Sofao i en længere periode, skal du forberede den til opbevaring for at forlænge dens levetid.

Vi anbefaler at opbevare Sofao ved en temperatur på 15°C og undgå ekstreme temperaturer for at forlænge dens levetid og levetiden for dens tilbehør.

Komponenterne er testet og godkendt til højere temperaturinterval, som detaljeret beskrevet nedenfor:

- Det tilladte temperaturinterval for opbevaring af køretøjet er mellem -20°C og +40°C.

Opbevar i et tørt, godt ventileret miljø beskyttet mod udendørs påvirkninger. Overpump let dækkene.

EFTER BRUG

AFFALD HÅNDTERING

- Emballagen til apparaterne går til materiale genbrug.
- Metaldele går til genbrug af gammelt metal.
- Plastdele går til genbrug af plastmaterialer.
- Affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med de nationale lovkrav, der er gældende.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

De tekniske oplysninger, der gives i dette dokument, gælder for standardkonfigurationen for Sofao eller repræsenterer de maksimale teoretiske værdier.

Disse specifikationer kan ændre sig ved tilføjelse af tilbehør.

NB: Vær opmærksom på, at i nogle tilfælde kan de målte værdier variere med +/- 10 mm.

BETINGELSER OG STEDER FOR TILLADT BRUG OG OPBEVARING	
Driftstemperaturinterval	Fra -10 til +50°C
Opbevaringstemperaturinterval	Fra 0 til +50°C

DÆK	
Dæktype	400 mm i diameter
Tryk	Maksimum 2 bar

EGENSKABER	
Total højde	1140 - 692 mm (ryglæn hævet - hældet)
Total bredde	754 mm
Total længde	1560 - 2455 mm (ryglæn og håndtag hævet - sænket)
Sædehøjde	295 mm
Sædebredde	495 mm
Sædedybde	530 mm
Ryglænets højde	510 mm
Ryglænsvinkel	90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 °
Sædevinkel	9°
Armlænishøjde	200 mm
Armlænslængde	335 mm
Frihøjde	154 mm
Opbevaringsdimensioner	1035(B) x 610(b) x 475(h)

VÆGT	
Egenvægt	19 kg

LAST	
Maksimal last	100 Kg

UDFOLDNING AF SOFAO



1. Løsn den nederste rem mellem de to hjul.



2. Løsn fastholdelsesremmen øverst på stolen.



3. Fjern sikkerhedsstifterne på hjulakslerne.



4. Fjern hjulakslerne.



5. Skub hjulene på deres aksler med ventilen vendt udad, og sæt derefter akslerne tilbage i deres pladser.



6. Sæt sikkerhedsstifterne tilbage.



7. Udfold sædet.



8. Udfold ryglænet ved at trække i gummi håndtaget i midten.



8. Udfold håndtaget foran på Sofao.



8. Før badning, udfold de fire flydere.

For at folde Sofao sammen, skal du følge de omvendte trin og være opmærksom på at undgå fastklemning og klemning af hænder og fingre med de bevægelige dele.

En video er tilgængelig på vores hjemmeside www.joeletteandco.com



Joëlette and Co
by Ferriol-Matrat

Du kan finde de nedenstående piktogrammer i denne brugervejledning samt på produktetiketten:



Overholder de væsentlige krav i den gældende europæiske lovgivning for produktet



Advarsel: Det er vigtigt at konsultere brugervejledningen



Opmærksomhed: Specielle punkter, der kræver din opmærksomhed



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må smides ud med husholdningsaffald inden for EU. For at undgå potentielle skader på miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret bortskaffelse, skal du genbruge dette apparat ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialer. For at returnere dit brugte apparat, skal du bruge retursystemer og indsamlingsmuligheder eller kontakte forhandleren, hvor du har købt produktet. De vil kunne genbruge dette produkt på en miljøvenlig måde.



Katalognummer



Producent



AAAA-MM Produktionsdato (År-måned)



Batchnummer



Serienummer

For at finde den seneste version af vejledningen, besøg vores hjemmeside.



KONTAKT

**TØV IKKE MED AT KONTAKTE JOËLETTE AND
CO-TEAMET VED SPØRGSMÅL.**



info@joëletteandco.com

Kundeservice : sav@joëletteandco.com



0033 (0)4 - 77 - 42 - 62 - 58

Deltag i Joëlette's Community på sociale medier!



@FERRIOL-MATRAT – ALL RIGHTS RESERVED

Denne brugervejledning er beskyttet af loven den 11. marts 1957 om litterær og kunstnerisk ejendom, suppleret af loven den 3. juli 1985 og af alle de konventioner, der gælder for ophavsret. I henhold til disse love og konventioner er ingen reproduktion, total eller delvis, af vejledningen, programmer eller systemer tilladt uden forudgående skriftligt samtykke fra FERRIOL-MATRAT. FERRIOL-MATRAT forbeholder sig retten til at revidere og forbedre disse produkter. Denne publikation beskriver produktets tilstand på tidspunktet for offentliggørelsen og forudser ikke de ændringer, det måtte gennemgå.