

DAISYBox



Brugervejledning

✧ Sensotec

Sensotec BV
Kalfjeslaan 38
2623AJ Delft (Holland)
Telefonnummer: +31 15 262 59 55
Fax: +31 15 257 15 95
E-mail: info@daisybox.nl
Website: www.daisybox.nl

DAISYBox

Version 2.22 Udgivet 28 Maj 2024

© Ophavsret 2024

Ingen del af denne publikation må gengives og/eller offentliggøres ved tryk, fotokopiering, mikrofilm eller på nogen anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sensotec (www.sensotec.com).

Sensotec forbeholder sig ret til at ændre publikationen til enhver tid uden forudgående varsel. Den nyeste udgave af dette dokument findes på www.daisybox.nl

Talesynteser er leveret af Acapela.

Indholdsfortegnelse

1	Præsentation.....	6
2	Hvad skal du sørge for?.....	10
3	Tilslut hovedtelefoner.....	12
4	Fysisk beskrivelse.....	13
5	Sådan bruger du DAISYBox.....	20
5.1	Tænd for din DAISYBox.....	20
5.2	DAISYBox på batteri.....	21
5.3	Pause Tilstand.....	22
5.4	Lydstyrke.....	23
5.5	DAISYBox Simpel & Avanceret.....	23
5.6	Afspil en bog.....	23
5.7	Justering af hastighed og toneleje.....	24
5.8	Sådan returnerer (sletter) du en bog.....	24
5.9	Skift talesyntese.....	25
5.10	Konfiguration af Dvale tilstand.....	25
5.11	Medie håndtering (USB, SD, CD...),.....	26
5.12	Hent ned til SD / USB.....	26
5.13	Kopier en CD til SD / USB.....	27
5.14	Fjern en bog fra SD / USB.....	27
5.15	Navigering i (DAISY) Lydbøger.....	28
5.16	Afspilning af CD.....	29
6	Opsætning.....	31
6.1	Følgende bliver leveret med.....	32
6.2	Forbindelse til internettet.....	33
6.3	Forbind din DAISYBox.....	33
6.4	Opsætning af trådløs internet.....	36
6.5	Hvis dit netværk ikke understøtter DHCP.....	39
7	Ofte stillede spørgsmål.....	40
	Annex A: Pause menu.....	44
8	Pause menu.....	44
	Annex B: Reset menu.....	47

9 Nulstil menuen.....	47
10 Specifikationer.....	49

Vigtige informationer

Vær gerne opmærksom på følgende retningslinjer:

- Undgå al kontakt mellem din enhed og væsker. Udsættes enheden for væske kan det resultere i en kortslutning.
- Adskil ikke din DAISYBox enhed. I tilfælde af at din enhed ikke fungerer som forventet, kontakt din leverandør.
- Overdæk eller placer ikke noget på din enhed. Den er ikke bygget til vægt oppefra og du risikerer at højtaleren dækkes, så lyden forringes.
- I tilfælde af at du flytter din DAISYBox enhed fra et koldt miljø til et varmt miljø, bør du vente mindst to timer før du begynder at bruge den, for at give fugt tid til at forsvinde.

Din DAISYBox enhed lever op til alle relevante Europæiske sikkerhedskrav. Du kan indhente flere oplysninger herom, ved at besøge websitet www.daisybox.nl, eller kontakte din leverandør.

1 PRÆSENTATION

DAISYBox er en online DAISY Lydbogsafspiller, udviklet specifikt til personer med nedsat syn eller blindhed. Med en DAISYBox bliver du i stand til at lytte til talende lydbøger, aviser, magasiner med mere. Enheden er udstyret med få, tydelige knapper, og alle instruktioner bliver annonceret. Det betyder at DAISYBox kan benyttes udelukkende ved brug af berøring og hørelsen. Det gør DAISYBox til en behagelig og let tilgængelig enhed for personer med en given synsnedrættelse, og i høj grad også for ældre personer uden de store tekniske egenskaber.

Det er relevant at nævne at en DAISYBox ikke kræver en computer, men har brug for en aktiv internetforbindelse. DAISYBox vil med en fungerende internetforbindelse give dig adgang til talende lydbøger, aviser, udgivelser og lignende. En DAISYBox er ret let at benytte.

Er du tilmeldt en DAISY Lydbogsservice hos et nationalt bibliotek - i Danmark vil det være NOTA - behøver de, såfremt du har en DAISYBox, ikke længere at sende fysiske CD'er til dig, men kan i stedet leverer lydindhold til dig direkte via internettet. Din DAISYBox vil på en simpel og overskuelig måde præsentere dig for din private bogreol, som vedligeholdes og opdateres af dit bibliotek / NOTA. Skulle du have DAISY Lydbøger på CD som du stadig gerne vil lytte til, kan der tilsluttes et eksternt CD / DVD drev til din DAISYBox (se afsnit 5.16).

Sikkerhed

Tilsluttet brug: Afspiller lydbaseret indhold og information.

Tilsluttet medicinsk indikation: Synshjælpemiddel til blinde og svagsynede personer.

Tilsluttet bruger: Blind eller svagsynet person i alderen 12 år og op. Eventuelt assistance til opsætnings- eller installations fra familie, venner eller andre pårørende.

Tilsluttet brugsmiljø: Hjemmemiljø og dagligdags miljøer.

Tilsluttet patient: Samme som den tilsluttede bruger. Med undtagelse af familie, venner eller andre.

Tilsluttede brugsforhold: Beregnet til brug under almindelige, indendørs forhold. Tilsluttet normal brug er nul til otte timer dagligt.

Opbevaringsforhold: Gennemgå kapitlet om Specifikationer.

Oversigt over symboler:

	Producent
	Bortskaf ikke dette produkt sammen med usorteret kommunalt affald
	Katalognummer
	Serienummer
	Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse). Dette symbol betyder, at enheden fuldt ud overholder gældende retsakter i Den Europæiske Union.

	Federal Communications Commission. Dette symbol betyder, at enheden fuldt ud overholder gældende retsakter i USA.
	Overholder regler, der begrænser eller forbyder bestemte stoffer.
	Symbol for Medicinsk udstyr
	Læs instruktionerne i denne brugervejledning
	Potentiel ikke harmoniseret frekvens
	Sikker opbevaringstemperatur

Bortskaffelse: Aflever venligst din DAISYBox enhed, den interne batteripakke, tilbehør samt AAA batterier separat på din lokale genbrugsstation.

Rapportér sikkerhedsproblemer og skader: Rapportér alle sikkerhedsproblemer til os og til din lokale, relevante myndighed. Kontakt os før du begynder at bruge udstyret, hvis pakken, enheden eller tilbehøret viser tegn på skade, eller hvis pakken utilsigtet er blevet åbnet før brug, og hvis emballagen har været udsat for miljøforhold uden for specifikationerne (se kapitlet Specifikationer).

2 HVAD SKAL DU SØRGE FOR?

Din DAISYBox er leveret til dig, klar til brug. Hvis det er relevant i dit tilfælde er enheden konfigureret, eller klargjort til automatisk konfiguration. Det eneste du skal sørge for er at pakke den ud og tilslutte den til den medfølgende strømforsyning, og oplade den i mindst fire timer. Indstillinger og indstillingsmuligheder er bevidst reduceret for på den måde at sikre at enheden er let at bruge for alle.

Internetforbindelse

Din DAISYBox gør primært brug af en aktiv og fungerende internetforbindelse. Du kan forbinde til DAISYBox til internettet ved enten at gøre brug af et internet kabel, eller ved at benytte en trådløs Wi-Fi forbindelse. Gennemgå kapitlet Internetforbindelse som du finder i denne brugervejledning, eller søg råd og vejledning hos din forhandler, hvis du er i tvivl.

Abonnement hos en bibliotekstjeneste

Du har brug for at have et abonnement hos et bibliotek, som er i stand til at levere talende lydbøger til dig, og denne konto skal implementeres i din DAISYBox.

DAISYBox abonnement

I nogen lande vil det være nødvendigt med et ekstra "DAISYBox Abonnement", i tilfælde af, at lokale afdelinger eller bibliotekets kompensation ikke dækker udgifterne til vedligeholdelse af de systemer, som er nødvendige for at levere indhold til dig (ikke aktuelt i Danmark).


DAISYBox Serienummer

Din DAISYBox har et serienummer som består af fem cifre, og fremgår af et klistermærke som befinder sig på undersiden af enheden. Du kan

også få serienummeret annonceret under menu elementet "Enhedens status" i Pause tilstand (gennemgå gerne kapitel 8).

3 TILSLUT HOVEDTELEFONER

Du har mulighed for at tilslutte hovedtelefoner eller høreapparatudstyr ude på venstre kant af din DAISYBox.

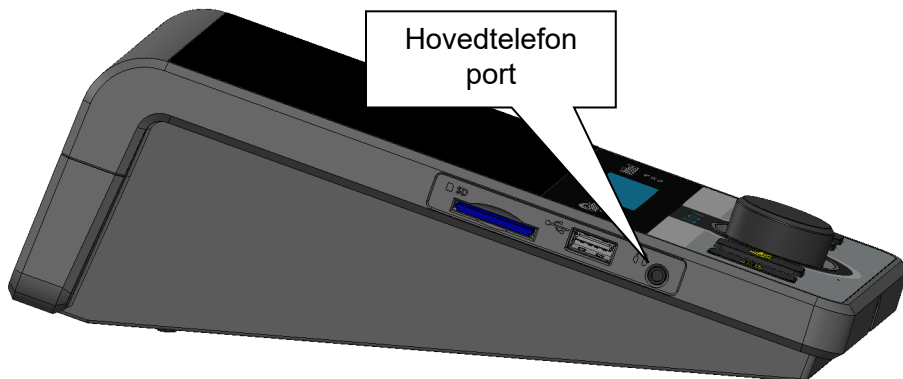


Bemærk venligst: I tilfælde af at du tilslutte hovedtelefoner eller høreapparatudstyr i porten i din DAISYBox, vil den indbyggede højttaler automatisk slå fra. Du kan bruge Lydstyrke Hjulet til at justere på lydstyrken i hovedtelefonerne, akkurat som normalt.

Bemærk venligst: Hvis du benytter trådløse hovedtelefoner - som ikke er Bluetooth - skal du være sikker på at lydstyrken er justeret nok op. Det er specielt vigtigt hvis der er længere passager uden lyd, eksempelvis ved læsning af undertekster i et TV (gælder kun WEBBox), da trådløse hovedtelefoner enten automatisk kan slukke eller gå i dvale, hvis der ikke udsendes lyd i en tidsperiode.

4 FYSISK BESKRIVELSE

Kontrolpanelet


På fronten af din DAISYBox, hvor kontrolpanelet med knapperne befinder sig, har du i alt fem knapper. Fra venstre til højre har du først **[Tænd / Sluk]** knappen, så kommer **[Tilbage]** knappen, i centrum finder du **[Lydstyrke Hjulet]**, som du også kan trykke ned på og aktivere Pause tilstand, dernæst **[Pil Op]** og **[Pil Ned]** som en todelt knap, og til sidst en **[OK]** knap.

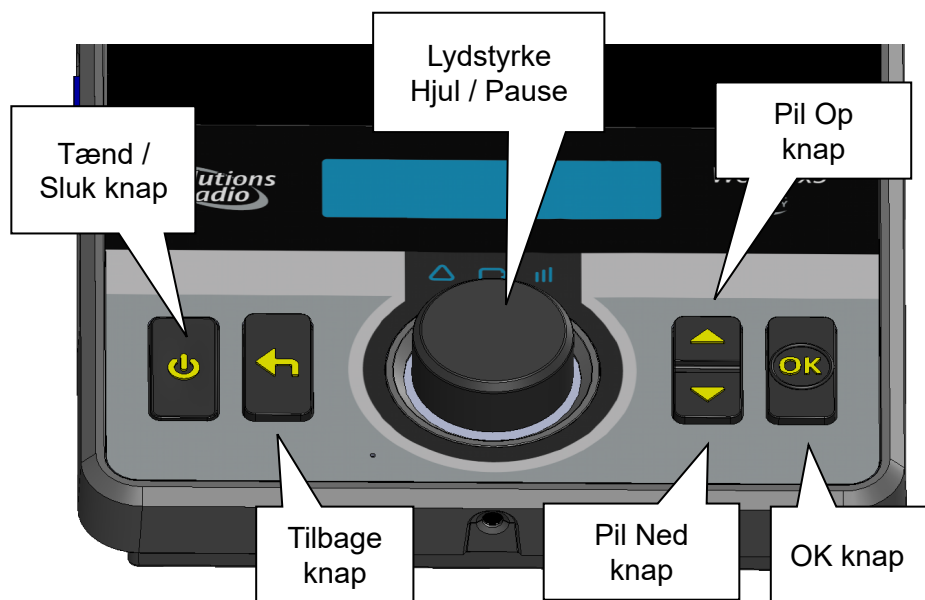

Benyt [OK] knappen til at vælge en bogtitel eller elementer fra Indstillinger menuen. [OK] knappen kan også benyttes som en Pause knap hvis du er i gang med en afspilning af en lydbog. Brug [Tilbage] knappen når du gerne vil navigere tilbage til en boghylde, eller springe et trin tilbage til din forrige placering.

Du kan gøre brug af [Pil Op] eller [Pil Ned] knapperne for at springe gennem kapitler eller artikler, eller navigere gennem en given menu. Benyt Lydstyrke Hjulet til at justere på lydstyrken i enten den indbyggede højtaler eller eksterne hovedtelefoner. Trykker du ned på Lydstyrke Hjulet mens en DAISY lydbog afspiller aktiverer du Pause tilstand, og drejer du derefter enten mod eller med uret, springer du ti sekunder henholdsvis tilbage eller fremad. Du kan også vælge at benytte Pil Op eller Pil Ned knapperne for at få adgang til yderligere menu elementer, i den såkaldte Pause tilstand (gennemgå gerne kapitel 8). Samtlige af ovenstående funktioner kan du også få adgang til ved brug af den medfølgende fjernbetjening.

Lige oven over Lydstyrke Hjulet har du måske opdaget en lille skærm. Du har i bund og grund slet ikke brug for denne lille skærm, da DAISYBox vil annoncere alle informationer for dig. I tilfælde af at du har restsyn som du kan benytte, kan du bruge skærmen samtidigt med at du hører informationen. Menu og andre elementer vil visuelt blive præsenteret i den lille skærm mens de annonceres for dig.

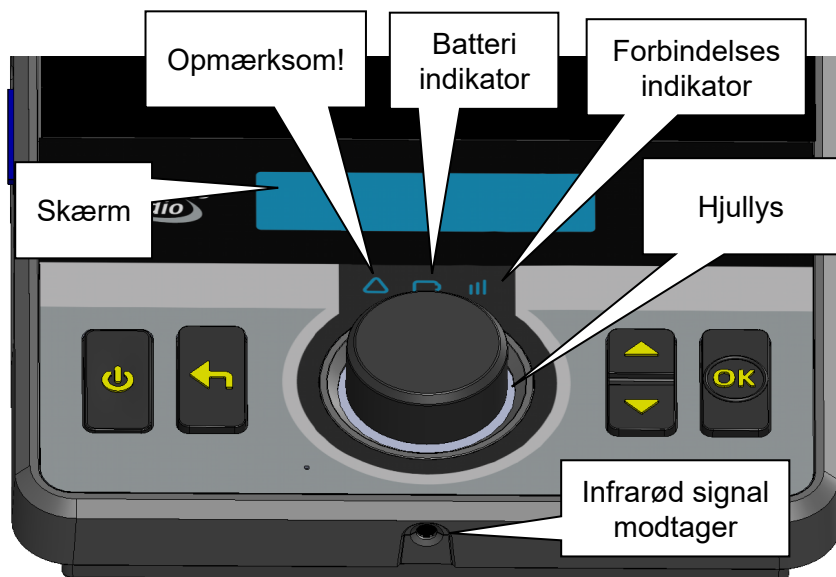

Tre piktogrammer med lys befinder sig mellem Lydstyrke Hjulet og skærmen:

- **Opmærksom!** vil indikere relevante notifikationer, eksempelvis nye beskeder.
- **Batteriindikator** vil blinke grønt når din DAISYBox er tændt og batteriet bliver ladet op, lyse stabilt når opladningen er færdig, være slukket når den er tændt med opererer på batteri, samt blinke rødt når batteriniveauet er lavt.
- **Forbindelsesindikatoren** vil blinke grønt under en igangværende opsætning, lyse stabilt grønt ved brug af netværkskabel samt Wi-Fi, blått ved brug af 3G / 4G mobilforbindelse, og hvis forbindelsen er OK, og rødt hvis forbindelsen ikke er OK.


Hjullyset vil være det første LED lys som lyser op når du tænder for din DAISYBox, og vil derefter indikerer forskellige situationer eller handlinger, alt afhængigt af, hvilken version enheden har installeret.

Den indbyggede solide højttaler deaktiveres automatisk hvis du tilslutter hovedtelefoner. Du kan også tilslutte din DAISYBox til et stereoanlæg, eksempelvis. Den infrarøde modtager til fjernbetjeningen er placeret i rammen på forsiden.

Bagsiden

Vender du din DAISYBox om så bagsiden vender mod dig, vil du fra venstre til højre, opdage følgende tilslutningsmuligheder:


- To runde RCA porte (den hvide placeret oven over den røde), som benyttes til stereo tilslutning.
- En firkantet RJ-45 port til et internet kabel.
- En lille rund port som bruges til strømforsyningen.
- Et bærehåndtag som kan vippes op.

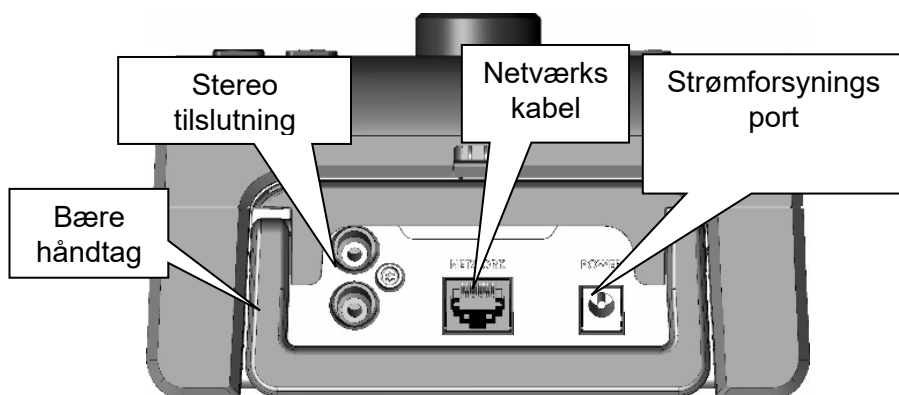

Venstre side

Ude på den venstre kant af din DAISYBox finder du følgende muligheder:


- Port til SD kort
- USB A port til eksempelvis et USB hukommelsesmedie
- Hovedtelefon port

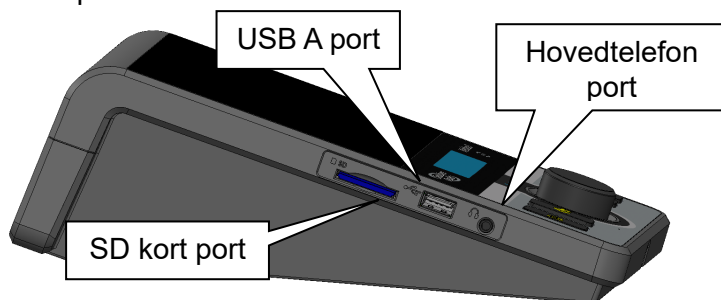

Undersiden

Hvis du vender din DAISYBox om, og gerne placerer den på noget blødt, får du blandt andet adgang til batteriet, hvis du fjerner dækslet.


- Batteripakke
- Nulstil knap (gennemgå gerne kapitel 9)
- Stik til batteripakke
- Port til intern hukommelse (Micro SD kort)
- USB A port til eksempelvis et 3G / 4G mobil internet dongle

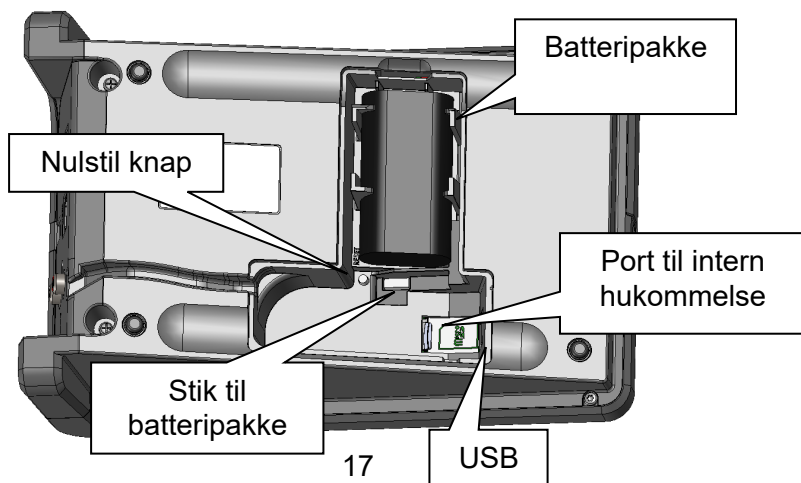

Fjernbetjeningen

På fjernbetjeningen finder du i alt 17 knapper.

- Øverst i venstre hjørne befinder Lydløs eller Pause knappen sig.
- Øverst i højre hjørne er det Tænd / Sluk knappen, som du finder.
- Neden under de to knapper finder du to rækker med tre knapper i hver, som hører sammen - De to yderste er Lydstyrke, de midterste to er Toneleje og de to yderst til højre er Hastighed.
- Under disse, cirka i midten af fjernbetjeningen, er der yderligere en række med tre knapper: Den første er Informations knappen, den midterste aktiverer Dvale funktionen, og den sidste knap vil springe direkte til dine seneste afspillede bøger.
- Mærker du lidt længere nede på fjernbetjeningen vil du opdage en samling af i alt fem knapper. I midten finder du en OK knap. Oven over OK knappen finder du Pil Op, neden under er det Pil Ned, og til venstre og højre ligeledes to knapper, som benyttes til at spole hurtigt tilbage eller fremad.
- Den sidste knap befinder sig nederst i venstre hjørne og er Tilbage knappen.

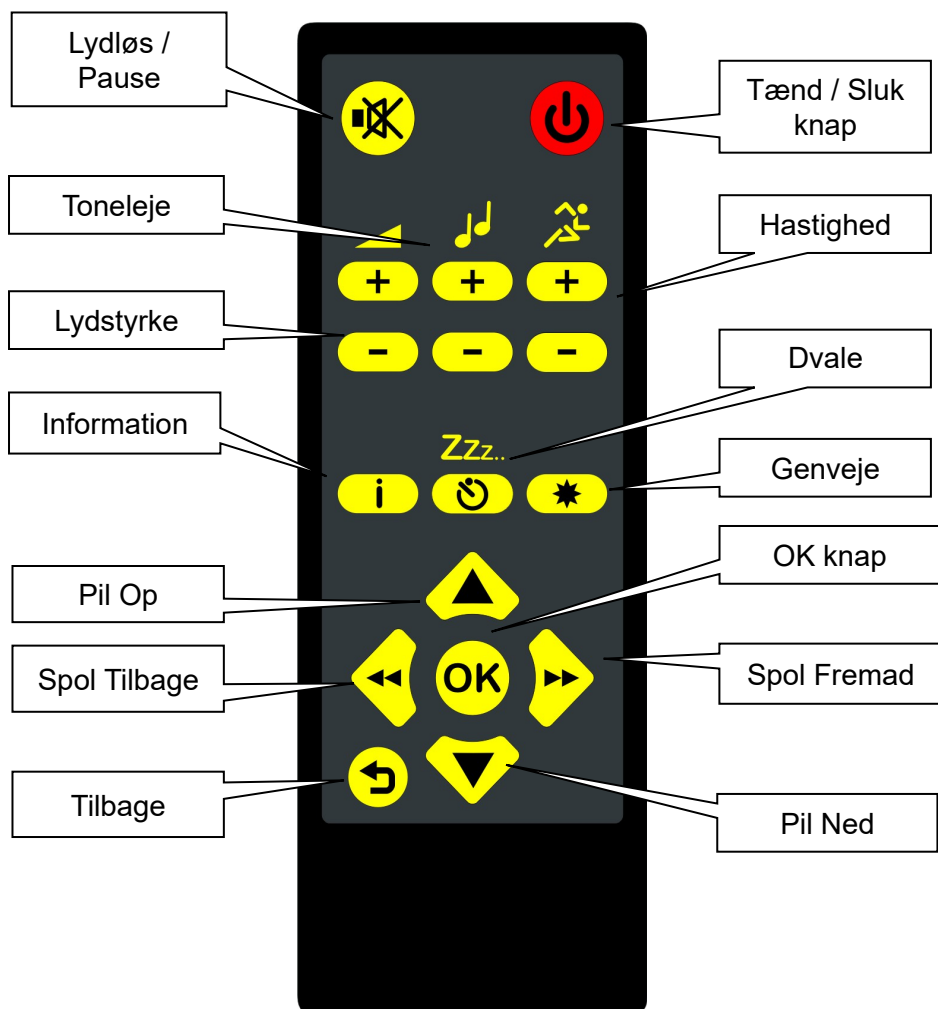

5 SÅDAN BRUGER DU DAISYBOX

Bemærk venligst: Vi anbefaler at du gennemgår kapitel 6 Opsætning før du begynder at bruge din DAISYBox enhed for første gang.

5.1 Tænd for din DAISYBox

Efter du har sørget for at tilslutte din DAISYBox til en strømforsyning og til internettet, kan du trykke og holde på [Tænd / Sluk] knappen, som er den kan der befinder sig længst til venstre. Du kan også benytte fjernbetjeningen: [Tænd / Sluk] knappen sidder øverst i højre hjørne. Du vil først høre et kort lydsignal som indikerer at du har tændt for den, og omkring ti sekunder senere, en opstarts melodi^{*)}). Din DAISYBox vil automatisk begynde at søge efter en internet forbindelse, og Forbindelses LED indikatoren starter med at blinke, og efterfølgende lyse grønt eller blåt.

Vil du slukke for den igen skal du trykke og holde på [Tænd / Sluk] knappen. De forskellige LED lys, inklusive den lille skærm, vil slukke, og du vil høre et lydsignal.

Godt at vide: Du kan deaktivere knapperne på din DAISYBox for at undgå at den eksempelvis tænder utilsigtet under transport. Tryk og hold [Pil Op] og [Pil Ned] samtidigt, og tryk på [OK] knappen en gang, for at deaktivere knapperne. Din DAISYBox vil annoncere "Tastatur låst" og angive det i skærmen også. Knapperne aktiveres igen automatisk hvis du tilslutter en strømforsyning og tænder for den. Du kan også selv aktivere knapperne ved at benytte samme procedure som ovenstående, blot hvor du trykker på [OK] knappen tre gange hurtigt efter hinanden.

Godt at vide: Du kan altid slukke for din DAISYBox hvis du har brug for det ved at trykke og holde på [Tænd / Sluk] knappen i mere end

^{*)}) Tjek gerne afsnittet Opstarts lydstyrke under Pause menu.

fem sekunder, selv hvis du skulle opleve at din enhed ikke reagere på andre knaptryk.

5.2 DAISYBox på batteri

Din DAISYBox kan fungere enten via det interne batteri eller gennem strømforsyningen, hvorved batteriet også samtidigt vil blive ladet op. Batteri LED indikatoren oven over Lydstyrke Hjulet vil (når DAISYBox er tændt):

- Blinke grønt, når den er tilsluttet en strømforsyning og batteriet lader op.
- Stabil grønt, når den er tilsluttet en strømforsyning og batteriet er færdig opladet.
- Slukket, når den ikke er tilsluttet en strømforsyning men kører på batteriet (eller hvis din enhed er slukket).
- Blinker rødt, hvis batteriet er lavt.

Aktuelle batteri niveau kan du også få annonceret og vist hvis din DAISYBox er slukket, ved at trykke og holde på Lydstyrke Hjulet i mindst et halvt sekund. Du får annonceret aktuelle klokkeslæt samt batteri niveau.

Du må gerne forvente at din DAISYBox enhed fra ny kan afspille ti timers lydindhold, og et tomt batteri er omkring fem timer om at lade helt op. En helt ny DAISYBox skal oplades i mindst fire timer første gang, for at få aktiveret hele batterikapaciteten.

5.3 Pause Tilstand

Du kan aktivere Pause Tilstand på din DAISYBox ved at trykke ned en gang hurtigt på Lydstyrke Hjulet, eller ved at benytte fjernbetjeningen og trykke på Lydløs knappen. Tryk på selvsamme knap igen for at genoptage afspilningen.

Ved at benytte [Op] eller [Ned] knapperne kan du navigere gennem denne Pause menu, og deri finde relevante informationer og muligheder, samt også generelle indstillinger i forhold til brugen af enheden. Gennemgå gerne kapitel 8. Eksempelvis kan du:

- Øge eller mindske talehastigheden for en aktuel afspilning

- Ændre på talesyntesen for din DAISYBox
- Aktivere en Dvale funktion
- Få yderligere information om den aktuelle bog som du lytter til, såsom varighed i alt eller din aktuelle position

Du kan forlade Pause menuen ved at trykke ned på Lydstyrke Hjulet eller ved at trykke på [Tilbage] knappen. Du kan også få annonceret den information, som er til stede i menuen, ved at trykke på [Information] knappen på din fjernbetjening.

5.4 Lydstyrke

Benyt Lydstyrke Drejeknappen på din DAISYBox til at justere på lydniveauet. Lydstyrke Drejeknappen er den store, runde knap som sidder på fronten af din enhed, eller også kan du benytte Lydstyrke Op eller Ned på din fjernbetjening. Du kan ændre på opstarts lydstyrken under Pause menuen og under elementet Enheds konfiguration efterfulgt af Lyd indstillinger (gennemgå eventuelt kapitel 8).

5.5 DAISYBox Simpel & Avanceret

Dit online bibliotek tilbyder dig en boghylde hvori du kan tilføje eller fjerne bøger gennem deres website eller ved personlig henvendelse. Det er den simple måde - den basale måde - at bruge din DAISYBox på, som blot vil præsentere dig for din boghylde og de bøger, som du har adgang til. Enkelte biblioteker tilbyder dog også ekstra funktioner såsom at tilføje bøger direkte fra et givent katalog, eller præsentere dig for bøger, magasiner eller aviser i separate lister. Indstiller du din DAISYBox til Avanceret tilstand vil du også få adgang til disse ekstra funktioner, såfremt dit bibliotek tilbyder disse. Du kan **fjerne bøger** direkte fra din boghylde ligegyldigt om du benytter den simple eller den avancerede tilstand, ved at tilgå Pause menuen og vælge elementet "Fjern denne bog".

5.6 Afspil en bog

Efter du har tændt for din enhed vil din DAISYBox oprette forbindelse til dit Wi-Fi netværk samt dit bibliotek og begynde at annoncere titlerne

i din boghylde, eller afspille bogen som du allerede er i gang med. Tryk på [Tilbage] knappen for at vende retur til din boghylde.

Du kan få annonceret titlerne på samtlige bøger i din boghylde. Tryk på [OK] knappen på en bogtitel som du gerne vil læse. [OK] knappen er den knap som du finder yderst til højre i din DAISYBox Kontrolpanel, eller benytter du fjernbetjeningen, skal du finde knappen som sidder mellem Pil Op og Pil Ned. Listen over de bøger som er til rådighed bliver gentaget i tilfælde af, at du ikke vælger en bog.

5.7 Justering af hastighed og toneleje

Du kan justere på hastighed og toneleje for den aktuelle bog som du læser, ved at tilgå Pause menuen med et tryk på Lydstyrke Drejeknappen, hvorved din DAISYBox pauserer afspilningen. Benyt nu [Op] eller [Ned] knapperne indtil du lander på Hastighed elementet (lær mere herom i kapitel 8). I tilfælde af at du vælger Hastighed med [OK] knappen kan du ændre på indstillingen ved at benytte Pil Op eller Pil Ned (-50, -40... normal... +40, +50), og når du har fundet den rette indstilling, tryk på [OK] knappen for at vælge den. Med fjernbetjeningen kan du justere på både hastighed og toneleje direkte ved at benytte + (Plus) eller - (Minus) knapperne. Naviger til Pause menuen efterfulgt af Enheds konfiguration og Lyd indstillinger for at justere på hastighed, tone samt toneleje hvis du også ønsker at ændringerne skal gælde efter genstart af din DAISYBox.

5.8 Sådan returnerer (sletter) du en bog

Først skal du navigere til og vælge pågældende bog. Tilgå Pause menuen ved at trykke ned en gang på Lydstyrke Drejeknap og benyt så [Op] eller [Ned] knapperne til du lander på elementet "Returner denne bog", hvor du trykker på [OK] knappen. Du bliver bedt om at bekræfte om du ønsker at returnerer / slette bogen. Naviger til Ja eller Nej muligheden og godkend ved brug af [OK] knappen. Dit online bibliotek kan også tilbyde dig en anden måde at returnere en bog, som dog kun vil være til rådighed hvis du har aktiveret den avancerede DAISYBox tilstandFejl: Henvisningskilde ikke fundet som en ekstra

mulighed for at returnere / slette bøger. Tjek eventuelt Fejl:
Henvisningskilde ikke fundet for Fjern en bog fra SD / USB.

5.9 Skift talesyntese

Din DAISYBox enhed benytter en syntetisk talesyntese - en såkaldt tekst-til-tale stemme - til at læse menu elementer og tekstbøger. Talesyntesens type (eksempelvis herre- eller kvindestemme) og potentielt sproget (eksempelvis Finsk eller Svensk), kan ændres, hvis denne funktion er til rådighed for netop din DAISYBox. Du kan ændre på stemmen under en igangværende afspilning ved at trykke ned en gang på Lydstyrke Drejeknappen, hvorved din DAISYBox vil pausere. Benyt [Op] eller [Ned] knappen for at navigere til elementet Enheds konfiguration, hvor du skal trykke [OK], efterfulgt af elementet Talesyntese. Herunder kan du igen navigere i en liste mellem de forskellige talesynteser og vælge den som du ønsker at benytte ved at trykke på [OK] knappen, eksempelvis:

- Graham (English)
- Rachel (English)
- Daan (Dutch)

Vær opmærksom på at alle menu elementer vil ændre sig så de passer til det valgte sprog / talesyntese.

5.10 Konfiguration af Dvale tilstand

Hvis du ønsker at din DAISYBox enhed automatisk skal stoppe afspilningen og slukke selv, indenfor en bestemt tidsperiode, kan det ske i Pause menuen. Mens du lytter til en lydbog eksempelvis, skal du trykke ned en gang på Lydstyrke Drejeknappen og navigere til Dvale elementet ved brug af [Op] eller [Ned] knapperne. Du kan indstille Dvale funktionen til en tidsperiode mellem 10 minutter og 120 minutter (eller deaktiveret). Fjernbetjeningen har en Dvale knap [Zzz...]som du kan bruge til samme formål. Når din DAISYBox starter op igen vil Dvale funktionen være deaktiveret og skal aktiveres igen, hvis du ønsker det.

Din DAISYBox enhed afbryder selv afspilningen efter den angivne tidsperiode og du vil kunne høre et lydsignal. Hvis du inden for 30

sekunder vælger at trykke på [OK] knappen vil dvaletidsperioden blive stillet tilbage til det oprindelige antal minutter.

Din DAISYBox hvis automatisk slukke hvis du vælger ikke at foretage dig noget med enheden indenfor de 30 sekunder.

5.11 Medie håndtering (USB, SD, CD...),

DAISYBox enhedens primære funktion er at afspille lydbøger. Dog er den i stand til, såfremt andre former for medieenheder tilsluttes til den, at afspille eksternt indhold, gennem en Medie menu, som bliver til rådighed. Tryk på Tilbage knappen inde fra den talende menu (eller mens din DAISYBox er ved at oprette forbindelse til internettet) for at tilgå Medie menuen. Alt efter hvilke eksterne medier du har tilføjet vil du kunne vælge mellem:

- Genveje
- USB medie
- CD Afspiller
- Hukommelseskort
- Intern hukommelse

Du kan herved bruge [Op] eller [Ned] knapperne til at navigere gennem mapper og filer, og din DAISYBox vil annoncere deres respektive navne. Vælg en fil eller en mappe som du gerne vil tilgå ved at trykke på [OK] knappen. Tryk på Tilbage knappen igen for at vende retur til den talende menu.

Godt at vide: Er en bestemt bog tilgængelig online og samtidigt på dit SD kort eller USB medie? ... i det tilfælde vil du stadig kunne fortsætte fra den position, hvor du forlod bogen, lige gyldigt om du aflæser den online eller fra den lokale hukommelse.

Godt at vide: Naviger til Medie menuen ved at trykke på [Tilbage] knappen flere gange. Genstart din DAISYBox i tilfælde af at du ikke præsenteres for det medie, i Medie menuen, som du synes du har tilsluttet.

5.12 Hent ned til SD / USB

De fleste bøger kan hentes ned til en ekstern hukommelse såsom et SD kort, og som så senere hen kan afspilles på andre transportable DAISY lydbogsenheder eller computere. Tryk en gang på Lydstyrke Hjulet for at tilgå Pause menuen og benyt da [Op] eller [Ned] til du lander på elementet Download denne bog, hvor du benytter [OK] knappen, eller elementet "Download alle filer", i tilfælde af, at lydfilerne er en del af en større struktur, såsom en podcast. Hvis du har flere forskellige eksterne medier tilsluttet kan du blive bedt om at angive hvilket medie bogen skal hentes ned til.

Har du indsat et tomt SD eller USB medie vil din DAISYBox hente bogen ned og de individuelle filer til en mappe som kaldes "Downloads", og filer som tilhører en mere omfattende struktur placeres i en mappe med titlen på indholdet. Din DAISYBox vil genkende og udnytte specifikke mapper i tilfælde af at dit SD kort eller USB medie tidligere har været benyttet med en af følgende tredjeparts afspillere: Plextor PTP, Victor Stream, Hims Sense. Andre DAISY enheder såsom Bones' Milestone serie er fint i stand til automatisk at håndtere mapper som din DAISYBox opretter.

5.13 Kopier en CD til SD / USB

En DAISY lydbog på CD kan blive kopieret til et USB medie eller et SD kort. De enkelte lydspor i en DAISY CD vil dog først blive konverteret til komprimeret lyd (MP3 192 kbps). For at kopiere en CD til et USB medie eller et SD kort skal du først tilgå Medie menuen og vælge elementet "CD Afspiller". Tilgå Pause menuen så snart indholdet af CD'en begynder at blive afspillet og naviger til elementet Kopier indholdet til andet medie.

5.14 Fjern en bog fra SD / USB

Du vil blive præsenteret for elementet Fjern denne mappe eller Fjern denne fil mens du navigerer gennem indholdet af et USB medie eller et SD kort. Når filer tilhører en større struktur (såsom en lydbog eller en podcast) vil du ikke blive præsenteret for muligheden for at fjerne

individuelle filer. For at fjerne en bog (eller en podcast, eksempelvis), skal du tilgå Pause menuen når du får annonceret titlen på den mappe, som indeholder bogen, og navigere til og vælge elementet Fjern denne mappe - du bliver bedt om at bekræfte at du ønsker at fjerne den.

5.15 Navigering i (DAISY) Lydbøger

Med din DAISYBox foran dig bliver du i stand til at navigere i aviser, magasiner, bøger og andre medier, gennem en DAISY struktur, på en ret snedig måde. Du kan springe direkte til et nyt kapitel eksempelvis, eller en ny artikel, ved blot at bruge [Op] knappen. Du kan springe tilbage til et kapitel eller en anden artikel ved så at benytte [Ned] knappen. Benytter du [OK] knappen vil du vælge et lavere navigations niveau (i tilfælde af at bogen eller lyd materialet indeholder det). Hvis du eksempelvis aktuelt navigerer i kapitler og du trykker på [OK] knappen, kan du derefter navigere i artikler eller elementer som er under kapitel. Med [Tilbage] knappen kan du justere niveauet op, og på den måde komme tilbage til kapitel niveauet, eksempelvis. Og klart, hvis du ikke benytter disse knapper vil lydbogen blot afspille fra start til slut.

Spol Fremad eller Bagud i en tekst

Når du har tilgået Pause menuen kan du bruge Lydstyrke Drejeknappen til at springe i teksten i et kapitel. Drejer du hjulet mod uret, springer du tilbage gennem teksten. Drejer du hjulet med urets retning, kommer du fremad i teksten. Hvert hak du kommer forbi med Lydstyrke Drejeknappen vil springe 10 sekunder fremad eller bagud, og din DAISYBox vil annoncere den nye tidsposition. Trykker på ned på Lydstyrke Drejeknappen igen vil du starte læsningen fra dér, hvor du er landet. Du kan også benytte [OK] knappen for at godkende den nye position og påbegynde læsningen. Benytter du fjernbetjeningen skal du gøre brug af knapperne [<<Venstre] eller [>>Højre]. Bemærk venligst: Spol Fremad eller Bagud fungerer kun inde i et kapitel.

Bogmærker

Din DAISYBox vil automatisk huske hvor du er nået til i en bog, en avis, magasin eller andre på forhånd optagede lydoptagelse. Det

betyder at hvis du vender tilbage til en lydbog som du tidligere har lyttet til, starter din DAISYBox fra den position hvor du sidst forlod den. Det gør ingen forskel om hvorvidt du tilgår lydbogen manuelt eller ved brug af genvejsfunktionen. Navigation fungerer derfra som beskrevet længere oppe.

DAISY Navigations niveauer

Mange DAISY lydbøger består af et niveau kun med kapitler, hvorved du ret let ved brug af enten [Op] eller [Ned] knapperne kan springe mellem dem. Andre lydbøger inkluderer dog også eksempelvis sektioner, hvor hver sektion består af kapitler. En sådan bog vil derved have mindst to niveauer som du kan navigere til og i... eksempelvis niveau 1 hvor du springer mellem sektioner, og niveau 2 hvor du springer mellem kapitler i en sektioner. Din DAISYBox enhed vil som standard præsentere en så detaljeret bog til dig som en "flad struktur" med alle de individuelle elementer.

Du kan aflæse de tilgængelige overskrifter eller afsnit i hvert niveau og springe til de enkelte sektioner / områder ved at benytte *Gennemse* elementet i Pause menuen.


I tilfælde af at du ønsker at få annonceret niveau indikationerne mens du læser en detaljeret bog og benytter [OK] knappen samt [Tilbage] for at skifte mellem niveauerne, skal du aktivere *Navigation via niveauer* i Pause menuen (gennemgå eventuelt kapitel 8).

5.16 Afspilning af CD

Hvis du gerne vil afspille en DAISY Lydbogs CD, eller en CD med andet lydindhold, skal du tilslutte et bærbart, eksternt CD drev, til USB porten i din DAISYBox, som befinder sig på venstre kant af enheden, eller også USB porten som befinder sig under det beskyttende dæksel til batteriområdet. Nogle ekstern CD drev får tilført strøm for deres egen dedikerede strømforsyning, andre direkte fra USB porten i DAISYBox enheden, og enkelte gør brug af et såkaldt Y kabel, som skal tilsluttes to USB porte. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at tilslutte det sekundære USB kabel hvis dit eksterne CD drev gør brug af sådan et Y kabel, da DAISYBox kan levere nok effekt gennem

én USB port. Din DAISYBox vil også her, ved brug af eksternt CD drev, være i stand til at huske hvor du er nået til (bogmærke), hvis du vender tilbage til pågældende bog senere hen.

6 OPSÆTNING

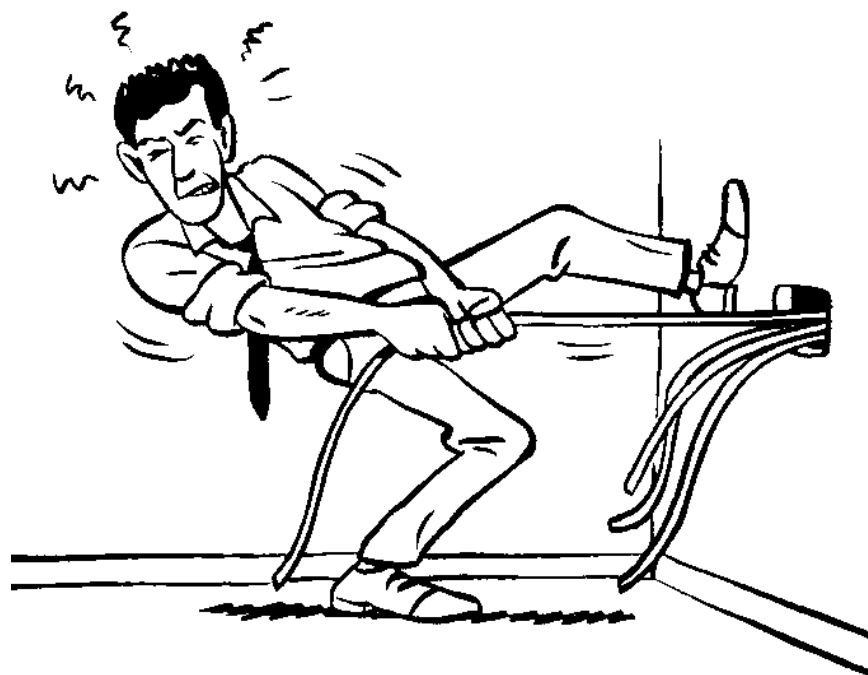

6.1 Følgende bliver leveret med

DAISYBox



Fjernbetjening



Strømforsyning



AAA
Batterier



Internet kabel



6.2 Forbindelse til internettet

Før du kan bruge din DAISYBox enhed skal du allerede have en internet forbindelse installeret dér hvor du ønsker at bruge din enhed. I nogen lande / områder får du udleveret et modem eller router fra din leverandør, hvis det er din første DAISYBox enhed (gælder ikke Danmark). Du eller din leverandør eller tredjepart skal installere internettet og routeren hos dig først. Det betyder konkret at dit nye modem og / eller router bliver tilsluttet via kabel til et forbindelsespunkt, eksempelvis Kabel TV, fiberinstallation, COAX installation eller lignende, hjemme hos dig.

6.3 Forbind din DAISYBox

Det kan anbefales først at tilslutte din DAISYBox til din internet router via et internet kabel, også selvom du planlægger at bruge den trådløst.

Start med at tilslutte strømforsyningen til din DAISYBox, først i den lille runde port bag på din enhed, og derefter til et strømstik. En helt ny DAISYBox skal oplades i mindst fire timer første gang, for at få aktiveret hele batterikapaciteten.


Hvis du gerne vil bruge fjernbetjeningen: Afmonter batteridækslet som er på bagsiden af fjernbetjeningen og indsæt batterierne. Vær sikker på at batterierne monteres korrekt ved at vende Plus og Minus polerne rigtigt.

Gennemgå instruktionerne i sektion 6.4 for at tilslutte din enhed til et trådløst netværk.

Andre tilslutningsmuligheder

Vender du din DAISYBox om så bagsiden vender mod dig, vil du fra venstre til højre, opdage følgende tilslutningsmuligheder:

- To runde RCA porte (den hvide placeret oven over den røde), som benyttes til stereo tilslutning.
- En firkantet RJ-45 port til et internet kabel.
- En lille rund port som bruges til strømforsyningen.
- Et foldbart bærehåndtag

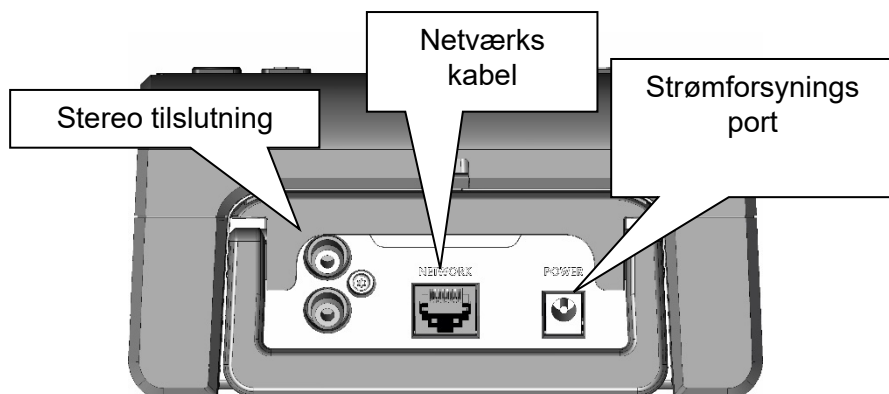


Benytter du Linje ud skal du være opmærksom på at det har et konstant lydniveau som ikke påvirkes af lydstyrke justeringer (dog vil Pause menu positionen være lydløs).

Godt at vide: Hvis du tilslutter din DAISYBox til dit eget stereo anlæg ved at benytte de to PCA porte på bagsiden, kan du enten slukke helt for højttaleren midlertidigt ved at justere lydstyrken ned til nul, eller hvis det er for en længere periode, justere lydstyrken så langt ned via Pause menuen, under Enheds konfiguration og Lyd indstillinger og Opstart lydstyrke. En anden alternativ løsning er at tilslutte kablede hovedtelefoner i Hovedtelefon porten i din DAISYBox. Den indbyggede højttaler vil derved automatisk blive deaktiveret.

Venstre side

Ude på den venstre kant af din DAISYBox finder du følgende muligheder:


- Port til SD kort
- USB A port til eksempelvis et USB hukommelsesmedie
- Hovedtelefon port

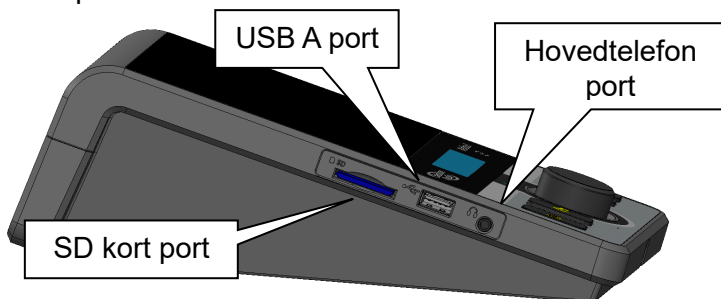

Undersiden

Hvis du vender din DAISYBox om, og gerne placerer den på noget blødt, får du blandt andet adgang til batteriet, hvis du fjerner dækslet.

- Batteripakke
- Nulstil knap (gennemgå gerne kapitel 9)
- Stik til batteripakke
- Port til intern hukommelse (Micro SD kort)
- USB A port til eksempelvis et 3G / 4G mobil internet dongle

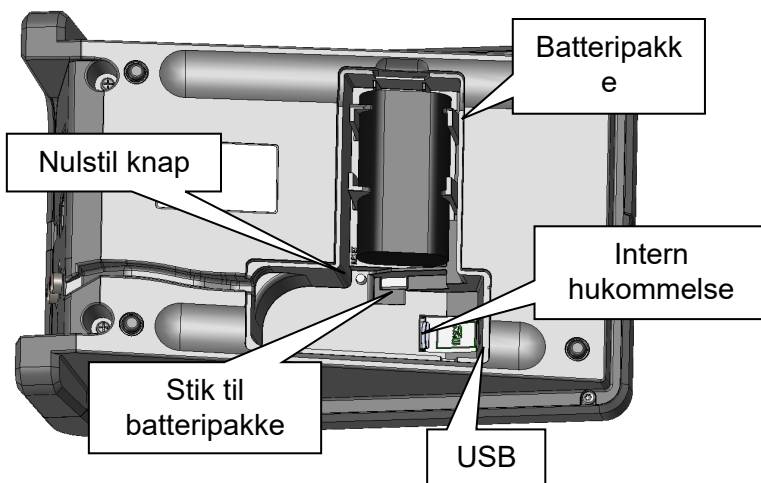

6.4 Opsætning af trådløs internet

Bemærk venligst: Før du går i gang skal du være bekendt med dit netværks navn (SSID), samt adgangskoden. Gennemfør følgende punkter for at forbinde din DAISYBox til et trådløst netværk:

- Tænd for din DAISYBox ved at trykke en gang hurtigt på Tænd / Sluk knappen og afvent til den er klar til brug,
- Tryk på Lydstyrke Drejeknappen for at tilgå Pause menuen. Benyt [Op] eller [Ned] knapperne indtil du lander på elementet Enheds konfiguration og tryk da på [OK] knappen.

Godt at vide: Her kan du med fordel, og hvis din Wi-Fi router understøtter det, gøre brug af den såkaldte WPS funktion, ved nu at trykke på WPS knappen på din router (er du i tvivl bør du gennemgå brugervejledningen til din netværks router).

- Brug [Op] eller [Ned] knappen til du rammer elementet "Tilføj et trådløst netværk" og tryk på [OK].

Godt at vide: Din DAISYBox vil bede dig om at bekræfte at det er det korrekte netværk som du er ved at oprette forbindelse til, ved at annoncere navnet på netværket for dig.

Vælg et Wi-Fi netværk manuelt

Gør du ikke brug af WPS funktionen vil du i stedet blive præsenteret for et antal Wi-Fi netværk som er til rådighed i en liste. Du burde kunne lokalisere dit eget netværk navn (SSID) i listen, og hvis du er i tvivl, kan du i nogen tilfælde finde informationen på et klistermærke som er monteret på eller under din Wi-Fi router.

- Brug [Ned] for at navigere til dét netværk du ønsker at forbinde til, og tryk på [OK] knappen når du har fundet det. Din DAISYBox vil annoncere for dig om signalstyrken er god, normal eller svag.

Angiv din adgangskode

Hvis det Wi-Fi netværk som du forsøger at oprette forbindelse til er sikret bag en adgangskode, hvilket vil være helt normalt, vil din

DAISYBox enhed bede dig om at angive en adgangskode. En hel række bestående af bogstaver, tal og specialtegn vil være til rådighed for dig - dem skal du bruge til at angive din adgangskode.

Til rådighed under WEP protokollen: A til f, 0 til 9 samt Færdig tegn.

Til rådighed under WPA protokollen: a til z, A til Z, 0 til 9, enkelte specialtegn samt Færdig tegnet.

a b c ... z A B C ... Z 0 1 2 ... 9

Færdig
tegnet

! @ # \$ % ^ & * () [] { } + - = _ / . , : ; ' " < >

- Du kan enten gøre brug af [Op] eller [Ned] knapperne for at ændre på aktuelle tegn, eller bruge Lydstyrke Drejeknappen, og på den måde komme frem til det bogstav, tal eller tegn som du skal bruge. Hver gang du lander på et bogstav, tal eller tegn som du skal bruge, skal du indsætte det ved at trykke på [OK] knappen, og en for en bliver adgangskoden angivet i den visuelle skærm. Du kan slette de forrige tegn ved at trykke på [Tilbage] knappen.
- Når du har fået angivet samtlige tegn i din adgangskode skal du navigere hele vejen til det sidste tegn i rækken, som er Færdig tegnet, der visuelt mest ligner et Enter tegn, og trykke på [OK] knappen. Du vil få annonceret adgangskoden som du netop har angivet hvorefter netværket, hvis alt er gået fint, vil blive konfigureret.

Din DAISYBox vil annoncere for dig at konfigurationen / netværket er blevet tilføjet og at det er klar til brug (benyt [Tilbage] knappen tre gange hvis du vil tilbage til Pause menuen).

Godt at vide:

- Du kan tilslutte et almindeligt, eksternt USB computertastatur og benytte det til at indskrive din adgangskode. Brug tastaturets Enter knap til at godkende adgangskoden, når du har indskrevet den.

- Hvis det ikke lykkedes for dig at oprette forbindelse til det trådløse netværk anbefaler vi at du forsøger at tilslutte din DAISYBox til dit netværk ved brug af et internet kabel.
- Indstillinger og opsætninger for både kablede og trådløse internet forbindelser kan blive slettet ved at benytte [Nulstil] knappen, som fysisk befinder sig under DAISYBox enheden, i batteriområdet. I den præsenterede Nulstil menu (gennemgå gerne kapitel 9) vil du have et element med navnet Nulstil alle netværks indstillinger og / eller Fjern et specifikt login.
- Hvis du har tilsluttet et netværks kabel til din DAISYBox vil det automatisk få en højere prioritet end et trådløst, som dog har højere prioritet end 3G / 4G mobile netværk. Hvis kablet bliver fjernet vil din DAISYBox automatisk skifte over til en Wi-Fi forbindelse, hvis en sådan før er blevet tilføjet. Prioriteten er derfor: Netværk via kabel, Sikret Wi-Fi netværk, Ikke sikret Wi-Fi netværk, 3G / 4G netværk.
- Hvis der ikke bliver fundet et netværk vil du blive præsenteret for annoncere "Ingen netværk blev fundet", og overvej i det tilfælde at kontakte din internet udbyder for assistance.
- Hvis din DAISYBox ikke kan finde dit netværk bør du først tjekke om din router udsender et netværksnavn (SSID'et), og at du fysisk befinder dig tæt nok på. Wi-Fi netværk har forskellige kapaciteter alt efter routerens kvalitet og teknologi, men du må gerne forvente en rækkevidde på et sted mellem 5 og 20 meter. Din DAISYBox understøtter netværksfrekvenser på 2,4 GHz og 5 GHz WLAN, med WEP og WPA/WPA2 beskyttelse.
- WPA2 er den mest optimale at benytte, og også den mest sikre. Vælg derfor WPA2 hvis dit netværksudstyr tilbyder den mulighed.
- Hvis din router tilbyder dig at vælge mellem WPA+WPA2 TKIP+AES, så vil din enhed fungere i "mix tilstand". Det betyder at både WPA1/TKIP og også WPA2/AES understøttes. Din DAISYBox vil automatisk vælge det ene fremfor det andet.
- PSK står for "Pre Shared Key", eller også kaldet "WPA Personal". Det er en standard metode til at angive en sikkerhedsnøgle. I

modsætning til 'Radius'- eller 'Enterprise'-metoden kan denne metode teoretisk kun bruges af virksomheder.

6.5 Hvis dit netværk ikke understøtter DHCP

Bemærk venligst: En fast IP adresse er noget som sjældent benyttes. I langt de fleste tilfælde vil en automatisk udvalgt IP adresse blive benyttet (hvilket betyder at DHCP er aktiveret).

Som standard vil din DAISYBox forvente at dit netværks udstyr understøtter DHCP proceduren, hvilket så betyder, at din DAISYBox automatisk får allokeret en IP adresse. Hvis det ikke er tilfældet er det nødvendigt at gøre brug af en prædefineret IP adresse, som skal angives. I andre tilfælde kan det også tænkes at en IT afdeling i en organisation vil tildele faste IP adresser til en DAISYBox enhed, eksempelvis, for at kunne allokere bestemte rettigheder til enheden, på netværket.

- I Pause menuen kan du navigere til Enheds konfiguration efterfulgt af Avanceret menu.
- Afhængigt af om din DAISYBox er tilsluttet et netværk via kabel, eller forbundet til et trådløst netværk via Wi-Fi, skal du vælge enten Netværk via kabel eller Netværk via trådløst.
- Under den første mulighed, enten Internet DHCP (ved kabel), eller Trådløs DHCP (ved Wi-Fi), vil du få mulighed for at angive DHCP til Fra til prædefinerede adresser, eller DHCP Til, for automatisk tildeling.

I tilfælde af at DHCP angives til Fra, vil det være nødvendigt for dig at konfigurere følgende elementer:

- IP Adresse (eksempelvis 192.168. 117. 100)
- IP Netmaske (eksempelvis 255.255.255.0)
- Netværk gateway (eksempelvis 192.168.117.1)
- DNS server 1 (eksempelvis 192.168.117.100)
- DNS server 2 (valgfrit, eksempelvis 8.8.8.8)

Hvis nødvendigt bør du rådføre dig hos, eller få assistance af, IT afdelingen.

7 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skulle du have nogen spørgsmål eller udfordringer med din DAISYBox kan det være en hjælp at gennemgå følgende tidligere stillede spørgsmål først:

- **Når jeg trykker på Tænd / Sluk knappen er der ikke noget grønt lys som lyser op. Hvad gør jeg så?**

Benyttes på batteri: Tryk en gang på Lydstyrke Drejeknappen for at tjekke aktuelle batteristatus. Din enhed har brug for at blive ladet op hvis batteriindikatoren er rød. Lås kontrolpanelet op hvis det potentielt kunne være låst (Tryk og hold [Op] og [Ned] knapperne og tryk samtidigt tre gange hurtigt efter hinanden på [OK].

Benyttes med strømforsyning: Vær sikker på at strømforsyningen er tilsluttet korrekt. Hvis den er: Tjek gerne at andre elektriske enheder som er tilslutte det samme strømskik / vægskik fungerer. Hvis ikke: Så er der vist ikke noget strøm i stikkontakten.

- **Når jeg trykker på Tænd / Sluk knappen får min DAISYBox enhed ikke forbindelse til internettet. Hvad gør jeg så?**

Du er nødt til at tjekke om dit internet kabel og / eller forbindelsen til din router er gennemført korrekt. Prøv eventuelt at slukke for din router i mindst to minutter, ved eksempelvis at trække strømkablet ud. Hvis det ikke hjælper noget som helst: Tag kontakt til din netværksudbyder og orienter dem om problemet, og verificer om de er bekendt med internetproblemer i dit område. Hvis der ikke er problemer i området: Tag kontakt til din DAISYBox leverandør.

- **Når jeg trykker på Tænd / Sluk knappen sker der ingenting.**

Hvis intet af ovenstående hjælper skal du fjerne strømforsyningen til din DAISYBox enhed, og vente et minut før du tilslutter den igen. Du kan altid slukke for din DAISYBox hvis du har brug for det ved at trykke og holde på [Tænd / Sluk] knappen i mere end fem sekunder, selv hvis du skulle opleve at din enhed ikke reagere på andre knaptryk.

- **Netværk LED indikatoren lyser op, men jeg hører ikke noget.
Hvad gør jeg så?**

Hvis LED indikatoren blinker er det fordi din DAISYBox stadig arbejder. Hvis indikatoren lyser stabil grøn, juster op for lydstyrken ved at dreje på Lydstyrke Drejeknappen i urets retning, eller ved at benytte fjernbetjeningen. Hvis det ikke hjælper noget som helst: Tryk en gang ned på Lydstyrke Drejeknappen for eventuelt at forlade en Pause menu. Hvis det ikke hjælper noget som helst: Tjek om hvorvidt du stadig kan have tilsluttet hovedtelefoner på venstre kant, eller lydkabler på bagsiden, af din DAISYBox. Hvis der er udstyr tilsluttet: Fjern dem...

- **Lyden som kommer fra DAISYBox enheden er forvrænget.
Hvad kan det skyldes?**

Hvis der ligger en mobiltelefon i nærheden af din DAISYBox, så flyt den væk. Kan der befinde sig en form for basestation tæt på, eller tændte trådløse hovedtelefoner? Prøv gerne at flytte sådant udstyr længere væk. Det kan også være en bærbar computer med en internet adgang som kan forstyrre din DAISYBox enhed.

- **DAISYBox fungerer ikke, eller fungerer unormalt.**

Det kan være din DAISYBox kunne have godt af en nulstilling. Det kan du gøre ved at gendanne den til fabriksindstillinger. Sluk for din enhed. Tryk og hold på [Nulstil] knappen som du finder i batteriområdet, ved at fjerne batteridækslet først, og tænd så for den. Behold tryk på [Nulstil] knappen indtil din DAISYBox er startet op.

- **Eventuelle trådløse forbindelser vil herefter ikke fungere.**

Sluk for din DAISYBox igen, lad den lukke ned, og tænd for den igen. Prøv eventuelt at slukke for din router i mindst to minutter, ved eksempelvis at trække strømkablet ud.

Prøv at få din DAISYBox til at fungere ved at tilslutte dét internet kabel som fulgte med din enhed, direkte til din router, og til din DAISYBox. Hvis det virker kan du derefter forsøge at forbinde din enhed igen til et trådløst netværk.

Vær opmærksom på indstillingerne i din router og om eksempelvis Kanalvalg er angivet til automatisk, eller til en specifik værdi. Såfremt kanal er angivet til en specifik værdi skal du forsøge at løse problemet

ved at skifte over til automatisk (din router vil herved selv søge efter en ledig kanal). I sidste ende bør du kontakte din internet udbyder.

- **Jeg har regelmæssige udfald**

Dette skyldes udfordringer eller problemer med netværket. Undersøg om afstanden mellem din internet router og din DAISYBox er for lang, i tilfælde af at det fungerer fint hvis du benytter et internet kabel. Vægge eller niveauforskelle mellem din DAISYBox og din router vil have negativ indflydelse på forbindelsen, hvor styrken og modtagelse nedsættes. Flyt din DAISYBox enhed tættere på din router og tjek om det er en forbedring. Potentielt kan et nærliggende Wi-Fi netværk også forstyrre dit eget netværk. Her kan du overveje at ændre på routerens kanal, som dog kræver direkte adgang til din routers kontrolpanel. Du kan kontakte din leverandør af routeren for yderligere assistance eller vejledning.

8 PAUSE MENU

Ved at trykke en gang ned på Lydstyrke Drejeknappen kan du tilgå Pause menuen, som også omtales som en Pause tilstand. Du kan nu benytte [Op] eller [Ned] knapperne for at navigere gennem de menu elementer som du har til rådighed i Pause menuen.

- Når du trykker på Lydstyrke Drejeknappen får du annonceret "Pause".

Godt at vide: Drejer du på Lydstyrke Drejeknappen i Pause menuen vil du springe 10 sekunder fremad eller bagud, i det aktuelle kapitel. Tryk igen på Lydstyrke Drejeknappen for at vende retur til bogen.

- Benytter du [Op] eller [Ned] knapperne præsenteres du for følgende:

Fortsæt afspilningen

Information

Download denne bog (tjek gerne afsnit 5.12)

Gennemse

Hastighed: -50.. -10, Normal, +10.. +50

Dvale: Fra, 10, 20... 120 minutter

Enheds konfiguration

Tilføj trådløst Wi-Fi netværk

DAISYBox Tilstand Simpel / Avanceret

Lyd indstillinger

Opstart lydstyrke: Lydløs, Lav, Normal, Høj, Nuværende.

Opstart hastighed: -50.. -10, Normal, +10.. +50

Opstart tone

Talesyntese: Danish Acapela Mette

Danish Acapela Rasmus

Internet

Internet DHCP: Til, Fra

IP Adresse, netmaske, Gateway, DNS1, DNS2.
Trådløst netværk
Trådløst DHCP: Til, Fra
IP Adresse, netmaske, Gateway, DNS1, DNS2.
Maksimalt tændte tidsperiode: Fra, 1, 3, 6, 12, 24 timer
Forsinkelse mellem menu elementer: 1 - 5 sekunder
Forsinkelse på Tænd / Sluk knap: Fra, Til (0,5 sekunder)
Navigation med niveauer Fra, Til
IPV6 aktivt: Fra, Til
Genstart & Luk ned

Enheds status

Resmué

Batteriniveau xx %
Netværk via kabel, IP adresse er xxx
Netværk via trådløst, IP adresse er xxx

Internet

Netværkskabel tilsluttet
IP adressen, netmaske, router, DNS er xxx
Bytes modtaget
Sendt bytes
MAC adressen er xxx

Trådløst netværk

Du er trådløst forbundet til
Netværks styrke er god, gennemsnitlig, svag
Krypteringen er WEP/WPA/WPA2-PSK
IP adressen, netmaske, router, DNS er xxx
Bytes modtaget
Sendt bytes
MAC adressen er xxx

UMTS status (gælder ikke i Danmark)

IP adressen, netmaske, router, DNS er xxx
Bytes modtaget
Sendt bytes

Serienummeret er xxx
Klokken er xx timer, xx minutter, xx sekunder

Software version er xx efterfulgt af dato
Operativsystemet er Linux version xx
Acapela stemme

9 NULSTIL MENUEN

Du finder en orange [Nulstil] knap under batteridækslet, på undersiden af din DAISYBox enhed, lige over batteriledningen. Trykker du på denne knap mens din DAISYBox er tændt vil du tilgå '**Nulstil menu**'. I denne menu kan du slette eller gendanne indstillinger såsom login oplysninger, trådløse netværk etc.

*Godt at vide: Tryk og hold på [Nulstil] knappen i batteriområdet mens du tænder for din enhed for at gendanne alle indstillingerne (!), tilbage til fabriksindstillingerne. Du kan slippe Nulstil knappen når du har hørt at din enhed er startet op. Du gendanner samtlige indstillinger på denne måde, så hvis du før havde tilføjet en trådløst internet forbindelse eksempelvis, skal den tilføjes igen. **Bemærk venligst:** Indstillinger som er gennemført og relevante for enhedens funktion kan også blive fjernet ved brug af denne metode.*

- Tryk på [Nulstil] knappen ved siden af ledningen til batteriet: Din DAISYBox enhed annoncerer "Nulstil menu".
- Brug nu [Op] eller [Ned] knapperne for at navigere til de følgende menu elementer, efterfulgt af [OK] knappen for at aktivere et af dem:

Nulstil alle brugerindstillinger

(Fjerner alle indstillinger såsom hastighed, tone, dvaleindstillinger etc.).

Fjern alle genveje og bogmærker

(Fjerner alle genveje til bestemte funktioner i den talende menu, og bogmærker som er placeret ved specifikke tidspunkter i eksempelvis en lydbog).

Fjern et trådløst netværk

(Giver mulighed for at fjerne et specifikt netværk fra en liste).

Nulstil alle netværks indstillinger

(Fjerner alle netværks indstillinger som er blevet tilføjet gennem Pause menuen, Enheds konfiguration samt Avanceret menu).

Fjern et specifikt login

(Slet et bestemt login og / eller online tjeneste).

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger

(Alle indstillinger / opsætning vil blive fjernet og gendannet).

Genstart (Din DAISYBox vil genstarte).

10 SPECIFIKATIONER

Netværk

Protokol:	IPv4 og IPv6
Kabel	10/100 baseT, RJ45 automatisk registrering
Trådløst	IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz samt 5 GHz)
Kryptering	WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB

USB, SD, Mirco SD og CD drev

To styk USB A V2 højhastigheds porte, henholdsvis på venstre kant samt under batteridækslet (maksimale effekt er 1200mA for begge porte kombineret):

- USB Hukommelsesmedie (MBR partition eller EFI GPT), tastatur HDI, CD Drev

- USB 3G/4G USB medier (Huawei E303/E3372h-153/E3531/E3533s-2)

Én SD kort port standard -/ Højhastighedsklasse (Class 2, 4, 6) SDSC, SDHC og SDXC.

Én MicroSD kort port standard -/ Højhastighedsklasse (Class 2, 4, 6) SDSC, SDHC og SDXC.

Audio decoder

Algoritme	MPEG 1 & 2 Layer III MP3 (CBR+VBR+ABR), WMA 4.0;4.1;7;8;9; Samtlige profiler (5-384 kbps) MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (Niveau (SBR + PS), Ogg-Vorbis, WAV (PCM+IMA
3)	
ADPCM)	
Bitrate	8kbps-1.7Mbps
samlingsfrekvens	8; 11.05; 16; 22.8; 24; 32, 44.2; 48 kHz
Antal kanaler	1 (Mono) eller 2 (Stereo)

Lyddindhold

Afspilningslister:	m3u, asx, pls, xml, smil, m3u8 med flere
Yderligere data	Shoutcast / Icecast META Data

Talende lydbøger (PDTB2 til Navigationsfiler understøttet DAIS3 (ANSI/NISO Z39.86)	DAISY Online, DAISY Talking Books download), NCC og NCX DAISY2.02,
Tekst	Ren tekst eller HTML konverteret til tale
Bogmærker	Kun seneste position læst pr bog/magasin...

Lyd

Frekvensområde	20 - 20.000 Hz (afhængigt af bitrate)
Signal til støjforhold	80 dB
Forvrængning	0,2 procent gennemsnitlig (afhængigt af bitrate)
Højttaler	Højtydende type, 900mW, 3 tommer

Linje udgang

Porttype	To styk RCA (cinch)
Fast niveau	400 mVrms effekt spænding

Hovedtelefoner

Porttype	Mini stereo JACK 3,5 mm
Justerbart niveau	To styk 100 mW (2x 8 Ohm)
Portdetektering	Højttaler deaktiverer automatisk ved tilslutning af hovedtelefoner
Mikrofon	Indbygget til fremtidige applikationer

Generelt

Strøm	12V 15W (3W effekt) 100-240 V, 50-60 Hz Strømforsyning medfølger
Batteriet	Lithium-Ion 2S1P 7.2V batteripakke. Omtrentlig 10 timers afspilningstid, 5 timers

opladning

Fjernbetjening 17 knapper, 140 gange 49 gange 20 millimeter, to styk

AAA batterier

Optimal driftstemperatur	-10°C til +40°C
Optimal opbevaringstemperatur	-20°C til +60°C
Dimensioner	160 gange 250 gange 84 millimeter
Vægt	800 gram
Godkendelser	CE, FCC, UL

Denne DAISYBox enhed er leveret til dig af: