

Molift Quick Raiser 205

DA – Brugervejledning

molift[®]
by Etac

BM13010 Rev. D 2021-06-09



Dansk vejledning

Vigtigt

Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner og oplysninger om anvendelse af personløfteren og tilbehøret.

I vejledningen er brugeren den person, der bliver løftet.

Hjælperen er den person, der betjener personløfteren.



Advarsel!

Dette symbol angiver vigtige oplysninger angående sikkerhed. Følg disse instruktioner nøje.




Læs brugervejledningen inden brug! Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår indholdet i brugervejledningen, før du forsøger at bruge udstyret.

Download dokumentationen på www.etac.com for at sikre, at du har den nyeste version.

Fabrikantens overensstemmelseserklæring findes i den tekniske vejledning til Molift Quick Raiser (TM13001)

Molift Quick Raiser 205

Komponenter:

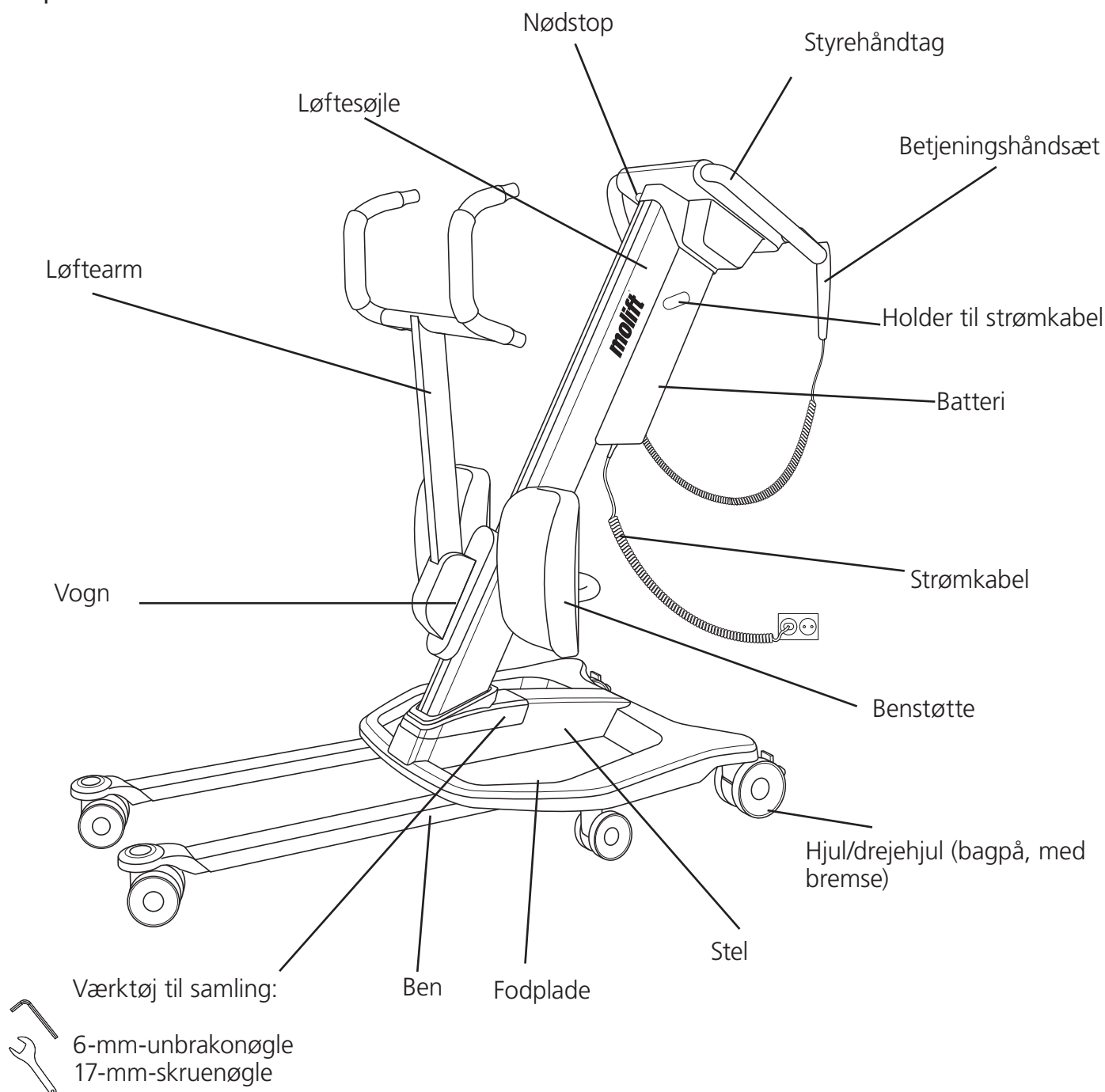

Om Molift Quick Raiser 205

Molift Quick Raiser 205 er en siddende-til-stående mobil personløfter, som er beregnet til at løfte og forflytte en person fra/til en stol, en kørestol eller et toilet ved hjælp af et sejl. Molift Quick Raiser 205 er beregnet til brugere, som kan følge instruktioner, har god stabilitet i overkroppen og kan bære vægten på mindst ét ben, men har brug for hjælp til at stå. Personløfterens facon samt løftebevægelsens geometri efterligner en persons naturlige bevægelsesmønstre. Personløfteren er fremstillet i letvægtsmaterialer, har styrehjul

og en elektrisk motor, der drives af et batteri. Løfteren betjenes med betjeningshåndsættet eller via kontrolpanelet på løfteren. Den har elektrisk indstillelige ben og en løftekapacitet på 205 kg (451 pund).

Den er ideel til plejehospitaler, men kan også bruges i private boliger og på plejehjem. Personløfteren må kun benyttes til forflytninger over korte afstande, herunder f.eks. imellem en stol og en seng eller til et badeværelse/toilet, og er ikke en erstatning for en kørestol eller lignende.

Generelt



CE-erklæring

Produktet og det relaterede tilbehør, der er beskrevet i denne brugervejledning, er i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 - som medicinsk udstyr, risikoklasse I.

Produktet er testet og godkendt af en tredjepart i henhold til standarderne IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 og EN/ISO 10535:2006.

Alle alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.

Betingelser for anvendelse

Der er altid en vis risiko ved løft og flytning af en person, og det er kun uddannet personale, som må anvende det udstyr og tilbehør, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Modifikationer og anvendelse af komponenter fra andre producenter.

Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes Molift-komponenter og -reservedele fra Etac.

Overensstemmelseserklæringen vil ikke længere være gyldig, og Etacs garantiforpligtelse bortfalder, hvis der foretages nogen form for modifikationer på produktet. Etac er ikke ansvarlig for fejl eller uheld, som måtte opstå ved brug af komponenter fra andre producenter.



Kun certificeret personale må åbne løfteanordningen eller tilbehøret for at udføre service eller reparation. Der er risiko for personskade fra roterende dele og elektrisk stød.



Personløfteren må ikke betjenes af den person, der bliver løftet.

Garanti

To års garanti på fabrikations- og materialefejl på vores produkter.


Et års garanti på batterier.

Se www.etac.com for vilkår og betingelser.

Produktidentifikation

Produktmærkat/GS1-128

Stregkodemærkatene viser EAN-nummer, serienummer og produktionsdato.

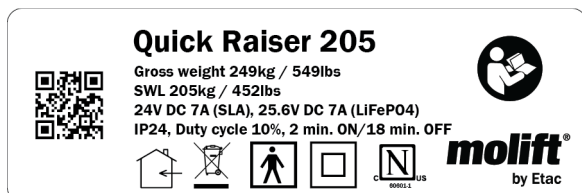

Type BF patientdel



CE-mærket



Se brugervejledning



Kun til indendørs brug



Må ikke bortskaffes med almindeligt affald



Nødsænkning



Serviceindikator



Batteriindikator



Opladningsindikator



Symbol for dobbelt isolering



Producent



Fremstillingsdato



Katalognummer



Løbenummer



Medicinsk udstyr

Advarselmærkater og -symboler

Symboler, som bruges i produktet, beskrives her nærmere:

Tekniske data Quick Raiser 205

Sikker arbejdsbelastning (SWL, Safe Working Load):

205 kg (451 pund)

Enhedens vægt:

Enhedens samlede vægt: 44,5 kg/98 pund

Stel: 17 kg/37,5 pund

Løftesøjle: 19 kg/41,9 pund

Benstøtte: 3,5 kg/7,7 pund

4-punktsløftearm: 5 kg/11 pund

Batteri:

SLA 24 V 2,9 Ah

LiFePO₄ 25,6 V 2,4 Ah

Batterioplader:

Indgangseffekt: 100-240 VAC,

50-60 Hz, maks 0,35 A

Udgangseffekt: 29,4 VDC, 0,5 A

Batteriopladningstid:

5 timer

Nominel ydeevne:

100 løft ved: 75 kg og 500 mm

Løftehastighed:

35 mm/sek. / (1,4 tommer/sek.)

med 75 kg (165 pund) belastning

Beskyttelsesklasse:

IP24 (komplet personløfter).

Objektet, en sondekugle med en diameter på 12,5 mm, må ikke trænge gennem materialet. Vand, der sprøjter mod kapslingen fra en hvilken som helst retning, må ikke have nogen skadelig virkning.

Betjeningskraft for knapper:

Knapper på kontrolpanel: < 5 N

Knapper på håndsættet: < 5 N

Materiale:

Aluminium, plast, stål

Motor:

Løftemotor: 24 V DC

Benspredningsmotor: 24 V DC

Drejediometer:

1144 mm / 1300 mm

(45³/₆₄ tommer) / (51³/₁₆ tommer)

Forventet levetid:



Personløfteren og tilbehøret har en forventet levetid på 30.000 cyklusser eller 10 år.

Anvendte dele:



Sejl

Fodhvilere

Vippearmhåndtag

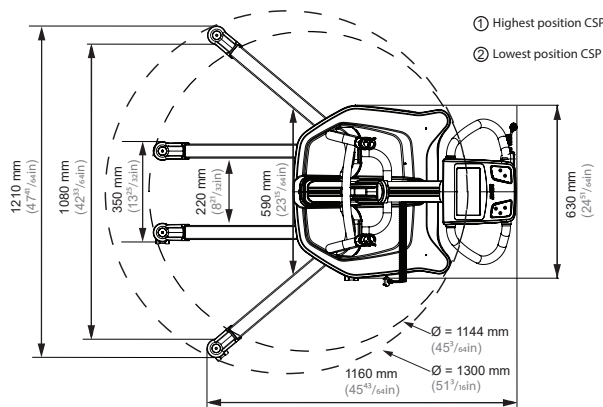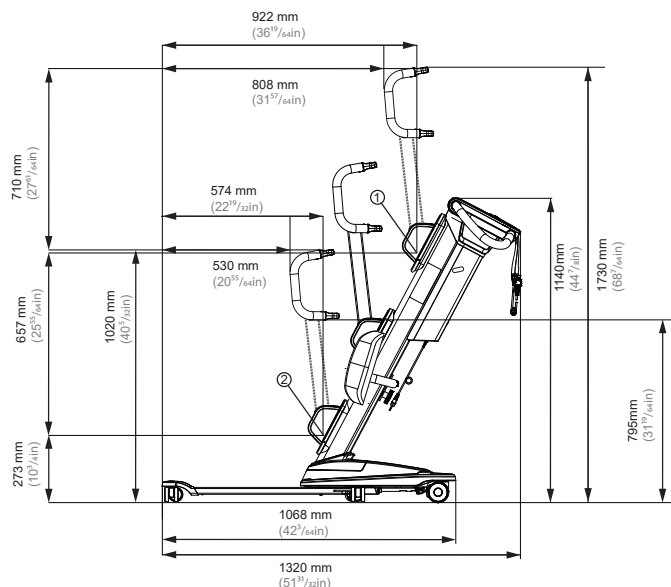


Measurements, QuickRaiser 205 with fixed legs:

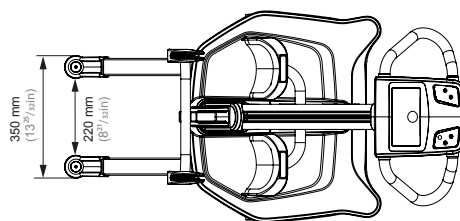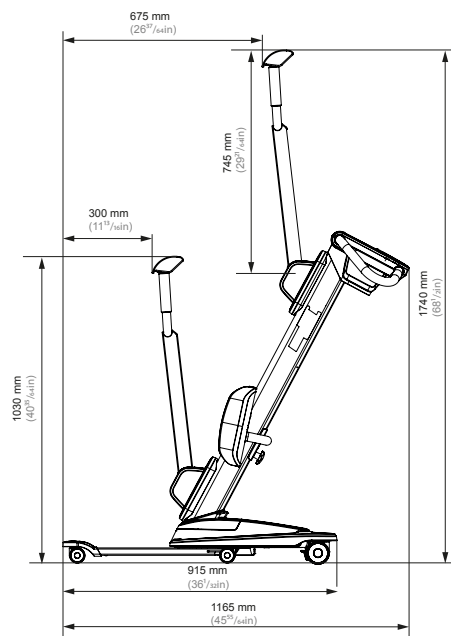


Samlevejledning

Før samling

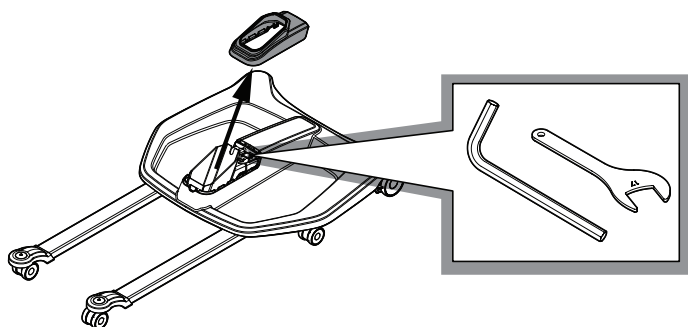


Find samleværktøjet frem (5-mm-unbrakonøgle og 17-mm-skruenøgle)

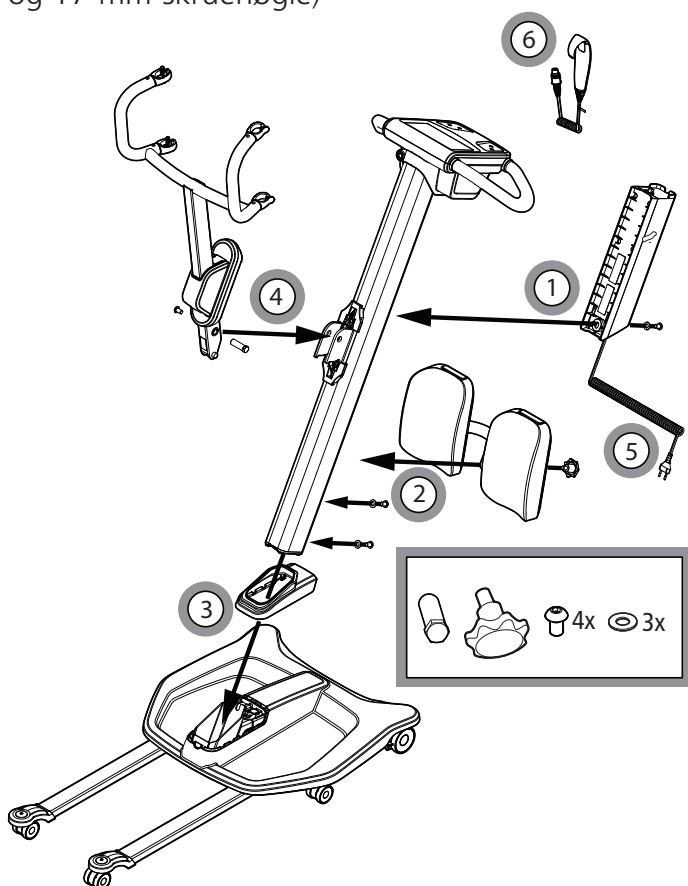


1. Batteri
2. Benstøtte
3. Søjle i stellet
4. Løftearm
5. Strømkabel
6. Betjeningshåndsat


1 – Batteri

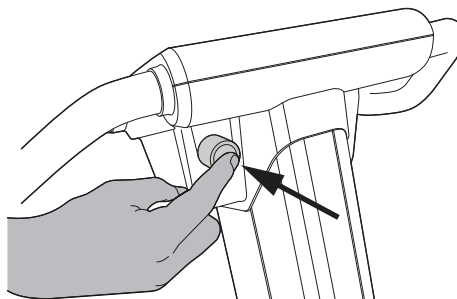

Tryk nødstopknappen ind, før personløfteren samles.

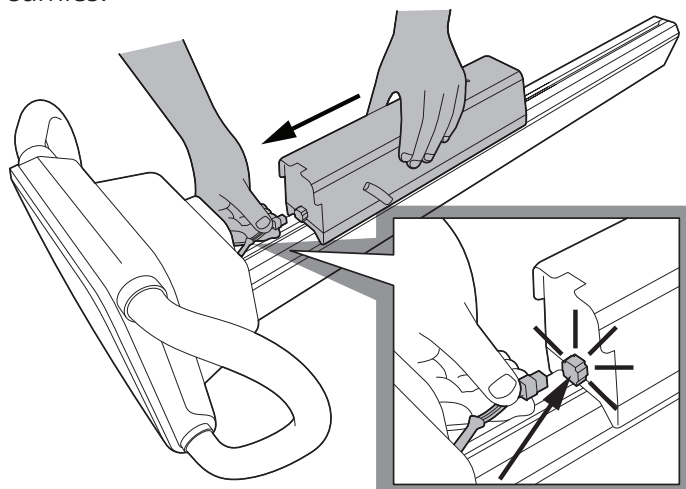


Anbring søjlen på en vandret overflade. Sørg for, at nødstopknappen er trykket ind. Forbind ledningen fra kontrolpanel med batteriboksen. Skub batteriboksen på plads.

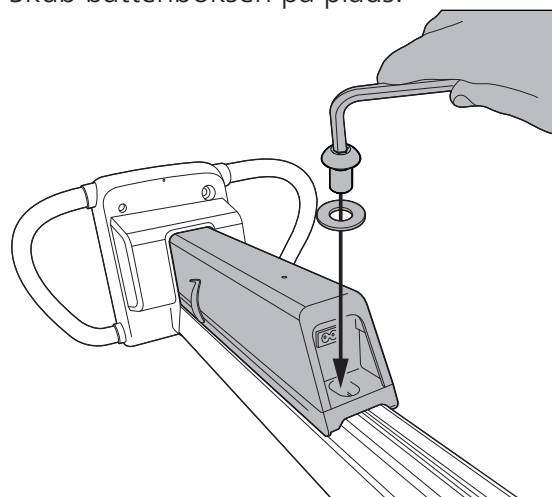

Brug en unbrakonøgle til at spænde skruen i urets retning. NB! Husk at sætte spændeskiven på.



Personløfteren må kun samles af uddannet personale.

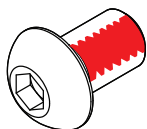


Skruer med formonteret gevindlås må kun anvendes én gang. Reservedel art.nr. 2920075




Kontrollér, at batteriet er korrekt fastgjort, før søjlen monteres i stellet.

2 – Benstøtte

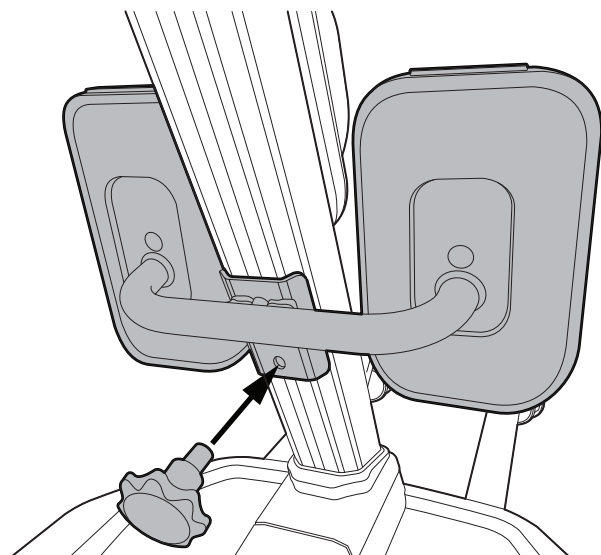


Monter benstøttebeslaget.

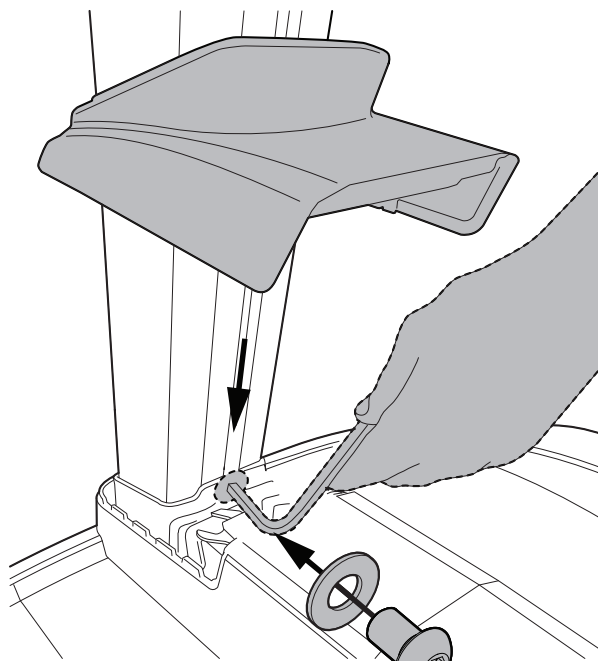


Monter skruen med spændeskive på søjlen. Skub skruen ned til stellet, og spænd skruen.

3 – Løftesøjle og stel

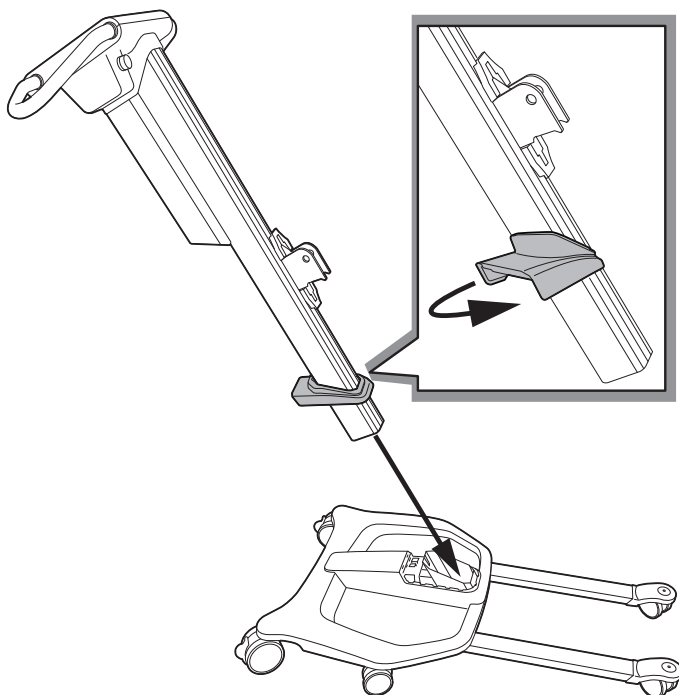

Anbring afdækningen på løftesøjlen. Drej afdækningen sidelæns, så den bliver på søjlen. Sæt løftesøjlen ind i stellet.

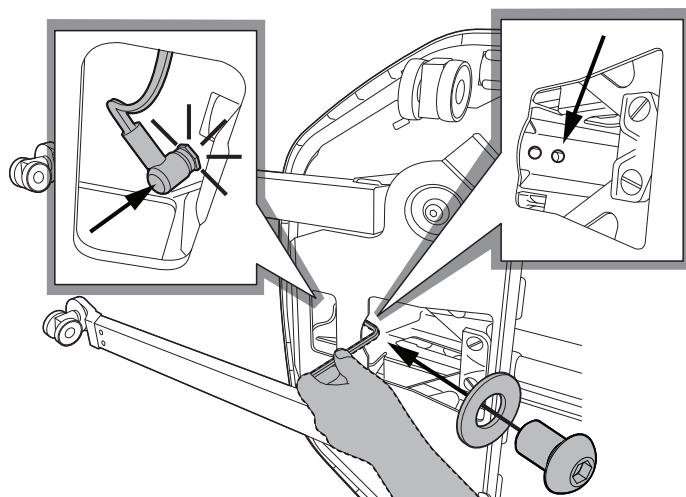


Vend personløfteren om på siden. Sæt skruen og spændeskiven i det øverste hul, og spænd skruen. Forbind kablet mellem søjlen og stellet. (NB! Kablet kan IKKE anvendes til Molift Quick Raiser 205 FL).




Skruerne sikrer, at søjlen ikke kan trækkes opad. Personløfteren må ikke anvendes, medmindre begge skruer er skruet sikkert fast.


4 – Løftearm

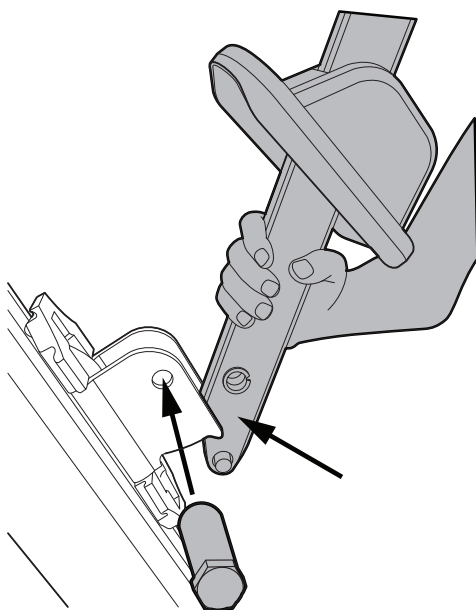

Anbring afdækningen på løftearmen. Anbring løftearmen i vognen, og sæt bolt i.

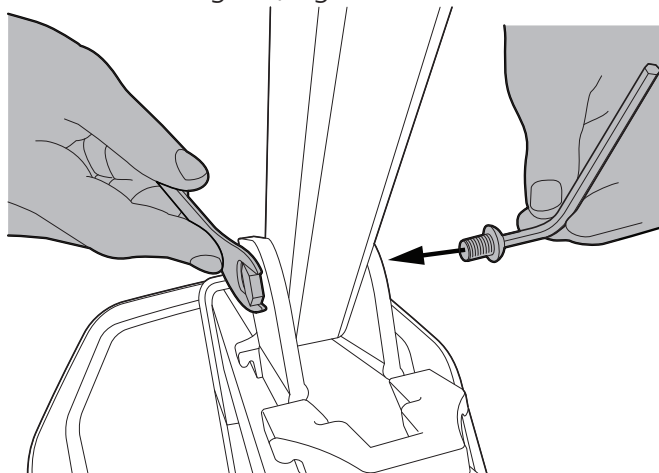


Sæt bolt i, og spænd skruen ved hjælp af 17-mm-skruenøglen og en 6-mm-unbrakonøgle. Kontrollér, at løftearmen er korrekt fastgjort til vognen på søjlen.

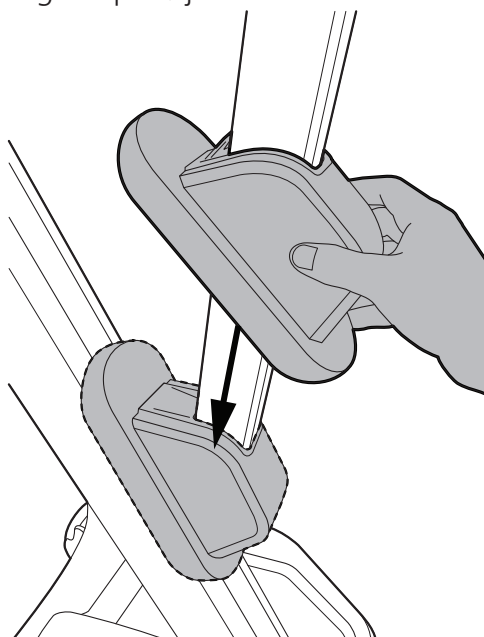


Monter afdækningen på vognen

5 – Strømkabel

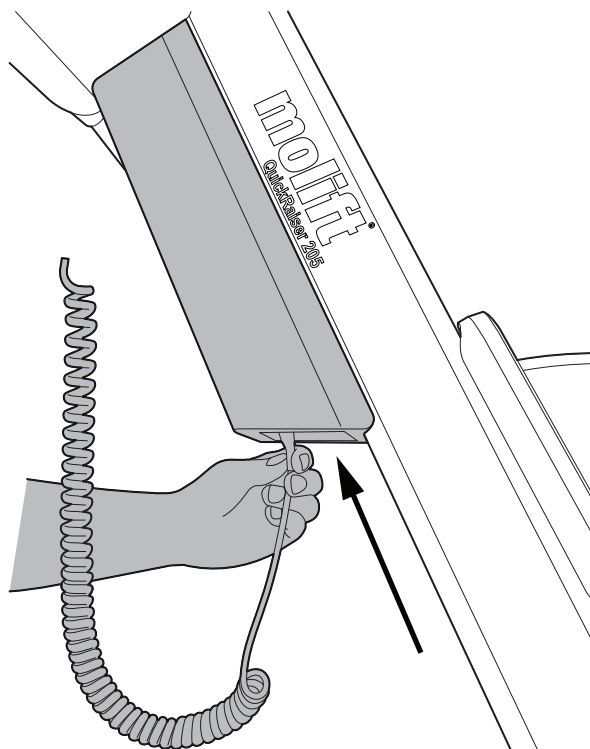


Tilslut strømkablet i bunden af batteriboksen.

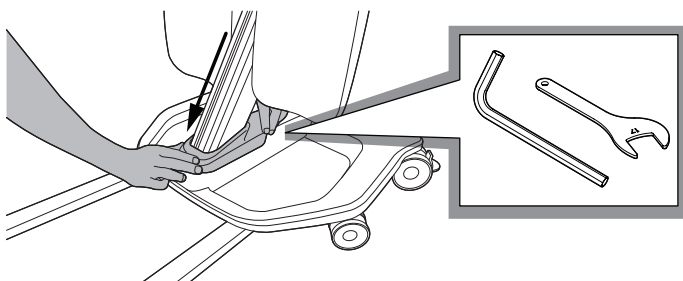

Monter afdækningen på stellet. Husk at lægge værktøjet på plads igen.

6 – Betjeningshåndsat

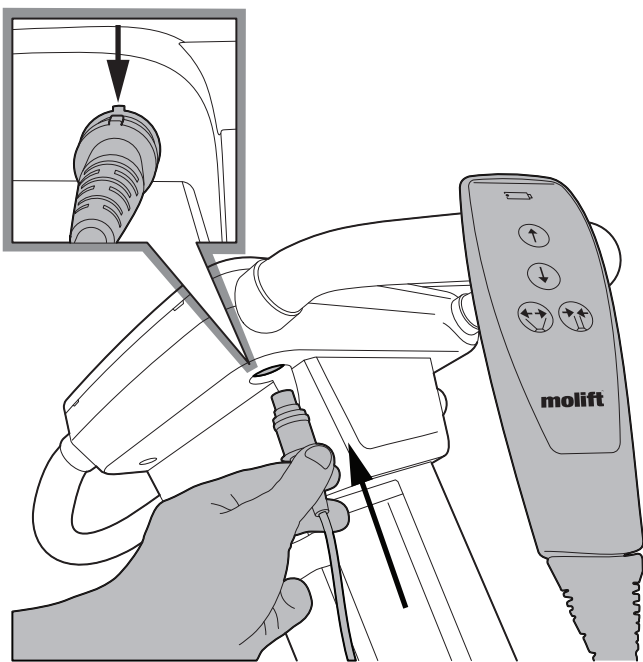

Forbind betjeningshåndsettet med kontrolpanelet.



Begynd ikke at anvende personløfteren, før du har gennemført kontrollen ved hjælp af tjeklisten efter samling.

Tjekliste efter samling

Brug denne tjekliste til at bekræfte, at personløfteren er korrekt samlet og kan betjenes sikkert.



Efter samling skal nødstopet nulstilles ved at dreje knappen med uret. Serviceindikatoren skal nu lyse gult. Når tjeklisten er gennemgået, nulstilles serviceindikatoren som beskrevet i samlevejledningen.

- ☐ Kontrollér, at benstøtten og løftearmen er korrekt fastgjort, og at der ikke er nogen løse dele på personløfteren.
- ☐ Kontrollér, at løftesøjlen er korrekt fastgjort til stellet – med begge skruer fastspændt.
- ☐ Forbind personløfteren til strømuttaget for at kontrollere, at den integrerede batterioplader virker. Oplad batteriet, hvis det er nødvendigt.
- ☐ Kontrollér, at personløfteren ikke har synlige skader eller andre fejl.
- ☐ Udfør ét løft med en belastning på 50-100 kg NB! Personløfteren kan ikke betjenes, mens den oplader.

Nulstilling af serviceindikator

Hvis service-LED'en lyser gult, skal du kontakte din Molift-servicepartner med henblik på at træffe de nødvendige tiltag.

Serviceindikatoren begynder at lyse gult igen, når der er gået 12 måneder og det dermed er på tide at udføre det periodiske eftersyn.

Sådan anvendes Molift Quick Raiser 205

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Brug kun tilbehør og sejl, der er justeret, så de passer til brugeren, typen af handicap, størrelsen, vægten og typen af flytning.

Forhold mellem arbejdspauser/driftsperiode.

Molift Quick Raiser 205 må ikke køre i mere end to minutter ad gangen (med maksimal belastning). Herefter skal der holdes en pause på mindst 18 minutter. Driftsperiode 10 % (intermittens iht. standarden ISO-EN 10535).

Sikker arbejdsbelastning

Personløfteren er mærket med sikker arbejdsbelastning (SWL)



Hvis den maksimale belastning (SWL) på personløfterens ophæng og kropsstøtteenheden er forskellige, skal der altid bruges den laveste maksimale belastning



Molift-løftere må kun anvendes til løftning af personer. Anvend aldrig personløfteren til at løfte eller flytte nogen form for genstande.

Før anvendelse/dagligt tjek

Inspektion, som skal udføres dagligt eller før anvendelse:

- ☐ Kontrollér, at personløfteren ikke har synlige skader, fejl eller skævheder
- ☐ Kontrollér, at løftearmsforbindelse, benstøtte, batteriboks og alle dele, som kan afmonteres, er korrekt tilsluttet og fastgjort
- ☐ Kontrollér nødstopknappen
- ☐ Kontrollér indikatoren for batteriniveau og service
- ☐ Kontrollér, at sejlstroppen ikke har synlige skader eller trevler

- ☐ Kontrollér, at hjulene ruller frit, og at personløfteren er let at manøvrere med
- ☐ Testkør personløfterens driftsfunktioner, og kontrollér, at personløfteren ikke afgiver unormale lyde



Hvis der er fejl eller defekter, skal personløfteren tages ud af drift og markeres med "ude af drift"

Betjeningshåndsræt

Betjeningshåndsrættet har fire knapper til at løfte og sænke løftearmen og til at føre benspredningsmekanismen ind og ud.


Betjeningshåndsrættet har en indikator, der lyser, når batteriet er ved at løbe tør for strøm, og personløfteren skal genoplades

Betjeningshåndsræt med fire knapper:

Varenr. 2910010

Betjeningshåndsræt med to knapper:

Varenr. 2910011

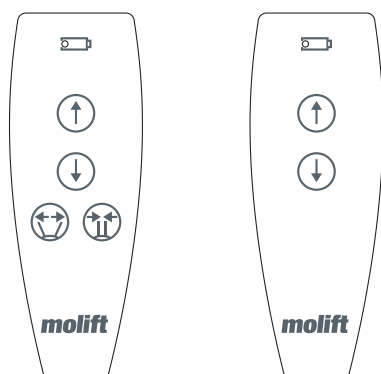


Løftearm – op/ned

OBS! Personløfteren er mest ustabil i øverste position.

Ben – ind/ud

OBS! Spredning af benene giver øget stabilitet og bedre adgang til stol eller toilet.

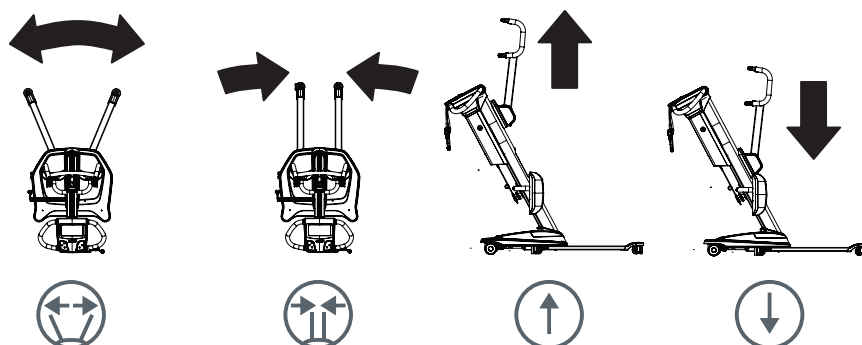

Sikkerhedsanordninger

Molift Quick Raiser 205 er udstyret med flere sikkerhedsanordninger, som har til formål at forebygge skader på personer og udstyr i tilfælde af forkert brug eller fejl.

Personløfteren har en overbelastningssensor, som forhindrer betjening af personløfteren, hvis belastningen overskrider SWL.

Ophænget er hængslet for at forebygge, at brugeren kommer i klemme i armen og ophænget.

Styrehåndtag

Brug styrehåndtagene til at flytte personløfteren.




Der må ikke skubbes til eller trækkes i brugeren, løftesøjlen eller løftearmen. Det kan forårsage stabilitetsproblemer, og personløfteren kan vælte.


Personløfteren må kun anvendes til forflytning over korte afstande. Den er ikke en erstatning for en kørestol eller lignende.

Bremser

De bageste hjul/styrehjul er forsynet med klik-bremser. Træd på bremserne for at låse dem. Skub op ad eller træk på den øverste del af bremsen for at låse dem op.

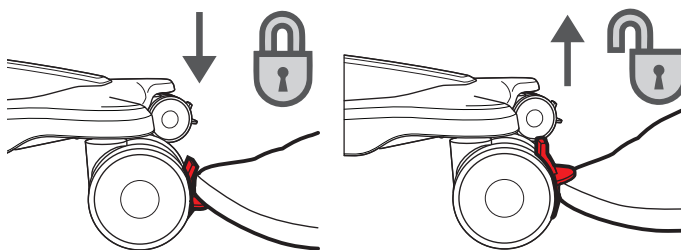


Nødstop/nødsænkning

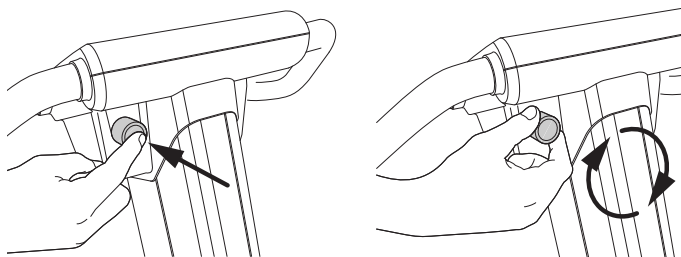

Nødstop

Nødstopknappen afbryder strømmen, når den trykkes ind. Drej i urets retning for at nulstille.


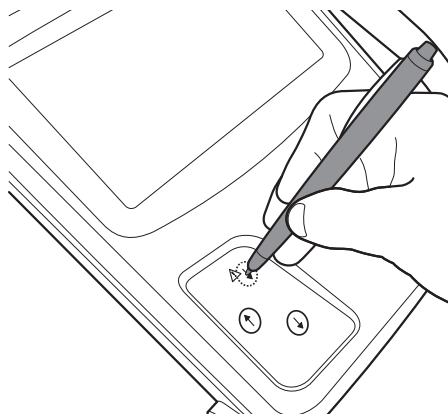


Elektrisk nødsænkning

Brug en pen eller en spids genstand til at trykke og holde på knappen til elektrisk nødsænkning for at sænke ophænget. Den elektriske nødsænkningssfunktion virker ikke, når nødstop er aktiveret.



Brug kun den elektriske nødsænkning, hvis ingen andre knapper virker.

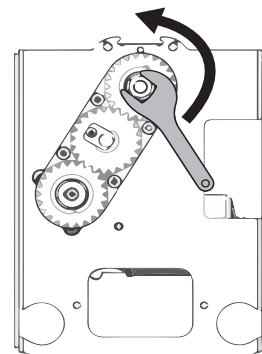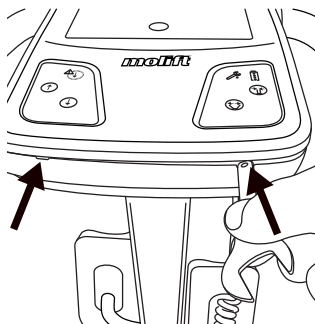

Manuel nødsænkning

Brug skruenøglen, der er placeret i bundafdækningen, til at åbne kontrolpanelets front ved de to punkter.



Tryk nødstopknappen ind, før afdækningen fjernes. Roterende dele udgør en klemfare!

Brug 17-mm-skruenøglen til at dreje kugleskruen mod urets retning, indtil brugeren er sænket ned på sikker vis. Den manuelle nødsænkningssfunktion må kun anvendes, hvis den elektriske nødsænkning ikke virker.



Hvis der anvendes nødsænkning, skal personløfteren markeres med "ude af drift", og der skal bestilles serviceeftersyn.

Elektronik

Transport- og driftsforhold

Transport og opbevaring

Ved længere tids opbevaring anbefales det, at nødstopknappen aktiveres (trykkes ind). Personløfteren kan opbevares og transporteres ved temperaturer på mellem -25 og 70 °C.

Drift

Personløfteren er konstrueret til anvendelse ved rumtemperatur (+5 til +40 °C).

Lufttryk: 70-106 kPa

Relativ fugtighed: 15-93 %

Ved opbevaring eller transport ved andre temperaturer skal personløfteren opbevares i et rum med en passende temperatur, indtil den opnår en sikker driftstemperatur.



Medicinsk elektrisk udstyr kræver særlige forholdsregler angående elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Bærbart eller mobilt radio-kommunikationsudstyr kan påvirke det medicinske elektriske udstyr og skal holdes i en afstand på mindst 25 cm (10 tommer) fra personløfterens elektronik.

Batteri

Molift Quick Raiser 205 kan leveres med et 24 V SLA-batteri eller et 25,6 V LiFePO₄-batteri, begge med integreret oplader.

SLA-batteriet har en forventet levetid på ca. 500 ladecykler.

LiFePO₄-batteriet har en forventet levetid på ca. 2000 ladecykler.



Genoplad batteriet ved modtagelsen og derefter hver sjette måned for at undgå batterisvigt.



Batterier skal bortskaffes som særligt affald iht. lokal lovgivning og lokale regler. Må ikke bortskaffes med almindeligt affald

Batteri- og serviceindikator

	Skruenøglesymbol/ serviceindikator
	Batterisymbol/ batteriindikator

Det elektriske system har en strømsparefunktion, der slukker for det elektriske system fem minutter efter seneste aktivitet. Alle indikatorer slukker. Systemet aktiveres, når der trykkes på en af betjeningsknapperne.

Batteriindikator på kontrolpanel

Når flerniveaubatteriindikatoren lyser gult, har personløfteren tilstrækkelig strøm til én fuld løftecyklus med maksimal belastning. Når batteriet blinker gult, er det kun muligt at sænke løftearmen.

Batteriindikator		Batteriniveau
	Grøn	80 % eller derover
	Grøn	80-60 %
	Grøn	60-40 %
	Grøn	40-20 %
	Lyser gult eller blinker gult	20 % eller derunder (genoplad personløfter)

Serviceindikator

Personløfterens elektronik registrerer de løftede belastninger og antallet af løft. Efter en vis driftsperiode afgives der et signal for at angive, at service er påkrævet.

Serviceindikator (fra 01.01.2018)

Serviceindikator	Tilstand
Lyser ikke	Ikke behov for service
Blinker grønt	Bestil service
Gul	Periodisk inspektion påkrævet
Rød	Udfør service



Sørg for at placere personløfteren på en måde, så det er nemt at trække strømkablet ud af stikket.



Oplad ikke personløfteren i et badeværelse eller i et rum med våde flader!




Tag strømkablet ud af vægstikket, før personløfteren flyttes.

Serviceindikator (frem til 31.12.2017)

Serviceindikator	Tilstand
Lyser ikke	Ikke behov for service
Gul	Bestil service
Blinker gult	Periodisk inspektion påkrævet
Rød	Udfør service

Opladning

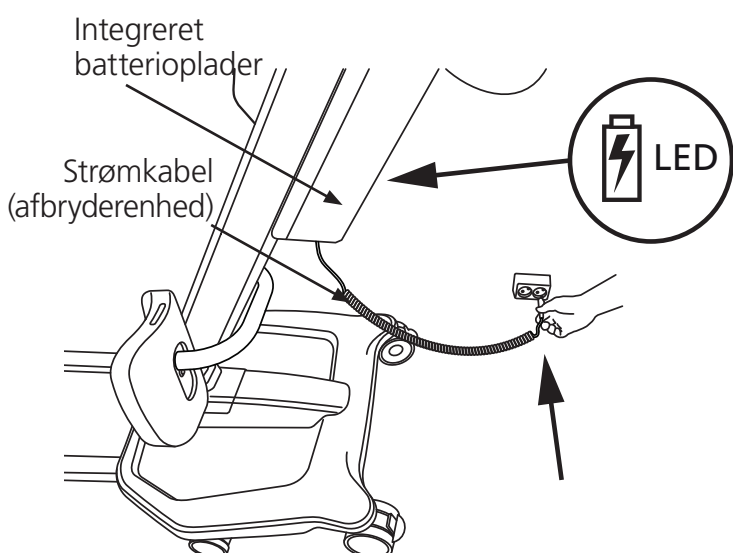

Personløfteren har en integreret oplader. Parker personløfteren, og sæt den i en stikkontakt for at oplade batteriet. LED-lampen på bagsiden af batteriet lyser rødt under opladning. LED-lampen på batterikassen lyser konstant grønt, når personløfteren er fuldt opladet. Under opladning blinker LED-lamperne på kontrolpanelet hvert 10. sekund.

Forflytning

Planlæg løfteoperationen på forhånd for at sikre, at den foregår så sikkert og ubesværet som muligt. Husk at arbejde ergonomisk korrekt. Vurder risiciene, og tag notater. Hjælperen er ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Brug af sejl

Det er vigtigt, at sejlet er blevet afprøvet på den enkelte bruger og til den tilsigtede løftesituation.



Læs brugervejledningen, før du bruger sejlet.




Brug ikke ødelagte eller nedslidte sejl.

Sejl fremstillet af andre producenter

Anvend kun Molift-sejl. Etac er ikke ansvarlig for fejl eller uheld, som måtte opstå ved brug af sejl fra andre producenter.

Justering af benstøtte


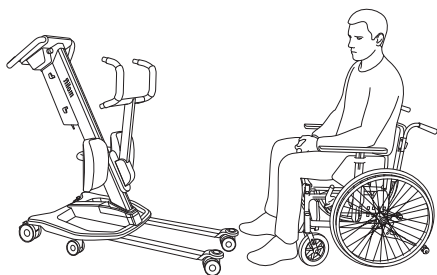


Flyt Quick Raiser 205 hen foran brugeren. Fødderne anbringes på fodpladen. Hjælp om nødvendigt brugeren med at placere fødderne rigtigt. Lås hjulene på personløfteren, før brugeren løftes. Den optimale vinkel på brugerens led før løftet er 90 grader.




Sørg for, at benstøttens højde er tilpasset, så højden passer til den enkelte brugers anatomi. Toppen af puderne skal være 2 cm under brugerens knæ.

Brug drejegrebet til om nødvendigt at justere benstøtten højere op eller længere ned.

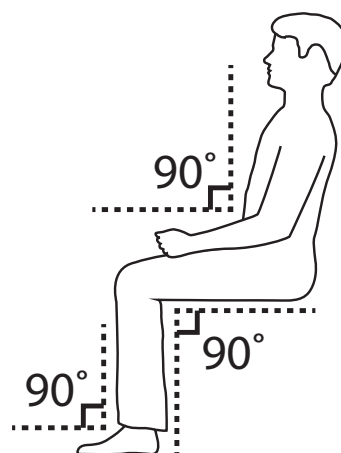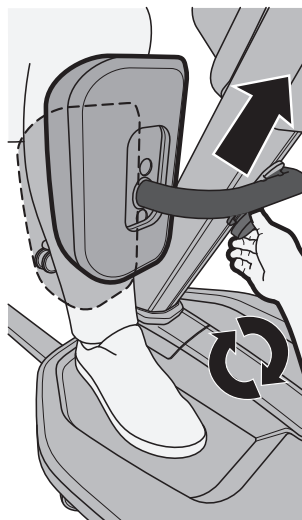


Sørg for, at brugeren ikke hænger fremad eller svinger til siderne under og før et løft, samt når brugeren sænkes ned.

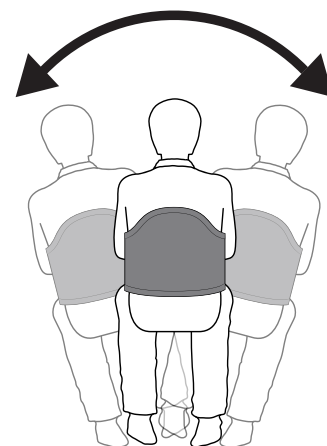


Alternativ benstøtte med stropper


Den alternative benstøtte med stropper kan fjernes og vendes 180 grader, så støtten øges på både inder- og ydersiden af brugerens ben.

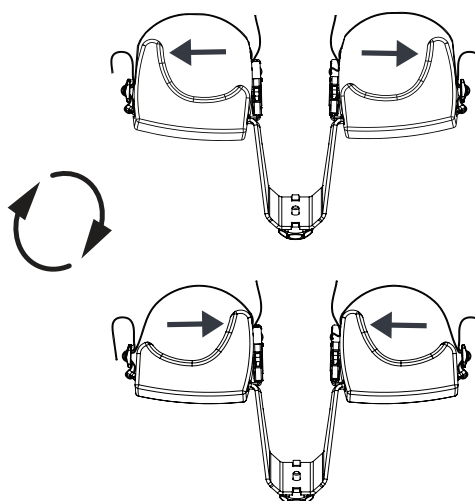

Brug af 4-punktsophæng

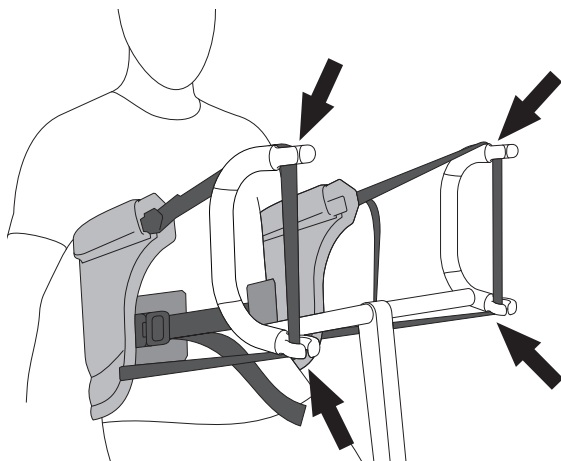


Fastgør sejlet til løftearmen ved at føre stroppen ind i alle fire kroge.

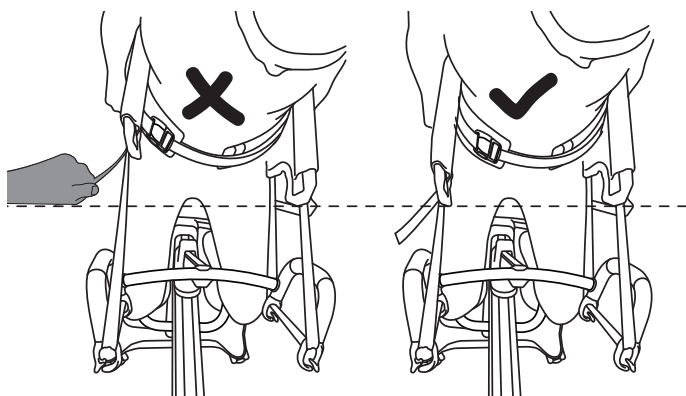

Træk i den løse strop for at justere stroppernes længde. Sørg for, at der er samme længde i begge sider.


Patientens vægt sikrer, at stroppen fastlåses i løftearmen. Brugeren skal læne sig en smule bagud under løftet og om muligt holde fast i håndtagene.

Fjernelse af sejlet

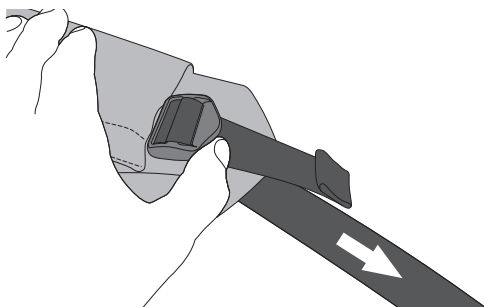


Løsn stropperne igen ved at vinkle spændet og trække stroppen ud.

Brug af 2-punktsophæng

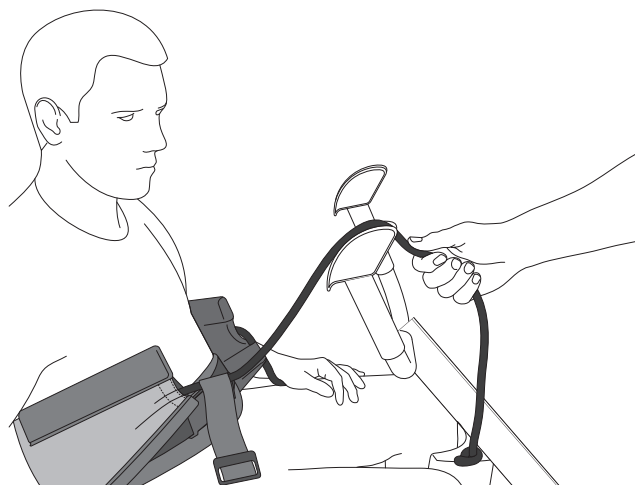

På 2-punktsophængsarmen fastgøres rebene til løftearmen ved med et fast greb at trække dem oppefra og ind i reblåsene.

Fjernelse af sejlet

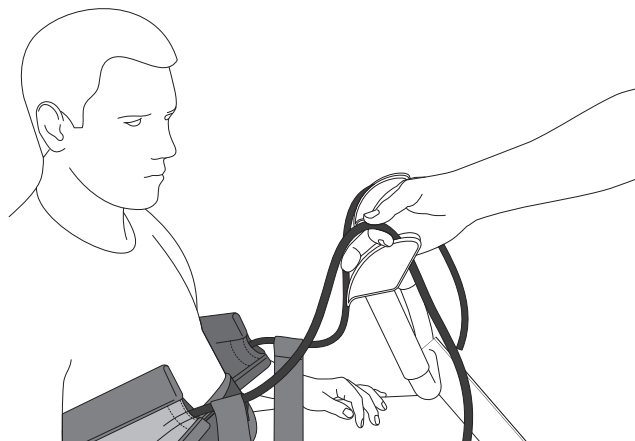

Frigør stroppen ved at lade dine fingre glide langs rebet, væk fra patienten.




RgoSling Active kan kun anvendes med et 4-punktsophæng. RgoSling Stand Up kan kun anvendes med et 2-punktsophæng.


Løftning/sænkning

Når du flytter brugeren, skal du stå ved siden af den person, du løfter. Sørg for, at arme og ben ikke kommer i vejen for sæde, seng osv. Bevar øjenkontakten med brugeren, så vedkommende føler sig tryk.

Hvis muligt: Kør hjulene fra hinanden i bredden ved hjælp af betjeningshåndsættets funktion til hjulafstandsindstilling, inden der foretages løft.

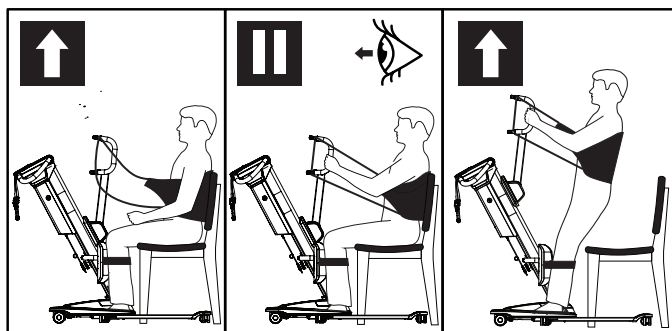

1. Kontrollér, at sejlet er tilpasset korrekt omkring brugeren, og at stroløkkerne er korrekt anbragt på ophængskroge.
2. Sørg for, at brugeren har begge fødder placeret sikkert på fodpladen på personløfteren.
3. Stræk sejlstropperne uden at løfte brugeren. Kontrollér, at begge løkker i sejlet er fastgjort korrekt, så brugeren ikke glider eller falder ud.
4. Sørg for, at spændet er korrekt fastgjort
5. Løft brugeren til stående stilling, og stram og tilpas sejlet om nødvendigt.

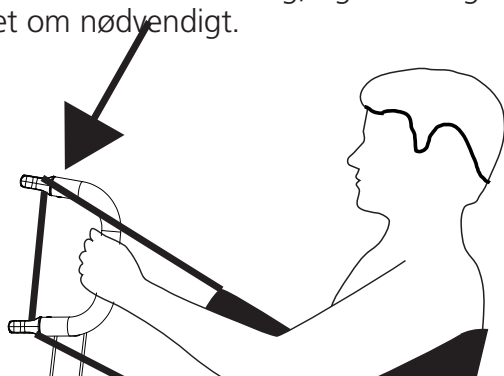


Sørg for, at brugerens hænder er placeret korrekt for at undgå, at brugerens hænder og fingre kommer i klemme i løftestropperne.

OBS! Hjulene på den genstand, som brugeren løftes fra eller til, skal være i den låste stilling.

Forflytning

Løft forsigtigt patienten, så balderne er fri af stolen, og stram remmen. Lås personløfterens hjul op, og flyt patienten til det ønskede sted.

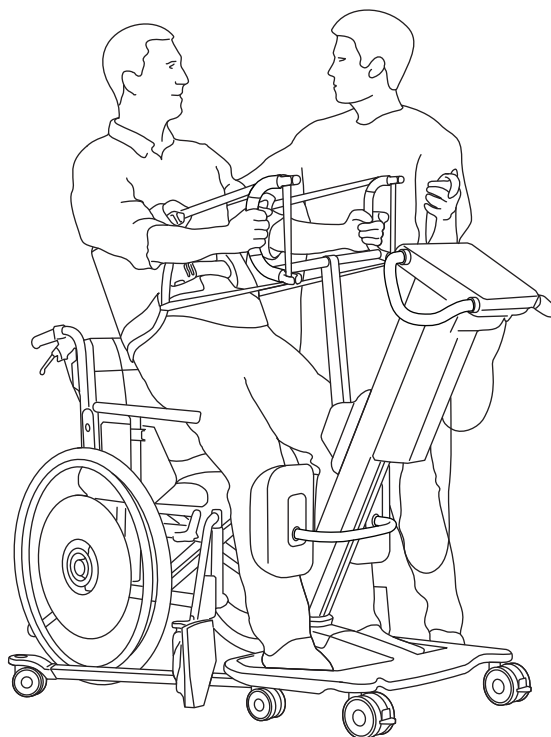

Pas under forflytningen på, at der ikke køres ind i møbler, vægge, døre osv.



Personløfteren må ikke anvendes til at løfte eller forflytte brugere på skrånende flader.

Undgå tæpper med lang luv, høje dørtrin, ujævne overflader eller andre forhindringer, der kan blokere hjulene. Personløfteren kan blive ustabil, hvis den tvinges hen over sådanne hindringer, hvilket øger risikoen for, at den vælter.


Personløfteren må kun anvendes til forflytning over korte afstande. Den er ikke en erstatning for en kørestol eller tilsvarende udstyr.

Tilbehør


(Anbefalet) ekstraudstyr og tilbehør til Molift Quick Raiser 205.

Tilbehør


Forlængerstykke til strømkabel
Varenr.: 2920117

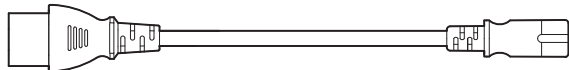

Indlægssæt til fodplade
Varenr.: 2920151

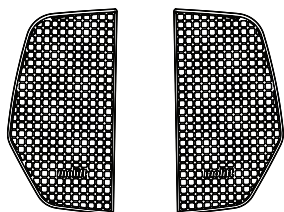

Fodplade
Varenr.: 2910065

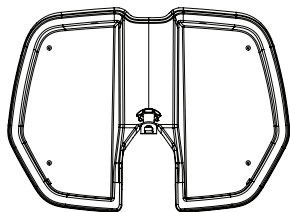


Alternativ benstøtte med stropper:

Komplet sæt med beslag og store puder
Varenr.: 2910056

Pakke med store puder
Varenr.: 2910077

Komplet sæt med beslag og små puder
Varenr.: 2910059



Pakke med små puder
Varenr.: 2910076

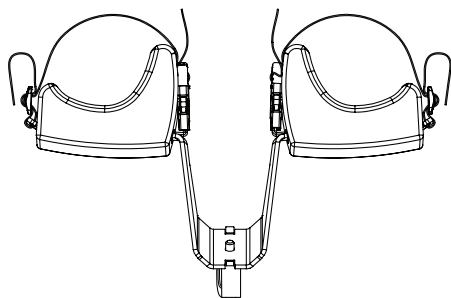

Løftearme og sejl

4-punktsophæng:

Quick Raiser Active-løftearm
Varenr.: 2910060

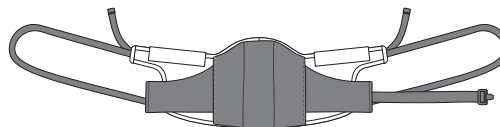
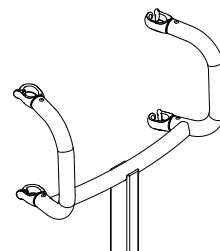


RgoSling Active

Varenr.: 1720910	Størrelse XS
Varenr.: 1720920	Størrelse S
Varenr.: 1720930	Størrelse M
Varenr.: 1720940	Størrelse L
Varenr.: 1720950	Størrelse XL

2-punktsophæng:

Quick Raiser Stand Up-løftearm
Varenr.: 2910061

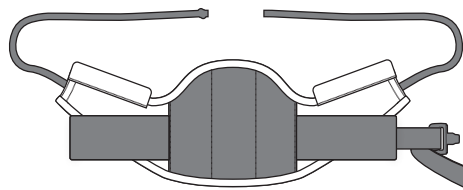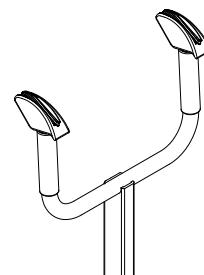

RgoSling Stand Up

Varenr.: 1720710	Størrelse XS
Varenr.: 1720720	Størrelse S
Varenr.: 1720730	Størrelse M
Varenr.: 1720740	Størrelse L
Varenr.: 1720750	Størrelse XL

RgoSling Stand Up, polstret

Varenr.: 1720810	Størrelse XS
Varenr.: 1720820	Størrelse S
Varenr.: 1720830	Størrelse M
Varenr.: 1720840	Størrelse L
Varenr.: 1720850	Størrelse XL

Vedligeholdelse

Rengøring og desinfektion

Rengør personløfteren regelmæssigt. Rengør overfladerne med en fugtig klud med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller stærke væsker, da dette kan ødelægge personløfterens overflader. Til desinficering, når det er nødvendigt: brug isopropylalkohol. Undgå slibende rengøringsprodukter.

- Tag afdækningen på løftearmen af, og rengør nedenunder.
- Aftag om nødvendigt knæpuden, og rengør den med rindende vand.
- Fjern hår og luv fra kørehjulene, og tjek, at kørehjulene roterer frit.

Rengør om nødvendigt kontaktsteder og håndtag med isopropylalkohol for at fjerne fedt og snavs. Kontrollér nødstoppet efter rengøring. Personløfteren må ikke udsættes for rindende vand.



Kontrollér, at du ikke beskadiger eller fjerner mærkater under rengøringen.

Istandsættelse

Følg rengørings- og samplingsproceduren, udfør regelmæssig inspektion, og brug tjeklisten efter samling for at holde personløfteren i god stand.

Genbrug

Vejledningen om genbrug viser, hvordan du bortskaffer produktet korrekt. Se www.etac.com.

Reservedele

Reservedelsliste kan rekvireres på forespørgsel.

Periodisk inspektion

Omfang af periodisk inspektion

Periodisk inspektion er en visuel undersøgelse (især af personløfterens vægtbærende struktur og løftmekanisme med fastgørelseselementer, bremses, betjeningshåndtag, sikkerhedsenheder og personbærende enheder) iht. den periodiske inspektionsrapport for Molift Quick Raiser 205. Se www.etac.com.



Hvis der er nogen form for problemer med personløfteren, som kan bringe personers sikkerhed i fare, skal personløfteren omgående tages ud af brug og mærkes med "i uorden". Brug ikke personløfteren, før den er blevet repareret.

Under den periodiske inspektion skal inspektøren udfylde en inspektionsrapport for Molift Quick Raiser 205. Rapporterne skal opbevares af den eller de personer, som er ansvarlige for at servicere personløfteren. Hvis inspektionen afslører defekter og skader, skal personløfteren tages ud af drift og mærkes med "ude af drift". Personløfteren må ikke anvendes, før den er repareret. Når det periodiske eftersyn er udført, skal serviceindikatoren nulstilles. Se side 191.

Den periodiske inspektion skal udføres mindst én gang om året og hyppigere, hvis det kræves af de lokale myndigheder. Inspektionen skal udføres af servicepersonale, som er godkendt af Etac. Kontakt Etac på molift@etac.com for uddannelse og godkendelse eller anbefaling af en godkendt servicepartner.

Fejlsøgning

Symptom	Mulig årsag/udbedring
Løftesøjlen er vakkelvorn	Låseboltene er ikke fastgjort korrekt, eller løftesøjlen sidder ikke rigtigt i stellet / kontrollér, om søjlen sidder rigtigt i stellet, og/eller spænd boltene
Personløfteren kan kun køre én vej (op eller ned) / benene kan kun køre én vej (ind eller ud)	Fejl i betjeningshåndsettet / udskift med alternativ styring fra anden personløfter og/eller nyt betjeningshåndsæt
	Elektronikken svigter / kontakt din lokale servicerepræsentant
Personløfteren bevæger sig opad og/eller nedad af sig selv / benene bevæger sig af sig selv	Kortslutning imellem betjeningshåndsettet og personløfteren / rengør forbindelsesstederne imellem betjeningshåndsettet og stellet med sprit for at fjerne fedt og snavs
	Betjeningshåndsettet er i stykker / udskift betjeningshåndsettet / kontakt din lokale servicerepræsentant
	Funktionsfejl på relæer/elektronik / udskift elektronik/relæer / kontakt din lokale servicerepræsentant
Løftearmen bevæger sig ikke / benene bevæger sig ikke	Afladet batteri / udskift batteri
	Nødstop aktiveret / drej i urets retning for at nulstille
	Betjeningshåndsæt afbrudt / gentilslut betjeningshåndsettet
	Betjeningshåndsettet er i stykker / udskift betjeningshåndsettet / kontakt din lokale servicerepræsentant
	Funktionsfejl på elektronik / kontakt din lokale servicerepræsentant
	Motoren svigter / kontakt din lokale servicerepræsentant
	Kontrollér forbindelsen mellem søjlen og stellet







Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

molift[®]
by Etac