



Produkter og komponenter



Guldmann™

Løftliftsystemer

GH3 løftemoduler	4
GH3	5
GH3+	5
GH3 Twin	5
Tilvalgsmoduler – funktionalitet efter behov	6
– Køremotor modul (GH3 / GH3+)	
– IR kontrolmodul (GH3 / GH3+)	
– Vægtmodul (GH3+)	
– Klasse III vægtmodul (GH3+)	
– Trainer Module (GH3+)	
Guldmanns digitale univers – MyGuldmann (GH3+ / GH1+)	8
Tekniske specifikationer	16
GH1 løftemoduler	10
GH1	11
GH1+	11
GH1 Q / GH1+ Q	11
GH1 F	12
Tekniske specifikationer	16
GHZ løftemodul	14
GHZ	15
Tekniske specifikationer	16
Skinner	17
Skinner	17
Vægsskinne	20
GHZ skinne	20
Midi skinne	20
Beslag til skinneresystemer	21
Komponenter til skinneresystemer	21
– Beslag	
– Løbekatte	
– Komponenter	
Fritstående skinneresystemer	33

Mobile personløftere

GL6 Mobile personløftere	34
GL6 Basic	34
GL6 Advanced	34
GLS5.2 Aktiv personløfter	35
GLS5.2	35
Varianter – GL6 Basic, GL6 Advanced og GLS5.2	36
GTP1 – Forflytningsplatform	37
GTP1	37

Sejl og løftetilbehør

ABC Sejl – Active	40
ABC Sejl – Basic	42
ABC Sejl – Custom	44
ABC Sejl – Kids	46
Bariatri sejl	50
Engangssejl	54
Størrelser og materialer	61
Vending og håndtering	62
RFID teknologi	65
Løftebøjler	66
Planløftere	69
Løftetilbehør	72



Transfer



Treatment



Training

Guldmann har specialiseret sig i at tilbyde sikre, komfortable og effektive løsninger til løft, forflytning og positionering samt mobilisering og genoptræning af mennesker i pleje- og sundhedssektoren.

Vores primære mål er at sikre et bedre arbejdsmiljø for hjælperne og skabe mere tid til omsorg. Samt øge brugerens mulighed for at være selvhjulpne.

Det forsøger vi at opnå ved at gøre løft og forflytninger effektive og strømlinede gennem hele processen. Selvfølgelig på en måde så alle de involveredes specifikke behov opfyldes.

På dette område er erfaring altafgørende.

Guldmann har mere end 40 års erfaring med udvikling af tekniske hjælpemidler og velfærdsteknologi, og har opnået et optimalt og komplet udvalg af modulære løsninger til løft og forflytning – designet til at forbedre menneskers livskvalitet og sikre et godt arbejdsmiljø.

Guldmann er med i hele processen

Vi udvikler og fremstiller et bredt udvalg af produkter og løsninger, der tager hensyn til både hjælpernes arbejdsmiljø og brugernes komfort og sikkerhed.


Vi hjælper alle parter med at vælge de løsninger, produkter og moduler, der bedst opfylder deres behov, og vi leverer analyseredskaber og rådgivning, som sikrer en velovervejet beslutningsproces.

Vi samarbejder med arkitekter, rådgivende ingeniører og bygherrer samt alle andre involverede parter for at sikre, at de valgte løsninger kan integreres effektivt i både nyt og eksisterende byggeri. Vi hjælper endvidere kunder med at sikre, at løsningerne installeres korrekt, så det optimale resultat opnås.

Vi tilbyder uddannelsesprogrammer, der sætter hjælpere i stand til at vælge den optimale løsning til deres specielle løftebehov, og lærer dem at arbejde sikkert og effektivt med de valgte produkter i processen.

Vi sørger for et komplet vedligeholdelsesprogram og teknisk support, der sikrer at både hjælpere og brugere får det fulde udbytte af de valgte Guldmannløsninger og Guldmann som samarbejdspartner.

| Time to care |

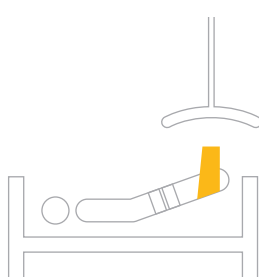

GH3 løftemoduler



GH3 løftemoduler



reddot design award
honourable mention 2009

1



GH3

Brugervenligt, kraftfuldt løftemodul med høj hastighed til permanent installation.

Der er mulighed for opladning i skinnerne eller via håndbetjeningen, som sidder i en vægmonteret dockingstation. Forberedt for horisontal køremotor og IR fjernbetjening (tilvalg). Med turbohastighed.

Løftekapacitet: 200, 250, 275, 300, 350, 375 eller 400 kg. *Se oversigt på side 16.*

2



GH3+

Er ligesom GH3 med høj hastighed. WiFi-aktiveret og klar til online forbindelse til den digitale platform MyGuldmann. Den digitale håndbetjenings display viser service relateret information og alarmer; Hvis eftersynsdatoen er overskredet eller der er kritisk lavt batteri ligesom den kan vise brugsdata. GH3+ er forberedt til flere tilvalgs moduler. Med turbohastighed.

Løftekapacitet: 200, 250, 275, 300, 350, 375 eller 400 kg. *Se oversigt på side 16.*

3



GH3+ Twin

Heavy-duty løftemodul med to løftestropper som giver ekstra plads til borgeren og automatisk kontrol over den valgte "tilt-in-space" vinkel ved horisontale løft. Med turbohastighed.

Løftekapacitet: 250, 375 eller 500 kg. *Se oversigt på side 16.*

Analog
GH3 håndbetjening



Digital
GH3+
håndbetjening

Tilvalgsmoduler – funktionalitet efter behov



4

Køremotor modul (GH3 / GH3+)


Til horisontal bevægelse af løftemodul i skinneresystemet. Betjenes såvel via den analoge som den digitale håndbetjening og som tilvalg via den trådløse IR fjernbetjening. Kun til installation på fabrikken.

5

IR kontrolmodul (GH3 / GH3+)

Aktiverer betjening af løftemodul, skiftespor og drejeskive via IR fjernbetjening. Fabriksinstalleret eller eftermontering på stedet.



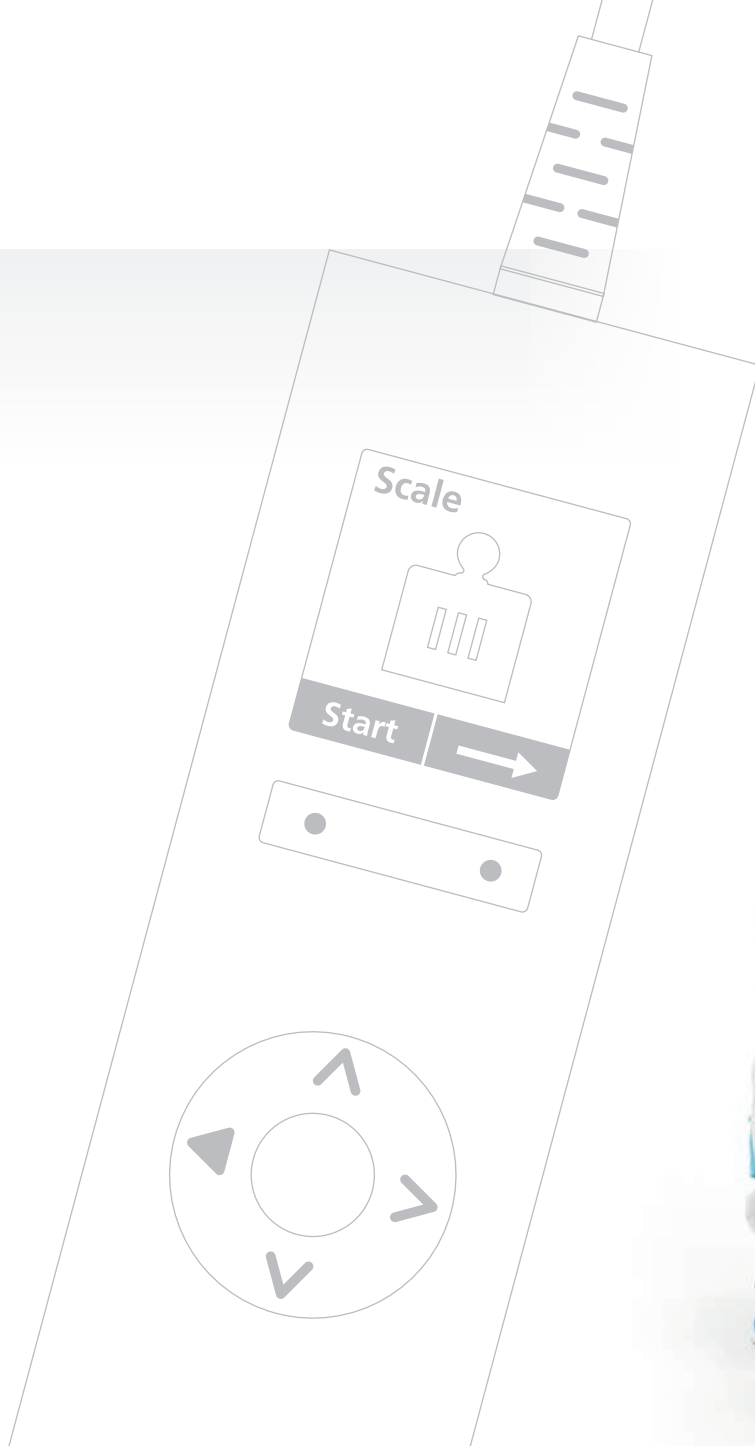

6

Vægtmodul (GH3+)

Integreret vægtmodul.

Integreret vægtmodul bruges til vejning af en person mens vedkommende sidder i et sejl. Vægten på personen der løftes vises i håndbetjeningens display.

Fabriksinstalleret eller i nogle situationer eftermontering på stedet. Tilgængelig for køb eller leje.

1 måned 9852
Permanent 9853



7

Klasse III vægtmodul (GH3+)

Integreret Klasse III nøjagtigheds vægtmodul.

Den integrerede Klasse III vægt bruges til at veje personer for eksempel i forbindelse med hospitalsindlæggelse hvor nøjagtig monitorering af personens vægt er nødvendig. Vægten vises i håndbetjeningens display. Dette er den første godkendte Klasse III vægt på markedet, som er integreret i et løftemodul og som opfylder kravene for et ikke-automatisk vejeinstrument i henhold til EU-direktiv 2014/31/EU. Kun fabriksinstallation.



8

Trainer Module (GH3+)

Modul til aktive træningsfunktioner.

Muliggør rehabilitering med dynamisk vægtaflastning på op til 100 kg i trin á 1 kg. Typiske rehabiliteringsøvelser med dynamisk vægtaflastning kan være: gangtræning, balance, fra siddende til stående, squats, step på eller over forhindringer osv. Fabriksinstalleret eller eftermontering på stedet. Tilgængelig for køb eller leje.

1 måned 9850
Permanent 9851



MyGuldmann

Mere tid til omsorg
– mindre tid til administration

Alt dit udstyr. Ét overblik

MyGuldmann samler alle dine Guldmann-produkter i én intuitiv platform, der giver dig overblik, indsigt og sikkerhed for, at udstyret altid er klar, korrekt serviceret og optimalt udnyttet.

Platformen kan downloades gratis via Microsoft Store og giver automatisk adgang til en cloud-baseret løsning, hvor kun du og dine udvalgte samarbejdspartnere har adgang til data.

MyGuldmann Basic

– maksimal opetid, minimal bekymring

Løftemoduler

Tilknyt dine online løftemoduler og få straks fuldt overblik.

Se alle løftemoduler på ét samlet kort – inkl. status, placering, servicehistorik og eventuelle alarmer. Med ét klik får du indsigt i brug, fejl og behov for eftersyn, så du kan øge opetiden og minimere driftstop.

Ældre, offline løftemoduler kan tilknyttes manuelt.

Løftesejl

Alle nyere Guldmann-sejl har RFID-tags. Tilknyt en scanner til MyGuldmann, scan dine sejl og få et hurtigt overblik over antal, typer, alder og eftersynsstatus.

Gennemfør eftersyn via eftersynsfunktionen og få automatisk oprettet en log, der lever op til gældende regler.

Løse RFID-tags kan tilkøbes til ældre sejl. Se mere side 65

MyGuldmann Pro

– mere indsigt, mere værdi

Pro-licensen giver adgang til overvågning af løftemoduler og avancerede datavisninger, filtrering og rettighedsstyring. Del udvalgte data med kolleger og samarbejdspartnere, og opsæt automatiske notifikationer om fx service eller fejl. Licensen kan tilkøbes for korte eller længere perioder via MyGuldmann-platformen.

MyGuldmann platformen er forberedt for udveksling af data med 3. parts systemer.

Funktion efter behov

– fleksibilitet uden begrænsninger

Udvalgte GH3+ -enheder kan opgraderes med funktioner som Trainer Module og Vægtmodul, præcis når du har brug for dem – og kun i den ønskede periode. Det giver maksimal fleksibilitet og optimal økonomi. I MyGuldmann kan du administrere og overvåge dine funktioner.

Se hvilke funktionsmoduler, der kan tilkøbes til hvilke løftemoduler på side 7

FUNKTIONER	MyGuldmann Basic	MyGuldmann Pro
Oversigtskort over alle tilsluttede løftemoduler	✓	✓
Vis navn/serienummer på løftemoduler	✓	✓
Installationsdato	✓	✓
Kommende serviceeftersyn	✓	✓
Sidste brugstidspunkt	✓	✓
Alarmer for fejl	✓	✓
Alarmer for overskredet eftersyn	✓	✓
Brugsdata for hvor meget og hvornår alle løftemoduler bruges	✓	✓
Udstyrsoversigt over alle løftemoduler + funktionalitet	✓	✓
Tilføj/tjern løftemoduler	✓	✓
Mulighed for at tilføje løftesejl med RFID tags via scanning (løse RFID tags kan tilkøbes til ældre sejl)	✓	✓
Oversigt over tilføjede sejl	✓	✓
Hold styr på lovpligtige sejleftersyn	✓	✓
Sortering af data via filter for dato eller lokation	—	✓
Tildeling af adgang og roller med forskellige adgangsniveauer	—	✓
Opsætning af notifikationer for alarmer, der sendes direkte til den ansvarlige person via e-mail.	—	✓

MyGuldmann Basic (GH1+ og GH3+)


Inkluderet til alle kunder, der ejer et Guldmann løftemodul

MyGuldmann Pro (GH1+ og GH3+)

Tilgængeligt for et månedligt beløb pr. løftemodul – kontakt din lokale salgskonsulent for en gratis afprøvning

MyGuldmann Pro

..... 9854

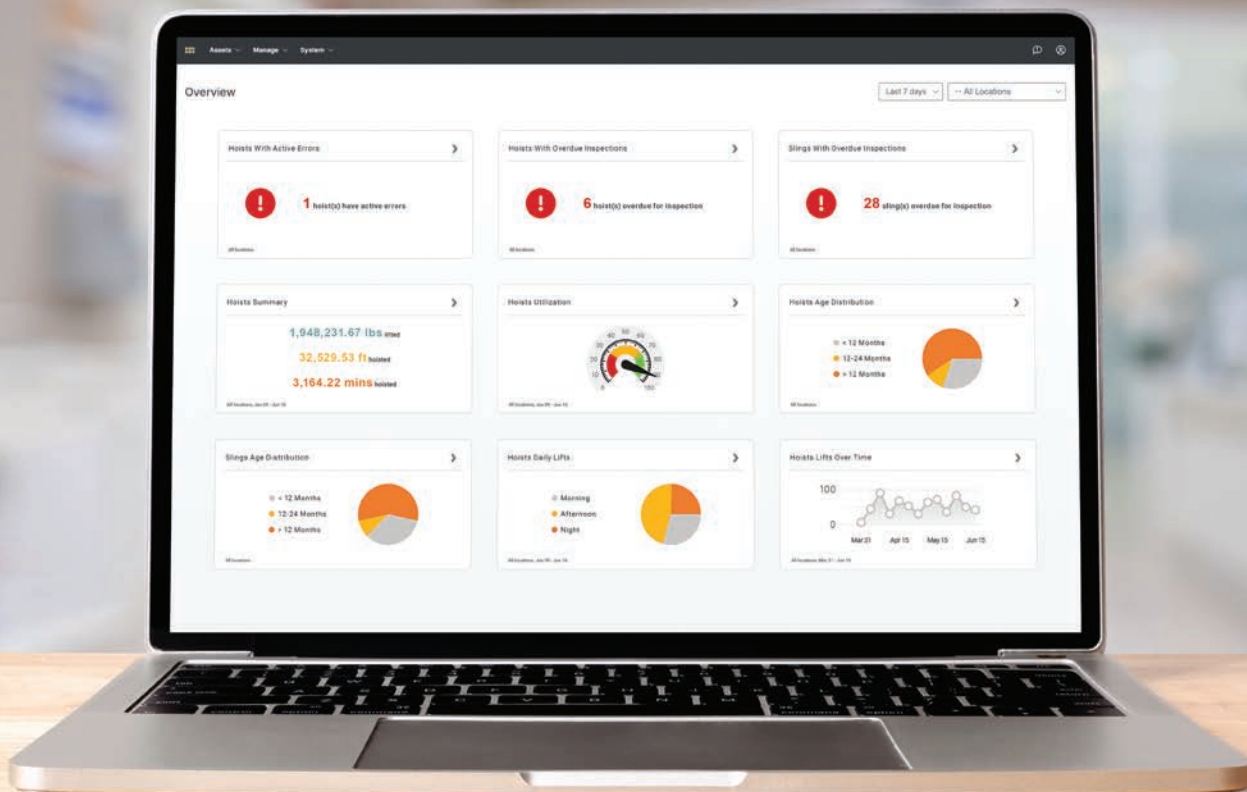

GH1 løftemoduler



GH1 løftemoduler



9

10

11



GH1

Brugervenligt, kraftfuldt højhastigheds løftemodul til installation i fastmonterede skinner eller fritstående skinnesystemer. Lader via den analoge håndbetjening og den vægmonterede dockingstation. Med turbohastighed. Løftekapacitet: 175, 205 eller 255 kg. *Se oversigt på side 16.*



GH1+

Tilsvarende GH1 men med WiFi aktiveret og forberedt til online forbindelse til den digitale platform "MyGuldmann". Med turbohastighed. Løftekapacitet: 175, 205 eller 255 kg. *Se oversigt på side 16.*



GH1 Q / GH1+ Q

Løftemoduler udstyret med Quickrelease funktion, der gør det nemt og enkelt at flytte løftemodul fra et system til et andet uden brug af værktøj. Må ikke anvendes i skinnesystemer med Kombi-lås eller skiftespor. Med turbohastighed. Løftekapacitet: 150, 175, 205 eller 255 kg. *Se oversigt på side 16.*



GH1 dockingstation



GH1 håndbetjening



GH1 F løftemodul



GH1 F løftemodul



12



GH1 F

Fleksibelt løftemodul, som kan flyttes fra ét skinneresystem til et andet. Det installerer og afmonterer automatisk sig selv i skinneresystemet. Med turbobastighed. Løftekapacitet 175, 205 eller 255 kg. Se oversigt på side 16.

13



Transportvogn for GH1 F

GH1 F transport- og opbevaringsvogn.
.....554273



GH1 F håndbetjening

GH1 F dockingstation

GHZ løftemodul



GHZ løftemodul



14



GHZ

Et diskret og næsten usynligt løftemodul. GHZ løftemodul er placeret inde i traversskinnen. Dette minimerer indbygningsdimensionerne og øger løftehøjden, hvilket ofte er en afgørende faktor i rum med lav lofthøjde. Monteret i GH vægskinnerne vil de fleksible GHZ traversløbekatte automatisk kompensere for skævheder i væggene på op til 80 mm.

GHZ dockingstation



GHZ håndbetjening



Løftekapacitet 255 kg.
Se oversigt på side 16.
.....556342

Tekniske specifikationer

GH Løftemoduler, konfigurationer			Tilvalg													
Guldmann lifttype	Løftehastighed, mm/s (Normal/turbo)	Belastning i kg	Wi-Fi aktiveret	Datransmission vises på MyGuldmann	Håndbetjening med display	Funktion efter behov	Vægtmodul	Klasse III vægt	Trainer modul	Coating	UL	Automatisk opladning i skinne	Opladning via dockingstation	Positionslås	IR fjernbetjening ^{x)}	Horisontal køremotor ^{x)}
GH3	40/100	200								•	•	✓	•	•	•	•
		250								•	•	✓	•	•	•	•
		275								•	•	✓	•	•	•	•
		300								•	•	✓	•	•	•	•
		350								•	•	✓	•	•	•	•
		375								•	•	✓	•	•	•	•
		400								•	•	✓	•	•	•	•
GH3+	60/100	200	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		250	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		275	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		300	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		350	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		375	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		400	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
GH3+ Twin	60/100	250	✓	✓	✓	•	•	•		•	•	✓				
		375	✓	✓	✓	•	•			•	•	✓				
		500	✓	✓	✓	•	•	•		•	•	✓				
GH1	40/80	175								•			✓			
		205								•			✓			
		255								•			✓			
GH1 Q		150								•			✓			
		175								•			✓			
		205								•			✓			
GH1 F		255								•			✓			
		175								•			✓			
		205								•			✓			
GH1+		255								•			✓			
		175	✓	✓						•			✓			
		205	✓	✓						•			✓			
GH1+ Q		255	✓	✓						•			✓			
		175	✓	✓						•			✓			
		205	✓	✓						•			✓			
GHZ	40	255								•			✓			

• Tilvalg

✓ Altid inkluderet


x) Ikke kompatibel med UL



<https://productinformation.guldmann.com/>

Skinner

*Bæredygtige materialer.
Dokumenteret kvalitet. Langsigtet værdi.
100% genanvendt aluminium.*

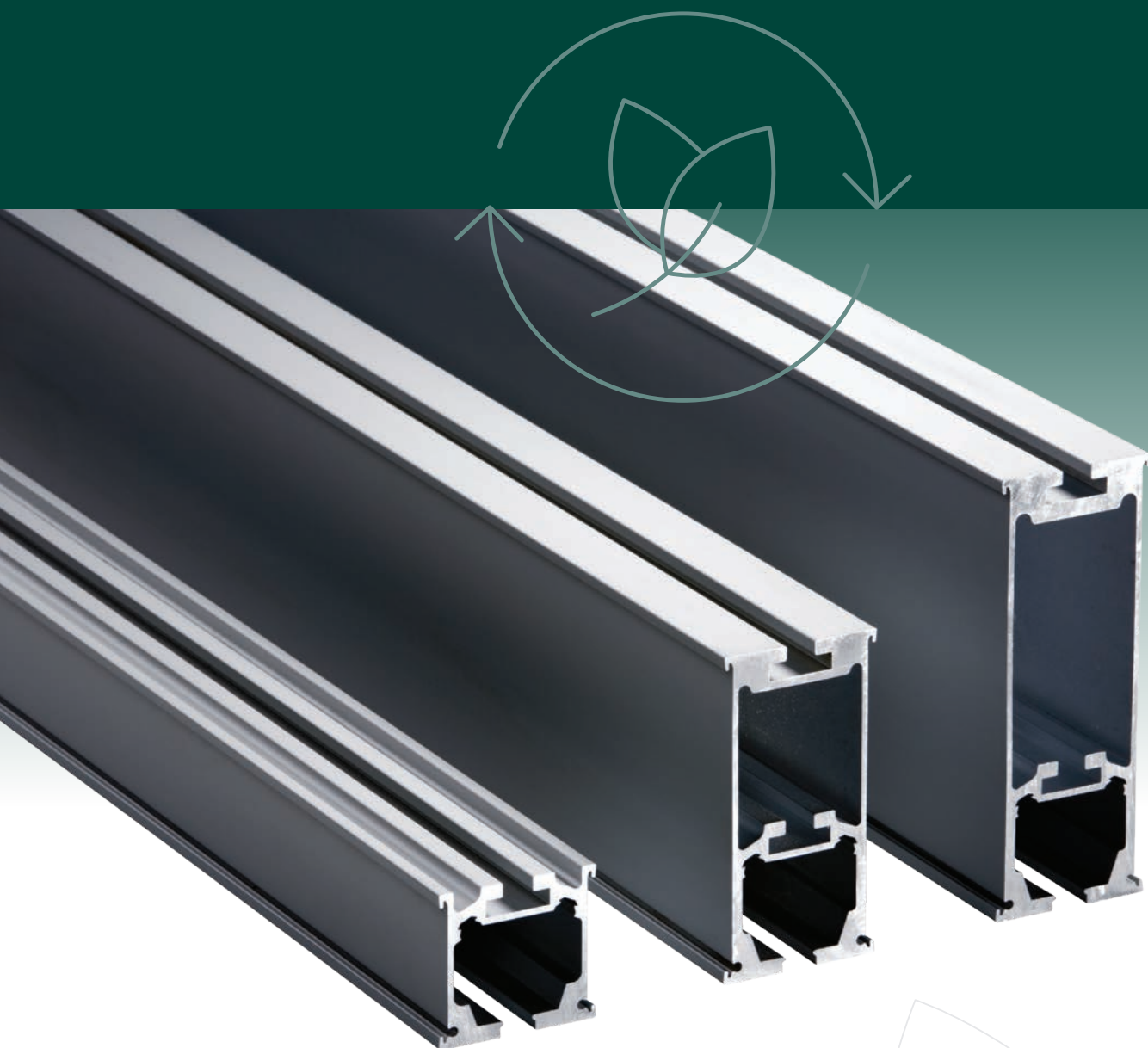

Guldmanns skinner er nu produceret udelukkende af 100% genanvendt aluminium, der reducerer CO² udledningen væsentligt sammenlignet med traditionelt aluminium. Denne markante reduktion understøtter vores engagement i bæredygtighed, uden at gå på kompromis med styrke, sikkerhed og holdbarhed.

Med lang levetid og reduceret miljøpåvirkning er Guldmanns skinner et ansvarligt valg, der sikrer høj holdbarhed, lavere risiko og dokumenterbare bæredygtighedsfordele gennem hele produktets levetid.

Skinner A, B, C

Skinner A/B/C								
Skinner A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Udskæring for løbekat	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
uden laderliner	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Udskæring for løbekat	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Skinner B	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Udskæring for Combi-lås – kort			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Udskæring for Combi-lås – lang			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Udskæring for løbekat			552541	552542	552543	552544	552545	552546
uden laderliner			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Udskæring for løbekat			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Skinner C	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laderliner					550365	550366	550367	550368
Udskæring for Combi-lås – kort					555630	555631	555632	555633
Udskæring for Combi-lås – lang					555626	555627	555628	555629
Udskæring for løbekat					552547	552548	552549	552550
uden laderliner					550683	550684	550685	550686
Udskæring for løbekat					557894	557895	557896	557897

ABC skinnerne fås ligeledes hvidmalede (RAL 9016). Ønskes dette tilføjes WH til varenummeret (xxxxxx-WH).

1



Skinner A/B/C

2



Skinnebuer (A skinner)

	Grå	Hvid
30°	550015	550015-WH
45°	550016	550016-WH
60°	550017	550017-WH
90°	550018	550018-WH
90° stor	550025	550025-WH



Specielle skinneudskæringer

Udskæring for Combi-lås

Se skema ovenfor



Udskæring for løbekat.

Se skema ovenfor

Skinner A+, B+, C+

Skinner A+/B+/C+									
Skinner A+									
	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	
med laderliner	5623 61	562362	562363	562364	562365	562366			
Udskæring for løbekat	562377	562378	562379	562380	562381	562382			
uden laderliner	562601	562602	562603	562604	562605	562606			
Udskæring for løbekat	562617	562618	562619	562620	562621	562622			
Skinner B+									
	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	
med laderliner			562367	562368	562369	562370	562371	562372	
Udskæring for løbekat			562383	562384	562385	562386	562387	562388	
uden laderliner			562607	562608	562609	562610	562611	562612	
Udskæring for løbekat			562623	562624	562625	562626	562627	562628	
Skinner C+									
	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	
med laderliner					562373	562374	562375	562376	
Udskæring for løbekat					562389	562390	562391	562392	
uden laderliner					562613	562614	562615	562616	
Udskæring for løbekat					562629	562630	562631	562632	

A+ B+ C+ skinnerne fås ligeledes hvidmalede (RAL 9016). Ønskes dette tilføjes WH til varenummeret (xxxxxx-WH).

3



Skinner A+/B+/C+


4



Skinnebuer (A+ skinner)

	Grå	Hvid
30°	562409	562409-WH
45°	562410	562410-WH
60°	562411	562411-WH
90°	562412	562412-WH
90° stor	562413	562413-WH

5

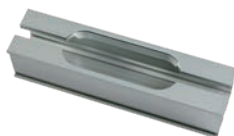

Udskæring for løbekat 250 mm

	Grå	Hvid
Skinne A	558926	558926-WH
Skinne B	558927	558927-WH
Skinne A+	562337	562337-WH
Skinne B+	562338	562338-WH

6



Udskæring for løbekat 620 mm

	Grå	Hvid
Skinne A	558928	558928-WH
Skinne B	558929	558929-WH
Skinne A+	562339	562339-WH
Skinne B+	562340	562340-WH

Vægskinner



7



Vægskinner – hvid

3 m.	560813
4 m.	560814
5 m.	560815
7 m.	560817

8



Vægskinner med ladeliner – hvid

3 m.	560803
4 m.	560804
5 m.	560805
7 m.	560807

9




Cover til vægskinne – hvid

3 m.	556013
4 m.	556014
5 m.	556015
7 m.	556017
100 m.	560752

GHZ skinne

10

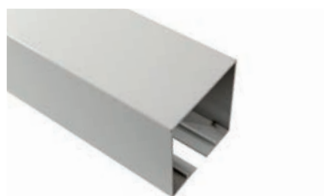

GHZ traverssskinne – hvid

3 m.	557703
4 m.	557704
5 m.	557705

Midi skinne

11



Midi skinne

12



Endedæksel til midi skinne

Grå.	124425
Hvid.	1244251

Midi skinne	3 m		4 m		5 m	
	Grå	Hvid	Grå	Hvid	Grå	Hvid
med laderliner	12223-7	12223-7-WH	12224-7	12224-7-WH	12225-7	12225-7-WH
Udskæring for løbekat	12223-1	12223-1-WH	12224-1	12224-1-WH	12225-1	12225-1-WH
uden ladeliner	12223	12223-WH	12224	12224-WH	12225	12225-WH

Skinner



13

Combi-lås

SWL 375 kg (Twin Hoist 500 kg) 555237

14



Drejeskive, elektrisk

	Grå	Hvid
255 kg	550663	550663-WH
– coated.	551430	551430-WH
375 kg	552882	552882-WH
– coated.	552984	552984-WH

15



Skiftespor, elektrisk, 250 kg

	Grå	Hvid
60° højre	553991	553991-WH
– coated.	551058	551058-WH
60° venstre.	553995	553995-WH
– coated.	551059	551059-WH
90° højre	553925	553925-WH
– coated.	554027	554027-WH
90° venstre.	553926	553926-WH
– coated.	554028	554028-WH

16



17



18



Skinnekryds

Fleksibel indretningsløsning med mobile vægge og foldedøre.

..... 554528

Løbekat til foldevæg

..... 554539

Løbekat til døre

..... 555261

Beslag til skinnesystemer


19



Vægbeslag

Grå.....550451
Hvid.....550471

20

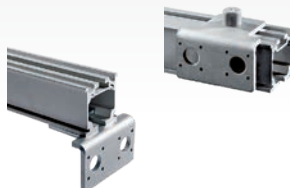

Vægbeslag

Grå.....550450
Hvid.....550472

21



Loftbeslag, standard

Grå.....550402
Hvid.....550433

22



Loftbeslag til skinnesamling

.....12448

23



Beslag til skinnesamling

.....12336

24



GH loftbeslag justerbart 5 mm til Combi-lås

Grå.....555330
Hvid.....555567

25



Loftbeslag nedhængt fri længde 250 mm

Grå.....550404
Hvid.....550494

26



Rosette Ø30 til nedhængte loftbeslag

.....550193

27



Loftbeslag nedhængt fri længde for lige skinne og bue

Længde Grå Hvid
250 mm 550498.....550499

28



Loftbeslag nedhængt fri længde, vinkelindstillelig

Længde Grå Hvid
250 mm 550412.....550476
500 mm 550413.....550477
1000 mm 550414.....550474
2000 mm 550415.....550475

Beslag til skinnesystemer

29



**Lofthbeslag nedhængt justerbart
for skinne og bue**

Længde	Grå	Hvid
250-450 mm	562015	562015-WH
451-650 mm	562016	562016-WH
651-850 mm	562017	562017-WH
851-1000 mm	562018	562018-WH
1001-1200 mm	562019	562019-WH
1201-1400 mm	562020	562020-WH
1401-1600 mm	562021	562021-WH
1601-1800 mm	562022	562022-WH
1801-2000 mm	562023	562023-WH

30



**Lofthbeslag nedhængt justerbart
fri længde for Combi-lås**

Længde	Grå	Hvid
316-520 mm	562060	562060-WH
521-720 mm	562061	562061-WH
721-920 mm	562062	562062-WH
921-1125 mm	562063	562063-WH
1071-1270 mm	562064	562064-WH
1271-1470 mm	562065	562065-WH
1471-1670 mm	562066	562066-WH
1671-1870 mm	562067	562067-WH
1871-2070 mm	562028	562028-WH

31



**Forlænger for nedhængte lofthbeslag
fri længde 400 mm**

563874

32



**Forlænger for nedhængt lofthbeslag fri
længde for Combi-lås 400 mm**

563876

33



**Cover til at skjule gevindet i det
justerbare nedhængte lofthbeslag**

562037

34



**Rosette Ø48/Ø52
til røret på det justerbare nedhængte
lofthbeslag**

562026

35



**Rosette Ø20
til gevindet på det justerbare
nedhængte lofthbeslag**

562024

Komponenter til skinnesystemer

36



Gipspladebeslag

SWL 255 kg

Hvid 550452

37



Gulvstolper

Hvid som standard, RAL 9016

uden fod 124841
med lav fod (150 mm) 124801
med høj fod (250 mm) 124811
føringsliste for gulvstolpe 1248031
føringsliste stor, hvid 556510

Grå som option, RAL 9006

uden fod 124844
med lav fod (150 mm) 124804
med høj fod (250 mm) 124814
føringsliste for gulvstolpe 1248034

38



Traversløbekat

Til rumdækkende systemer monteret under loftet. SWL 375 kg.

Grå 550076
Hvid 550491

39



Traversløbekat Forlænget 25 mm

Til rumdækkende systemer hvor parallelskinne er indbygget i loftet.

SWL 375 kg.
Grå 554189
Hvid 551327

40



Traversløbekat med kryds til Combi-lås

Skal bruges i rumdækkende systemer i parallelskinne tættest på Combi-låsen eller i systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen. SWL 375 kg.

Grå 550779
Hvid 555205

41



Traversløbekat med kryds til Combi-lås, forlænget 25 mm

Skal bruges i rumdækkende systemer i parallelskinne der er integreret i loftet og tættest på Combi-låsen eller i systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen. SWL 375 kg.

Grå 554526
Hvid 558664

42



Traversløbekat justerbar

SWL 375 kg
Grå 561762
Hvid 561762-WH

43



Traversløbekat justerbar nedhængt 25 mm

SWL 375 kg
Grå 561091
Hvid 561091-WH

Komponenter til skinneresystemer

44



Traversløbekat Heavy Duty

Til rumdækkende systemer monteret under loftet. SWL 500 kg.

Grå. 550078
Hvid. 550493

45



Traversløbekat Heavy Duty nedhængt 25 mm

Til rumdækkende systemer, hvor parallelskinneerne er indbygget i loftet. SWL 500 kg.

Grå. 554546
Hvid. 554548

46



Traversløbekat Heavy duty med kryds

Til rumdækkende systemer, hvor der er udhæng på traversskinnen. SWL 500 kg.

Grå. 559548
Hvid. 559549

47



Traversløbekat Heavy Duty med kryds nedhængt 25 mm

Til rumdækkende systemer, hvor parallelskinneerne er indbygget i loftet. SWL 500 kg.

Grå. 566040
Hvid. 566039


48



Traversløbekat – kort

. 561960

49

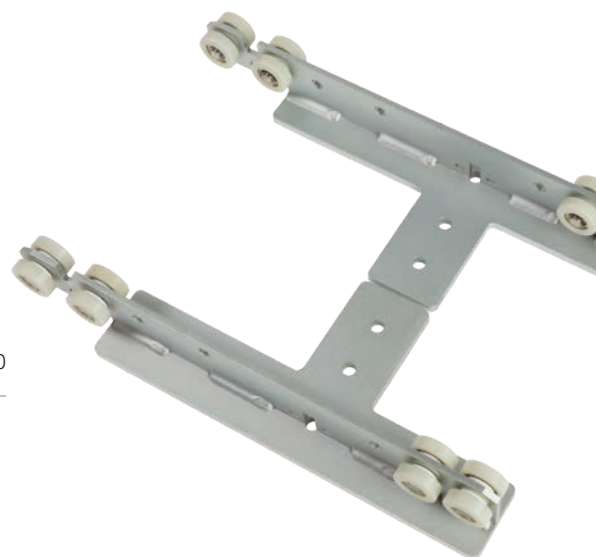

Travers løbekat kort, nedhængt 25 mm

Bruges når løftemodulet skal placeres i et skab. SWL 375 kg.

Sæt med 2 stk. (venstre og højre)

Grå. 561763
Hvid. 561763-WH

50



Traversløbekat lang

Til rumdækkende systemer, hvor traversskinnen er længere end 5 meter. SWL 400 kg.

Grå. 556106
Hvid. 555802

51



Traversløbekat lang, nedhængt 25 mm

Til rumdækkende skinneresystemer hvor parallel skinnerne er indbygget i loftet. SWL 400 kg.

Grå. 558102
Hvid. 560080

52



Traversløbekat lang kryds

SWL 400 kg

Grå. 559902
Hvid. 559902-WH

53



Køremotor

SWL 255 kg

til traversskinne B og C 562425

54



Traversløbekat til Mini, Midi, Maxi og Jumbo skinner

SWL 400 kg.

Grå. 561058

Komponenter til skinneresystemer

55



Traversløbekat til vægskinner B traverssskinne

Kan kun bruges i kombination med vægskinner og B skinne som travers.
Grå.....560790

56



Kit til C-traverssskinne til vægskinner

.....560720

57



Traversløbekat til vægskinner Midi traverssskinne

Hvid.....564100

58



Traversløbekat til GHZ

Kan kun bruges i kombination med vægskinner og GHZ skinne som travers.
Hvid.....556290

59



Løbekat for GH1 F

.....551165

60



Løbekat GH1 Q

.....552730

61



Løbekat GH1 F – gardinløsning

Løbekat der kan passere et mellemrum mellem to lige skinner (Afskærmningsgardin)
.....12776-8

62



Løbekat GH3 – gardinløsning

Løbekatten bruges i forbindelse med gardinløsninger, hvor løbekatten skal passere et mellemrum mellem to skinner.
.....550581

Komponenter til skinnesystemer

63



Løbekat GH3+ med vejemodul – gardinløsning

Løbekat der kan passere et mellemrum mellem to lige skinner (Afskærmningsgardin)

.....550582

64



Løbekat GH3+ til gardinløsning

Kan bruges i systemer med buer.

.....552911

65



Løbekat GH3 forlænget 25 mm

.....554081

66



Løbekat GH3 forlænget 50 mm

.....552503

67



Løbekat GH3 forlænget 80 mm

.....556730

68



Løbekat forlænget 25 mm for GH1

.....554082

69



Løbekat GH3 forlænget 25 mm 1 køremotor

.....554263

70



Twin løbekat til Combi-lås

.....564040

71



Løbekat GH3 til opladning i Mini, Maxi og Jumbo skinner

.....562635

72



Løbekat GH3 til opladning i Midi skinner

.....566003

73



Løbekat GH3 til Midi skinner

.....561180

74



Løbekat GH3 til Mini, Maxi og Jumbo skinner

.....552640

Komponenter til skinneresystemer

75



Ladekit for rumdækkende system travers løbekat

Til A, B, C, A+, B+ og C+ skinner

Standard	550094
Lang	563700

76



Ladekit for rumdækkende system travers løbekat til Midi skinne

	12384
--	-------

77



Ladekit til vægskinner med B + C traverssskinne

	560770
--	--------

78



Ladekit til vægskinner med Midi traverssskinne

	564107
--	--------

79



Ladekit til Mini, Maxi og Jumbo skinner

	563883
--	--------

80



Profiler til drejeskive

Grå	550755
Hvid	WH-550755

81



Profiler til skiftespor

60°	550282	550282-WH
90°	550283	550283-WH

82



Loftsprofil ende, skinne A+, B+, C+

Grå	562458
Hvid	562458-WH

83

Afstandsstykke, traverssskinne

	Grå	Hvid
15 mm	551077	551077-WH
20 mm	551078	551078-WH
30 mm	551079	551079-WH
35 mm	551096	551096-WH
40 mm	551080	551080-WH
50 mm	551081	551081-WH
60 mm	551082	551082-WH
70 mm	551083	551083-WH
80 mm	551084	551084-WH
90 mm	551085	551085-WH
100 mm	551086	551086-WH

Inkl. bolte og spacere



Komponenter til skinneresystemer

84



Ladeliner – A, B og C skinne

6 m.	550425
10 m.	550427
105 m.	561478

85

Ladeliner – vægskinne

4 m.	561447
10 m.	561448
130 m.	561461

86



Ladeliner – Midi skinne

3 m.	12277-3
4 m.	12277-4
5 m.	12277-5
6 m.	12277-6
7 m.	12277-7
8 m.	12277-8

87



Ladeliner connector + jordledning

.....	550401
-------	--------


88



Tilbehørskit – vægskinne

.....	560780
-------	--------

89

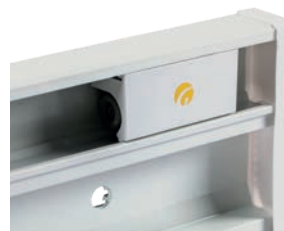

Ende cover, hvid – vægskinne

.....	560776
-------	--------

Endestop cover – vægskinne

.....	560773
-------	--------

90



Skinnesamlingssplit – vægskinne

.....	561446
-------	--------

91



Endestop

Grå.	12330
Hvid.	123301

92



Ladekit beskytter til forlængede løbekatte

.....	562580
-------	--------

93



Fjernbetjening, IR

til skiftespor/drejeskive/GH3.	935034
til Positions-lås.	935039

Håndbetjening med kabel

til skiftespor/drejeskive.	9350151
---------------------------------	---------

94



Vægkontakt – indbygget

til skiftespor/drejeskive.	9350471
---------------------------------	---------

Vægkontakt – vægmonteret

til skiftespor/drejeskive.	935049
---------------------------------	--------

Komponenter til skinnesystemer



95

Side cover

		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
Skinne A side cover	Grå	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	Hvid	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
Skinne B side cover	Grå			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	Hvid			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
Skinne C side cover	Grå					550258	550259	550260	550261	550765
	Hvid					550262	550263	550264	550265	550768

96



Endedæksel

	Grå	Hvid
Skinne A	550447	550463
Skinne B	550448	550464
Skinne C	550449	550465


97



Cover til løbekat

Grå	550570
Hvid	550584

98

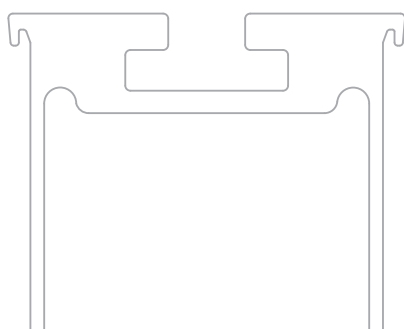

Top cover der dækker mellemrummet mellem skinnen og loftet

50 m	561411
100 m	561410

Komponenter til skinneresystemer

99



Positionslås – enkelt

Må ikke anvendes i systemer med buer, skiftespor og drejeskiver.

.....562421

100




Positionslås – rumdækkende

Positionslås – rumdækkende 562423

Positionslås – komplet system (rumdækkende og enkelt) 562424


101

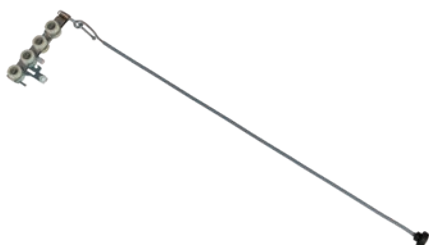

Positionslås – manuel til GH1 og GH3

.....562510

102

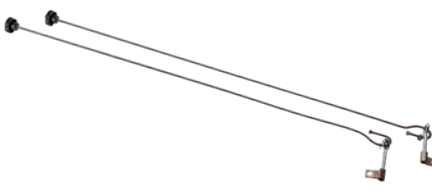

Bremsesæt til traversløbekat på aktivitetsskinne

.....121664

103



Ophængsøje til aktivitetsskinne SWL 205 kg

.....121662

104



Vægtvogn, elektrisk Inkl. vægtlodder, 550 kg

.....290880

105



Vægtvogn, manuel

Max 455 kg

inkl. 2 vægtlodder, 49,5 kg 290851

inkl. 17 vægtlodder, 300 kg 290850

106



Vægtlod 16,7 kg for manual vægtvogn

.....558468

Komponenter til skinneresystemer

107



Håndbetjening til forlænger kabel

GH3+	552300
GH3+ med køremotor	552307
GH3	552302
GH3 med køremotor	552301
GH1	552619
GH1 F	555903

108



Forlænger kabel til håndbetjening

GH3+	552303
GH3	552304
GH1	552620
GH1 F	555902

109



Docking station med strømforsyning

.....	559962
-------	--------

110



Strømforsyninger / transformere

Transformer AC, Klasse I	551468
Transformer AC, Klasse II	
230 V	561815
Transformer AC, Klasse II	
115 V	561825
Strømforsyning, GH1	551244

111



Udgangskabel – Klasse II transformer 5 m

.....	563886
-------	--------

112

Strømforsyningskabel – hvid

EU	UK	USA		1 m	3 m	5 m	
			EU	565800	565801	565802	
			UK	565806	565807	565808	
			USA		565804		

113

Strømforsyningskabel AC, Klasse II transformer – hvid

EU	UK	USA		0,35 m	1 m	3 m	5 m
			EU	565886	561840	561841	561842
			UK	565888	561846	561847	561848
			USA	565887	561843	561844	561845
AU	CAN			0,35 m	1 m	3 m	5 m
			AU	565889	561849	561850	561851
			CAN	565890	565891	565892	565893

Fritstående skinnesystemer



114

Fritstående rumdækkende skinnesystem

– højdejusterbart (foto)

Løftekapacitet max 350 kg

Højde min 2040 mm / max 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (længde 3200 mm^{x)} 555262

4 x 4 m (længde 4200 mm^{x)} 555570

Fritstående rumdækkende skinnesystem

– højde- og længdejusterbart

Løftekapacitet max 255 kg

Højde min 2040 mm / max 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (længde min 3200 mm / max 4200 mm^{x)} 554729

4 x 4 m (længde min 4200 mm / max 5200 mm^{x)} 557968

^{x)} Udvendige mål



115

Fritstående enkeltskinnesystem

– højde- og længdejusterbart

Løftekapacitet max 255 kg

Højde min 2020 mm / max 2820 mm^{x)}

2,0 m (længde min 2220 mm / max 3390 mm^{x)} 556000

2,5 m (længde min 2720 mm / max 3890 mm^{x)} 553000

3,0 m (længde min 3220 mm / max 4390 mm^{x)} 556297

^{x)} Udvendige mål



116

Dockingstation – fritstående skinnesystem

..... 564963



117

Swing lift II

Løftekapacitet max 205 kg

Længde 2,5 m

..... 17200

GL6 Mobile personløftere



1



GL6 Basic

Mobil personløfter med elektrisk breddeindstilling. Max løftekapacitet 155 eller 205 kg. Se skema side 36

2



GL6 Advanced

Mobil personløfter med elektrisk breddeindstilling. Max løftekapacitet 155 eller 205 kg. Se skema side 36

GLS5.2 Aktiv personløfter



3



4



5



GLS5.2

Aktiv personløfter med elektrisk
breddeindstilling. Max løftekapacitet 155
eller 205 kg. *Se skema side 36*

GLS5.2 Ståløftesejl

Støtter den øverste del af ryggen under
skuldrene ned til den nederste del af
ryggen.

Brug

- til personer, som kan stå, men ikke rejse sig.
- | | | | | | |
|-----|-------|---------|------------|----|---------|
| S/M | | 28336.. | (bælte M | .. | 281553) |
| L | | 28337.. | (bælte XL | .. | 281573) |
| XL | | 28339.. | (bælte 2XL | .. | 281583) |
| 2XL | | 28340.. | (bælte 3XL | .. | 281593) |

GLS5.2 Hoftestøttesejl

Støtter kroppens hofte-region.

Brug

- til personer, som kan stå, men som har tendens til at lade hoften glide tilbage.
- 28338

Varianter – GL6 Basic / GL6 Advanced og GLS5.2



GL6 Basic

Blysyrebatteri

Nemt at udskifte og mulighed for ekstern opladning.

..... 568872
Ekstern lader 568889




GL6 Advanced / GLS.2

Langtidsholdbart litium-ion-batteri

Nemt at udskifte og mulighed for ekstern opladning.

..... 561553
Ekstern lader 561556

Varenr.	Varenavn	Hjul		SWL		Løftehastighed
		100 mm	75 mm	155 kg	205 kg	
568771	GL6 Basic	x			x	25
568772	GL6 Basic	x		x		25
568773	GL6 Basic		x		x	25
568774	GL6 Basic		x	x		25
568775	GL6 Advanced	x			x	36
568776	GL6 Advanced	x		x		36
568777	GL6 Advanced		x		x	36
568778	GL6 Advanced		x	x		36
552200	GLS5.2 155 560 0000			x		x
556001	GLS5.2 205 560 0000				x	x

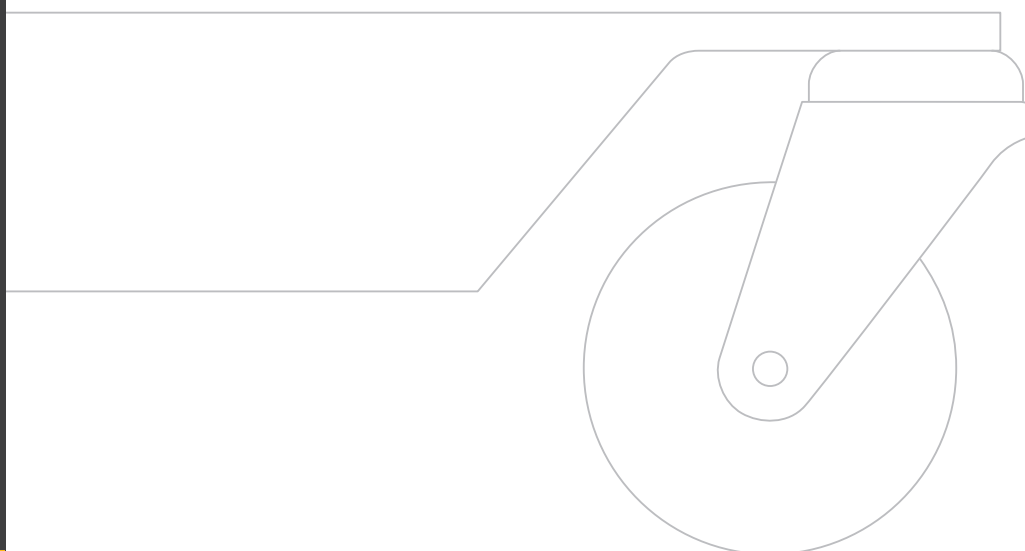

GTP1 – Forflytningsplatform



8

9



GTP1

GTP1 er en manuel forflytningsplatform der gør det let og enkelt at flytte stående og delvist selvhjulpne brugere. Max. vægtpacitet 175 kg.

.....560700

GTP1 Active Forflytningsbælte

Støtter overkroppen.

Brug

- personer som kan stå selv men har behov for ekstra støtte ved forflytning.

S 284141
M 284151
L 284161


Sejl og løftetilbehør



Guldmann sejl – en vifte af muligheder

Det er helt afgørende at anvende det korrekte sejl for at sikre effektiv pleje, komfort, værdighed og sikkerhed for brugeren, uden at gå på kompromis med plejepersonalets sikkerhed.

Du kan finde et sejl til næsten alle formål i det omfattende sortiment af sejl og løftetilbehør, som kan anvendes med såvel løftemoduler som mobile personløftere.

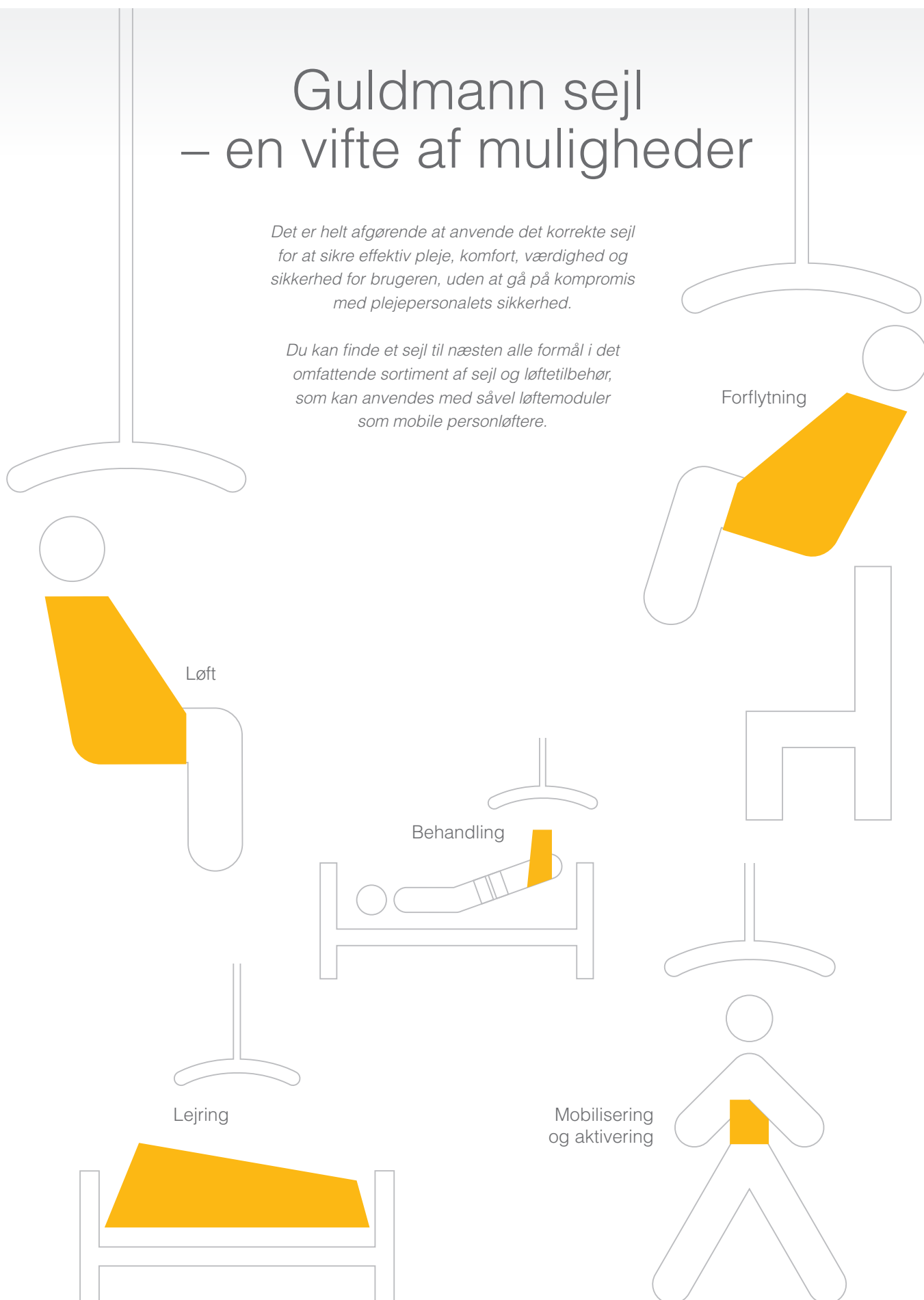

ABC Sejl – Active

1



2



Active Trainer

Støtter omkring brystkasse og øvre ryg ved skulder. Med benstropper støtter den desuden omkring hoften. Hindrer, at brugeren "glider igennem" sejlet.

Brug

- til personer med nedsat balance, men med ståfunktion – brugeren skal have en ståfunktion i benene
- støtte ved stå- og gangtræning
- tidlig mobilisering.

..... 2830xx



Active Micro Plus

Støtter overkroppen (fra bækkenet til under skuldrene) rundt om brystkassen og den øverste del af låret. Den elastiske støtte strammes omkring brystkassen.


Brug

- løft af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat funktion i overkroppen og over hofteled og lårben
- situationer, hvor sejlet skal være let at sætte på og tage af
- løft til og fra siddende stilling
- situationer, hvor en stor åbning i bunden er påkrævet, såsom til toiletbesøg og hygiejne.

..... 281xxx



ABC Sejl – Active

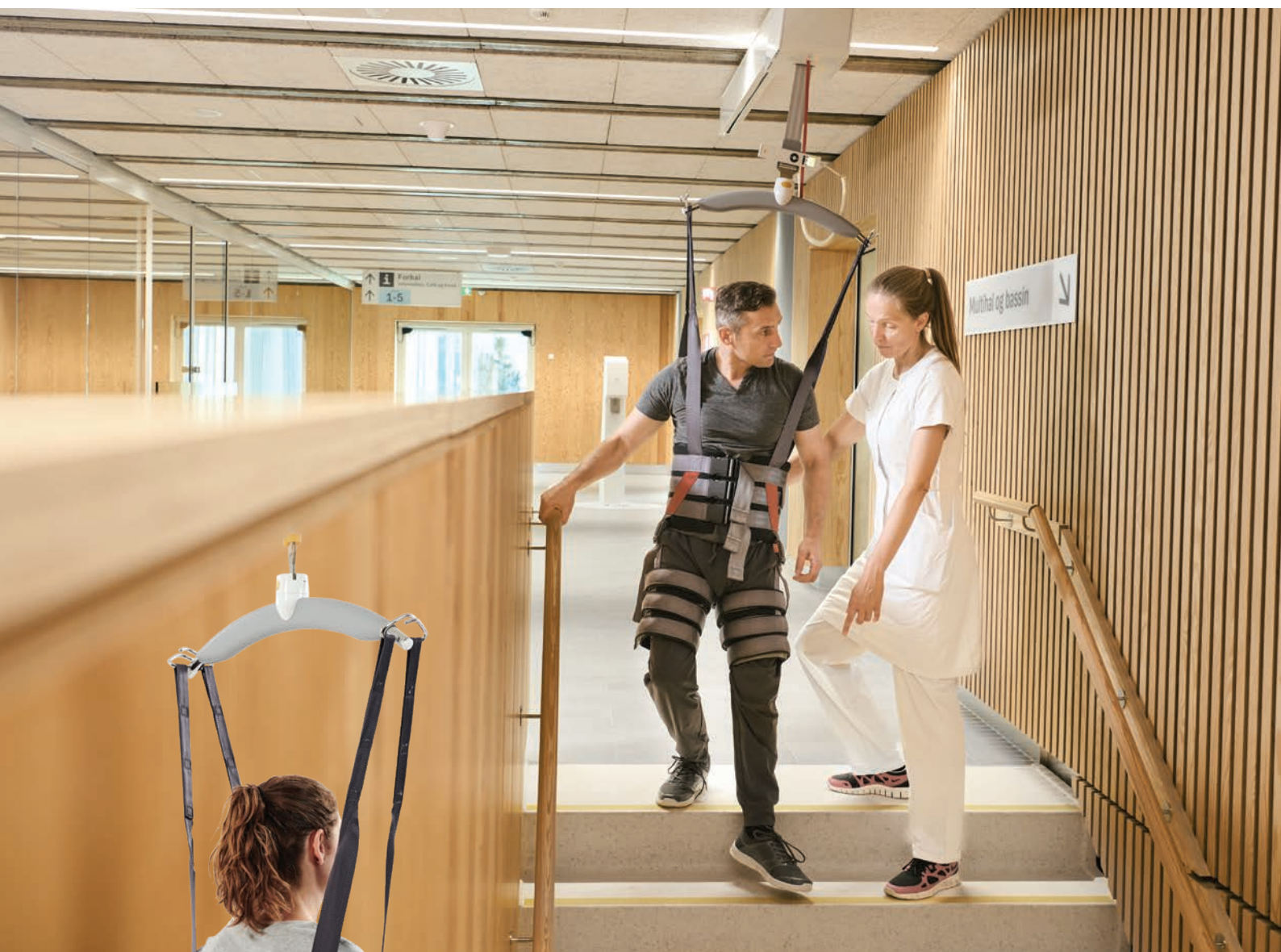

3



Gait Trainer

Støtter overkroppen og har lårmanchetter, der giver en god komfort. Der er yderligere komfort grundet spacer materialet.

Brug

- personer som har tilstrækkelig styrke i benene til at kunne stå oprejst, men har behov for støtte og tryghed under træningen på grund af nedsat balance
- gangtræning • støtte til stående og oprejste holdninger • balance træning og tidlig mobilisering.



Sejlet er blandt andet designet til brug sammen med Guldmann Trainer modul.
..... 2832xx

ABC Sejl – Basic

4



5



6



Basic Basic

Støtter hele kroppen, dog ikke hovedet.

Brug

- ved løft af personer med kontrol over hoved, men nedsat kontrol over overkrop
- ved løft til og fra siddende og halvsiddende stilling – fra f.eks. seng og kørestol.

..... 270xxx



Basic Low

Støtter omkring lænderyg og hofte.

Brug

- ved løft af personer, der har kontrol over hoved og overkrop
- ved løft til og fra siddende stilling fra f.eks. stol og seng.

..... 271xxx



Basic High

Støtter hele kroppen samt hoved.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop
- ved løft til og fra liggende stilling – fra f.eks. seng og gulv
- kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling.

..... 272xxx



ABC Sejl – Basic

7



8



Basic Shell

Støtter hele kroppen og hovedet, med mulighed for at have armene udenfor sejlet.

Brug

- løft af personer med nedsat kontrol over deres krop og hoved
- løft til og fra liggende stilling (seng, gulv m.v.)
- løft til og fra siddende stilling
- løftesejlet kan blive i kørestolen.

..... 2750xx



Basic Comfort High

Støtter hele kroppen og hovedet. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned, når brugeren sidder i sejlet. Sejlet giver ekstra støtte omkring hofte og lår. Kan anvendes med delte benstropper eller med benstropperne lagt over hinanden. Dette giver god støtte for den amputerede bruger.

Brug

- løft af personer med nedsat kontrol over deres krop
- løft til og fra liggende stilling (seng og gulv osv.)
- løft til og fra en siddende stilling
- personer som har brug for ekstra støtte omkring hofte og lår samt i situationer, hvor det er vigtigt at lårbenet forbliver i en neutral position.

..... 2770xx



ABC Sejl – Custom

9



10



11



Sit-On II

Støtter lår og ryg. Brugeren sidder på grund af overvægt eller fordi de sidder i en specialtilpasset kørestol.

Brug

- personer som bliver længe i sejlet på grund af overvægt eller fordi de sidder i en specialtilpasset kørestol.

..... 2970xx



Sit-On High II

Støtter lår, ryg og hoved. Sejlets design forhindrer lårdelen i at rotere indad ved løft. Nakkestøtten kan justeres, så den passer til brugerens behov og den kan foldes væk, når brugeren sidder i kørestolen.

Brug

- personer, som bliver længe i sejlet på grund af overvægt eller fordi de sidder i en specialtilpasset kørestol.

..... 2980xx



Custom Amputee

Støtter hele kroppen op til og med skulderparti samt omkring bækken.

Brug

- til løft af personer, der har en ensidig eller dobbeltsidig amputation over knæled
- til løft af personer, hvor begge ben er helt bortamputeret
- ved løft fra liggende stilling støttes hovedet med nakkestøtte.

..... 2900xx



ABC Sejl – Custom

12



13



14



Sit-On Comfort

Støtter lårben og ryg. Brugeren sidder i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til personer, som skal blive siddende i sejlet pga. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader brugerens krop at "ånde" – sejlet rulles på i liggende stilling, men anvendes ved løft til og fra siddende stilling i seng og kørestol.

..... 2930xx



Sit-On Comfort High

Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned når brugeren forbliver siddende i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til personer, som skal blive siddende i sejlet pga. overvægt eller specialtilpasset kørestol.

Øvrige funktioner

- materialet tillader brugerens krop at "ånde" – sejlet rulles på i liggende stilling og anvendes, når man skal løfte til og fra liggende stilling – hovedstøtten kan rulles sammen efter behov.

..... 2940xx



Sit-On Comfort High Hygiene

Designet med en åbning i bunden af sejlet. Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned. Sejlets design forhindrer lårbenet i at rotere indad under løftet. Øger komfort grundet spacer materialet.

Brug

- forflytning fra seng til toilet eller toiletstol. Det anbefales ikke at bruge Sit-On Comfort High Hygiejne på samme måde som et traditionelt Sit-On sejl i en kørestol eller lignende, på grund af risikoen for tryk ved sejlets hygiejne åbning.

Øvrige funktioner (se Sit-On Comfort High)

..... 2941xx

ABC Sejl – Kids

15



16



17



Active Vest – Kids

Støtter krop og bækken. Vidden er justerbar.

Brug

- til børn med nedsat balance, men med ståfunktion • barnet skal have en ståfunktion i benene • støtte ved stå- og gangtræning samt leg.

..... 2831xx



Active Micro Plus – Kids

Støtter overkroppen (fra bækkenet til under skuldrene) rundt om brystkassen og den øverste del af låret. Støttebæltet strammes om brystkassen.

Brug

- til løft af børn med hovedkontrol, med nedsat funktion i overkroppen og over hoftelod og lårbæ • til enkelte børn med ekstensionsspasmer • i situationer, hvor sejlet let skal kunne tages af og på • til løft fra siddende stilling • i situationer hvor der er behov for en stor åbning i bunden af sejlet for eksempel til toiletbesøg og hygiejne.

..... 281xxx



Active Trainer – Kids

Støtter omkring brystkasse og øvre ryg ved skulder. Aftagelige benstropper støtter desuden omkring hoften. Hindrer, at barnet "glider igennem" sejlet.

Brug

- til børn med nedsat balance, men med ståfunktion • støtte ved stå- og gangtræning • støttet stående og oprejst position • tidlig mobilisering.

..... 2830xx



ABC Sejl – Kids

18



19



20



Gait Trainer – Kids

Støtter overkroppen og har lårmanchetter, der give god komfort og sikkerhed. Der er yderligere komfort grundet Spacer materialet.

Brug

- til børn, der har tilstrækkelig styrke i benene til at stå oprejst, men har behov for støtte grundet nedsat balance
- gangtræning
- støtte til stående og oprejste positioner
- balancetræning og tidlig mobilisering.

Søjlet er blandt andet designet til brug sammen med Guldmann Trainer Module.
..... 2832xx



Basic Basic – Kids

Støtter hele kroppen, dog ikke hoved. Det indvendige bælte giver kroppen ekstra støtte.

Brug

- til børn med kontrol over hovedet med fuld eller nedsat kontrol over kroppen
- ved løft til og fra siddende og halvsiddende stilling (seng og kørestol m.m.).

..... 270xxx



Basic High – Kids

Støtter hele kroppen samt hoved. Det indvendige bælte giver kroppen ekstra støtte.

Brug

- til børn med nedsat kontrol over hoved og krop
- ved løft til og fra liggende stilling (seng, omklædningsbænk og gulv m.m.)
- ved løft til og fra siddende stilling.

..... 272xxx



ABC Sejl – Kids

21



22



Sit-On II – Kids

Støtter lår og ryg. Barnet sidder på sejlet. Sejlets design hindrer lårbenet i at rotere indad ved løft.

Brug

- til børn, der skal blive siddende i sejlet fordi de sidder i en specialtilpasset kørestol eller til børn der har behov for jævnlige at blive løftet.

..... 2970xx



Sit-On II High – Kids

Støtter lår, ryg og hoved. Sejlets design hindrer låret i at rotere indad under løft. Hovedstøtten kan justeres så den passer til det enkelte barns behov og den kan foldes væk, når barnet sidder i kørestolen.

Brug

- til børn, der skal blive siddende i sejlet fordi de sidder i en specialtilpasset kørestol eller til børn der har behov for jævnlige at blive løftet.

..... 2980xx



ABC Sejl – Kids

23



24



25



Sit-On Comfort – Kids

Støtter lårben og ryg. Barnet sidder i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til børn som skal blive siddende i sejlet p.g.a. specialtilpasset kørestol, eller som jævnligt har behov for at blive løftet.

Øvrige funktioner

- materialet tillader kroppen at ånde
- sejlet lægges på i liggende stilling, men bruges til løft og forflytning til og fra siddende stilling i seng eller kørestol.

..... 2930xx



Sit-On Comfort High – Kids

Støtter lårben, ryg og hoved. Den justerbare hovedstøtte kan foldes ned når barnet forbliver siddende i sejlet. Designet på sejlet forhindrer at lårbenene roterer indad under løftet. Øget komfort p.g.a. Spacer materialet.

Brug

- til børn, der skal blive siddende i sejlet fordi de sidder i en specialtilpasset kørestol eller til børn der har behov for jævnligt at blive løftet.

Øvrige funktioner

- materialet tillader kroppen at ånde
- sejlet lægges på i liggende stilling, men bruges til løft og forflytning til og fra liggende stilling.

..... 2940xx



Vest for Standing Shell – Kids

Støtter hoved og ryg.

Brug

- til løft af barnet fra liggende til stående position
- bruges sammen med Standing Shell som støtte til en oprejst stilling.

..... 2835xx

Bariatri sejl

Sejl og løfteilbehør



Se instruktionsvideo ▶

Bariatri sejl

26



Gait Trainer Bariatric, 500 kg

Giver støtte til bækken og maveregion.

Brug

- til bariatriske brugere. Støtter brugeren i stående position, maksimal komfort og støtte.

Standard 283180
Large 283100



27



Basic High Bariatric, 500 kg

Støtter hele kroppen samt hoved.


Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop
- ved løft til og fra liggende stilling – fra f.eks. seng og gulv
- kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling

3XL standard 2720913
4XL standard 2720914
5XL standard 2720916



Bariatri sejl

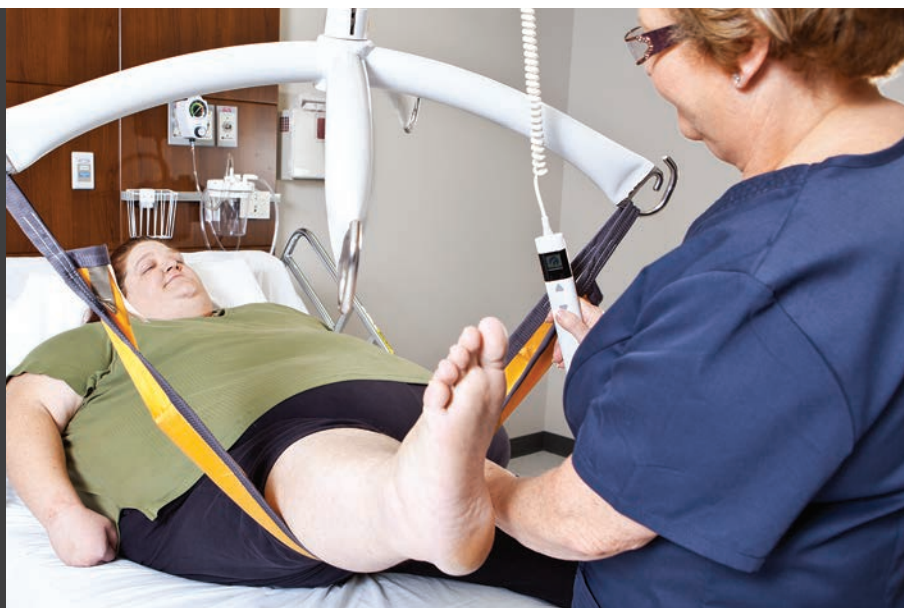

28



Bensejl

Bruges i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer.

Leveres i kasse á 10 stk. 28650



29




Pannus Support

Anvendes til at støtte og holde en bariatrisk persons panniculus / mave i forbindelse med eksempelvis hygiejne eller hudpleje opgaver. Afhjælper at skulle løfte / holde personens panniculus / mave manuelt

Brug • til bariatriske personer med en stor pannuculus / mave – hygiejne / hudpleje opgaver liggende i sengen.

. 28660

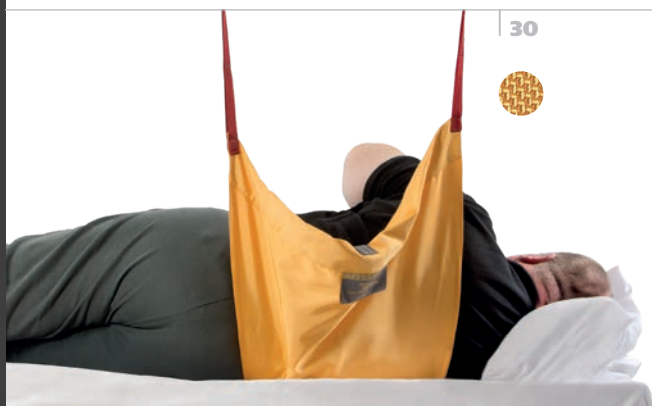

30



Twin Turner Bariatric

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muligt at vende brugeren fra side til side uden at flytte sejlet. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud.

. 28760

31



Længde	Bredde
2190 mm	1630 mm



Repositioneringssejl Bariatric, 500 kg

Et sejl til brug i forbindelse med skiftning af sengetøj, efterlades under patienten klar til brug ved plejeopgaver.

Brug • placering i sideleje • repositionering af bruger i seng • ved løft af hoved og krop til halvt siddende stilling • rygliggende forflytninger til andre flader såsom seng eller bære • og fuldt løft for vejning eller skift af lagen.

. 284656

Leveres i kasse á 5 stk.

Engangssejl



Til effektive og hygiejniske løfterutiner

Guldman engangssejl er ideel til situationer, hvor der er behov for ekstra høj hygiejne standard på grund af infektionsrisiko. Engangssejl er beregnet til én enkelt patient og bør kasseres efter patientudskrivning eller, hvis det bliver snavset.

Engangssejl

32



33



34



Engangssejl High, 205 kg

Støtter hele kroppen inklusiv hoved.
Samme design som Guldmann Basic High sejl.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv
- kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af personer fra alle typer møbler samt gulv.

Materiale

Polypropylene
Leveres i kasse á 10 stk. 2836xx



Engangssejl High – Kids, 205 kg

Støtter hele kroppen inklusiv hoved.
Samme design som Guldmann Basic High – Kids sejl.

Brug

- ved løft af børn uden kontrol af hoved og krop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv • kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af børn fra alle typer møbler samt gulv.

Materiale

Polypropylene
Leveres i kasse á 10 stk. 2836xx



Engangssejl High Bariatric, 500 kg

Støtter hele kroppen inklusiv hoved.
Samme design som Guldmann Basic High sejl.

Brug

- ved løft af personer, der ikke har kontrol over hoved og overkrop • ved løft til og fra liggende stilling – f.eks. seng og gulv
- kan anvendes ved løft til og fra siddende stilling – løft og forflytning af personer fra alle typer møbler samt gulv.

Materiale

Polyester
Leveres i kasse á 10 stk. 2836xx



Engangssejl

35



36



37



Engangssejl Comfort High, 255 kg

Støtter hele kroppen. Giver ekstra støtte omkring hofte og lår. Kan bruges med delte benstropper eller med benstropperne lagt over hinanden, hvilket giver god støtte for den amputerede bruger. Samme design som Guldmann Basic Comfort High sejl. (se side 39).

Brug

- løfter personer med begrænset kontrol over kroppen
- løfter til og fra siddende position
- personer som har behov for ekstra støtte omkring hofte og lår + i situationer, hvor det er vigtigt, at lårbæltet forbliver i en neutral position.

Materiale

Polyester

Leveres i kasse á 5 stk 2770xx



Engangssejl Micro Plus, 205 kg

Støtter overkroppen (fra bækkenet til under skuldrene) rundt om brystkassen og den øverste del af låret. Det elastiske støttebælte strammes omkring brystkassen.

Brug

- løft af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat funktion i overkroppen og over hofteled og lårbælt
- situationer, hvor sejlet skal være let at sætte på og tage af
- løft til og fra siddende stilling
- situationer, hvor en stor åbning i bunden er påkrævet, såsom til toiletbesøg og hygiejne.

Materiale

Polyester

Leveres i kasse á 5 stk 2815xx



Engangs Gait Trainer, 205 kg

Støtter omkring bryst og skulderparti. Benstropperne giver støtte omkring hofteområdet og forhindrer at brugeren glider ud af sejlet.

Brug

- personer med nedsat balance men med tilstrækkelig styrke i benene til at kunne stå oprejst
- gangtræning
- stående og oprejst
- tidlig mobilisering.

Materiale

Polyester

Leveres i kasse á 5 stk 2835xx



Engangssejl



Standard



Bariatric

38

Engangs Repositioneringssejl, 500 kg

Bruges som en del af sengelinnedet i sengen. Efterlades under patienten; klar til brug ved plejeopgaver. Samme design som Guldmann Repositioneringssejl.

Brug

- til brug ved sidelejrning, repositionering af patient i sengen
- løft af hoved og krop til halvt siddende stilling
- rygliggende forflytning til andre flader som seng eller bære
- fuldt løft fra seng for f. eks. vejning eller skift af sengetøj.

Materiale

Polyester

Standard 284555

Bariatric 284556

Leveres i kasse á 10 stk.

	Længde	Bredde
Standard	2190 mm	1250 mm
Bariatric	2190 mm	1630 mm

39



Engangs Horisontalt løftesejl, 350 kg

Støtter hele kroppen.

Brug

- Løft af personer i horisontal position.

Materiale

Polyester

..... 284631

Leveres i kasse á 10 stk

40



Engangssejl OR

Støtter overkroppen ved forflytning til og fra operationsleje i en horisontal position.

Brug

- sejlets længde og design gør det yderst velegnet til operative indgreb i patientens nederste del af kroppen, som for eksempel gynækologiske eller urologiske indgreb.

Material

Polyester

Medium 284851

Large 284861

Løftestroppe inkl. karabinhager . . . 284801

Leveres i kasse á 10 stk

Engangssejl

41



Engangs Bensejl II

Anvendes, hvor tunge ben skal løftes f.eks. i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer. Samme design som Guldman Ben sejl.

Materiale

Polypropylene
Leveres i kasse á 10 stk. 286501

42



Engangssejl med multistøtte

Støtter den løftede del af kroppen, overkroppen, bækken, ben eller arme.

Brug

- situationer, hvor dele af kroppen er nødt til at blive løftet eller støttet, f.eks. til placering af røntgenapparat.

Materiale

Polyester
. 284223

43



Engangs Twin Turner II

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af patientens hud. Samme design som Guldman Twin Turner.

Materiale

Polypropylene
Standard 287501
Large 287511
Leveres i kasse á 10 stk.

44



Engangs Twin Turner Bariatric

Bruges til at placere en patient i lateral position. Muliggør placering af sejl under patienten uden at skulle rulle eller flytte patienten. Sejlets lille overflade gør det muligt at foretage hudpleje, undersøgelse og behandling. Samme design som Guldman Twin Turner.

Materiale

Polyester
One size 287521
Leveres i kasse á 10 stk.

Sejl og løftetilbehør



Sejl og løftetilbehør

ABC Sejl		Kids	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
		2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14	10 - 16								
ACTIVE														
Active Micro Plus	polyester		281001	281011	281021		281531	281541	281551	281561	281571	281581		
Active Trainer	polyester		283001	283011	283021		283031	283041	283051	283061	283071	283081		
Gait Trainer	Spacer		283201	283211	283221		283231	283241	283251	283261	283271	283281		
BASIC														
Basic Basic	polyester		270001	270011	270021		270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{x)}	
Basic Basic	net		270103	270113	270123		270133	270143	270153	270163	270173	270183		
Basic Low	polyester						271031	271041	271051	271061	271071	271081		
Basic Low	net						271133	271143	271153	271163	271173	271183		
Basic High	polyester		272001	272011	272021		272031	272041	272051	272061	272071	272081		
Basic High	net		272103	272113	272123		272133	272143	272153	272163	272173	272183	272193	
Basic Shell	net						275032	275042	275052	275062	275072			
Basic Comfort High	polyester						277031	277041	277051	277061	277071	277081		
Basic Comfort High	net						277032	277042	277052	277062	277072	277082		
CUSTOM														
Sit-On II	net		297001	297011			297031	297041	297051	297061	297071			
Sit-On High II	net		298001	298011			298031	298041	298051	298061	298071	298081	298091	
Sit-On Comfort	Spacer		293001	293011			293031	293041	293051	293061	293071			
Sit-On Comfort High	Spacer		294001	294011			294031	294041	294051	294061	294071	294081	294091	
Sit-On Comfort High Hygiene	Spacer						294131	294141	294151	294161	294171			
Custom Amputee	polyester						290031	290041	290051	290061	290071			
Active Vest Kids ^{xx)}	polyester	2831000	283101	283111		283121								
Vest for Standing Shell ^{xx)}	polyester			283511		283521	283531							


Max løftekapacitet for alle Guldmann ABC sejl: 255 kg

x) Max løftekapacitet for Basic Basic 3XL: 500 kg


xx) Max løftekapacitet for Active Vest Kids / Vest for standing Shell: 100 kg

Engangssejl		Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
		6 - 10								
Engangssejl Micro Plus	polyester		281535	281545	281555	281565	281575	281585		
<i>Leveres i kasse á 5 stk.</i>										
Engangssejl Gait Trainer	polyester			283545	283555	283565	283575	283585		
<i>Leveres i kasse á 5 stk.</i>										
Engangssejl High	polypropylene	283615	283635	283645	283655	283665	283675	283685		
<i>Leveres i kasse á 10 stk.</i>										
Engangssejl High Bariatric	polyester						283672	283682	283692	
<i>Leveres i kasse á 10 stk.</i>										
Engangssejl Comfort High	polyester		277035	277045	277055	277065	277075	277085		
<i>Leveres i kasse á 5 stk.</i>										

For max løftekapacitet se under det specifikke engangssejls beskrivelse side 48-49.

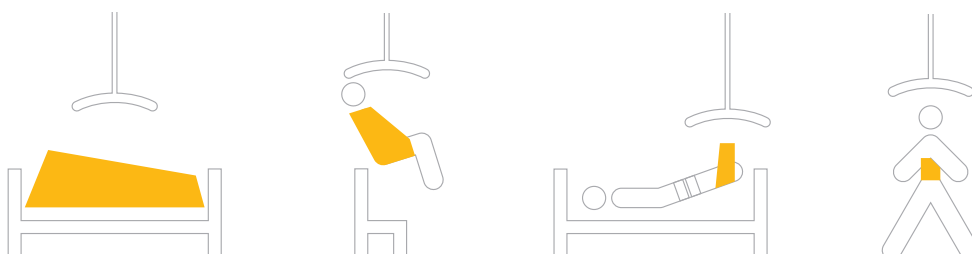

Størrelser og materialer

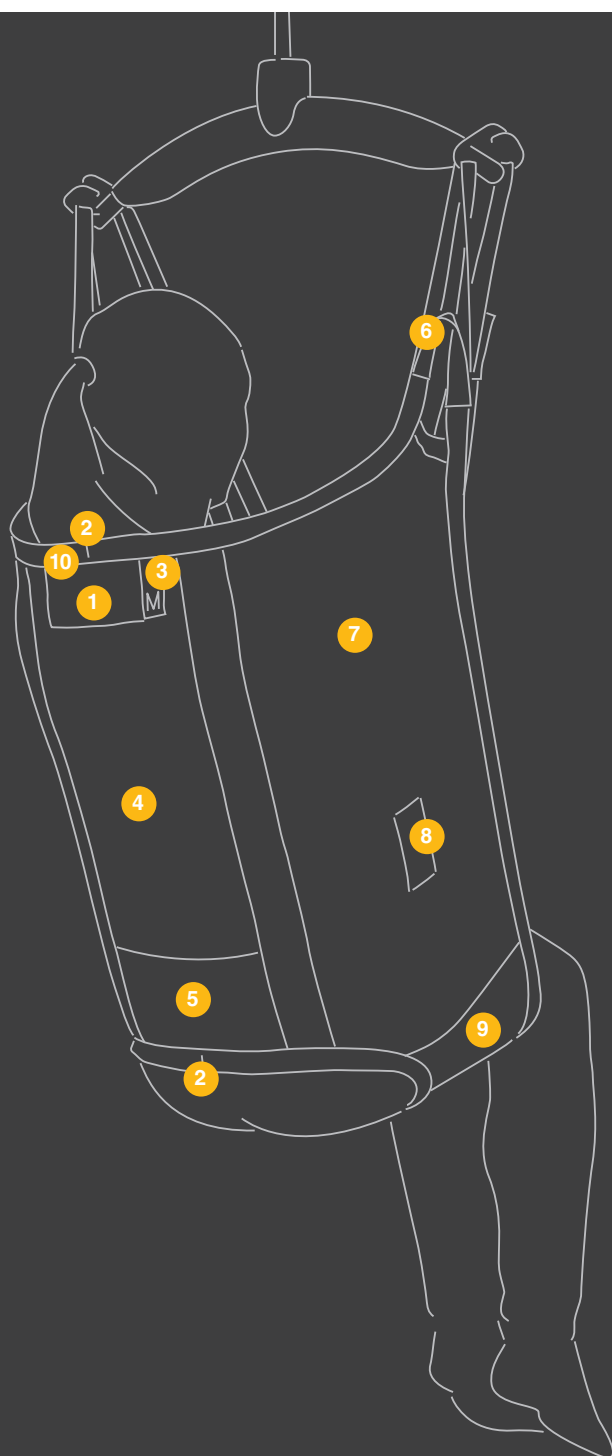

- ① **Informationslabel**
Alt det hjælperen har brug for at vide (type af sejl, størrelse, maksimal løftekapacitet, vaskeanvisninger, QR-kode med instruktionsvideo)
- ② **Markering af midtpunkt**
- ③ **Størrelseslabel**
Gør det nemt og overskueligt at finde den rigtige størrelse sejl.
- ④ **Polstring i ryg**
På modeller med lille rygflade for at øge komforten.
- ⑤ **Styrelomme**
Alle Basic-sejl er forsynet med en „styrelomme“, der gør det let at anbringe sejlet rigtigt.
- ⑥ **Farvede stropper**
De farvede stropper sikrer et symmetrisk løft.
- ⑦ **Materiale**
Smudsafvisende polyester er karakteriseret ved dets styrke og fleksibilitet.
- ⑧ **Kobling til hjælpestrop**
Der er mulighed for at anvende hjælpestropper.
- ⑨ **Polstring på ben**
Alle sejl med delte benstropper har polstring på ben. Nemmere at lægge på – behageligt at have på. Forhindrer at benstrop snor sig.
- ⑩ **RFID-tag**
– se mere side 65

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



OEKO-TEX®


Hos Guldmann afspejler vores løftesejl et stærkt engagement i bæredygtighed. Vi anvender holdbare og genanvendelige materialer som polyester og polypropylen med en lavere miljøpåvirkning i overensstemmelse med Higg Materials Sustainability Index.

Alle tekstilleverandører er certificeret i henhold til OEKO-TEX® og bluesign®, hvilket sikrer høje miljø- og sikkerhedsstandarder på tværs af vores sortiment af løftesejl.

Størrelser og materialer

Guideline for valg af sejlstørrelse

Alle mål i cm

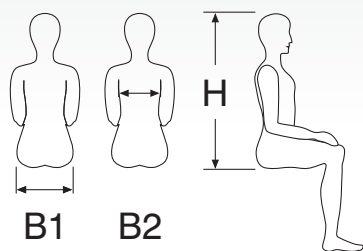

Str. / cm	B1	B2 ^{x)}	B2 ^{xx)}	H	
Kids 2-4			46 - 54		
Kids 4-6	25 - 30	55 - 90	50 - 65	45 - 60	
Kids 6-10	28 - 33	60 - 95	51 - 72	55 - 70	
Kids 10-14	31 - 36	65 - 100		68 - 80	
Kids 10-16			56 - 75		
XS	33 - 37	70 - 105		75 - 82	
S	36 - 40	75 - 110		80 - 87	
M	39 - 43	80 - 120		85 - 92	
L	42 - 46	90 - 130		90 - 97	
XL	45 - 49	100 - 140		95 - 102	
2XL	48 - 54	110 - 150		95 - 102	
3XL	54 - 58			95 - 102	
4XL	57 - 63			95 - 102	
5XL	62 - 73			95 - 102	

B2 = Brystmål

x) Guideline for valg af Active Trainer og Gait Trainer

xx) Guideline for valg af Active Vest Kids

Vaskeanvisning

ABC Sejl



Tåler normal maskinvask ved angiven temperatur



Tåler ikke blegemidler




Tåler tørring i tørretumbler ved lav temperatur, max 60°C



Tåler ikke stryging

Engangssejl DO NOT WASH

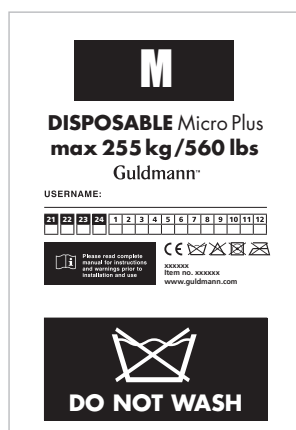


Læs mere på
www.guldmann.dk

Alle engangssejl er udstyret med en label, hvor ordene "DO NOT WASH" fremgår. Hvis sejlet bliver vådt ændres teksten til en advarsel; "DO NOT USE" som en ekstra


sikkerhed. Engangssejl anvendes hvor hygiejne er særligt vigtigt og hvor der er en infektionsrisiko.

Materiale

OEKO-TEX®
STANDARD 100

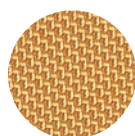

Standard
Polyester

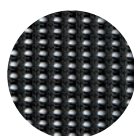

Net
Polyester



Spacer
Polyester




Net
Polyester



Engangs
Polyester



Engangs
Polypropylene

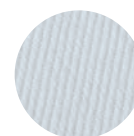

TENCEL®
Polyester

Vending og håndtering



45



Positioneringssejl

Positionerings sejlsystemet letter processen med at vende en patient i sideleje eller bugleje, f.eks. ved forberedelse til operation eller i forbindelse med undersøgelser. Anvendelse af sejlet i kombination med loftliften forebygger friktion og forskydning af patientens hud og væv, samtidig med at det forbedrer arbejdsmiljøet for plejepersonalet.


Positioneringssejl. 284226

Buglejringsæt

. 284225

Buglejrings sættet består af:
2 x Positioneringssejl, 284226
2 x Multi Support, 284223
1 x Sikkerhedsstrop, 284222

Vending og håndtering

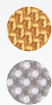

	Længde	Bredde
Standard	2190 mm	1250 mm
Kort	1350 mm	1250 mm



46

Repositioneringssejl, 500 kg

Et sejl til brug i forbindelse med skiftning af sengetøj. Efterlades under personen klar til brug ved plejeopgaver.

Brug

- i forbindelse med placering af person i sideleje, repositionering af personen i sengen, ved løft af hoved og krop til halvsiddende stilling, rygliggende forflytninger til andre flader såsom seng eller bære, eller i forbindelse med skift af lagen.

Materiale

Standard, polyester (foto) 28465
Kort, polyester 284653
Standard, net (grå) 284651
Leveres i kasse á 10 stk.



	Længde	Bredde
One size	1990 mm	1030 mm

47

Repositioneringssejl, 255 kg

Et sejl til brug i forbindelse med skiftning af sengetøj. Efterlades under personen klar til brug ved plejeopgaver.

Brug

- i forbindelse med placering af person i sideleje, repositionering af personen i sengen, ved løft af hoved og krop til halvsiddende stilling, rygliggende forflytninger til andre flader såsom seng eller bære, eller i forbindelse med skift af lagen.

Materiale

Spacer/polyester 284659
Leveres i kasse á 5 stk.



	Længde	Bredde
One size	2190 mm	1300 mm



48

Repositioneringssejl, TENCEL®, 375 kg

Bruges som en del af sengelinnedet i en seng. Efterlades under personen klar til brug for plejeopgaver.

Brug

- sidelejrning, repositionering af person i sengen • løft af hoved og krop til halvt siddende stilling • rygliggende forflytning til andre flader såsom seng eller bære
- fuldt rygliggende løft i forbindelse med f.eks. skift af sengelinned.

Materiale

TENCEL® er et organisk materiale med antibakteriel og temperaturregulerende egenskaber. De specielle TENCEL® fibrer er ekstremt bløde og skånsomme mod sensitiv hud.
Tencel/polyester 284657
Leveres i kasse á 10 stk.

Vending og håndtering



49

OR sejl – Overkrop

Støtter overkroppen ved forflytning til og fra operationsleje i en horisontal position.

Brug

• længden og designet af sejlet gør det særdeles velegnet til operative indgreb ved patientens nederste del af kroppen for eksempel gynækologiske eller urologiske indgreb.

Materiale

Polyester
Medium 284851
Large 284861
Løftestropper inkl. karabinhager ... 284801



50

Bensejl

Anvendes, hvor tunge ben skal løftes f.eks. i forbindelse med pålægning af et sejl eller når der ydes personlig hygiejne til meget tunge personer.

..... 28650
Leveres i kasse á 10 stk.



51

Sejl med multistøtte

Støtter den løftede del af kroppen, overkroppen, bækken, ben eller arme.

Brug

• situationer, hvor dele af kroppen er nødt til at blive løftet eller støttet, f.eks. til placering af røntgenapparat.

..... 28467



52

FH Strop

En løftestrop, der anvendes sammen med loftliften til at løfte eller støtte et ben eller en arm.

Brug

I situationer, hvor et ben eller en arm skal løftes eller støttes, og hvor der er behov for maksimal adgang.

..... 28655



53

Turner

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muliggør placering af sejl under personen uden at skulle rulle eller flytte personen. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af personens hud.

..... 28700



54

Twin Turner

Bruges til at placere og fastholde en liggende person i sideleje i forbindelse med f.eks. personlig hygiejne. Muligt at vende brugeren fra side til side uden at flytte sejlet. Muliggør placering af sejl under personen uden at skulle rulle eller flytte personen. Sejlets lille overflade muliggør undersøgelse, behandling og pleje af personens hud.

Standard 28750
Large 28751

Guldmann sejl forberedt til forbedret track & trace teknologi



En virkelig brugbar sejllabel

Alle genanvendelige Guldmann sejl er nu udstyret med smart-labels som indeholder RFID (Radio Frekvens IDentifikation) teknologi uden ekstra omkostninger.

Dataene, der som standard er indlejret i tagget på labelen, er et unikt serie-/ID-nummer og inkluderer også sejlets produktionsdato.


I modsætning til printede QR koder falmer RFID tags ikke og bliver heller ikke vanskeligere at aflæse uanset, hvor mange gange sejlet bliver vasket.

Afhængig af, hvilken aflæsnings-teknologi der anvendes, kan dataene nemt aflæses og kræver ikke nøjagtigt sigte på samme måde som en stregkode.

RFID tags i Guldmann sejl er af den passive type og kan aflæses med de fleste RFID scannere på markedet.

Hjælp til compliance

RFID teknologien vil være en stor hjælp til overholdelse af den nye ISO10535 standard, der kræver at alle løftesejl skal efterses og godkendes hver 6. måned og, at der skal føres en log – digitalt eller analogt – pr. løftesejl.

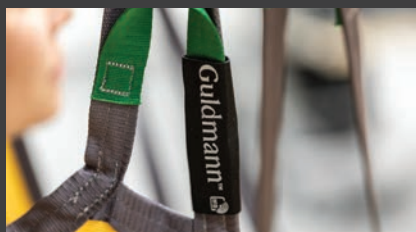

55

RFID tag til eftermontering

En lille stykke stof indeholdende et RFID tag, som kan fastgøres på sejl, der ikke har integreret RFID-tag. Stofstykket er nemt at montere på sejlet løftestropper.

RFID til sejl(1 ks. á 25 stk.)
.....562490

Løftebøjler



56



Løftebøjle medium, 375 kg

Anvendes til personer, der bruger løftesejl i str. M-3XL.

Brug


Anvendes til nemme løft og brug af standard løftesejl.

.....556890

Med stram / justerbar drejeled

.....556930

57

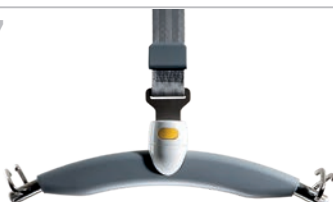

Løftebøjle, small, 375 kg

Anvendes til personer der bruger løftesejl i str. XS og S.

Brug

Bruges ved ukomplicerede løft med standard sejl. Løftebøjlen anbefales til brugere der anvender sejl i størrelsen S eller mindre.

.....556880

Med stram / justerbar drejeled

.....556920

58



Løftebøjle, x-small, 375 kg

Anvendes til personer der bruger løftesejl i str. XS og Kids.

Brug

Anvendes til nemme løft og brug af standard løftesejl. Løftebøjlen anbefales til brug af løftesejlene "kids".

.....556870

Med stram / justerbar drejeled

.....556910

59



Krydsbøjle, 500 kg

Anvendes, når der ønskes en større afstand mellem løftesejlets ryg- og benstropper. Bruges ved løft med GH3, GH3+ og GH3 Twin løftemodul.

.....550800

60



Krydsbøjle, 400 kg

Anvendes, når der ønskes en større afstand mellem løftesejlets ryg- og benstropper. Bruges ved løft med GH1, GH3, GH3+, GH3 Twin løftemodul og GL5 Mobile personløfter.

.....561610

Løftebøjler



61



62



H-Bøjle, 375 kg

Anvendes hvor man ved løft af en person ønsker en større afstand mellem løftesøjlets ryg- og benstropper – f.eks. ved personer med en stor mave. H-Bøjlen fås med 3 forskellige størrelser sidebøjler.

H-Bøjle – midterbøjle 556950

Note: Ydermere skal der bestilles 2 løftebøjler i enten str. x-small (556870), small (556880) eller standard (556890)

Swing adapter

. 554903

63



Tilkoblingsbøjle

Tilbehør til GH3 Twin så diverse løftebøjler kan anvendes.

. 550544

Planløftere



Planløftere



64

Planløftebære, sammenklappelig, 255 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt og plant løft af patienten. Kan anvendes sammen med et helt løftestykke eller løftestropper.

Planløftebære incl. et løftestykke 28445

Løftestykke 284485

Sæt med løftestropper

incl. indstikspind 28448

Ekstra spænde 2844529



65

Planløftebære, sammenklappelig 2 strops-version, 255 kg

Anvendes, hvor man ønsker et stabilt og plant løft af patienten. Kan anvendes sammen med helt løftestykke eller løftestropper.

Planløftebære incl. et løftestykke 28444

Løftestykke 284485

Sæt med løftestropper incl. stivere . . .28448



66



Opbevarings- og transportvogn til planløftebære

. 28443

Planløftere



Planløftere



67

Planløftebøjle, 375 kg

Planløftebøjle med trineløs tyngde-regulering. Kan bruges med GH3 løftejs moduler eller Guldmann mobile løfter.

.....28456
Horisontalt løftesejl, standard 28463



68

Planløftebøjle, 375 kg

Planløftebøjle med punktvis tyngde-regulering. Kan bruges med GH3 løftejs moduler eller Guldmann mobile personløfter.

.....28466
Horisontalt løftesejl, standard 28463



69

Løftestropper til kapel

Nemt løft i kapellet. Kan anvendes til større kroppe. De individuelle stropper gør det lettilgængeligt

Standard incl. stivere.....284640

Løftetilbehør



70

Nakkestøtte

Støtter hovedet uden at stimulere nakke-reflekserne. Bruges til personer, der ikke selv kan holde hovedet.

.....28325

71



Overtræk til benstrop

Anvendes, hvor der er behov for særlig skånsom støtte af lårbenet.

.....562495


72



Overtræk til løftebøjler

XS 28316
S 28317
M 28318

73

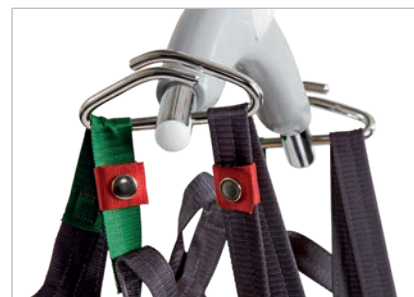

Løftemarkeringsstrop, 4 stk.

Rød 28477
Blå 28478
Grøn. 28479

74



Hjælpestropper

Letter korrekt placering af brugeren i kørestolen. Hjælpestropperne fastgøres til sejlet.

.....28355

75



Forlængerstropper

Anvendes i situationer, hvor man ønsker en bestemt siddestilling eller løftehøjde.
20 cm (sæt á 2 stk.) 28470
30 cm (sæt á 2 stk.) 28472

76



Forlængerstrop til løftemodulstrop

0,5 m 550459-500
1,0 m 550459-1000
1,5 m 550459-1500
2,0 m 550459-2000

Løftetilbehør



77



78



Smart Glide – ruller á 100 m

Et glidestykke, der anvendes for at reducere friktion mellem brugeren og underlaget. Maximum brugervægt 150 kg.

Materiale

Nylon med silicone coating.

Bredde M 100 cm 284472
Bredde L 140 cm. 284473

Smart Glide Cutter

.....284479

79



Smart Glide Dispenser

Smart Glide Dispenser til vægmontering enten vertikalt eller horisontalt. Flexibel til forskellige bredder.

.....561470

80

Smart Glide udskåret

Hvert stykke forskåret Smart Glide Precut er i separate poser som kan bruges til opbevaring. Æsken som stykkerne leveres i er forberedt til vægmontage. Maximum brugervægt 255 kg.

100 cm x 125 cm
5 æsker á 20 stk. 561500
1 æske á 20 stk. 561500-1

100 cm x 145 cm
5 æsker á 20 stk. 561501
1 æske á 20 stk. 561501-1



Løftetilbehør

81



Digitalvægt til løfthejs eller mobil personløfter

Batteridrevet digitalvægt.

Digitalvægt, 300 kg
Standard Model RS 560602
Klasse III Model RS, verificerbar...560604
Quick connect.....558899

82



Drejeled

Til planløftebårer og planløftebøjler.
.....284520

83



Adapter kit til planløftebøjle

.....560633

84



Karabinhage

.....561628

85



Holder til planløftebøjle

.....556968

86



Holder til håndbetjening

Placeres på løftemodulets strop.

1 stk. 559516
10 stk. 559943

87



Holder til løftebøjle

.....556940

Løftetilbehør

88



GH3 forseglings Kit

Beskytter GH3 løftemodulet mod kontaminering i miljøer med høje hygiejnekrav.
1 sæt 559720


89



Hygiejnecover til strop

Beskytter løftestroppen mod kontaminering i miljøer med høje hygiejnekrav.
.....562460

90

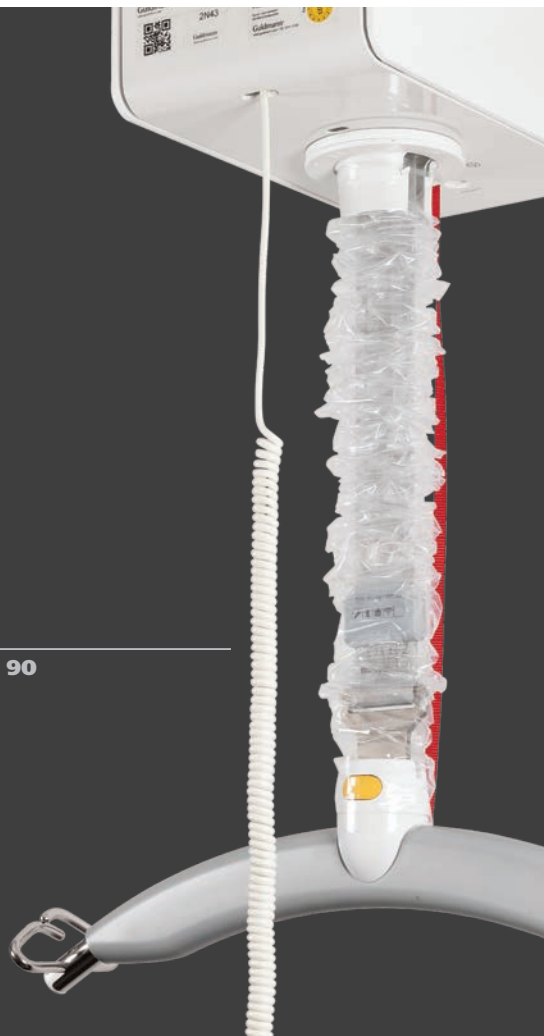

Hygiejnecover til strop – reservedel

.....562462

91



92

Elastikline

Bruges på løftebøjlen for eksempel under rehabiliteringsøvelser. Placeres på løftemodulets løftebøjle.
.....561629

Tilkoblingsstrop

.....29356

93



Smart reach

1 stk./pakke (længde 118 cm) ...562476
10 stk./pakke (længde 118 cm) .562478



| Time to care |



DK



V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tlf. +45 8741 3100
salgdk@guldmann.com
www.guldmann.dk

V. Guldmann A/S
Oldenburg Allé 3
DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 8741 3100
salgdk@guldmann.com
www.guldmann.dk

Guldmann™