

Short Instruction


IMM1039_SI.VER15.2025-02-19



Article no.	Product Description	Size (mm)
IM5380LST	LeanOnMe Wedge L + Soft-Touch Cover	W300xL800xH200 mm.
IM5380LNS	LeanOnMe Wedge L + Non-Slip Cover	W300xL800xH200 mm.
IM530080LST	LeanOnMe Soft-Touch Cover for IM5380LST	W300xL800xH200 mm.
IM530080LNS	LeanOnMe NonSlip Cover for IM5380LNS	W300xL800xH200 mm.
IM5300SNS	LeanOnMe Non-Slip Cover for IM53SNS	W300xL530xH200 mm.
IM5300SST	LeanOnMe Soft-Touch Cover for IM53SST	W300xL530xH200 mm.
IM5300XSNS	LeanOnMe Non-Slip Cover for IM53XSNS	W300xL265xH200 mm.
IM5300XSST	LeanOnMe Soft-Touch Cover for IM53XSST	W300xL265xH200 mm.
IM53SNS	LeanOnMe Wedge S + Non-Slip Cover	W300xL530xH200 mm.
IM53SST	LeanOnMe Wedge S + Soft-Touch Cover	W300xL530xH200 mm.
IM53XSNS	LeanOnMe Wedge XS + Non-Slip Cover	W300xL265xH200 mm.
IM53XSST	LeanOnMe Wedge XS + Soft-Touch Cover	W300xL265xH200 mm.
IM5400SNS	LeanOnMe Non-Slip Cover for IM54SNS	W250xL400xH150 mm.
IM5400SST	LeanOnMe Soft-Touch Cover for IM54SST	W250xL400xH150 mm.
IM5400XSNS	LeanOnMe Non-Slip Cover for IM54XSNS	W200xL250xH100 mm.
IM5400XSST	LeanOnMe Soft-Touch Cover for IM54XSST	W200xL250xH100 mm.
IM54SNS	LeanOnMe Triangle S + Non-Slip Cover	W250xL400xH150 mm.
IM54SST	LeanOnMe Triangle S + Soft-Touch Cover	W250xL400xH150 mm.
IM54XSNS	LeanOnMe Triangle XS + Non-Slip Cover	W200xL250xH100 mm.
IM54XSST	LeanOnMe Triangle XS + Soft-Touch Cover	W200xL250xH100 mm.

LeanOnMe Positioning Wedge

immedia
by Etac

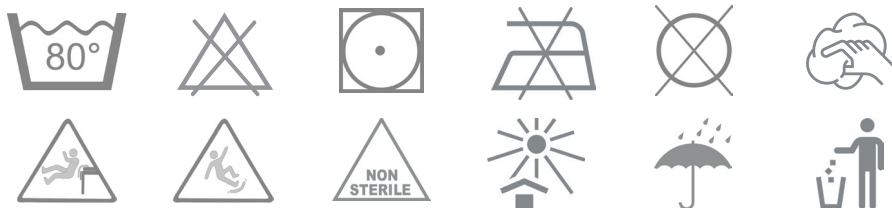

GB:

Material:

Positioning Wedge: Polyurethane foam.
NonSlip Cover: Polyester, polyurethane.
Soft Touch Cover: Cover: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modal (TENCEL™)
Back: 100% Polyester + Polyurethane membrane

**Never try to repair a product yourself.
Never use a defective product.**

Washing instructions:

Remove foam before washing.
Do not add fabric conditioner.
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

SV:

Material:

Positioning Wedge: Polyuretanskum.
NonSlip Överdrag: Polyester, polyuretan.
Soft Touch Överdrag: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modal (TENCEL™)
Baksida: 100 % Polyester + Polyuretanmembran

**Försök aldrig reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.**

Tvättinstruktioner:

Ta bort skum före tvätt.
Använd inte sköljmedel.
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättsprit

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

NO:

Materiale:

Positioning Wedge: Polyuretanskum.
NonSlip Trekk: Polyester, polyuretan.
Soft Touch Trekk: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modal (TENCEL™)
Baksida: 100 % polyester + polyuretanmembran

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

Vaskeinstruks:

Fjern skum før vask.
Ikke bruk tøymykner.
Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5-9. Eller den kan desinfiseres med maks 70% konsentrasjon.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

DA:

Materiale:

Positioning Wedge: Polyurethanskum.
NonSlip Betræk: Polyester, polyurethan.
Soft Touch Betræk: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modal (TENCEL™)
Bagside: 100 % polyester + polyuretan membran

**Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

Vaskeinstruktion:

Fjern skummet før vask.
Anvend ikke skyllemiddel.
Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

FI:

Materiaali:


Positioning Wedge: Polyuretaanivaahhto.
NonSlip Päällinen: Polyesteriä, polyuretaania.
Soft Touch Pehmeä suojus: 75 % lyocel (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modaali (TENCEL™)
Takaosa: 100 % Polyesteriä + Polyuretaanikalvoe

**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.
Älä koskaan käyttää viallista tuotetta.**

Pesuohjeet:

Irrota vaahto ennen pesua.
Älä käytä huuhteluainetta.
Tuote voidaan puhdistaa liuotinaineettomalla pesuaineella, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

Tuote on tarkastettava säännöllisesti, mieluiten jokaisella käyttökerralla ja erityisesti pesun jälkeen. Tarkista, että saumoissa ja kankaassa ei näy vaurioita.

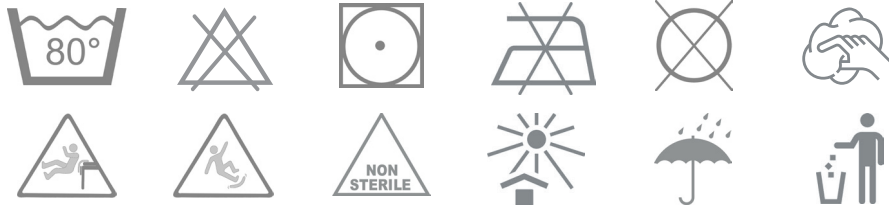

DE:

Material:

Positioning Wedge: Polyurethan Schaum.
NonSlip Bezug: Polyester, Polyurethan.
Soft Touch Bezug: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitiv), 25% Modal (TENCEL™)
Rückseite: 100 % Polyester + Polyurethan-Membran

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

Waschanleitung:

Entnehmen Sie die Schaum-Füllung vor dem Waschen.
Keinen Weichspüler verwenden.
Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

NL:

Material:

Positioning Wedge: Polyurethaan schuim.
NonSlip Hoes: Polyester, polyurethaan.
Soft Touch hoes: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ gevoelig), 25% Modal (TENCEL™)
Rugschaal: 100% Polyester + Polyurethaanmembraan

**Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik een product nooit als het defect is.**

Wasinstructies:

Verwijder schuim voor het wassen.
Gebruik geen wasverzachter.
Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken. Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

FR:

Matériaux :

Positioning Wedge : Polyuréthane la mousse.
NonSlip Housse : Polyester, polyuréthane.
Soft Touch Housse douce au toucher: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensible), 25% Modal (TENCEL™)
Dos : 100 % polyester + membrane en polyuréthane

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Instructions de lavage :

Enlever la mousse avant de laver.
N'utilisez pas d'adoucissant.
Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:

Positioning Wedge: Polyurethanica schiuma.
Non Slip Copertura: Poliestere, polyurethanica.
Soft Touch Copertura: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modal (TENCEL™)
Schienale: 100% poliestere + membrana in poliuretano

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

Istruzioni di lavaggio:

Rimuovere la schiuma prima del lavaggio.
Non usare ammorbidente.
Lavare il prodotto utilizzando un detersivo privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

ES:

Materiales:

Positioning Wedge: Poliuretano espuma.
Non Slip Funda: Poliéster, poliuretano.
Soft Touch Funda: 75% Lyocell (sensible a TENCEL™ + SMARTCEL™), 25% Modal (TENCEL™)
Detrás 100% poliéster + membrana de poliuretano

**No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.**

Instrucciones de limpieza:

Quitar la espuma antes de lavar.
No usare ammorbidente.
Lavare il prodotto utilizzando un detersivo privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

Illustration

LeanOnMe Wedges



1



6

LeanOnMe Triangles



9



2



7



10



3



8



11



4



12



5

Check



Etac Immedia A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com



Positioning Wedge

etac[®]
Creating Possibilities