



Effektiv trykaflastning og minimering af shear og friktion

Invacare **Vicair Academy madrassen** yder en fremragende trykfordeling og støtte af kroppen, uden brug af elektrisk udstyr, til brugere med høj risiko for at få tryksår. Invacare **Vicair Academy madrassen** benytter sig af Invacare **Vicair Technology**, en unik og innovativ metode, der giver en dynamisk liggeflade og støtte ved hjælp af flere hundrede små trekantede luftceller kaldet **SmartCells™**. **Vicair Technology** gør det muligt for brugere selv med svære deformiteter at synke ned i materialet og opnå optimal komfort, støtte og effektiv trykaflastning.



Egenskaber og tilbehør

Unikt design

De fleksible **SmartCells™** har en lav friktionsoverflade og glider derfor let mod hinanden og former sig således efter kroppens konturer. **Vicair Academy** består af 36 kamre med **SmartCells**. Kamrene er ligeledes indbyrdes forskydelige, hvorved også shear kræfter minimeres optimalt.

Effektiv trykaflastning

Den enkelte **Smartcelles** evne til forskydning og individuelle tilpasning tillader kroppen at synke ned i madrassen, hvorved der opnås optimal trykaflastning. Madrassen er desuden yderst komfortabel og stabil at ligge på. Det er desuden muligt at tilpasse madrassen til den enkelte bruger ved at tilpasse antallet af celler i de enkelte kamre.



Betræk

Vicair Academy madrassen leveres med et løst 2-lags inkontinensbetræk, der både tillader at brugeren synker ned i madrassen og minimerer shear og friktionskræfterne.

Flexibel indstilling

Vicair Academy madrassen følger plejesengens indstillinger.


Madrassens opbygning

De 36 kamre er placeret på en bund af skum. Kamrene er formet således, at de giver en stor overflade for kroppen at synke ned i og dermed bedre trykaflastning.


Tekniske data



800 / 900 mm

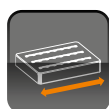

2000 mm

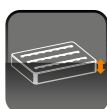

140 mm



Vægt:
8 / 9 kg



Max. brugervægt:
195 kg



60°



Vicair Academy madrassen

Se vaskevejledning i brugsanvisningen.

Farve



Blå

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Vicair madrassen - DK - 01/2016