



Dynamisk trykaflastende topmadras

Quattro®

Dynamisk trykaflastende topmadras.

Quattro topmadras er opbygget af 17 celler og egnet til forebyggelse og behandling af tryksår i alle plejemiljøer.

Luftcellerne er designet, så de i midten af madrassen er smallere end dem ved yderkanten, hvilket gør, at midten er blødere end yderkanten og dermed giver en følelse af sikkerhed for brugeren.

Topmadrassen har en celle-cyklus på 1 til 4, hvilket betyder, at patienten er understøttet af 75% af madrassens overflade på alle tidspunkter, mens de resterende 25% af kroppen aflastes.

Pumpetrykket kan indstilles til at være statisk eller dynamisk. Den er nem at betjene og udstyret med en autolås funktion, som forhindrer utilsigtet betjening. Pumpen er med dansk display. Maks inflation gør madrassen fast ved pleje og slår automatisk fra efter 15 min.

Topmadrassen er særdeles velegnet til brugere med smerter.

Den anvendes forbyggende og behandlende ved kategori 1, 2 og 3.

Scanbio anbefaler, at der bruges Culcita som undermadras.




HMI-nr 72148 fra hmi-basen.dk



Egenskaber

Madras:

- 13 cm høj dynamisk madras.
- Sammensat af 17 celler med 1 til 4 cyklus.
- Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.
- Low-air-loss funktion.
- CPR funktion.
- Funktional anordning til placering af el ledning.
- Stropper til fiksering af madrassen på sengen.
- Åndbart, strækbart, inkontinens betræk.

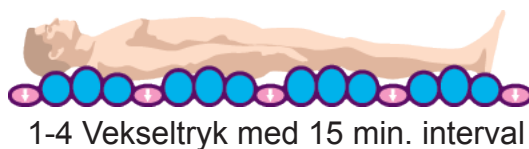

Pumpe:

- Terapi: Dynamisk / Statisk.
- Meget lydsvag.
- Cyklustid: 15 min.
- Betjeningsvenligt display og dansk tekst.
- Maks. inflation.
- Selvindstillelig.
- Nedtælling til service tid.



Specifikationer

Pumpe:	Bredde x højde x dybde	35,5 x 23,3 x 16,5 cm
	Cyklustid	15 min.
	Pumpeindstillinger	1-4 cyklus eller kontinuerlig low pressure.
	Vægt	3,4kg.
	Rengøring	Desinficeres med gængse rengørings- og desinfektions midler på en opvredet klud.

Madras:	Anvendelse	Forebyggelse og behandling til og med tryksårskategori 3.
	Brugervægt	0 - 160 kg.
	Sammensætning	17 luftceller
	Materiale	Betræk: PU Celler: PU
	Dimensioner	193 x 85 x 13 cm.
	Vægt	6,3 kg.
	Rengøring	Madrassen rengøres med sæbevand, og desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betræk.: Vaskbart ved max. 65 grader.

Sortiment:	Topmadras m. pumpe	Varenr.: 1300-0011	HMI nr.: 72148
------------	--------------------	--------------------	----------------