


Produkt	SELECT toiletløfter, elektrisk højderegulérbar med håndbetjening, til gulvafløb
Varenummer	R8215000 VVS:617996100 EAN:5708590324333 NBS:N13:10,11,300
Farve	Hvid
Beskrivelse	Eldreven toiletløfter, 400 mm højderegulérbar med håndbetjening. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L, væghængt toilet (skållængde 540 mm) og R37 hvidt Dania toiletsæde med institutionsbeslag D92. Til gulvafløb. Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS).
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	400 mm
Styrke	Maksimal belastning: 200 kg
Hastighed uden belastning	Hastighed op: 12 mm/s Hastighed ned: 12 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materiale	Toiletløfteren er hovedsagelig fremstillet af anodiseret aluminium. Frontpladerne er i polystyren (PS).
Ergonomi	Toiletløfteren fås i tre forskellige farver, der alle harmonerer med det moderne badeværelse og er med til at give et behageligt og indbydende toiletmiljø. Afrundede hjørner og kanter gør rengøringen let og hurtig – ingen skjulte kanter og huller, hvor snavset kan gemme sig.
Funktioner	Toiletløfteren fås med en håndbetjening, der gør det let for brugeren selv eller for hjælperen at justere højden. Siddehøjden kan justeres med hele 400 mm fra 425 til 825 mm – også mens brugeren sidder på toilettet. Toilettet er testet og godkendt til en belastning op til 200 kg.
Aktuator (motor)	230 LA31 Careline, (Linak), 4000N, IPX6



Produkt	SELECT toiletløfter, elektrisk højderegulerbar med håndbetjening, til gulvafløb
Styreboks	CB9 Careline, (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB7, (Linak) IP66
Strømforbrug	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W Strømforbrug, standby: 2 W
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Pressalit Care anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra vægskinner og andre aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre i 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> <p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i Direktiv 93/42/EØF vedrørende medicinsk udstyr, senest ændret ved Direktiv 2007/47/EF af 5. september 2007.</p>

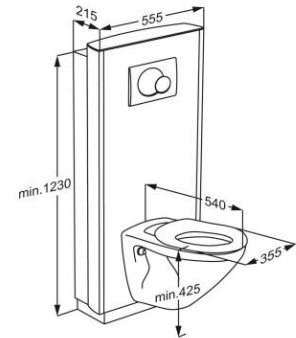