

# Ollo Bock®

QUALITY FOR LIFE



## Drivenhed z50

- Nem montering / afmontering
- Kraftige motorer
- Auto-kontakt-forbindelse
- Inkluderer adapter til standard hjul
- Inkluderer anti-tip \*

\* Kun på kørestole fra Wolturnus A/S

## **z50**

### Kraft og fart i hverdagen.

Z50 monteres let uden værktøj med det praktiske låsesystem. Styreboks kan monteres på enten højre eller venstre side. Klar og funktionel visning af hastighedsvalg. Z50 kan frakobles, så kørestolen køres manuelt. Velegnet til både indendørs og udendørs brug. Største brugervægt 125 kg.

# z50 Drivenhed

## Tilvalg z50

- Tipsikringer med svingstøtter
- 16 Ah gel-batterier
- Egerbeskyttere
- Håndholt programmeringsenhed
- Ekstra batterier
- Bortsvingbar joystick

## Tekniske Data


Maks. hastighed		6 km/t
Batterikapacitet	Standard:	12 Ah
	Tilvalg:	16 Ah
Længste opladningstid		12 t
Kilometertal		ca 15–18 km
Maks. brugervægt		125 kg
Effekt		2 × 150 Watt



Enkel, funktionel kontrolboks



Tipsikringer med svingstøtter (tilvalg)

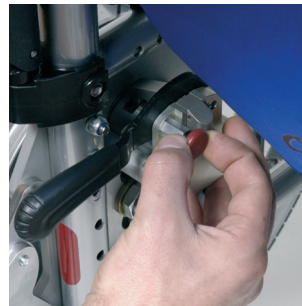

Fastgørelse og låsning




Enkel, hurtig hjulmontering



Praktisk batteriplacering



Nav med afkobling

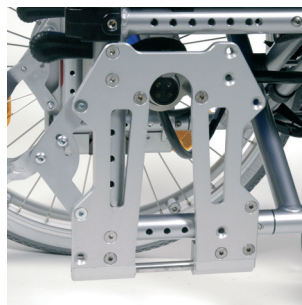

Monteringsplade



Hjulenheder og batteri - enkelt

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE