



Invacare®

Flo-tech PT seler

Støtter en god positionering

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **Flo-tech PT seler**

Invacare **Flo-tech PT seler** er designet specielt til at give behagelig støtte og stabilitet. Sortimentet af **Flo-tech PT seler** er meget bredt, hvilket gør det muligt at finde løsninger på de fleste posturale problemer. Selerne er fremstillet i en høj kvalitet og i et blødt og stabilt materiale. **Flo-tech PT seler** er velegnet til brug både på manuelle og elektriske kørestole.




Invacare **Flo-tech PT seler**

Selerne er specielt fremstillet for at kunne give øget støtte og stabilitet samt fremme en optimal kropsholdning og positionering. Øget stabilitet af overkroppen vil desuden give et godt udgangspunkt for en god hovedkontrol.

Flo-tech PT selerne er enkle at montere, justere og kan let afmonteres for vask i vaskemaskine ved 60°. Alle seler er fremstillet i blødt, eftergiveligt og væskeafvisende Neopren og findes i flere størrelser.


Dynamisk brystsele

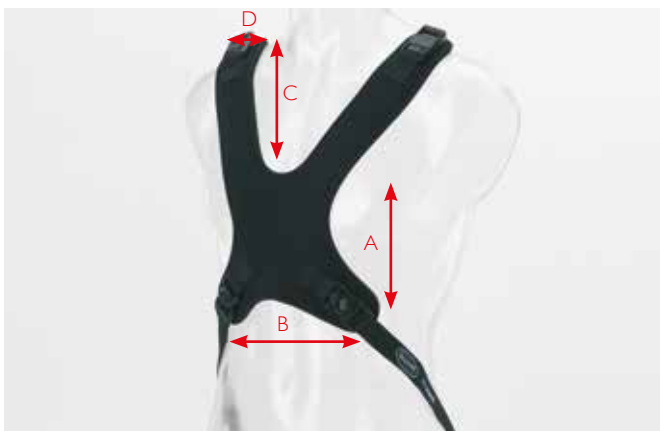

Invacare **Dynamisk brystsele** giver brugeren optimal støtte og komfort. Denne dynamiske brystseles strækbare materiale giver på den ene side brugeren mulighed for en smule bevægelse samtidig med, at den hjælper vedkommende på plads mod ryglænet, når han/hun slapper af igen. **Dynamisk brystsele** er fremstillet af væskeafvisende Neopren med bløde, strækbare kanter.

	Mål		
	Small	Medium	Large
A	110 mm	145 mm	175 mm
B	180 mm	230 mm	260 mm
C	160 mm	200 mm	230 mm
D	45 mm	50 mm	60 mm


H-sele

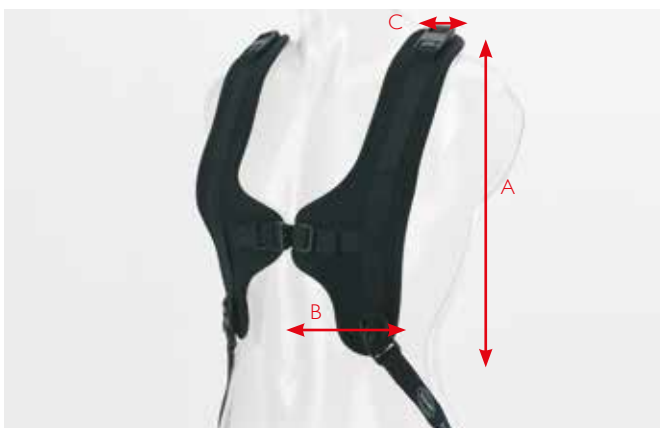

H-selen er designet med bløde polstringer til at fordele trykket ligeligt over bryst- og skulderregion. Spændet mellem de 2 polstringer giver en enkel og hurtig montering eller afmontering af selen. **H-selen** er fremstillet af væskeafvisende Neopren med bløde kanter.

	Mål		
	Small	Medium	Large
A	300 mm	330 mm	430 mm
B	95 mm	115 mm	145 mm
C	45 mm	65 mm	75 mm

Sternum Sele

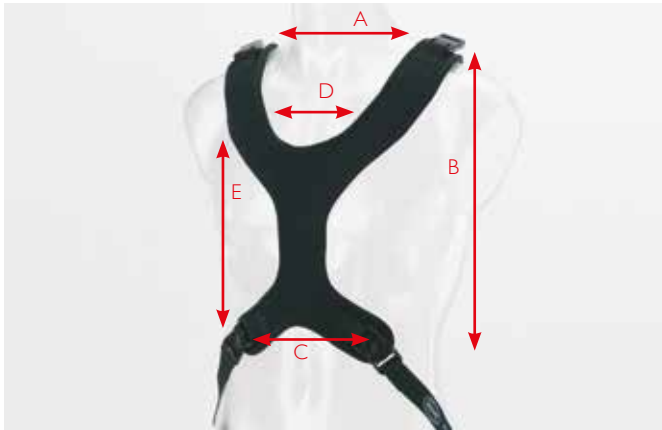

Sternum selen giver støtte ved hjælp af blød polstring og runde kanter. Denne sele er specielt egnet til de kvindelige former. **Sternum selen's** strækbare materiale giver på den ene side brugeren mulighed for en smule bevægelse samtidig med, at den hjælper vedkommende på plads mod ryglænet, når han/hun slapper af igen. **Sternum selen** er fremstillet af væskeafvisende Neopren med behagelige, afrundede kanter.

Mål		
	Medium	Large
A	220 mm	295 mm
B	300 mm	335 mm
C	160 mm	160 mm
D	60 mm	60 mm
E	145 mm	195 mm

Ankelbespænding



Invacare **Ankelbepændingen's** strækbare materiale giver på den ene side brugeren mulighed for en smule bevægelse samtidig med, at den hjælper foden på plads på fodstøtten. **Ankelbepændingen** kan hjælpe mod rotation, inversion og eversion af foden og kan tillige hjælpe brugere, som oplever, at foden ryger af fodpladen pga. klonus eller spasmer. Foden løsnes enkelt ved et tryk på begge sider af spændet. **Ankelbepænding** leveres komplet med monteringsbeslag til fodpladen.

Mål	Omkreds
Small	160-215 mm
Medium	175-230 mm
Large	240-295 mm

Dynamisk brystbælte



Invacare **Dynamiske brystbælte** er fremstillet til at give en høj støtte mod ryglænet. Samtidig med en vis bevægelighed af overkroppen.

Mål		
	Medium	Large
Højde	101 mm	127 mm
Længde	406 mm	457 mm



Bevægeligt spænde

Findes på selerne: Dynamisk, H-selen og Sternum. Dette spænde giver mulighed for justeringer og komfort samtidig med, at det er helt enkelt at åbne/lukke.



Væskeafvisende Neoprenpolstring

Den bløde komfortable polstring kan let afmonteres og vaskes i maskine ved 60°.



Justerbare bånd

Leveres som standard med et plastspænde med justeringsmulighed af den øverste sele og en fast længde på den nederste sele.



Monteringsfæste

Leveres i par. Dette fæste gør det enkelt at montere en sele eller bælte. Tilbydes til 25 mm og 40 mm brede seler. Fremstillet af forstærket plast.



Monteringsbeslag til selerne

Tilbydes til rørdimension 19 mm, 22 mm og 25 mm. Leveres komplet med skruer og møtrikker sammen med alle **Flo-tech PT** bæltter og seler.

Sikkerhed

Selerne er fremstillet og beregnet til at yde postural støtte og må ikke anvendes alene som sikkerhedssele ved transport i et køretøj. En godkendt sikkerhedssele bør altid anvendes i henhold til vejledning fra kørestolens producent.

Selerne skal monteres, så polstringen er placeret over sternum/brystbenet og må ikke være placeret rundt om halsen. Tillad tilstrækkelig afstand mellem hals og sele for at undgå kvælningsrisiko.

Selerne bør altid anvendes sammen med et tilpasset hoftebælte og vær opmærksom på, at bækkenet får korrekt støtte. Dette for at undgå fare for at brugeren glider ned og frem i sædet og udsættes for kvælningsrisiko.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®