

Basis

Trykaflastende standardmadras

Basis er en trykreducerende standardmadras til den forebyggende pleje. Basismadrassen dækker høj risiko eller sårgrad 0-3. Anbefalet brugervægt er 0-150 Kg.



Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflytninger, som påvirker patientens velvære.

Materiale og opbygning

Madrassen har en skumbase i højelastisk skum, som sikrer den nødvendige stabilitet ved mobilisering af patienterne. Basismadrassen er til forebyggelse af tryksår og forsynet med et toplag af trykaflastende viscoelastisk specialskum. Madrassen kombinerer dermed to gode egenskaber – høj kvalitet og komfort i den forebyggende pleje.

Drejbar for længere levetid

Basismadrassen er lavet som en drejbar skummadras, så levetiden af skummet kan forlænges yderligere ved brug af et drejeregime.

Kvalitetsbetræk

Madrassen leveres med et vandtæt, men åndbart, inkontinensbetræk. Betrækket er forsynet med lynlås på 3 sider, så det er nemt at tage af og vaske. Lynlåsen er dækket med et stort overlap, der

forhindrer væske i at trænge ind igennem lynlåsen til skumkernen. Madraskernen er monteret med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask. Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og betræk glider let mod hinanden uden modstand, så der ikke overføres friktion og shear til brugeren.

Nem håndtering

Basismadrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag – 2 i hver side, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen, uanset hvad side man står. Håndtagene er tilmed forstærket på indersiden af betrækket, så betrækket får en ekstra lang levetid.

Rengøring


Betrækket kan overfladedesinficeres og er derudover vaskbart ved max. 95 grader.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforebyggelse for at høre nærmere om produktet.

Basis

Trykaflastende standardmadras

Basis er en trykreducerende standardmadras til den forebyggende pleje. Basismadrassen dækker høj risiko eller sårgrad 0-3. Anbefalet brugervægt er 0-150 Kg.

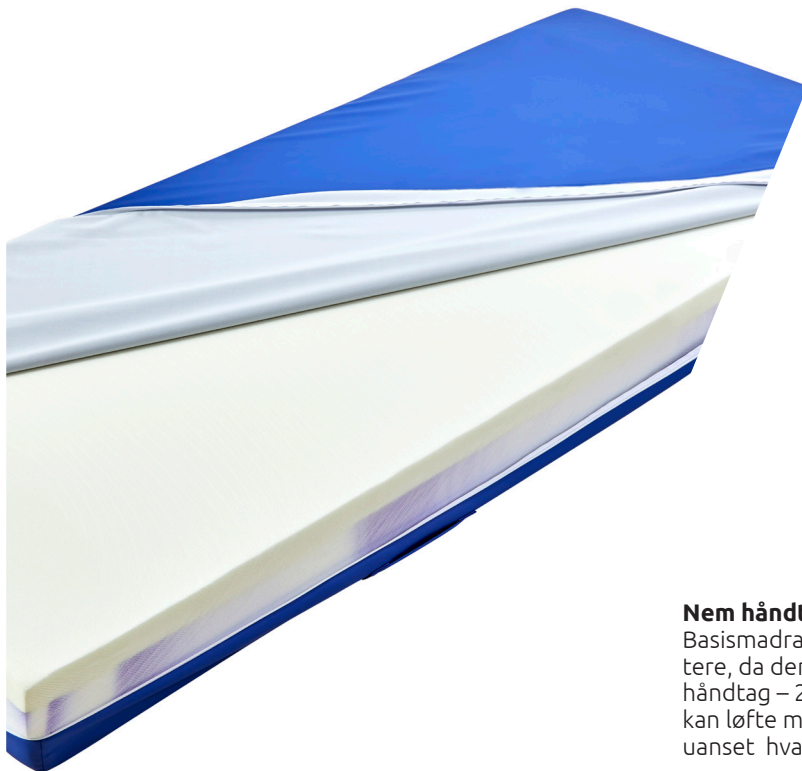

Opbygning

Madrassen har en skumbase i højelastisk skum, som sikrer den nødvendige stabilitet ved mobilisering af patienterne.

Materiale

Kombination af brandhæmmet HR PUR skum og brandhæmmet fleksi-belt PUR-skum.

Nem håndtering

Basismadrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag – 2 i hver side, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen, uanset hvad side man står.

Tekniske data

Basis fås i flere udgaver:

80x200x14 cm HMI nr.: 105759 Varenr.: 8020014Basis	85x200x14 cm HMI nr.: 112202 Varenr.: 8520014Basis
83x200x14 cm HMI nr.: 105758 Varenr.: 8320014Basis	88x200x14 cm HMI nr.: 105760 Varenr.: 8820014Basis

Brugervægt: 0-150 kg

Madrasmvægt: 10,3 kg

Vægtfylde: 60 + 40 kg/m³

Materiale: Kombination af brandhæmmet HR PUR skum og brandhæmmet fleksi-belt PUR-skum.

Praktisk anvendelse: 2 håndtag i hver side, lynlås i 3 sider.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.