

DK
3C


turnall[®]

Madras med automatisk sidekip




- **Automatisk sidepositioneringssystem 0-30° til tryksårsforebyggelse eller behandling**
- **Omfattende trykaflastning forebyggelse af trykskader/sår behandling af eksisterende trykskader/sår**
- **Kan integreres i enhver plejeseng med aftagelig madras**
- **Tidsbesparende for personale, frigør behandlingsressourcer**
- **Selv tunge patienter positioneres forsigtigt hvilket skåner plejepersonalet**
- **Ingen søvn forstyrrelser af patienter**
- **Svagt løft af madrassen, i modsat side af den primære løfteside, giver støtte og trykthed samt mindsker risikoen for shear.**

LEVABO[®]



Turn All® Systemet gør en standard seng til en automatisk sidepositionerings-seng

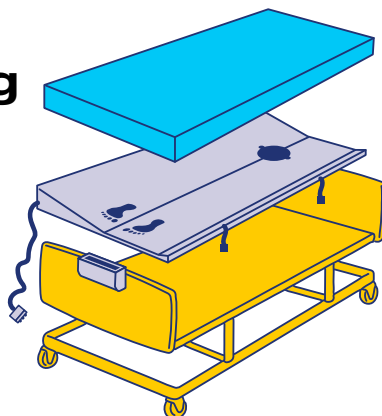

Det nye Levabo Turn All® positioneringssystem er udviklet til både akutte og hjemmeplejepatienter.

Systemet er til støtte for klinikere og plejere ved regelmæssig sidepositionering af primært immobile patienter, som har høj risiko for at udvikle tryksskader.

Klinisk effektivt

Flere retningslinjer for klinisk praksis anbefaler repositionering mindst hver anden time for patienter med reduceret mobilitet. (NICE GUIDLINE 2015). 2019 Internationale tryksårs retningslinjer (EPUAP,NPIAP, PPPIA) anbefaler brugen af 30° side leje.

Let at anvende

- Hurtigt og nemt at installere og betjene
- On /off kontrol knap
- Vendecyclus 30/30, 60/60, 90/90 minutter
- Tids indstilling for hvor lang tid systemet skal køre automatisk
- CPR funktion for hurtig udluftning
- Systemet giver alarm ved strømsvigt.



Kontrol Box





Turn All® systemet frigør behandlings ressourcer



Til alle senge

Passer til enhver standard seng, hvor den placeres under den eksisterende madras, kan anvendes sammen med dynamiske madrasser og elevationssenge.

Kontrolleret positionering

Systemet vender automatisk patienten forsigtigt og stille, og reducerer behovet for manuel håndtering af plejepersonale.

Side Støtte System

- Svagt løft af madrassen, i modsat side af den primære løfteside, giver støtte og trykthed samt mindsker risikoen for shear.



Fordele ved Turn All® systemet

- Omfattende trykaflastning
- Forebyggelse af trykskader/sår
- Behandling af eksisterende trykskader/sår
- Ingen søvnforstyrrelser
- Lav støj
- Selv tunge patienter positioneres forsigtigt (beskytter plejepersonalets helbred)
- Skånsom positionering selv for patienter i smerter
- Svagt løft af madrassen, i modsat side af den primære løfteside, giver støtte og trykthed samt mindsker risikoen for shear
- Tidsbesparende, -frigør behandlingsressourcer, og mere plejetid tilgængelig for patienter
- Forbedret mikroklima og bedre blodcirkulation
- Robust, holdbar og pålidelig
- Kan integreres i enhver plejeseng med aftagelig madras.

Produkt oversigt

Produkt navn	Str. i cm.	Max vægt i Kg	Produkt nr.	HMI nr.	Anvendelse
Turn All multi-patient 3C med cover med TPU bund	85 x 200	150	70128	130290	Sæt med 1 Turn All® løftemadras monteret i Turn All® overtræk med TPU bund og 1 pumpe m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.
Turn All Cover med TPU bund	85 x 200	N/A	70114	N/A	Overtræk til Turn All® løftemadrassen med TPU bund.
Turn All Pump 3C	27 x 13 x 10	N/A	76117	N/A	Pumpe til Turn All® systemet m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.

Bariatrisk

Turn All multi-patient 3C Bariatrisk med cover med TPU bund	110 x 200	300	70098	130392	Sæt med 1 Turn All® løftemadras monteret i Turn All® overtræk med TPU bund og 1 pumpe m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.
Turn All Cover Bariatrisk med TPU bund	110 x 200	NA	70126	N/A	Overtræk til Turn All® løftemadrassen med TPU bund.



Konformitets erklæring (CE)

Virksomheden Levabo ApS, Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, erklærer, at produkterne er designet og fremstillet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og lovmæssige krav.

Produkt

Turn All® er et aktivt medicinsk produkt i overensstemmelse med: EU Regulativ MDR (EU) 2017/745, Medicinsk udstyr - klasse 1. Kontrolleret af Lægemiddelstyrelsen 21/1 2021.

Produktion

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC

Lær mere om vores omfattende behandlingskoncept af tryksår

www.levabo.dk
www.facebook.com/LevaboAps



LEVABO[®]
medical



Levabo Aps.
Sverigesvej 20A
8660 Skanderborg
Denmark
Tel. +45 31 70 40 25
E-mail: info@levabo.dk