
UNWIREDTHINGS

IKONN SB-1

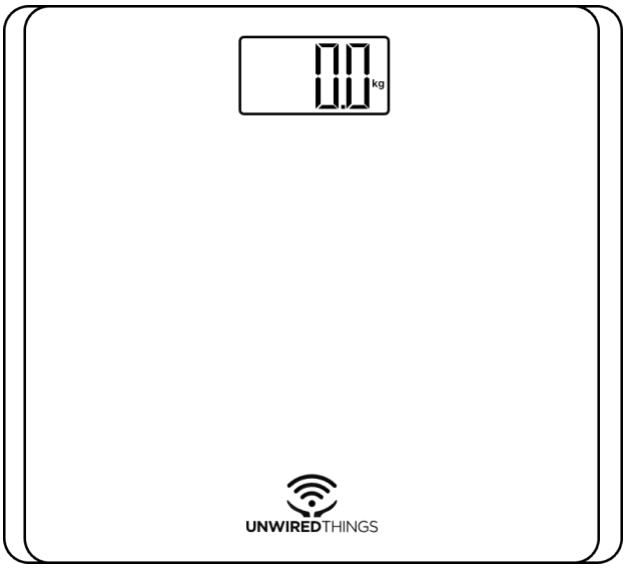

DA Instruktionsmanual

Forord

Tillykke med købet af din IKONN SB-1 badevægt.

Denne badevægt er et IKONN-kompatibelt produkt, hvilket betyder, at den ikke blot fungerer som en almindelig vægt, der måler din kropsvægt, men også kan bruges med et IKONN-tilgængelighedssystem, der understøtter lydannoncering af aflæsninger på dit valgte sprog.

Denne manual fungerer som en vejledning til effektiv og sikker brug af produktet. Læs venligst disse oplysninger omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem dette dokument til fremtidig brug.

Advarsel: For at undgå personskade eller produktskade skal du læse kapitlet om håndtering og sikkerhed, før du bruger produktet.

Badevægtens funktioner

IKONN SB-1 er designet til at måle og spore din kropsvægt i et indendørs miljø.

Produktets egenskaber:

- System af højpræcisions strain gauge-sensorer.
- Badevægt i hærdet glas.
- LCD-skærm.
- Kapacitet 250 kg / 550 lb.
- Opdeling 100 g / 0,2 lb.
- Vejning i kg/lb/st understøttet
- Funktionerne Auto On, Off og Zero:
  Auto On: Vægten aktiveres automatisk, når du træder op på den.
  Auto Zero: Vægten nulstilles automatisk før hver vejning.
  Auto Off: Efter brug slukker vægten automatisk for at spare på batteriet.
- Indikationer for lavt batteriniveau, overbelastning og fejl.
- Kan kombineres med IKONN tilgængelighedssystem.

Bemærk: Badevægten er ikke et diagnostisk eller medicinsk udstyr. Den giver vægtmålinger til personlig reference og bør ikke bruges til at diagnosticere eller behandle medicinske tilstande.
Selvom forbindelsen mellem badevægten og IKONN Accessibility System forbedrer de daglige opgaver og rutiner for brugere, der ikke kan se skærmen, er det ikke meningen, at den skal erstatte professionelle medicinske hjælpemidler eller mobilitetshjælpemidler. Personer med specifikke medicinske eller mobilitetsmæssige behov bør konsultere deres sundhedspersonale for vejledning.

Før brug


Pak produktet forsigtigt ud.

Alle emballagematerialer er genanvendelige, men du kan beholde emballagen, indtil du er sikker på, at vægten opfylder dine behov.

Når du har taget produktet ud af emballagen, skal du sikre dig, at alle dele og komponenter er til stede og i god stand. Hvis der mangler elementer, eller hvis noget ikke virker rigtigt, bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Sørg for, at emballageposer opbevares utilgængeligt for børn, da de kan forårsage kvælning.

Dele og komponenter

	Artikel
1	LCD-skærm
2	Glasbadevægt
3	Enhedens afbryderknap
4	Batterirum
5	Sensor med høj præcision

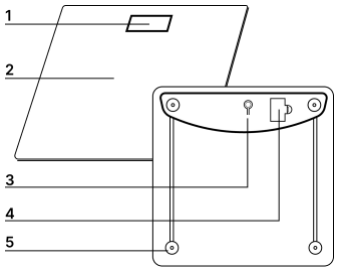

Bemærk: Grafikken i denne manual er skematiske fremstillinger, der kun bruges som reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende.


Inkluderede komponenter:

- IKONN SB-1
- 3 x 1,5 V AAA-batteri
- Brugervejledning

Betjening

Fjern isoleringsstrimlen

Åbn batterirummet på bagsiden af vægten, og fjern den sorte isoleringsstrimmel. Luk batteridøren, og vent på, at LCD-skærmen viser '0.0'.

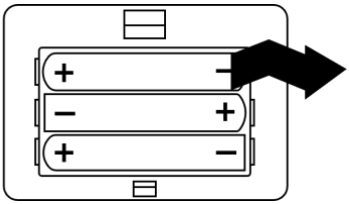


Udskift/indsæt batterier

For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet og fjerne de brugte batterier med en flad genstand. Indsæt nye, kompatible alkaliske/kulstofbatterier - genopladelige batterier giver ikke en høj nok spænding til at understøtte normal betjening. Sørg for at placere batterierne korrekt i forhold til deres positive og negative fortegn. Den flade (negative) ende af hvert batteri skal hvile mod fjederen.

Bemærk: Læs mere om håndtering og bortskaffelse af batterier i kapitlet om Håndtering og sikkerhed.

Skift måleenhed

For at skifte mellem måleenheder skal du trykke på knappen 'UNIT' på bagsiden af vægten.
Ved at trykke på knappen skifter man mellem kilogram, pund og sten.

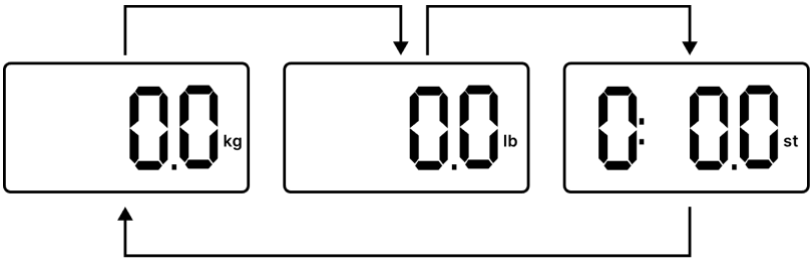

Vejning

Placer vægten på en hård, plan overflade. For at kontrollere, at underlaget er plant, kan du trykke let på vægten med din fod og fjerne den - vægten skal vise 0,0 i de valgte måleenheder.

Du vejer dig ved at træde op på vægten. Under vejningen skal du stå stille, mens vægten bestemmer den præcise vægt. Vægten bipper, når den har nået en stabil vejning. Din vægt vises i ca. 40 sekunder, og derefter slukker enheden automatisk.

Bemærk: Husk at tage skoene af, før du vejer dig, så du undgår at skrabe eller ridse badevægten. Vægten kan være glat, når den er våd, så sørg for at tørre både fødder før brug.

Andre mulige indikationer og deres tilsvarende symboler er anført i tabellen nedenfor.

Symbol	Indikationer
Lo	**Lavt batteriniveau** Batteristrømmen er ved at være lav. Udskift venligst batterierne.
Err	**Overbelastning af skalaen** Den vejede genstand overskrider den maksimale vægtkapacitet. Træd venligst af for at undgå skader.
C	**Målefejl** Der er opstået en fejl under vejningen. Træd ned fra vægten, og træd op på den igen for at gentage vejningen.

Brug af badevægt med IKONN Controller

Som med alle Unwired Things-produkter har denne vægt mulighed for at oprette forbindelse til **IKONN Accessibility System**, som kan give lydfeedback på dit valgte sprog. Systemet er beregnet til at støtte brugere, der af en eller anden grund ikke kan se skærmen.

Brug funktionen IKONN Tilføj produkt på din IKONN-controller til at parre din nye vægt med IKONN-controlleren. Brug hjælpefunktionen på din controller eller manualen til controlleren, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør.

Du vil høre en meddelelse, når forbindelsen er oprettet, og IKONN vil også angive navnet på det produkt, som den har oprettet forbindelse til. Badevægtsfunktionen vil derefter være tilgængelig i din hovedfunktionsliste. For at bruge vægten med IKONN skal du nu vælge badevægtsfunktionen. Hvis du vil bruge vægten fremover, skal du vælge badevægtsfunktionen på IKONN-controlleren og derefter træde op på vægten. Hvis vægten er slukket, skal du tænde den med det samme, så den kan oprette forbindelse til IKONN.

Bemærk, at mere end én IKONN-controller kan bruges til at interagere med vægten, dog ikke på samme tid.

Du kan finde mere support ved hjælp af IKONN-controllerens indbyggede hjælpefunktion eller på webstedet https://ikonn.info.

Tips og fejlfinding

Hvis du oplever problemer med badevægtens funktion eller nøjagtighed, kan du overveje følgende liste over muligheder for at løse problemet:

- Sørg for, at vægten er placeret på en hård, plan overflade.
- Tjek hver sensorfod på bagsiden for at sikre, at der ikke sidder noget fast i bunden af den.
- Sørg for, at batterierne er placeret korrekt i batterirummet i forhold til deres positive og negative fortegn.

- Sørg for, at både dine fødder og vægten er tørre.
- Sørg for, at du står stille i ca. 10 sekunder, eller indtil tallet på displayet holder op med at blinke.
- Tag batterierne ud for at genstarte cyklussen.

Håndtering og sikkerhed

Advarsel: Læs alle sikkerhedsoplysningerne nedenfor, før du bruger badevægten, og gem denne vejledning til senere brug. Hvis disse sikkerhedsinstruktioner ikke følges, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller andre personskader samt skader på produktet eller anden ejendom.

Generel sikkerhed og håndtering

Håndter produktet med forsigtighed, da det indeholder følsomme elektroniske komponenter. Tjek altid for synlige tegn på skader. Hvis du finder nogen, kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet. Du må ikke selv åbne eller forsøge at reparere vægten, da adskillelse af produktet kan forårsage personskade eller beskadige vægten.

Brug kun vægten under normale indendørstemperaturer. Brug ikke vægten på steder, der er meget kolde eller meget varme, meget støvede, hvor der kan komme insekter ind, hvor den kan blive udsat for mekaniske vibrationer, i nærheden af brændbare genstande og i rum med røg.

Brug ikke en beskadiget vægt, og åbn eller forsøg ikke selv at reparere vægten, da adskillelse af produktet kan forårsage personskade eller beskadige vægten samt ugyldiggøre garanti og korrekt funktion.

Vægten bør bruges indendørs, på flade og stabile overflader, af en enkelt person ad gangen. Træd altid op på vægten med bare fødder eller let fodtøj. Vær forsigtig, når du træder op på vægten, så du ikke glider, falder eller risikerer at vælte.

Sørg for, at overfladen er ren og tør før brug, og rengør den med en let fugtig klud. Vægten må ikke nedsænkes i vand eller rengøres med kemiske/slibende midler. Overbelast ikke vægten med noget, der kan resultere i overskridelse af den maksimale vægtkapacitet, der er angivet i

de tekniske specifikationer. Undgå at lægge for stort tryk på eller bøje produktet. Tryk aldrig for hårdt på knapper og kontakter. Tab ikke vægten eller andre genstande på den. Enhver ændring af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Radiofrekvensemissioner fra vægten kan påvirke driften af andet elektronisk udstyr negativt.

Batterier

Batterier skal genbruges eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt affald, og kontakt myndighederne for at få råd om genbrug af batterier. Brug handsker, når du håndterer batterier eller celler.

Brug ikke deforme batterier. Bland ikke gamle med nye batterier, og bland ikke batterier af forskellige sammensætninger/mærker. Batterierne må ikke brændes eller udsættes for høje temperaturer, da det kan føre til eksplosioner. Der må ikke manipuleres med batterier eller celler på nogen måde. Undgå at kortslutte batteriernes strømforsyningsterminaler og celler.

Hvis vægten skal opbevares i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne for at undgå lækage. Undgå at røre ved væske, der kommer fra lækkende batterier eller celler.

Sørg for, at batterier er utilgængelige for børn, især hvis der er risiko for indtagelse. Hvis nogen indtager et batteri, skal man straks søge lægehjælp.

Lovgivningsmæssige oplysninger

Tekniske specifikationer

Produkt	**IKONN SB-1**
Dimensioner	330x300x 26mm
Vægt	1.34kg
Batteritype	3xAAA
Kapacitet	250kg/ 550lb
Division	100g/ 0.2lb
Temperatur	0 – 38°C
Transmissionsfrekvensområde	2402 – 2480MHz
Maksimal RF-udgangseffekt	-1.30dBm

Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktkvaliteten.

Fremstillet i Kina.

Bortskaffelse af elektroniske enheder



Produktet og/eller batterierne skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet. Når produktet er udtjent, skal du sørge for korrekt bortskaffelse af celler, batterier eller akkumulatorer ved at aflevere dem på et indsamlingssted, der er udpeget af de lokale myndigheder. Forbrugere opfordres til at kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren for at få vejledning om korrekt bortskaffelse af gamle maskiner og tilhørende batterier. Overholdelse af disse retningslinjer er medvirkende til at beskytte miljøet.

Teknisk support og garanti

Unwired Things påtager sig ansvaret over for slutbrugeren eller forbrugeren for enhver mangel på overensstemmelse, der måtte eksistere på tidspunktet for produktlevering i overensstemmelse med de vilkår, betingelser og tidsfrister, der er fastsat i de relevante bestemmelser. Alle Unwired Things' produkter er dækket af to års garanti.

Vi anbefaler, at alle reparationer udføres af kvalificeret personale.

Hvis du støder på problemer med dit produkt eller er i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte den forhandler, du har købt produktet hos.

Ophavsret

Unwired Things ApS bevarer de intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet i dette dokument. Alle rettigheder er forbeholdt.

Uautoriseret reproduktion, distribution eller brug af nogen del af dette dokument og produkt kan være i strid med gældende lovgivning og kan medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner.

CE

DA Overensstemmelseserklæring

Unwired Things erklærer hermed, at IKONN SB-1 overholder alle gældende bestemmelser i de direktiver og forordninger, der er anført nedenfor, og er i overensstemmelse med følgende standarder.
Den omfattende tekst til EU's overensstemmelseserklæring kan findes på vores hjemmeside: www.unwiredthings.com.

<table>
<tr><td rowspan="3">IKONN SB-1</td><td>2014/30/EU

2011/65/EU

2012/19/EU
2014/53/EU
2001/95/EC
10/2011/EC
1907/2006
2019/1021
2022/1616
2006/66/EC
2023/1542/EU
94/62/EC
EPR</td><td>EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

IEC 62321-3-1:2013
EN 62321-4:2014/A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017

EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 62368- 1:2020/A11:2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">UNWIREDTHINGS
©2023 Unwired Things
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 Copenhagen
Denmark
CVR 4148 9553</td></tr>
<tr><td colspan="2">Craig Scott
Chief Executive Officer

Copenhagen, Denmark, 30 March 2024</td></tr>
</table>

IKONN

www.ikonn.info



Unwired Things ApS

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen, Denmark

CVR 4148 9553

www.unwiredthings.com