

NordBed™ Optimo



ERGOMOVE™ TEKNOLOGI | ØGET UAFHÆNGIGHED |
OPTIMERET SELVHJÆLP



Nordbed Optimo - den ideelle seng til hjemmeplejen og plejehjem. Nordbed Optimo tilbyder ekseptionel høj komfort og den understøtter og opbygger borgerens mulighed for selvhjælp og øger mobiliteten. Nordbed Optimo's nye **ErgoMove teknologi** sætter forebyggelse, pleje- og behandling af tryksår i centrum.

ErgoMove teknologi

Invacare **Nordbed Optimo** leveres med indbygget **ErgoMove teknologi**, der komfortabelt bringer borgeren, fra en liggende position, til en aktiv siddende position og tilbage til horizontal position blot ved tryk på 1 enkelt tast. Den aktive siddestilling understøtter borgerens mulighed for at spise, drikke og læse. ErgoMove bevægelsen sikrer, at borgeren ikke glider ned i sengen hvorved **tryk, shear og friktionskræfter reduceres**.

Liggefladens dele ved ryg, hofte og knæ, følger kroppens naturlige inddeling. Dette, i samspil med en indbygget ryglænstilbageføring, der sikrer at madrassen ikke glider ned, kompenserer for bevægelsen og reducerer shear kræfter signifikant, når borgeren bringes til en siddende position.

ErgoMove teknologien minimerer behovet for hjælp, i forbindelse med positionering af borgeren.

Ø PATENT PENDING



Enkel håndtering

Optimo plejesengen **kan adskilles i 5 dele**, hvoraf **ingen af delene vejer mere end 20 kg**. Dette forenkler håndtering og transport af plejesengen, som på den måde kan flyttes også i trange omgivelser. Optimo plejesengen tilgodeser således gode arbejdsvilkår for personalet.

Montering og af-montering af Nordbed Optimo sker enkelt og intuitivt. **Delene placeres på understellet** for forenklet transport mellem bil og bopæl. Nordbed Optimo er **kompakt, meget stabil og særdeles nem at opbevare**, når delene er placeret på understellet.

Nordbed Optimo leveres med vaskbar elektronik der **tåler vask i vaskemaskine** med henblik på optimal hygiejne og arbejdsvilkår.



Selvhjælp, mobilitet og forebyggelse af fald

Op-og-Ud funktion

► Optimo plejesengen leveres med en "Op-og-Ud" funktion, der skaber en sikker og komfortabel udstigning. Denne funktion indstiller automatisk ryglænet og højden på liggefladen og forenkler således udstigning. På denne måde optimeres borgerens mobilitet og mulighed for selvhjælp og uafhængighed.

Design

► Nordbed Optimo leveres i moderne design, med flere valgmuligheder.

4

UNIKKE
EGENSKABER

1

ErgoMove teknologi

- Den unikke ErgoMove teknologi bringer borgeren til en komfortabel siddeposition og tilbage til horisontal position, uden at borgeren glider nedad i løbet af processen og der er derfor ikke behov for repositionering.
- Minimerer risiko for shear

2

Enkel håndtering

- Optimo plejesengen adskilles enkelt i 5 dele, uden brug af værktøj. Ingen dele vejer mere end 20 kg
- Dele samt tilbehør placeres nemt på understellet med henblik på at lette transport og opbevaring.
- Maskinvaskbar elektronik forenkler rengøringen



3

Op og Ud funktion

- sikker og enkel forflytning
- understøtter et ergonomiske bevægelsesmønster

4

Optimale inddeling af liggefladen

- i overensstemmelse med antropometriske statistikker

Egenskaber

► Personlig profil:

- Programmerbar med LCD håndbetjening (option) •
- Personlig indstilling af Ergomove og udstigningshøjde

► Integreret forlængelse af liggefladen

- + 10 cm i både hoved- og benende

► Anti Trendelenburg og som option Trendelenburg

- Støtte til plejepersonale i forbindelse med repositionering af bore
- Letter redistribuering af tryk

► Nat belysning

- Nem at betjene
- Øger sikkerheden og forebygger fald



- Mest anvendte taster har let genkendelige farver. Farverne er udvalgt i samarbejde med eksperter
- Med henblik på at forenkle valget af den ønskede funktion, tændes der lys over tasterne, når blot een tast aktiveres.
- Mest anvendte taster er placeret øverst på håndbetjeningen og indstillingstasterne nederst
- Håndbetjeningen er som standard låsbar

Håndbetjening ▲

Tydelige farver

Farverne er enkle at kende fra hinanden - til støtte for især svagt seende borgere

Tekniske data ▼


Ved behov for yderligere information om produktet henvises til brugermanualen som kan hentes på Invacares hjemmeside www.invacare.dk

	Udvendig bredde Indvendig bredde ▼	Udvendig længde Indvendig længde ▼	Højdeindstilling ▼	Mål på liggefladddele ▼	Frihøjde ▼	Lårvinkel ▼
NordBed Optimo	100 / 90 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°

	Benstøtteløft ▼	Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	Max. brugervægt ▼	Total vægt ▼	Produktets tungeste del ▼	Dokumenteret maskinvaskbar ▼
NordBed Optimo	19°	+/- 15°	200 kg	100 kg	20 kg	Yes

NB: Plejesengen må ikke anvendes af børn under 12 år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer til en normal 12 årig, eller mindre.

Stelfarve ▼

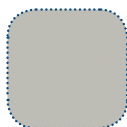

Aluminium grå

Træfarve ▼



Bøg



Eg



Rødbrun



Bøg/lys blå



Lys blå



Hvid



Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. NordBed Optimo - DK - 05/2019