

TREND

Tryksårsforebyggende standardmadras
fremstillet af højelastisk miljøneutral
skum af højeste kvalitet...



Trykaflastende effekt

Fremragende komfort

Optimal støtte til kroppen

Miljøneutral fremstilling

Brandhæmmende

CRIS COLLECTION

-PRODUKTER DER VISER HENSYN...

Tryksårsforebyggende standardmadras...

Den teknologiske udvikling har frembragt et madrasmateriale, hvor risikoen for sundheds-, sikkerheds- og miljøskader er betydelig reduceret. Væsentligt for madrasser af dette materiale er en minimal emission, og at de overgår alle europæiske brandsikringsstandarter uden anvendelse af halogenerede brandhæmmende midler. Madrassens høje substans betyder fremragende bæreevne, støtte og harmonisk komfort. Madraskernens åbne celler giver luften mulighed for at bevæge sig i materialet og sikrer derved, at varme og fugt ikke samler sig på overfladen. Ingen svedopbygning. Madrassen er højelastisk og bøjelig. Den følger nemt lejepladen i senge med 3 og 4 delte sengebunde. Madrassen er vendbar. Den profilskårne overflade giver madrassen optimale muligheder for at følge kroppens konturer. Kroppens vægt fordeles derved over den størst mulige kontaktflade, hvorved modtrykket fra madrassen minimeres.

Et vedvarende højt tryk forhindrer blodgennemstrømningen i huden og kan føre til tryksår. Desuden giver en for hård madras en urolig søvn, idet kroppen af sig selv vil forsøge at aflaste de punkter, der er udsat for tryk.


TREND

Madrassen er profilskåret på den ene side og glat på den anden. Det giver muligheden for valg mellem blød eller lidt fastere underlag. En fremragende all round madras uanset personens vægt.

Maksimaltrykket er en vigtig faktor for vurderingen af en madras. Der hersker stor usikkerhed om talværdiers størrelse for tryk mod huden som afgørende for udvikling af tryksår. 32 mmHg har været alment accepteret som værende det maksimale ydre tryk. Imidlertid kan forhold som personens alder, vægt og ernæringstilstand samt varme- og fugtpåvirkninger være sårdannende ved langt lavere værdier. Altså jo lavere modtryk madrassen giver jo mindre er risikoen for tryksår.

Resultat af trykmålinger på testpersoner viser følgende værdier i mmHg:

1. Vægt	50 kg	K	18
2. Vægt	70 kg	M	19
3. Vægt	90 kg	K	18
4. Vægt	110 kg	M	25

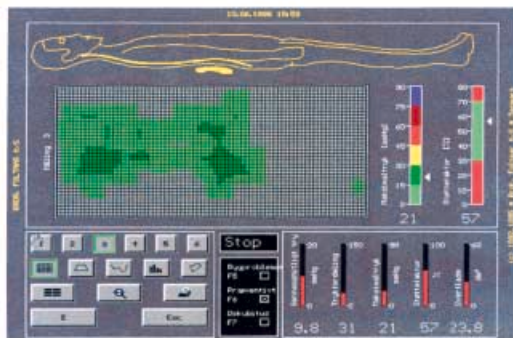

Målingerne er foretaget på computerstyret trykmåleudstyr og skal tages med forbehold. Resultaterne viser den aktuelle sammenligning af madrastyper på disse forsøgspersoner, som ligger et kort øjeblik på madrassen. Alle andre faktorer med relation til udviklingen af tryksår kan ikke beregnes.



TREND



FOCUS



ZENIT



COMBI



FELIX



COMFORT TOPMADRAS



CRIS COLLECTION

-PRODUKTER DER VISER HENSYN...

Cris Collection ApS
Virkevangen 2
Assentoft
DK-8900 Randers
Tlf. +45 8691 4536
Fax +45 8691 4556
info@cris-collection.dk
www.cris-collection.dk